



うでささえ

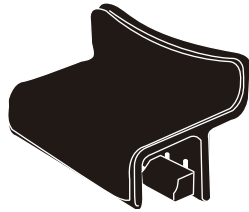

取扱説明書

車いすから腕が落ちるのを防ぎます。

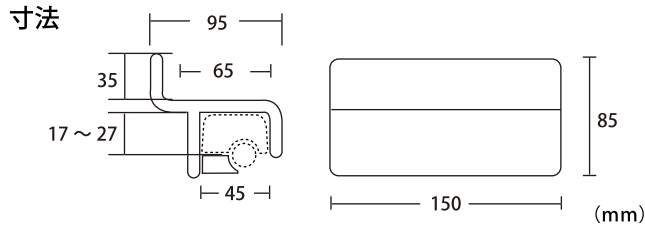

※取付可能な肘当て (カフムラサイクル アルミ製車いす)

<寸法>

- ・幅： 約45mm
- ・高さ： 17～27mm

<カフムラサイクル製品>

- A スタンダードパッド
- B エッグパッド
- D ロングパッド
- E ショートパッド

入数	1セット
梱包内容	本体×1
	クッションシート×1
	ネジ×4
	ワッシャ×4
	アダプタ×2
	六角レンチ4mm×1


⚠ 禁止

- 車いすから立ち上がる際に、本製品を持って立ち上らないでください。アームサポートから外れてしまう可能性があります。転倒などの原因になり大変危険です。
- 本来の用途以外には使用しないでください。
- 火気の近く、直射日光、高温のところでは変形することがありますので置かないでください。


⚠ 注意

- 使用時、荷重をかけすぎると転倒や製品の破損などの原因になりますので、取り扱いには充分ご注意ください。
- 本製品はご利用者の腕が肘当てから落ちにくくするためのもので、万全の注意と配慮に代わるものではありません。
- 本製品は食べ物ではありません。スポンジ部分などを誤って食べてしまわないようご注意ください。万一飲み込んだ場合は、直ちに医師にご相談ください。また、誤飲されることが想定される場合には、スポンジをつけずにご使用して頂く事をお勧めします。
- 製品の仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。


取付方法

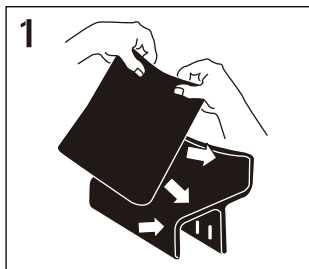


1 本体にクッションシートを貼ります。

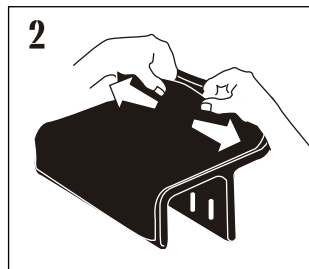


2 ガード部分は中心から押し広げるように貼って頂くときれいに貼れます。

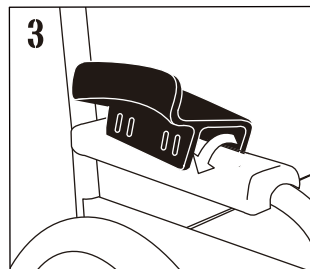


3 車いすの肘当てに本体をはめ込みます。この時、本体内側にゴムがあるので内側から回しこむように入れてください。

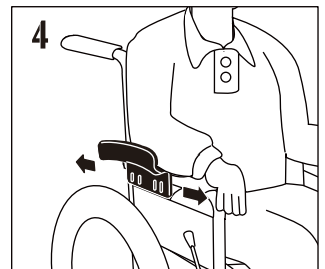




4 車いすに座ってみて肘が置きやすい位置か確認し、調整してください。

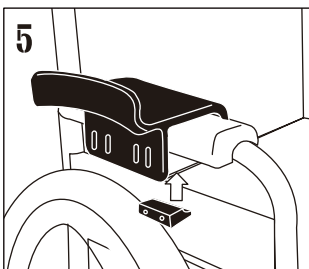

5 位置が決まれば、肘当てと本体の間にアダプタを入れます。

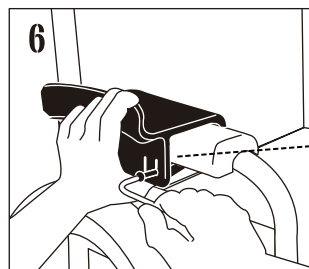

6 本体の外側から本体とアダプタをネジで軽く締めます。この時ワッシャを付けてください。

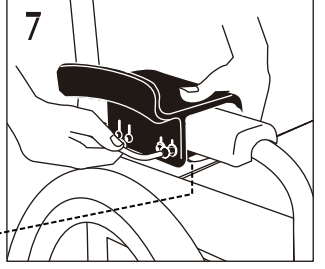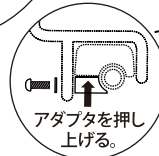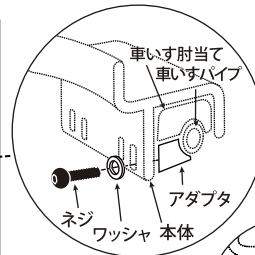

7 ネジ4本の仮止めができれば肘当て下面とアダプタ上面がしっかり合う位置でネジを締めます。