



KY20288(00/07)



# 取扱説明書

ティルト&リクライニング車いす

KXシリーズ



## ● 目次 ●

製品の特徴・使用目的	1
安全に関するご注意	2
1.同梱部品の確認	8
2.安全ラベル	9
3.各部名称	10
4.お使いになる前に	11
5.使用準備	13
6.各部の使用方法	15
7.シートベルトの使用方法	17
8.ベースシートの張り調整方法	18
9.脚踏の使用方法	18
10.ブレーキの使用方法	20
11.転倒防止バーの取付方法	21
12.ティッピングレバー用ゴムの取付方法	21
13.背もたれの折りたたみ方法	21
14.ガススプリングについて	22
15.お手入れ方法	23
16.保管についてのお願い	23
17.点検・保守	24
18.車いすの主な乗り方	26
19.仕様	28
20.製品記録	30
21.保証規定	31

このたびはカワムラサイクルの車いすをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

この取扱説明書は、製品を安全にご使用していただくために必要な注意事項や正しい使用方法が記載されています。

取扱説明書は適宜更新しております。最新版を弊社ホームページからダウンロードしていただけます。

<https://www.kawamura-cycle.co.jp>

※ご使用になる前に必ず本書をお読みください。また、ご使用の際には必ず携帯していただき

必要なときにいつでもご覧になれるよう大切に保管してください。

保証書は本書裏表紙に記載されていますので、お買い上げいただいた販売店より記入をお受け下さい。

# カワムラサイクル

## [ 製品の特徴・使用目的 ]

本製品は、ティルティング＆リクライニング車いすです。

- 座面の調整角度を0°～20°で調節できます。
- 背もたれ調整角度を90°～120°で調節できます。
- 体型・症状に合わせた車いすを選択してください。
- 本製品は、一人乗り用です。

### ■自走用をご使用の場合

---

自分でハンドリムを操作して走行する車いすです。この車いすは、座位の姿勢変換（昇降、旋回等）等の機構がないリクライニング型の自走用車いすです。また、スポーツ用、入浴用等の特殊な使用目的のものではありません。なお、購入時はこのリクライニング型が適していても、特別な身体保持具などが必要になってきた場合など、リクライニング型が使用に適さなくなることがあります。

### ■介助用をご使用の場合

---

この車いすは、介助者が操作する車いすです。この車いすは、座位の姿勢変換（昇降、旋回等）等の機構がないリクライニング型の介助用車いすです。また、スポーツ用、入浴用等の特殊な使用目的のものではありません。なお、購入時はこのリクライニング型が適していても、特別な身体保持具などが必要になってきた場合など、リクライニング型が使用に適さなくなることがあります。

# 安全に関するご注意

※ご使用になる前に必ずお読みください。

安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。


## [表示マークの説明]

※正しい取扱いに関する必要事項をシンボルマークで表示しています。

 <b>警告</b>	取扱いを誤った場合、死亡または、重傷にいたる可能性が想定される場合を示しています。
 <b>注意</b>	取扱いを誤った場合、障害にいたる可能性または、物的損害の発生が想定される場合を示しています。
 <b>禁止</b>	してはいけないことを示しています。
 <b>必ず守る</b>	必ずしなければならないことを示しています。

## ⚠ 警告

取扱いを誤った場合、死亡または、重傷にいたる可能性が想定される場合を示しています。

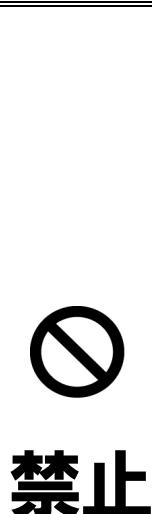

### ●エスカレーターでは使用しないでください。

介助者がいる場合でも、転倒などにより重大な事故のおそれがあります。



### ●勝手に改造・分解しないでください。


強度や耐久性が低下して危険です。また、事故になる恐れがありますので絶対に改造・分解しないでください。

故意にシートを切断する等の加工を絶対にしないでください。シートを破断したり、加工した状態でご使用されますとフレームが歪んだり、破断する原因となります。また、シート取付ネジが歪んだり、欠落すると事故の原因になります。



### ●車いすに乗り降りの際は、決してステップ板の上に足を乗せないでください。

絶対にステップ板の上に乗って車いすに乗り込んだり、降りられるときに立ち上がらないでください。車いすごと転倒し危険です。

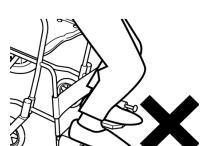

### ●車いすを火気に近付けないでください。

シート部が燃えたり、熱くなりプラスチック等が変形したり、熱くなつた金属部分でやけどするなど、危険です。



# 禁止

## 警告

取扱いを誤った場合、死亡または、重傷にいたる可能性が想定される場合を示しています。

### ●ポケットには1kg以上の中の重いものを入れないでください。

過度の荷物はバランスを崩し危険です。また、押手に荷物を吊り下げますとバランスを崩し危険です。絶対に避けてください。




### ●座シート以外の部分に腰掛けないでください。

### ●介助者は、絶対に車いすに乗って介助しないでください。

### ●複数の人数で乗らないでください。

この車いすは一人用です。二人以上で乗ると破損・事故の原因になります。

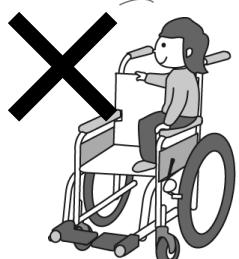

### ●急な坂道(勾配4度以上)では使用しないでください。

### ●押手に寄りかかったり、歩行補助として使用しないでください。

### ●本説明書に記載されている調整箇所以外の調整を行わないでください。

事故の原因となります。調整が必要な場合はご購入の販売店にご相談ください。

### ●大きな段差を無理に乗り越えようとしてしないでください。

### ●段差を乗り越える際は、固定されているパイプを持ち上げてください。

決して勢いをつけて乗り越えないでください。大変危険です。また、フレーム及びキャスター車輪等の損傷を受けます。



### ●車いすでの走行中は、身体を乗り出さないでください。

車いすが不安定になり危険です。

### ●車いすに座ったまま強い前傾姿勢をとらないでください。


車いすに座ったまま前方の地面に置いてある物を拾うと、車いすごと転倒し大変危険です。



### ●車いす以外の目的に使用しないでください。


物品運搬・踏み台などに使用しないでください。

車いすの上では立ち上がらないでください。

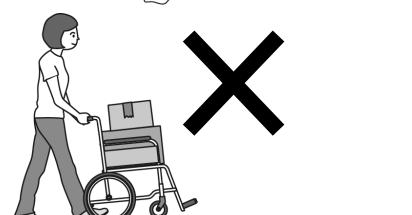

### ●発進するときや段差を乗り越えるときには、キャスターのタイヤが真っ直ぐになっていることを確認してから走行してください。

斜めに進入したり、キャスタータイヤが斜めになった状態で発進すると段差を乗り越えられなくなったり、キャスターが破損して事故の原因となる恐れがあり大変危険です。

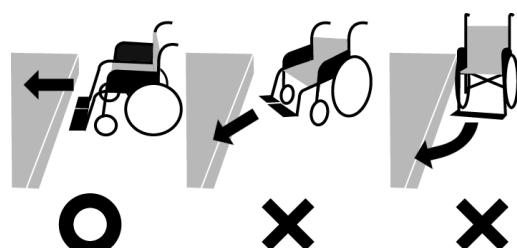

# 警告

取扱いを誤った場合、死亡または、重傷にいたる可能性が想定される場合を示しています。

## ●車いすを持ち上げる場合、駐車ブレーキをかけベースパイプをしっかりと支えてください。




※肘掛けを持たないでください。

※脚部をもたないでください。

※背シートを持たないでください。

これらの箇所を持ち上げると、脚部や肘掛け等が車いすから外れるなど、大変危険です。

※利用者が乗ったまま持ち上げる場合は、シートベルトをしっかりと締め、3人以上でフレーム前下部とティッピングレバーを持ってしっかりと支えてください。利用者の身体の一部を持たないでください。

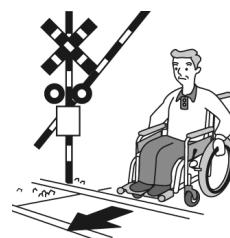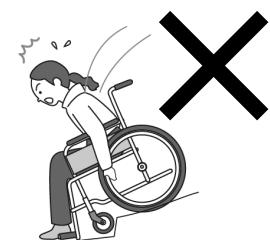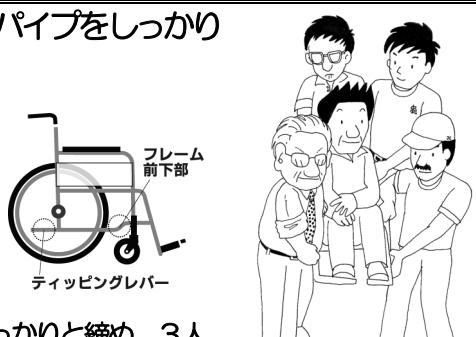

## ●踏み切りの横断やエレベーターの乗り降りの際は、車輪をレールに対して直角にして走行してください。

斜めの角度で進入するとレールの溝にはまって危険です。必ず介助者と一緒にわたってください。

## ●坂道の上り下りや段差のある場所では、必ず介助者に支えてもらいましょう。

坂道を上るときは前向きで、下るときは後ろ向きで走行してください。

坂道を前向きで下ると乗っている人が前へずり落ちる、前へ倒れる、スピードが出やすいなど、非常に不安定になります。また、介助者がバランスを失った時も危険です。

[上り坂]




[下り坂]




## ●傾斜地・坂道での走行は特にご注意ください。

- ・傾斜地や坂道では、車いすが予想外の方向に進む、スピードが出やすいなど大変危険です。

- ・車いすからずり落ちる、前へ倒れるなど、非常に不安定になります。

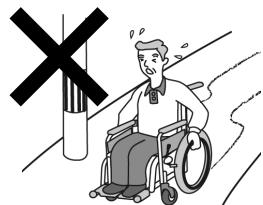

## ●車いすに乗り降りする際、一時停止する際は、必ず駐車ブレーキをかけて車いすが固定されていることを確認してください。

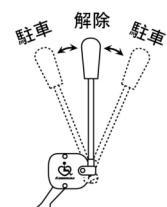

# !**警告**

取扱いを誤った場合、死亡または、重傷にいたる可能性が想定される場合を示しています。



**必ず守る**

- 走行中は、足を必ずステップ板の上に乗せてください。  
足を地面に付けたままで走行したり、ステップ板から外して走行すると、ステップ板と地面の間に足が巻き込まれてケガをする恐れがあり、危険です。  
(足でこいで操作する場合は例外です。)
- 車いすの機能と操作をよく理解し、慣れた状態で介助を行ってください。
- 部品等が破損したり損傷がある場合は、すぐに部品を交換してください。
- 次のような場所では走行を避けてください。
  - ・交通量の多い道路  ・砂利道  ・凹凸のある道
  - ・ぬかるみ  ・雪道  ・凍結路  ・防止柵のない側溝や路肩付近など
  - ・崖  ・川土手  ・海岸防波堤上  ・その他危険な場所
- 次のような場合は走行を避けてください。
  - ・夜間  ・雨天  ・濃霧  ・強風  ・その他危険が予想される場合

夜間は側溝や障害物などが発見しにくくなり危険です。  
雨天は路面が滑りやすくなり危険です。
- 次のような場所では厳重な注意が必要です。  
介助者が付き添い、利用者の身体を支えるなど注意しながらご使用ください。
  - ・狭い道  ・踏み切り  ・横断歩道  ・駅のホーム  ・エレベーター
  - ・車いす対応の動く歩道  ・車いす対応の福祉車両
  - ・その他危険が予想される場所
- 介助用として使用する場合、シートベルトを必ず装着してください。  
段差などで不意に衝撃などを受けると身体が投げ出されることがあり危険です。  
また、シートベルトを外したまま移動するとベルトが車輪にからまるなど危険です。
- 本製品をほかの方に譲渡・貸与するときは、必ず本書もあわせてお渡しください。




# !**注意**

取扱いを誤った場合、傷害にいたる可能性または、物的損害の発生が想定される場合を示しています。



**禁止**

- 車いすを投げたり落としたり、衝撃を加えないでください。  
フレームが歪んだり、破損の原因となります。
- ブレーキなどの操作レバーに荷物などを掛けないでください。
- 小さな子供に使用させたり遊ばせたりしないでください。
- タイヤをもって車輪を操作しないでください。  
駐車ブレーキで指をはさむなど、大変危険です。
- 急発進、急停車、急な方向転換をしないでください。
- 肘掛けに腕を載せたまま、肘掛けの着脱をしないでください。

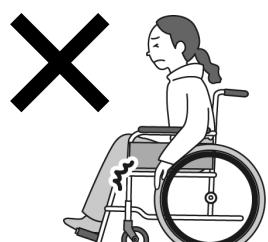


# !**注 意**

取扱いを誤った場合、傷害にいたる可能性または、物的損害の発生が想定される場合を示しています。




## ●傘や荷物などを持って、片手で走行しないでください。

傘をさしながら、また片手に荷物を持ちながらの片手操作ではバランスを崩す原因になります。両手で操作し、バランスを保ちながらゆっくりと走行してください。

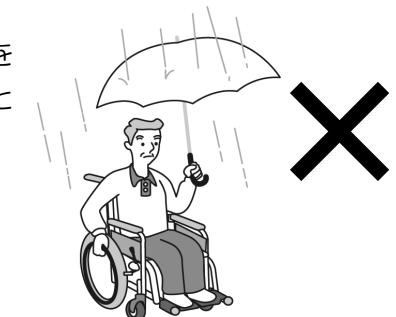

## ●駐車ブレーキのレバーは作動方向以外に力を加えないでください。

また、必要以上に力を加えないでください。ブレーキが変形・破損する恐れがあります。

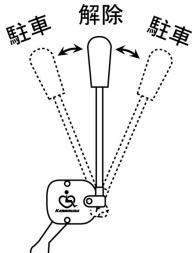


## ●傾地では、駐車しないでください。

傾斜地では、ブレーキをかけても車いすが動く場合があり、大変危険です。

## ●下記のようなところに車いすや部品を放置しないでください。

- |                      |             |
|----------------------|-------------|
| ・車道に近いところ            | ・人通りのあるところ  |
| ・路面に段差や凹凸のあるところ      | ・湿気の多いところ   |
| ・海沿いの屋外（潮風の当たるところ）   | ・雨、風のあたる場所  |
| ・ほこりの多い場所            | ・坂道         |
| ・非常口、消火器、消火栓の前       | ・暑い日や寒い日の戸外 |
| ・直射日光の当たる場所（車内も含む）   |             |
| ・ストーブなど火気を使用し高温になる場所 |             |
| ・子供がいたずらをする恐れのある場所   |             |

事故やサビ・破損の原因になります。

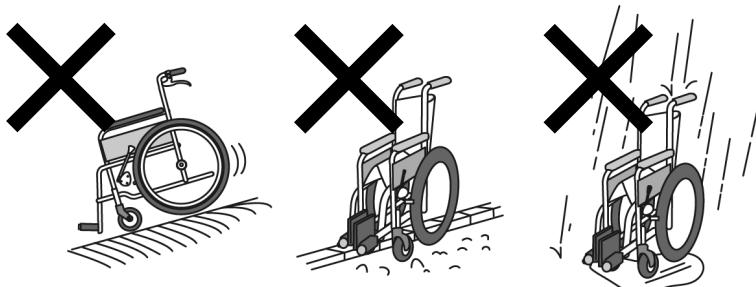

## ●後輪の空気圧が少なかつたり故障した状態で使用しないでください。

ブレーキの効きが悪くなったり、思わぬ事故につながるなど、危険です。

## ●後輪の空気圧を適正に保ってください。

適正空気圧は、タイヤの側面に記載されています。（目安として、タイヤを手で押してやや硬い（軟式野球ボール程度の硬さ）に空気を入れてください。）

空気圧が高すぎるとチューブが破裂する危険があります。

## ●地球環境保護のため、廃棄するときはそのまま放置しないで各自治体の取り決めにしたがってください。

# ⚠ 注意

取扱いを誤った場合、傷害にいたる可能性または、物的損害の発生が想定される場合を示しています。

## ●ご使用前には各部を点検してください。

車いすは“動くもの”ですから、長時間のご使用等により劣化が生じます。

ご使用前の点検を励行し、異常が見つかったら直ちにご使用を中止してください。

## ●安定した姿勢で座ってください。

座面深くに座ってください。左右にかたよらずに座ってください。

また、介助者は、ご利用者が安定した姿勢で座っていることを確認してください。

## ●回転している車輪に指を挟み込まないように注意してください。

## ●車いすにバリなどがないかを確認してください。

衝突等により金属・樹脂部にバリなどが発生することがあります。ケガの原因となりますので、充分ご注意ください。

## ●認知症の方がご使用される場合は、必ず介助者が付き添ってください。

車いすのシート、部品等を飲み込むことや一度かけた駐車ブレーキを不意に解除されることがありますので、充分ご注意ください。

## ●駐車ブレーキは必ず手で操作してください。

足などで操作するとブレーキが破損する恐れがあります。

## ●ご利用者の心身の状況、症状を充分考慮し、適切な介助を行ってください。

## ●介助者は、利用者が車いすに安全に座れていることを確認してから操作してください。

利用者の身体の一部または衣服がタイヤ、スポーク、キャスター及び地面、建物、通行者に触れたりはさまったりしないようご注意ください。

## ●靴を履かずに足をステップ板に乗せていただく場合は充分ご注意ください。

壁や柱で足をケガしたり、足がステップ板から落ちて骨折するなど、大変危険です。

## ●車いすの乗り降りや移乗など車いすが不安定になりやすいときには、必ず2名以上の介助者が付き添ってください。



必ず守る

なお、この取扱説明書は、仕様変更などによりイラストや内容が一部実車と異なる場合があります。

※上記の注意点以外であっても、無理な使用はおやめください。事故の原因になります

# ご確認ください

## 飛行機にご搭乗される場合

お客様の車いすをご旅行先へ持っていかれる場合は、事前に利用予定航空会社又は旅行代理店にご相談ください。



事前確認なしに空港へ行きますと、航空会社の確認業務に時間がかかり、ご希望の便に間に合わなかったり、せっかくの旅行を取りやめなくてはならなくなったりします。

特に六輪車、リクライニング車などガススプリング（ガスタンパー）を使用している車いすは飛行機への搭載可否の判断に日数を要する場合があります。また、電動車いすや電動ユニット装着車いす及び特殊車いすについてもご希望の便によっては貨物室のスペース確保が出来ない場合があります。はやめのお手続きでスムーズなご旅行をお楽しみください。



## 1. 同梱部品の確認

本製品には、以下の部品が同梱されていますので確認してください。

・工具（スパナ）	1 個
・取扱説明書	1 冊
・転倒防止バー（キャスターなし）	1 台分
・ティッピングレバー用ゴム	2 個

## 2.安全ラベル

- 取扱い上の重要な事項を記載した安全ラベルが貼ってあります。
- 安全ラベルをすべて読んでからご使用ください。
- 安全ラベルを汚したり、はがしたりしないでください。

右側板（内側）

### ⚠ 注意 ケガをするおそれがあります

- 可動部分を持って持ち上げないでください。
- 認知症（痴呆症）の方が使用される場合は、必ず介助者が付き添い、安全を確認し、ご利用ください。
- 座面が確実に固定されていることを確認してください。
- 手や衣服をはさまないようにご注意ください。




左側板（内側）

### ⚠ 警告 転倒してケガをするおそれがあります

- 取扱説明書はよく読み、必ず携帯してください。
- 乗り降りの際には、必ずステップ板を跳ね上げて、駐車ブレーキが確実にかかっていることを確認してください。
- 地面に置いてある物を拾う等、強い前傾姿勢を取らないでください。
- 段差などを越える場合、前輪を浮かせ過ぎないでください。
- 最大積載重量以上の重量で使用しないでください。
- アームサポートが可動式の場合は固定されていることを確認してください。
- フットサポートが可動式の場合は固定されていることを確認してください。
- 駆動輪やキャスターが外れないことを確認してください。
- 座面以外に腰掛けないでください。

### 3.各部名称

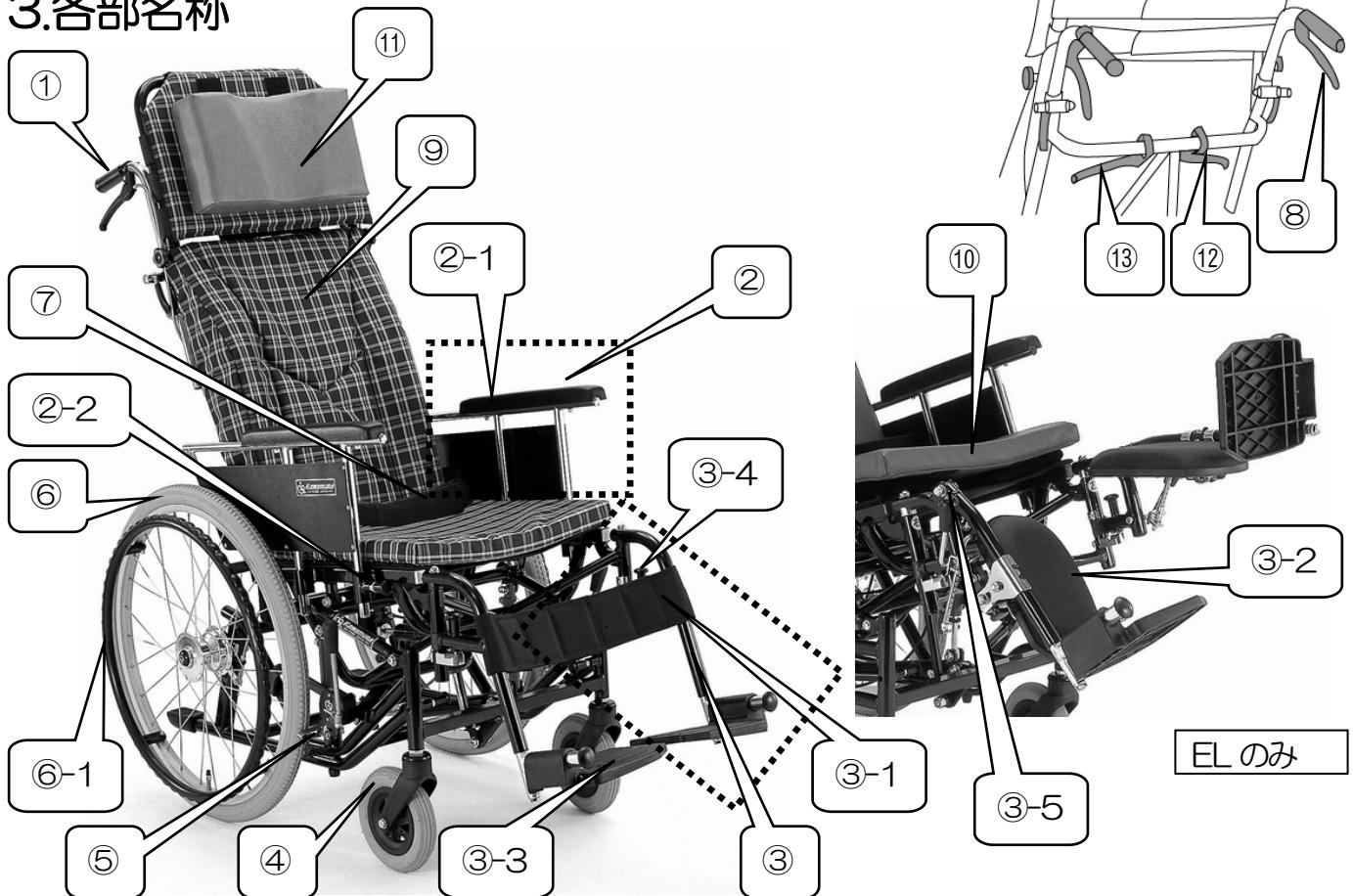

① 押手（手押しハンドルグリップ）	介助者が車いすを移動させる際に握る部分です。
② 肘掛け（アームサポート）	高さの調整ができます。（着脱式）
②-1 肘当て	ご利用者が肘を乗せる場所です。
②-2 高さ調整・着脱スライドピン	肘の高さの調整する際、着脱する際に使います。
③ 脚部（フットレッグサポート）	足を支持する装置です。
③-1 足ベルト	足が後ろに落ちないよう支えます。
③-2 ふくらはぎパッド	ふくらはぎを載せます。
③-3 ステップ板	足を乗せる板です。
③-4 スイングアウトスライドピン	脚部をスイングアウトする際、取り外す際に使います。
③-5 エレベーティングレバー	脚部を上下するときに使います。
④ 前輪（キャスター）	自在に方向転換できる小車輪です。
⑤ 駐車ブレーキ	車いすを駐車するときに使います。
⑥ 後輪	駆動輪です。（介助用の場合は主輪です。）
⑥-1 ハンドリム	手をかけて後輪を回します。（自走用のみ）
⑦ シートベルト	体がずり落ちないよう腰を安定させるベルトです。
⑧ 介助ブレーキレバー	介助者がブレーキを制動するときに握る部分です。
⑨ 背クッション	背部がよりかかる場所です。
⑩ 座クッション	座る場所です。
⑪ 背延長（枕付）	頭部がよりかかる場所です。
⑫ ティルティングレバー	座面角度を調整する際に握ります。
⑬ リクライニングレバー	背もたれ角度を調整する際に握ります。

## 4.お使いになる前に

車いすを使用する前に、安全のため各部の点検を行ってください。  
長期間使用を続けると、劣化が生じます。

### <装着品の確認>

- ・ 背ベースシート、座ベースシートは、しっかりと固定されていますか？
- ・ 背クッション、座クッションは、しっかりと取付けられていますか？
- ・ 肘掛けは、しっかりと固定されていますか？
- ・ 脚部は、しっかりと取付けられていますか？
- ・ 足ベルトまたはふくらはぎパッドは、しっかりと取付けられていますか？
- ・ ステップ板は、しっかりと取付けられていますか？

### <後輪の確認>

- ・ タイヤに空気が充分入っていますか？（タイヤを指で押しても容易にへこまないか）
- ・ バルブが緩んでいませんか？
- ・ タイヤにキズがありませんか？異物が刺さっていないか？
- ・ タイヤの溝が充分残っていますか？変形していませんか？

### <ブレーキの確認>

- ・ 駐車ブレーキ（及び制動用ブレーキ）が正しく作動しますか？
- ・ ブレーキをかけた状態で後輪が回転しませんか？

### <肘掛け>

- ・ スムーズに（上下）作動できますか？
- ・ しっかりと固定できますか？
- ・ 傷や亀裂等はありませんか？

### <脚部>

- ・ スムーズにスイングアウト、またはエレベーティング、脱着できますか？
- ・ しっかりと固定できますか？
- ・ ステップ板がパタパタしていませんか？
- ・ 傷や亀裂等はありませんか？

## <全体的に>

- ・ ガタつきはありませんか？
- ・ まっすぐに走りますか？
- ・ 各部ボルトやナットが緩んでいませんか？
- ・ 背もたれがしっかりと固定されていますか？
- ・ ワイヤーが部品等にひっかかるかもしれませんか？
- ・ ガススプリングは正常に作動しますか？ 油もれはありませんか？

## <介助者へ>

- ・ 長期間の使用や使用頻度によっては、ガススプリングやキャスター車輪、脚部、肘掛け等の劣化がすすむことがあります。使用前点検を励行してください。異常がある場合は、使用を中止してください。
- ・ 次のような場所では必ず介助する人が付き添い、利用者の身体を支えるなど転倒防止に努めてください。
  - ・ 急な坂道
  - ・ 凹凸や段差のある場所
  - ・ 踏み切りの横断、エレベーターの乗り降りなどの溝のある場所
  - ・ その他危険が考えられる場所
- ・ 車いすに乗って介助しないでください。
- ・ 利用者の身体の一部及び衣服が、タイヤに触れたり挟まったりしないよう注意してください。
- ・ 利用者の身体の一部及び衣服が、建物、通行者及び地面に触れたり挟まったりしないように注意してください。
- ・ 重い荷物を車いすに載せたり、押手に提げたりしないでください。


## 5. 使用準備

①背もたれをフレームに固定してください。


①背もたれを起こします。



②背もたれ下部のノブねじを一旦緩めて手前に倒します。


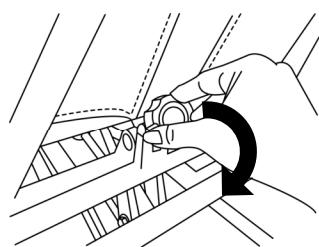


③固く締め付けてください。

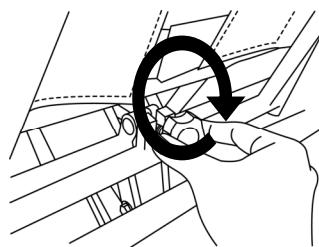

※乗車前に必ず締め付けを確認してください。

②脚部を取り付けてください。

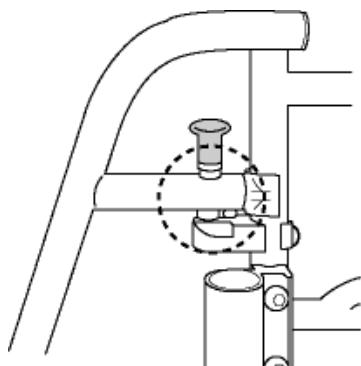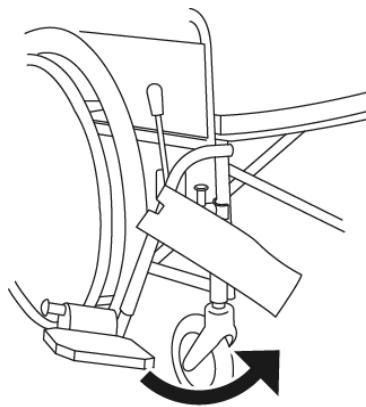



①脚部を内側に 90 度回します。

②「カチッ」という音がして、スライドピンが差込み穴に収まっていることを確認してください。

③足ベルト中央部の面ファスナーをしっかりと貼り合わせます。


### ③ステップ板を取り付け、調整します。

出荷時は、ステップ板が外側に回転させて折りたたんであります。

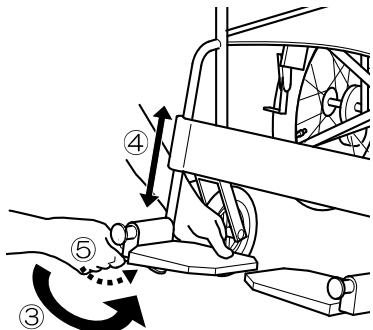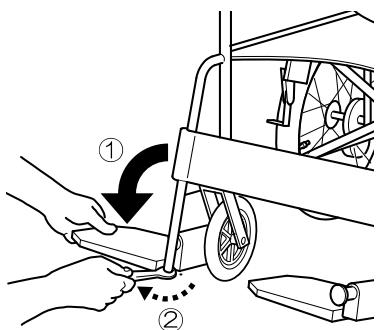

- ①ステップ板を外側に倒します。 ③内側へ回転させます。
- ②付属品のスパナを使ってステップ ポスト先端ボルトを少し緩めます。 ④ステップ板の高さを調節 反時計回り(②矢印方向)で緩み ⑤しっかりと締め付けます。
- ます。 (7~8N·m)


ステップ板が固くて動かない場合は、下図のように車いすを倒し、ポストに垂直に木槌等で先端の六角ボルト頭を叩いてください。  
(パイプ内部のポストのかみ込みを解除します。)

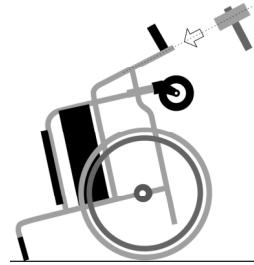

## !**警告**

- ステップポストの高さは地面より5cm以上でご使用ください。



低すぎると凸凹路面や障害物にステップ板があたり、転倒する恐れがあります。

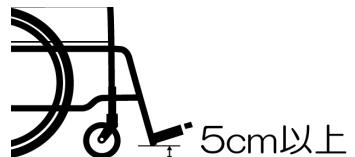


- ステップセット先端六角ボルト部分をスパナでしっかりと締め付けてください。

締めることにより斜ウスがズしてステップセットが固定されます。

締め付けが弱いとステップセットが外れる恐れがあります。しっかりと固定されている事を確認してご使用ください。

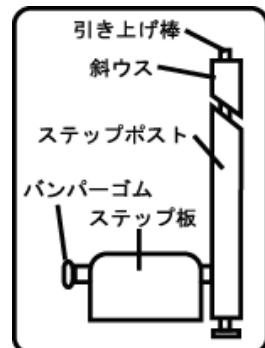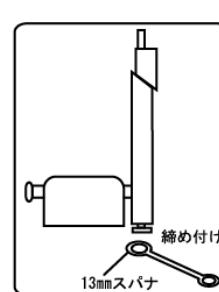

- 下図①のようにステップセットを固定してください。

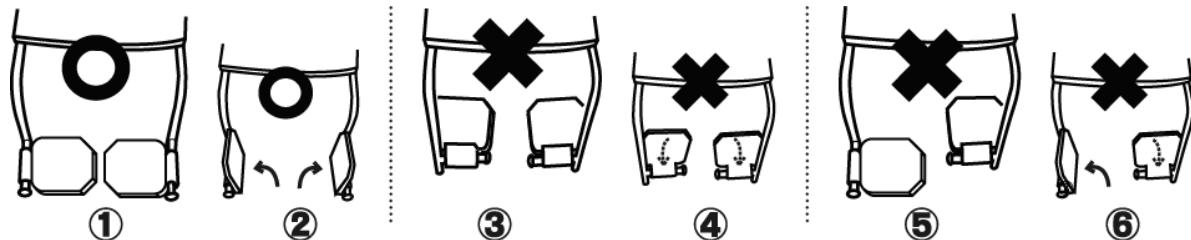

※車いすを折りたたむ時は下図②のようにステップ板を跳ね上げてください。


※下図③,⑤のようにステップセットを取り付けると車いすを折りたたむときに干渉し正しく

折りたためないため(④,⑥)、フレームが歪み車いすに悪影響を及ぼす場合があります。また、前輪キャスターに干渉しキャスターが回転にくくなる場合があります。

## 6. 各部の使用方法

### <背もたれ左右独立（適合調整シート）>


裏側の面ファスナーにより背の張り具合を調整できます。

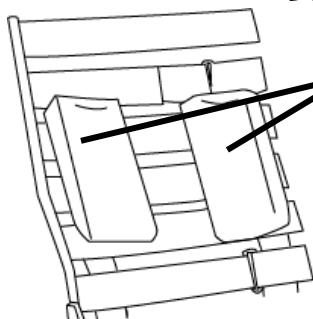

「体幹支持パッド」

面ファスナーで取り付けてありますので、利用者の身体状況に応じて移動することができます。（専門家の指示に従う事をおすすめいたします。）

### <背 延 長>

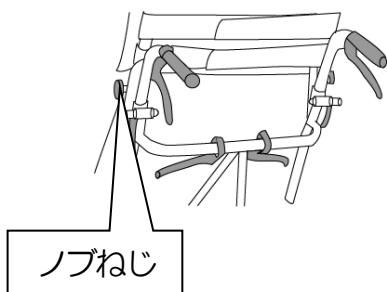


左右のノブねじを緩めると、取外しができます。

#### ！注意

- ノブねじを紛失しないようにご注意ください。
- 使用時は、ノブねじがしっかりと締まっていることを確認してください。

### <肘掛け>

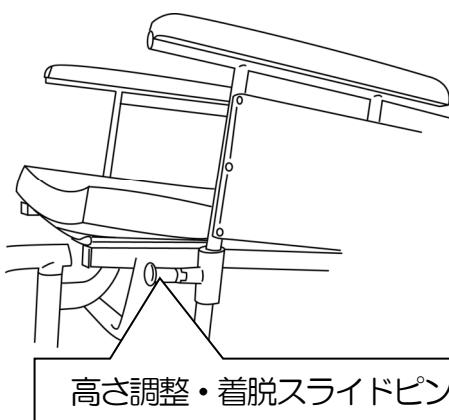

座面近くの黒いスライドピンを引きながら肘掛けを上げ下げすると、高さを3段階に調節できます。  
また、上に引き抜くこともできます。


#### ！注意

- 手を挟まないようご注意ください

### <後輪>

真中の黒い部分を押してから車輪を引き抜くと車輪を外すことができます。

取付け時は、中心の黒い部分を押しながら車輪を差し込んでください。

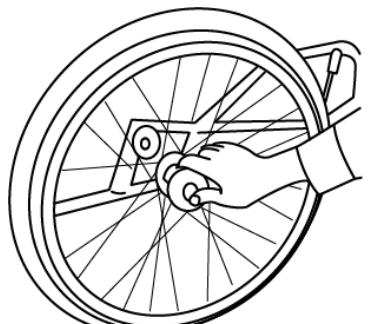


## **! 注 意**

- 取付け後は、車輪を左右に動かして不用意に車輪が抜けないことを確認してください。
- 手や指を挟まないようご注意ください。

### <前輪>

キャスター上部の黒いスライドピンを引くとキャスターを取り外すことができます。  
装着時は、逆の手順でキャスターを差し込んでください。

スライドピン

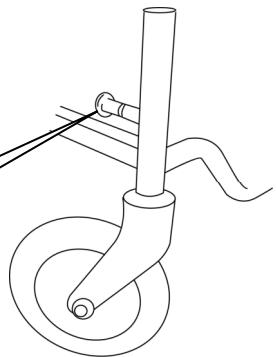


## **! 注 意**


- 取付け後は、車輪を上下に動かして不用意に抜けないことを確認してください。
- 手や指を挟まないようご注意ください。

### <押手高さ調節レバー>


(図 1)

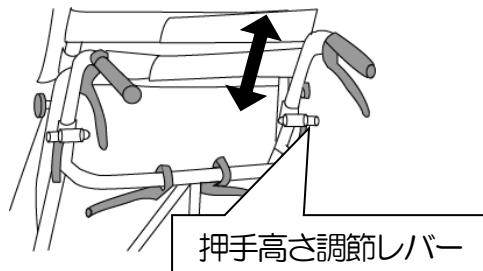

(図 2)

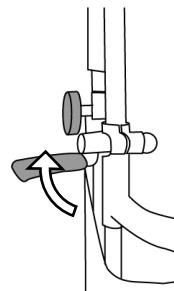

(図 3)

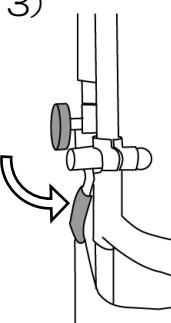


1. レバーを図2のように起こし、押手を適当な位置に調節します。

2. 図3のようにレバーを倒して、押手パイプを固定します。

※締めすぎますと、フレームが破損する恐れがあります。ご注意ください。

## <ティルティングレバー>

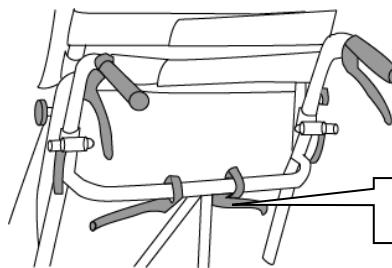


レバーを握ると座面角度が変わります。  
(0°~20°)



ティルティングレバー

## <リクライニングレバー>

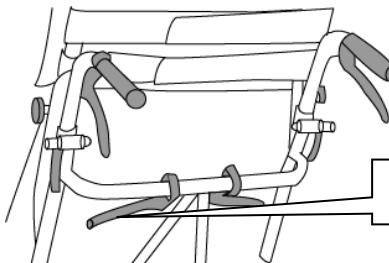

レバーを握ると背もたれ角度が変わります。  
(90°~120°)



リクライニングレバー

### !**注 意**

- リクライニング及びティルティング状態で走行しないでください。転倒の恐れがあります。
- リクライニング及びティルティング機構部に手や足を入れないでください。
- リクライニング及びティルティング時は、一声かけてから行いましょう。
- リクライニング及びティルティング時は後方へ転倒しやすくなり、非常に不安定となります。必ず介助者が付き添ってください。また転倒防止バーを装備しておりますが走行の際には充分に注意してください。
- 安全のために、ワイヤーは1年に1度交換しましょう。

## 7.シートベルトの使用方法




車いすに深く腰掛け、面ファスナーの接着部分を 10cm  
以上重ね合わせてしっかりととめてください。

### !**注 意**

- シートから落ちるおそれがあるので必ずシートベルトを使用してください。  
転落事故の原因となります。
- 面ファスナーに糸くず・汚れなどがついたときは取り除いてください。  
接着力が弱まり、事故の原因となります。



## 8.ベースシートの張り調整方法

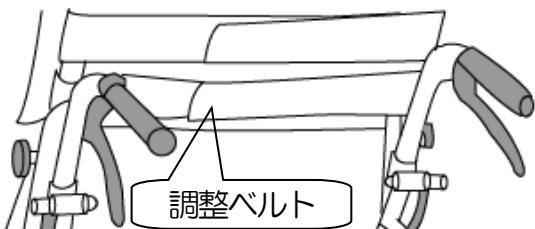

ベースシートの調整ベルトを、ご利用者の体型や症状に合わせて張り調整し、体幹支持パッド・アンカーパッドの位置を調整し、クッションを乗せます。

### !**注 意**


- 背ベースシートを張りすぎると背パイプが中央に寄ってしまい、背もたれ幅が狭くなってしまいます。また、フレームの変形の原因にもなります。
- 面ファスナーに糸くず・汚れなどがついたときは取り除いてください。  
接着力が弱まり、事故の原因となります。

## 9.脚部の使用方法

### <スイングイン＆アウト式の場合>



#### ■スイングアウトするとき

[外に開く]

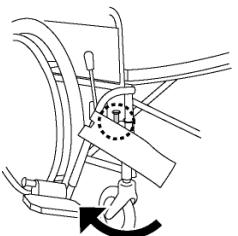

- ①駐車ブレーキをかけます。  
②足ベルト中央部の面ファスナーを外します。  
③スライドピンを引いて固定ロックを解除し、外側に廻します。


[元に戻す]

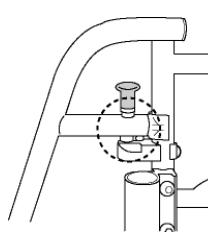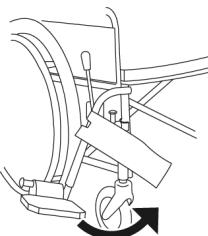

- ①駐車ブレーキをかけます。  
②脚部を廻して元の位置に戻します。  
③「カチッ」という音がして、スライドピンが穴に収まっていることを確認してください。  
④足ベルト中央部の面ファスナーをしっかりと貼り合わせます。



#### ■スイングインするとき

[内に閉じる]

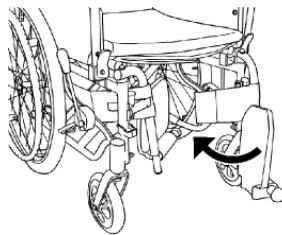

- ①駐車ブレーキをかけます。  
②足ベルト中央部の面ファスナーを外します。  
③スライドピンを引いて固定ロックを解除し、内側に廻します。

[元に戻す]

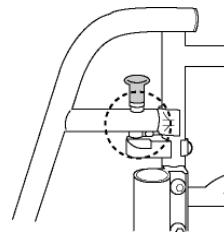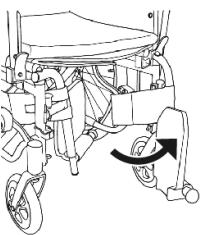


- ①駐車ブレーキをかけます。  
②脚部を廻して元の位置に戻します。  
③「カチッ」という音がして、スライドピンが差込み穴に収まっていることを確認してください。  
④足ベルト中央部の面ファスナーをしっかりと貼り合わせます。

## <エレベーティング&スイングアウト式の場合>


### ■角度を調整するとき

[上げるとき]

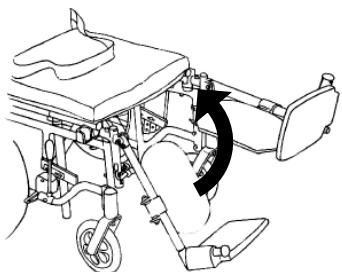

脚部を矢印の方向に持ち上げます。


[下ろすとき]

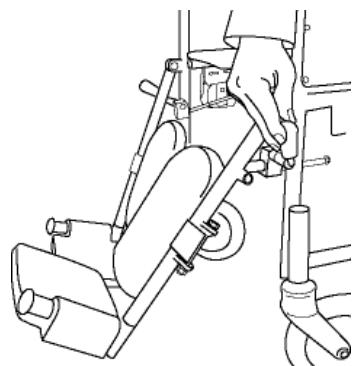


レバーを矢印の方向に引くと、ロックが解除されます。

片方の手で脚部を支えながら、もう一方の手でエレベーティングレバーを背もたれ側に倒します。


ふくらはぎパッドの高さが2段階で調節できます。

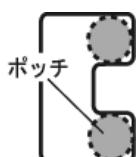

※ポッチが確実に凹部に収まっていることを確認してください。

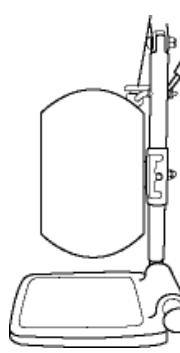

[折りたたむとき]

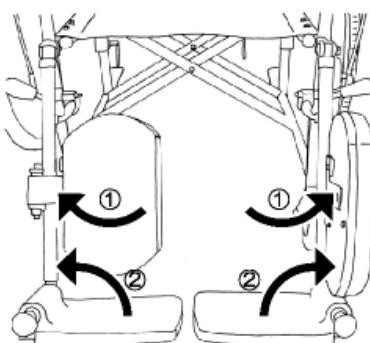

ふくらはぎパッドを左右に、次にステップ板を上に跳ね上げます。

## !**注意**

- スイングアウトやエレベーティングや脱着の操作をする際には、脚部や金具等で手や衣服をはさまないようにご注意ください。また、その際には必ず駐車ブレーキがかかっているか確認してください。急に車いすが動き事故の原因になりかねません。
- 車いすに乗り降りの際は、絶対にステップ板の上に乗らないでください。また、ステップ板の上で立ち上がりしないでください。車いすごと転倒し大変危険です。
- ふくらはぎパットの裏面やステップ板の裏面は、固くなっています。けがにご注意ください。


## !**警告**



- 階段などで利用者が乗ったまま車いすを持ち上げる場合、絶対に脚部を持たないでください。  
脚部が抜けたる恐れがあり大変危険です。

## 10.ブレーキの使用方法

### <駐車ブレーキ>

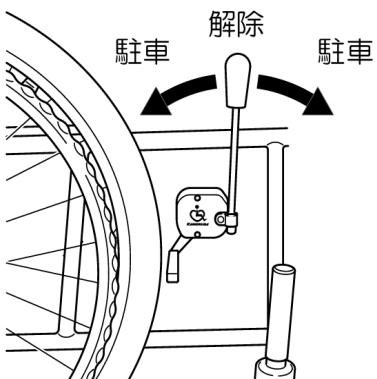

車いす乗降時には、必ず駐車ブレーキをかけて、車いすが固定されていることを確認してください。ブレーキレバーを後方に引くとロックし、レバーを前方にすると解除されます。

※空気入タイヤをご使用の場合、空気圧が低すぎるとブレーキの効きが悪くなります。目安として、タイヤを手で押してやや硬い程度（軟式野球ボール程度の硬さ）に空気を入れてください。

### <介助ブレーキ>




走行中や下り坂での制動ブレーキとしてご使用ください。ブレーキレバーは介助者の方が必ず両側同時にかけてください。ブレーキレバーを握るとブレーキがかかり、離すと解除します。

### ⚠ 注意

- 車いすに乗り降りする際、一時停止する際は、必ず駐車ブレーキをかけて車いすが固定されていることを確認してください。
- 後輪の空気圧にご注意ください。  
空気入タイヤ仕様の車いすをご使用の場合、空気圧が低すぎるとブレーキの効きが悪くなります。目安として、タイヤを手で押してやや硬い程度（軟式野球ボール程度の硬さ）に空気を入れてください。
- 傾斜地や平坦でないところでは駐車しないでください。  
傾斜地や滑りやすい床面では駐車ブレーキをかけても車いすが動く場合があり、大変危険です。
- 駐車ブレーキのレバーは作動方向以外に力を加えないでください。  
また、必要以上に力を加えないでください。ブレーキが変形・破損する恐れがあります。
- 駐車ブレーキは必ず手で操作してください。  
足などで操作するとブレーキが破損する恐れがあります。




## 11.転倒防止バーの取付方法

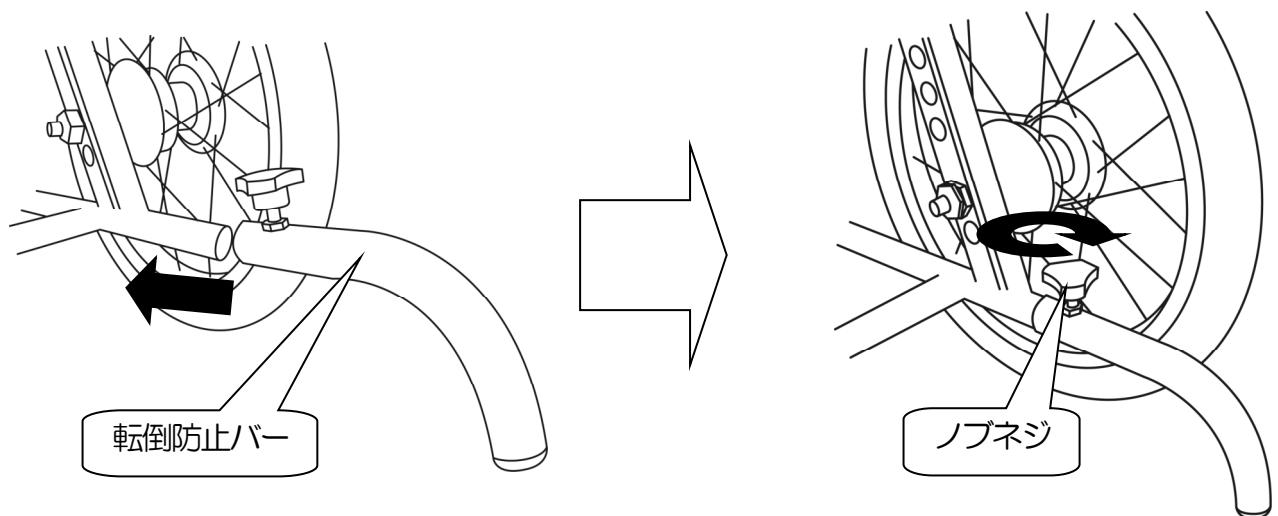

転倒防止バーを差し込み、ノブネジでしっかりと固定してください。

## 12.ティッピングレバー用ゴムの取付方法

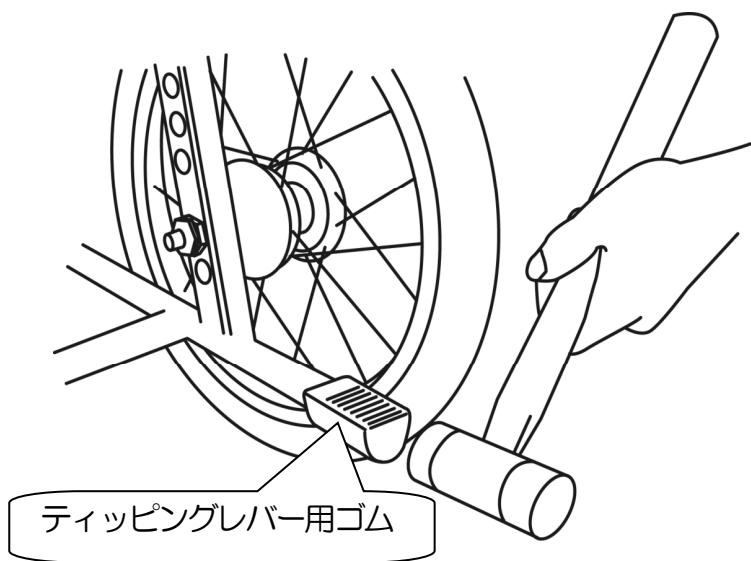

ティッピングレバーにティッピングレバー用ゴムを差し込み、ハンマーで叩いて取付けてください。

※転倒防止バーとティッピングレバー用ゴムを同時に取付けることはできません。  
必要に応じてご利用ください。

## 13.背もたれの折りたたみ方法

- 1) 背延長部を取り外します。
- 2) 座面のクッションを取り外します。
- 3) 背もたれを固定している背もたれ下部のネジを緩め、背もたれを前側に座面と平行になるまで倒してください。

## 14.ガススプリングについて


廃却する際は、次の注意を守ってください。この部品は、窒素ガスが高圧で封入してあるため、ガスを抜かずに処理すると、爆発によりケガをすることがあります。

### (注意事項)

- ・押しつぶさない。
- ・切断しない。
- ・図以外の場所に孔を開けない。
- ・火に入れない。

### (廃却の手順)

1. プッシュロッドを押し、最伸状態にする。
2. ビニール袋をかぶせ、その上から2~3mmドリルで①の孔を開け、ガス・油を抜いたあと②の孔を開けてください。  
(必ず①②の手順を守ってください。)
3. ビニール袋を使用しない場合は、油や切粉が飛びますので充分ご注意ください。(この場合メガネをかけて作業してください)

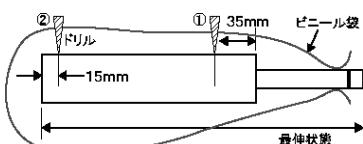

左図の要領で孔を開け、ガス抜きをしてから廃却してください。

### !**注意**

- スパナやドライバーなどの工具の使用にて締め付ける場合、薄手の手袋をご使用ください。
- 異常が見つかったら直ちに使用を中止し、お買い上げ頂いた販売店へご相談ください。

### ■ガススプリングの取扱い上の注意

### !**注意**

- 摺動部（伸び縮みしている部分）に注油は一切不要です。注油するとシールの耐久性をなくし油漏れの原因となります。
- 衝撃を加えることは絶対に避けてください。油漏れ、作動不良、破損の原因になります。
- 分解することは絶対に避けてください。高圧ガスが封入されていますので、分解すると非常に危険です。
- 曲げ荷重の負担がかかりますと曲げ方向の剛性が少ないので取付けの精度によりロッドが曲がり作動不良の原因となります。
- ピストンロッドおよびシリンダーに打痕をつけますとシールの寿命を縮めたり、作動不良の原因になります。
- 周囲の気温があまり高いまたは低い場所でのご使用はご注意ください。-10度～80度の範囲内でご使用ください。
- 雨や水のかかる場所、ホコリの多い場所でのご使用は避けてください。
- 万一、オイル漏れが発生した場合、ガススプリングの交換が必要になります。ご購入頂いた代理店にご連絡ください。

## 15.お手入れ方法

### ■金属部分（フレーム）

フレームなどの金属部は、乾いた布でよく汚れを落として、自動車用のワックスをかけ、乾いた布で拭き取ってください。スポークの通常のお手入れは、水を用いずに汚れを落とす程度で充分です。凹凸のある部分の汚れ、頑固にこびり着いた汚れは、市販の中性洗剤を用いてください。

### ■樹脂（プラスチック）部

樹脂部品には、市販の中性洗剤をご使用ください。

### ■クッション、シート類

シート部分をぬるま湯で拭き、きれいな水で仕上げ拭きを行い、乾かしてください。  
面ファスナーに糸くず、汚れなどが付いたときは取り除いてください。取り除かないと、面ファスナーの接着力が弱くなり、事故の原因となります。

#### <汚れがひどいとき>

- 汚れがとれにくい場合は、中性洗剤を用いてください。その後、乾燥させてください。
- しみは、スポンジまたは柔らかいブラシを用いて取り除いてください。
- 洗う場合は、ぬるま湯で手洗いしてください。洗濯機、乾燥機の使用はお避けください。
- クッション表面に面ファスナー（オス）が接触しないようにしてください。（クッション生地のほつれ、けばだちの原因となります。）

### !**注意**


- 熱湯やオゾンで洗浄しないでください。故障・変質・変色の原因となります。
- 中性洗剤以外を使用しないでください。変質・変色・傷みの原因となります。
- 絶対に背延長を取り外して使用しないでください。転倒の原因となります。
- シンナーやベンジンなどの揮発性のものは使用しないでください。変質・変色・傷みの原因となります。
- たわし、みがき粉および硬いブラシは使用しないでください。傷みの原因となります。

## 16.保管についてのお願い 車いすは、お手入れ後、安全な場所に保管してください。

### !**注意**

#### ●下記のようなところに車いすや部品を放置しないでください。

- |                      |                    |             |
|----------------------|--------------------|-------------|
| ・車道に近いところ            | ・人通りのあるところ         | ・坂道         |
| ・路面に段差や凸凹のあるところ      | ・湿気の多いところ          | ・暑い日や寒い日の戸外 |
| ・海沿いの屋外(潮風の当たるところ)   | ・雨、風のあたる場所         | ・ほこりの多い場所   |
| ・非常口、消火器、消火栓の前       | ・直射日光の当たる場所(車内も含む) |             |
| ・ストーブなど火気を使用し高温になる場所 |                    |             |
| ・子供がいたずらをする恐れのある場所   |                    |             |

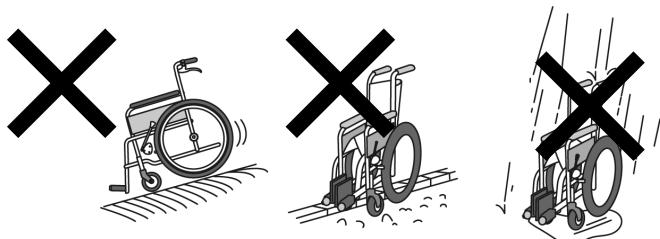

# 17.点検・保守

## 1ヶ月に一度は安全点検を行ってください!!

### ■タイヤに空気は充分入っていますか？



空気入りタイヤをご使用の場合は、空気圧にご注意ください。

タイヤの性質上空気は自然と減っていきます。1ヶ月に1回は空気を入れてください。

英式バルブはタイヤ内圧を測定できない構造となっており※1、下の適正空気圧は当社標準装備の虫ゴム付バルブの場合の推奨空気圧となっております。スーパー虫ゴム、楽々バルブなど他のバルブに交換した際は下表の値が適せんのでご注意願います。

なお適正空気圧は、バルブ付近もしくはタイヤの側面に記載されています。空気圧が低すぎると駆動が重くなり一キの効きが悪くなります。また空気圧が高すぎると破裂の原因となります。

#### 【適正空気圧】

24×1 3/8 : 400kPa	22×1 3/8 : 460kPa	22×1 : 700kPa
20×1 3/8 : 490kPa	18×1 3/8 : 460kPa	16in 以下一般 : 360kPa

#### 【目安】

タイヤを手で押してやや硬い程度(軟式野球ボール程度の硬さ)に空気を入れてください。

【注意】※1弊社の車いすに使用している「英式バルブ」は、自動車用等に使用している米式バルブと違い、チューブ内の空気圧を圧力ゲージによって測定することが構造上できません。(英式バルブは空気が一方的に流入するだけで漏出させることができない構造になっており、圧力ゲージでの圧力測定ができません。)正しく空気圧を管理していくため、空気を入れる際は『圧力ゲージ付空気入れ』をご使用いただき、その圧力ゲージを目安に上記適正空気圧に合わせてお使いください。


### ■タイヤの溝は充分認識できますか？

タイヤの減りが激しいものはパンクの原因になったり走行性やブレーキの効きが悪くなるので交換が必要です。また、タイヤやキャスターのひび割れにもご注意ください。

### ■車輪やキャスターはしっかりと固定されていますか？

車輪を留めているボルト、キャスターを留めているボルトは緩んでいませんか？緩んでいると使用中突然車輪やキャスターが外れて転倒するなど大変危険です。充分ご確認の上、しっかりと締めてください。

### ■ブレーキはしっかりと効きますか？

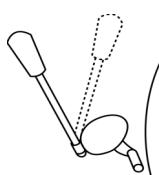

タイヤの空気圧が下がると駐車ブレーキの効きが弱くなります。

空気圧のチェックとともにブレーキの取付ネジの緩み、ブレーキ本体のガタなどがないかご確認ください。もし、異常がございましたら、直ちにご使用をお止め頂き、すぐにお買い上げの販売店までご連絡ください。


### ■フットプレートはしっかりと固定されていますか？

付属品のスパナを使って、ステップパイプ先端のボルトを緩め、適当な高さに合わせた後、ボルトを完全に締めてください。

### ■変な音がしませんか？

変な音がする場合、どこでその音が発生しているかをご確認してください。ブレーキワイヤーが車輪に擦れている、ベアリング部の油分が不足しているなどの原因が考えられます。原因が不明な場合、修理不可能な場合はお買い上げの販売店までご連絡ください。

## ■四点接地していますか？

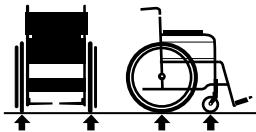

前輪二輪と後輪が接地しているかご確認ください。  
四点接地していない場合、フレームの歪みやネジの緩みが考えられます。  
直ちにお買い上げの販売店までご連絡ください。

## ■まっすぐ進みますか？

平地で車いすを左右均等な力で押してください。自然に曲ってしまう場合、どこかが歪んでいる可能性があります。原因となっている箇所の修理・交換を行ってください。



## ■シートに破損やたるみ、傷みはありませんか？

車いすは湿気に弱いので、雨にぬれる場所などに放置していたり、長時間続けてご使用になるとシートに破損・たるみが発生します。座り心地を損なわない姿勢が保ちにくくなりますので、たるみ・破損が著しい場合は交換をおすすめします。

## ■ネジの緩みはありませんか？

ガタがある場合は、ネジの緩みや脱落が考えられます。ネジが緩んでいたら必ずしっかりと締めてください。締めてもすぐに緩む、締まらないなどの不具合があれば、直ちにご使用をお止め頂き、すぐにお買い上げの販売店までご連絡ください。

## ■ワイヤーは切れていませんか？

ブレーキワイヤー、リクライニングワイヤーは切れていませんか？安全のために、1年に1度定期的に交換してください。

## ■洗浄の際には、水、お湯または中性洗剤をご使用ください。

洗浄後は、充分に乾燥させてください。カビやサビの原因になります。

## ■リクライニング及びティルティングの操作が著しく悪くなっていますか？

ガススプリングが劣化しているおそれがあります。すぐにお買い上げの販売店までご連絡ください。

### **！ 注意**


- スパナやドライバーなどの工具の使用にて締め付ける場合、薄手の手袋をご使用ください。
- 異常が見つかったら、直ちに使用を中止しお買い上げ頂いた販売店へご相談ください。
- 保証期間後であっても修理によって製品の機能が維持できる場合は、ご希望により有償修理をさせていただきますので、お買い上げ頂いた販売店へご相談ください。

## 18.車いすの主な乗り方

### !**警告**

- タイヤの空気が充分入っているか確認しましょう。
- 下り坂は加速がつき危険です。いつでもブレーキがかけられるよう慎重に。
- いきなり公道に出るのは危険です。屋内や庭など安全な場所で練習しましょう。
- 車道はできるだけ通らず、歩道や充分な幅のある路側帯を通りましょう。

車いすは歩行者として取り扱われます。  
歩行者としての交通ルールを守りましょう。

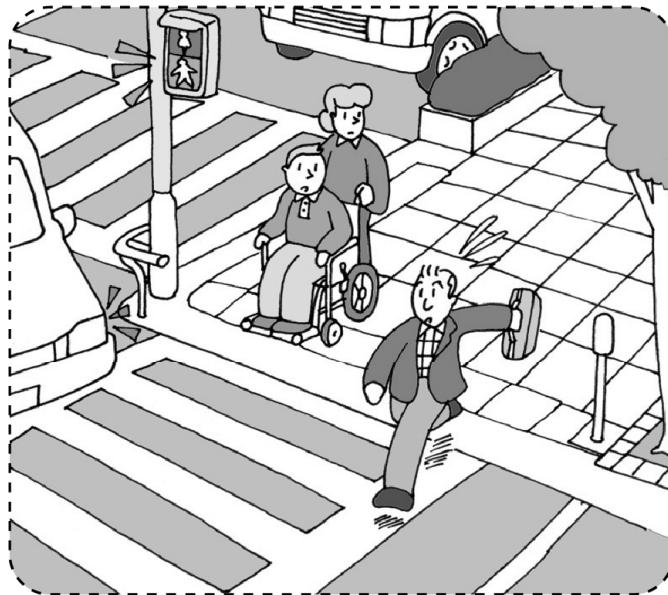

- 「自転車及び歩行者専用」、「歩行者専用」のマークのある歩行者専用道路も通ることができます。
- 信号機のある場所では、「青」が点滅中に横断するのは危険です。  
次の「青」信号を待ちましょう。

★焦らずゆとりを持った横断、  
走行を心掛けましょう。

### !**注意**

- 車いすは乗り物ですから、定期点検が必要です。

長期の使用によって劣化が生じます。異常が発生した場合は、直ちに使用を中止し、お買い上げいただいた販売店へご相談ください。

## ※ 転倒防止に充分配慮してください。

(転倒防止金具(オプション)を使用する、車いすの後方を支えるなどの方法があります。)

### ■移乗

車いすに乗る方を介助者がベッドなどから移す方法です。双方にとって安全で負担の少ないことが重要です。



介助者が片足を相手の膝の間に差し込んで、腰を支えながら立ち上がらせます。  
介助者の膝で相手を支えながら、車いすの方へお尻を向けています。  
ゆっくりと腰を下ろしてもらいます。  
※「いち、にの、さん」と声をかけながらおたがいに協力し合いましょう。

### ■外出

車いすの安全な使い方は、“ゆっくり”“確実に”と“シートベルト着用”が基本です。

#### [坂道]



#### <上り坂>

押す人は身体を少し前に倒して、押し戻されないよう、一歩ずつしっかりと押します

#### <下り坂>

坂を下るときはブレーキを軽く使いながら、後ろ向きに一步ずつ下ります。  
また、シートベルトを必ずご利用ください。

#### [段差のある場所]



●段差を乗り越える際は、固定されているパイプを持って持ち上げてください。

※ティッピングを踏んで前輪を浮かそうとすると、フレームがひずむ可能性があります。

※脚部や肘当て等を持って持ち上げると思いがけず外れる事があり、危険です。

#### [溝越え]

- ※予め溝の大きさを確認し安全に渡れる場合のみ実施してください。
- 
- ①固定されているパイプを持って持ち上げてください。  
※この時、必ず声をかけてから行ないます。
  - ②キャスターを上げたまま前に進み、溝を越えた向こう側にキャスターをゆっくり下ろします。
  - ③次に後輪を持ち上げて前に進み、溝を完全に越えたところで後輪をゆっくり下ろします。

## 19.仕様

＜各部寸法＞記載の寸法や状態は設計値であり、実際の車体とは多少誤差がある場合があります。

寸法表				
品名・名称	KX22-42N (KXC22-35)	KX22-42EL (KXC22-35EL)	KX16-42N (KXC16-35)	KX16-42EL (KXC16-35EL)
座幅 (mm)			420(350)	
座面高 (mm)	460		435	
レッグ長さ (mm)	320~(310~)	350~(340~)	320~(310~)	350~(340~)
シート奥行 (mm)	390 (360)			
背もたれ高 (mm)	860 (680)			
肘掛け高 (mm)	210・230・250 (200・220・240)			
全高 (mm)	1330 (1150)		1300(1120)	
折りたたみ (mm)	670 (675)		650 (650)	
全幅 (mm)	640 (570)			620 (550)
折りたたみ (mm)	640 (570)		620 (550)	
全長 (mm)	1130 最長 1470 (1100 最長 1380)	1140 最長 1520 (1240 最長 1470)	1050 最長 1470 (1030 最長 1380)	1070 最長 1520 (1180 最長 1470)
折りたたみ (mm)	1000(930)		940(860)	940(860)
重量 (kg)	24.5(24.3)	26.0(25.4)	23.0(22.3)	24.5(23.4)

＜各部仕様＞

標準仕様・規格						
品名・名称	KX22-42N (KXC22-35)	KX22-42EL (KXC22-35EL)	KX16-42N (KXC16-35)	KX16-42EL (KXC16-35EL)		
フレーム	ティルト&リクライニング式フレーム 固定式					
折りたたみ方式	前後折りたたみ式					
後輪	22in エアー[脱着]ドラム式 ハンドリム：樹脂[波型・黒]			16in エアー[脱着]ドラム式		
タイヤ	22×1 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> エアータイヤ			16×1.50 エアータイヤ		
チューブ	22×1 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> 英式バルブ			16×1.50 英式バルブ		
ハンドリム	22in 波型・黒			—		
前輪	7in ニューソフト脱着式樹脂ヨーク			6in ニューソフト脱着式樹脂ヨーク		
キャスター車輪	7in ニューソフトキャスター車輪			6in ニューソフトキャスター車輪		
ヨーク	7in 脱着式樹脂ヨーク			6in 脱着式樹脂ヨーク		
背シート	背ベースシート:適合調整シート(黒) 背クッション：[本革調縫 or 濃紺チェック or シアンレザー](本革調縫はKXシリーズのみ) 枕：[本革調縫 or グレー or シアンレザー](本革調縫はKXシリーズのみ)					
座シート	座クッション:30mm厚 ウレタンフォーム[本革調縫 or 濃紺チェック or シアンレザー](本革調縫はKXシリーズのみ)					
シートベルト	面ファスナー式 黒色					
肘掛け	脱着&高さ調整式(3段階) A.スタンダードパッド					
肘当て						
脚部	スイングイン&アウト式 (脱着可)	エレベーティング& スイングイン・アウト式 (脱着可)	スイングイン&アウト式(脱着可)	エレベーティング& スイングイン・アウト式 (脱着可)		
ステップセット	D標準式 φ160用 黒色	C-2標準式 φ175用 黒色	D標準式 φ160用 黒色	C-2標準式 φ175用 黒色		
ステップ板	d.黒色	c.黒色	d.黒色	c.黒色		
フットレッグサポート	中央分離式 (黒色)	ふくらはぎパッド (黒色)	中央分離式 (黒色)	ふくらはぎパッド (黒色)		
駐車ブレーキ	A.ミニ駐車ブレーキ(前後式)					
ニギリ	黒色					
制動ブレーキ	ドラム式					
ハンドグリップ	1.反射板付 黒色					
ガススプリング	リクライニング用	高圧ガス噴入式/反発力 25kg/ストローク 70mm				
	ティルティング用	高圧ガス噴入式/反発力 25kg/ストローク 64mm				
付属品	転倒防止キャスターなし					

\*シート・バックサポート、主フレームのベースパイプ・ティッピングレバー部には十字穴付きタッピングねじを使用しております。

## 材料・材質一覧表《KX》


フレーム	フレーム	フレーム	アルミ合金
		表面仕上	焼付け塗装
		溶接材料	アルミ合金
部品	後輪	タイヤ	合成ゴム
		チューブ	ゴム
		リム	アルミ合金【アルマイト】
		スポーク	スチール【ユニクロメッキ】
		ハブ	アルミ合金
		ナット	スチール【亜鉛メッキ】
		ハンドリム(自走式)	ポリプロピレン; ガラスファイバー
		タイヤ	合成ゴム
前輪		ホイル	ポリプロピレン
		ヨーク	ナイロン、ガラスファイバー
		キャスター軸	スチール【ダクロタイス処理】
		ペアリングオイル	グリース
		表地	ポリエステル(A13) ポリ塩化ビニル(No.99・No.47)
背シート		芯	ポリ塩化ビニル
		ベルクロ	オス(ナイロン) メス(ナイロン)
足ベルト		糸	ナイロン
		クッション部	ポリウレタン
		中芯	スチール【亜鉛メッキ】
肘当て		取付ネジ	スチール【亜鉛メッキ】
		グリップ	ポリ塩化ビニル
ハンドグリップ	ステップセット	ステップ板	ポリプロピレン; ガラスファイバー
		ステップボスト	スチール【クロムメッキ】
		板バネ	スチール【亜鉛メッキ】
		バンパーゴム	ゴム
		ウス	スチール【亜鉛メッキ】
		引き上げ棒	スチール【亜鉛メッキ】
駐車ブレーキ		レバー	ステンレス
		グリップ	ゴム
		カバー	ポリカーボネイト
		本体部	ポリアミド、ガラスファイバー
部品	ドラム式助ブレーキ	カバー	スチール【電着塗装】
		シュー	合成ゴム
		ブレーキレバー	ポリプロピレン
		ブレーキレバー取付バンド	スチール【電着塗装】
		アウターワイヤ	ポリ塩化ビニル
		インナーワイヤ	スチール【亜鉛メッキ】
梱包材	梱包材	外箱	ダンボール
		内袋	ポリエチレン
		テープ	ポリプロピレン

## 20.製品記録

アフターサービスなどを的確に受けるため、車種・製造月を記録しておいてください。

車種		
製造年月	年	月

### <シール貼付位置>

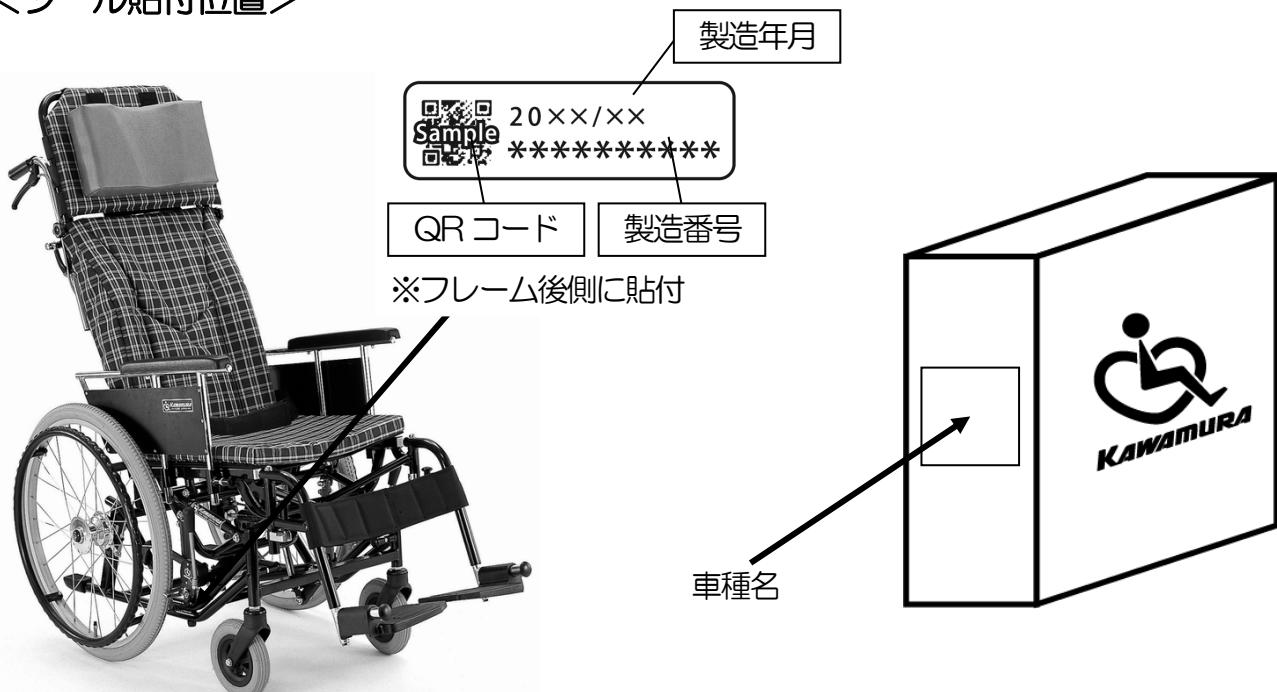

## カワムラサイクル

■本社	〒651-2411	兵庫県神戸市西区上新地 3-9-1	TEL078-969-2800
■東京サービスセンター	〒110-0013	東京都台東区入谷 1-8-3	TEL03-3874-3511
■名古屋サービスセンター	〒487-0027	愛知県春日井市松本町 1-3-11	TEL0568-52-4800
■本店サービスセンター	〒651-2411	兵庫県神戸市西区上新地 3-9-1	TEL078-969-2800
■福岡サービスセンター	〒819-0055	福岡県福岡市西区生の松原 1-18-3	TEL092-882-4722

■神戸工場 ■神戸第二工場 ■いなみの工場

本書に記載の意匠、仕様および部品は性能向上の為に一部予告なく変更することがあります。

修理・お手入れ・お取扱いなどのご相談は、まずお買い上げ頂いた販売店へお申し付けください。

転居や贈答品などでお困りの場合は、製品名・車種をご確認のうえ上記までご相談ください。

# 保証規定

弊社の定める保証とは、保証期間内に正常な使用状態において故障が生じた場合に限り、無償にて修理を行うことを約束するものです。

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で、お買い上げ日より1年以内に故障した場合は無償修理または交換いたします。(下記記載の消耗部品は含みません。)
2. 無償保証期間内に故障して修理を受ける場合は、お買い上げ頂いた販売店へご連絡ください。
3. 無償保証期間内でも次の場合には保証適用除外となります。
  - 1) ご使用による消耗および取扱不注意による破損
    - 例) タイヤの磨耗およびパンク、ワイヤー、シート、ステップ板の破損等
    - ) 地震、台風、水害などの天災および事故、火災による焼失・破損
    - ハ) お取扱の不注意、操作未熟ならびに故意または過失など誤って使用されたことによる破損
    - ニ) 保全上の不備および弊社以外で行った修理や改造等による破損
    - ホ) 弊社が指定する純正部品以外のパーツ等の使用により発生した破損
    - ヘ) 一般に車いすが走行しない場所、または特殊な状態での使用による破損
    - ト) 製品本来の使用目的にそぐわない使用による故障および破損
    - チ) 日本国外でご使用の場合
    - リ) 保証書の提示がない場合
- 消耗部品
  - キャスタ輪
  - シート類
  - ワイヤー
  - ステップ板（板バネ）
  - ガススプリング
  - 时当て
  - 車輪（タイヤ、チューブ、虫ゴムなど）
4. 保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
5. 補修用性能部品は、製造打ち切り後5年保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するため必要な部品です。
6. 保証書にご記入頂いた個人情報は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検の為に記載内容を利用させて頂く場合がございますので、ご了承ください。

## 保証書

製品名 <u>KXシリーズ</u>	販売店名 _____ <small>印</small>
品番 _____	住所 <u>〒</u> _____
お客様名 <u>サン</u> 様	TEL ( ) _____
ご住所 <u>〒</u> _____	お買い上げ年月日 年 月 日 <small>(保証期間上記より1年間)</small>
TEL ( ) _____ -	製造販売元 株式会社カワムラサイクル 〒651-2411 兵庫県神戸市西区上新地3-9-1 TEL 078-969-2800

一度使用された製品は、原則としてお取替えできません。

お問い合わせは、お買い上げいただいた販売店へお申し付けください。

KXシリーズ

2019年11月版