
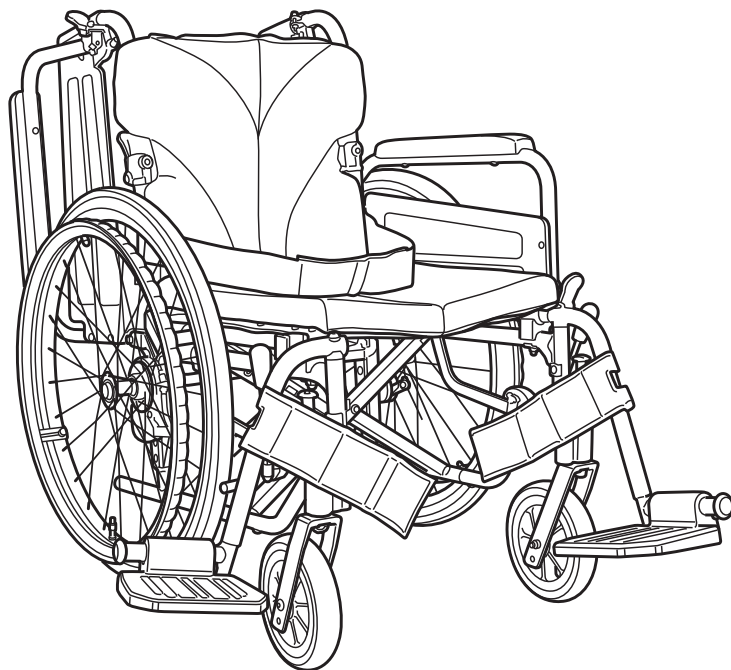


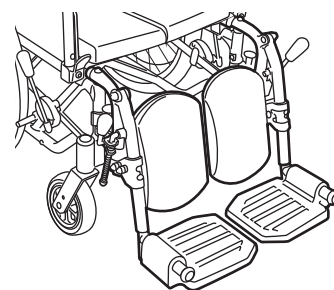

KY20243(01/00)

カワムラサイクル**取扱説明書 / 保証書**

簡易モジュール車いす KA800 シリーズ

**エレベーターリング &
スイングイン・アウト脚部仕様**

このたびはカワムラサイクルの車いすをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

この取扱説明書には、製品を安全に使用していただくために必要な注意事項や正しい使用方法が記載されています。

また、本書は必ず携帯していただき必要なときにいつでもご覧になれるよう大切に保管してください。

保証書は本書裏表紙に記載されていますので、お買い上げいただいた販売店より記入をお受けください。

目次

重要なお知らせ.....1

製品の使用目的.....	1
飛行機に搭乗する場合.....	1
製品を譲渡・貸与する場合.....	1
修理のご依頼.....	1
介助者へ.....	2
車いす使用者は、歩行者あつかい.....	2

お使いになる前に.....3

各部の名称と働き.....	3
同梱部品の確認.....	4
安全に関するご注意.....	4
警告表示について.....	4
使用前点検.....	7

ご使用方法.....8

ブレーキを使う.....	8
車いすをひらく.....	9
車いすをたたむ.....	10
シートベルトを使う.....	10
アームサポートの操作.....	11
フット・レッグサポートの操作.....	12

車いすに乗る / 車いすから降りる.....	15
車いすを動かす.....	18
坂道を走行する.....	20
段差を乗り越える.....	21
階段を下りる・上がる.....	22
保管方法.....	23

各部の調整方法.....24

フットサポートの高さを調整する.....	24
シートの張りを調整する.....	25

お手入れの仕方.....26

定期点検.....	26
清掃する.....	27
故障かな？と思ったら.....	28

仕様.....29

廃棄する場合.....30

連絡先.....30

保証規定.....31

保証書.....	31
----------	----

重要なお知らせ

製品の使用目的

本製品は、手動式車いすです。これに搭乗しての移動と、休息を目的としています。
この車いすは一人乗り用です。

■自走用をご使用の場合

この車いすは、自身でハンドリムを操作して走行する車いすです。この車いすは、特別な身体保持具、バックサポート（背）の角度調整、座位の姿勢変換（昇降、旋回等）等の機構がない標準形の自走用車いすです。また、スポーツ用、入浴用等の特殊な使用目的のものではありません。なお、購入時はこの標準形が適していても、特別な身体保持具などが必要になってきた場合など、標準形が使用に適さなくなることがあります。

■介助用をご使用の場合

この車いすは、介助者が操作する車いすです。この車いすは、バックサポート（背）の角度調整、座位の姿勢変換（昇降、旋回等）等の機構がない標準形の介助用車いすです。
スポーツ用、入浴用等の特殊な使用目的のものではありません。なお、購入時はこの標準形が適していても、特別な身体保持具などが必要になってきた場合など、標準形が使用に適さなくなることがあります。

■車いすの適合性

車いすが使用者のからだに合わない状態、または使用目的に沿った姿勢を保てない状態での使用はしないでください。
使用者に合った適切なシーティングについてはかかりつけの医師、療法士や販売店などにご相談ください。

飛行機に搭乗する場合

お客様の車いすをご旅行先へ持っていかれる場合は、事前に利用予定航空会社または旅行代理店にご相談ください。

※事前確認なしに空港へ行きますと、航空会社の確認業務に時間がかかり、ご希望の便に間に合わなかったり、搭乗できない場合があります。



製品を譲渡・貸与する場合

この製品を他の方に譲渡または貸与される際は、必ず本書もあわせてお渡しください。

修理のご依頼

異常がある場合は、使用を中止し、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

重要なお知らせ（つづき）

介助者へ

- 使用者の身体の一部及び衣服（長いマフラー、ひざ掛け、大きめの服や長いネックレス等）がタイヤ、スポーク、キャスト及び地面、建物、通行者に触れたり、挟まったりしないようご注意ください。
- 付添いの際は、車輪に絡まるような長いマフラー、大きめの服や長いネックレスなどを着用しないでください。
- 介助者は、使用者を乗せる前に十分に練習を行ってください。
- 取扱説明書に沿った安全教育を周知してください。
- 使用者と介助者の少なくとも一人が日本語を母国語としない人の場合、母国語による安全教育を行ってください。
- 走行中にはフットプレートに足がのっているか確認してください。
移動中、足が障害物に当たらないように、確認しながら走行してください。


車いす使用者は、歩行者あつかい

道路交通法では、車いす使用者は歩行者として取りあつかわれます。車いす使用時は、歩行者としての交通ルールを守りましょう。

「自転車及び歩行者専用」、「歩行者専用」の道路標識がある歩行者専用道路も通ることができます。

信号機のある場所では、「青」が点滅中に横断するのは危険です。次の「青」信号を待ちましょう。

あせらず、ゆとりを持った横断、走行を心がけましょう。

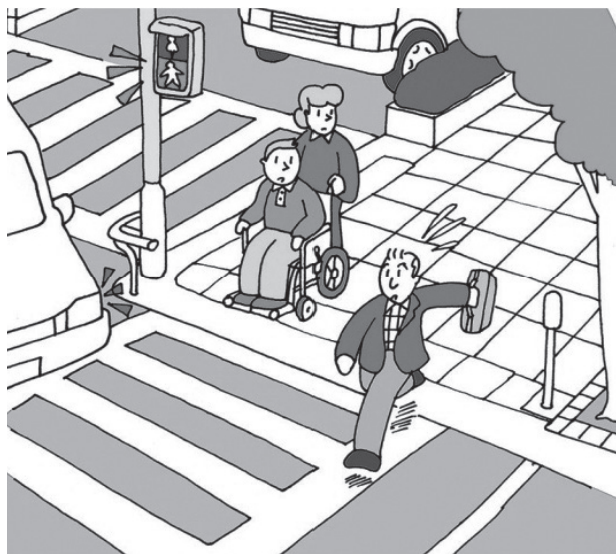


SG マーク制度について

SG マーク制度は、SG マーク付製品の欠陥により発生した人身事故に対する賠償制度です。消費者側の一方的な過失、もしくは誤使用に基づくような場合を除き、事故原因や被害の程度に応じて、製品安全協会が賠償措置を実施いたします。


また、SG マーク取り付けは改造・特注仕様を行っていない標準仕様で認定を受けております。標準仕様以外で弊社から出荷する場合は、SG マークを除いた状態での出荷になります。

お使いになる前に

各部の名称と働き

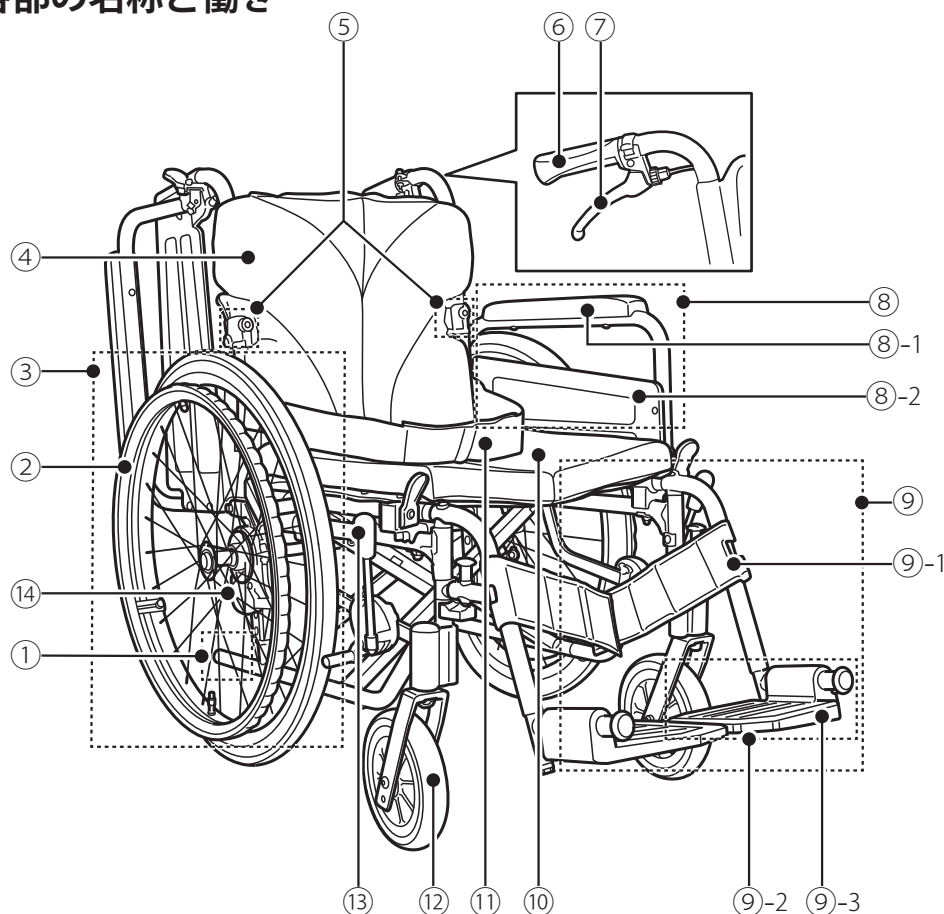

エレベーターリング &
スイングイン・アウト脚部仕様

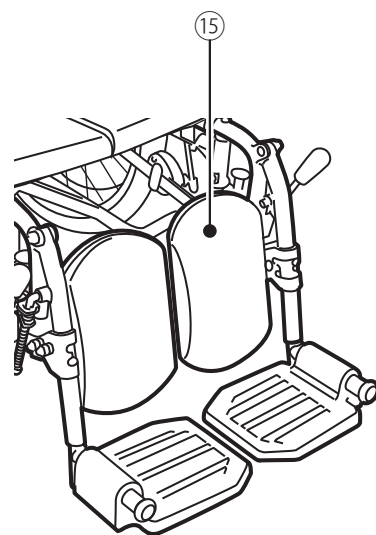

① ティッピングレバー

段差を乗り越える際、介助者が前輪上げをするときに踏むためのレバーです。

② ハンドリム

使用者が車いすを駆動するときに使います。(自走用のみ)

③ 車輪 (駆動輪または主輪)

駆動輪です。(介助用の場合は主輪です)

④ バックサポート

使用者の背部が寄りかかる部分です。

⑤ 背折れ金具

背フレームを折りたたむ部品です。

⑥ 押手 (手押しハンドルグリップ)

介助者が車いすを操作する際に握る部分です。

⑦ 介助ブレーキレバー

介助者がブレーキを操作するときに握る部品です。

⑧ アームサポート

使用者の肘を支持する部品です。

⑧ -1 肘当て

使用者が肘をのせる部品です。

⑧ -2 サイドガード

衣類等が車輪に巻き込まれるのを防ぎます。

⑨ フット・レッグサポート

使用者の足を支持する部品です。

⑨ -1 足ベルト (レッグサポート)

使用者の足が後ろに落ちないように支えます。

⑨ -2 フットサポート

フットプレートを支える部品です。

⑨ -3 フットプレート

使用者の足をのせる部品です。

⑩ シート

使用者が座る部分です。

⑪ シートベルト

使用者の体がずり落ちないように腰を安定させるベルトです。

⑫ キャスタ

自在に方向転換できる小車輪です。

⑬ 駐車用ブレーキ

車いすを停止させておくためのブレーキです。

⑭ 介助ブレーキ (制動用ブレーキ)

介助者が車いすを制動するためのブレーキです。

⑮ ふくらはぎパッド (レッグサポート)

使用者の足が後ろに落ちないように支えます。

同梱部品の確認

本製品には、以下の部品が同梱されていますので確認してください。

- | | | | |
|-------------------|-----|---------------------|-----|
| ● 取扱説明書 | 1 ケ | ● 背クッション | 1 ケ |
| ● 13mm スパナ | 1 ケ | ● 座クッション | 1 ケ |
| ● 5mm 六角レンチ | 1 ケ | ● 跳ね上げ固定用ノブネジ | 2 ケ |
| ● 6mm 六角レンチ | 1 ケ | | |

安全に関するご注意

この製品では、次の2つの方法により、使用者の製品使用上の注意事項をお伝えしています。

- この取扱説明書への「警告文」の記載
- 製品上への「警告ラベル」の貼り付け

製品をご使用になる前に、この取扱説明書に記載されているすべての警告文を必ずお読みください。

また、製品に貼られたすべての警告ラベルの場所と内容を確認してください。

万が一、警告文や警告ラベルの意味が十分理解できないときは、当社のサービスセンターまでご相談ください。警告文や警告ラベルの意味を十分理解するまで絶対に製品を使用しないでください。

警告表示について

■表示の説明

取扱説明書の警告文および警告ラベルでは、製品使用中に想定される危険な状態を以下のシンボルマークで表示しています。

警告文や警告ラベルの内容を無視すると、その警告内容に使われたシンボルマークに応じた事故につながるおそれがあります。

シンボルマーク	警告の意味
危険	取扱いを誤った場合、死亡、または重傷を負うことがあり、かつその切迫の度合いが高い危害の程度。
警告	取扱いを誤った場合、死亡、または重傷を負うことが想定される危害の程度。
注意	取扱いを誤った場合、傷害を負うことが想定されるかまたは物的損害の発生が想定される危害の程度。

■図記号の意味（JIS Z9104 より）

シンボルマーク	警告の意味
 禁 止	してはいけないことを示しています。
 強 制	必ずしなければならないことを示しています。



■取扱説明書内の表記について

本書では 使用者：車いすに乗車する人
 介助者：車いすを介助で操作する人 と表現しています。

危険

 禁 止	● エスカレーターでは使用しない ※介助者がいる場合でも、転倒・転落などにより重大な事故のおそれがあります。
	● 勝手に改造・分解しない。 ● 本説明書に記載されている調整箇所以外の調整を行わない。 ※フレームが破損したりシートが破れたりするなど、車いすの強度や耐久性が低下して重大な事故につながるおそれがあります。 本製品はモジュール仕様ではありますが、組み換えは販売店様にご依頼ください。
	● 車いすに座ったまま強い前傾姿勢をとらない。 ● シート以外の部分に腰掛けない。 ● 背ポケットには1 kg 以上の重いものを入れない。 ● 車いすに荷物を掛けたり、ぶら下がったりしない。 ※転倒・転落し、大変危険です。 
	● 車いすを火気に近付けない。 ※シート部が燃えたり、プラスチック等が変形したり、熱くなった金属部分でやけどするなど、危険です。 
	● 前方が見えないほど身長の高い方や子供は、車いすを押さない。 ● 小さな子供に使用させたり遊ばせたりしない。 ※不意に動き出したりして重大な事故につながるおそれがあります。
	● MRI 室で使用しない。 ※本製品は非磁性体ではありません。重大な事故につながるおそれがあります。
	 強 制 ● 車いすに乗り降りする際や一時停止する際は、まわりの安全を確認し、必ず駐車用ブレーキをかけて車いすを固定すること。 ※車いすが不意に動き出し、重大な事故につながるおそれがあります。
	● 介助者は使用者の腕がアームサポートから外側に落ちていないか、よく注意しながら操作すること。 ※指が車輪に挟まれケガをするおそれがあります。 

警告

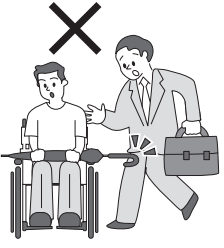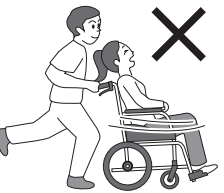
 禁 止	● 介助者は、絶対に車いすに乗って介助しない。 ● 複数の人数で乗らない。 ● 車いす以外の目的に使用しない。 ● 自分で操作できない方や認知症の方の場合、使用者のみで使用しない。 ※事故につながるおそれがあります。
	● 杖や傘もしくは大きな荷物など、車いすのシート幅からはみ出るような荷物を持たない。 ※走行中、不意にぶつかったり、相手にケガを負わせるおそれがあります。 
 強 制	● 車いすの機能と操作をよく理解し、慣れた状態で介助・操作を行うこと。 ※事故のおそれがあります。
	● ご使用前には各部を点検すること。また、部品等の破損や損傷がある場合は、使用を中止し、すぐに販売店に相談すること。 ※車いすの強度や機能が低下し事故につながるおそれがあります。
 強 制	● 車いすを押す場合は使用者にシートベルトを着用させ、速度は抑え目にする。また、前ずれなきこと。 ※転倒・転落のおそれがあります。また、極端な前ずれは、シートベルトで窒息するおそれがあります。
	

注意



禁 止


- 回転している車輪に指を挟み込まない。
※指がタイヤのスポークに挟まれるおそれがあります。
- 車いすの操作は、力の無い人、ハイヒールなど不安定な履物を履いた人が行わない。
※予期せぬ事故のおそれがあります。
- 背もたれを背折れしたまま使用しない。
※後方へ転倒したり、背折れ金具で怪我をするおそれがあります。

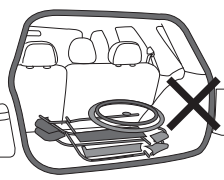
- 車いすをぶつける、なげる、落とすなど、衝撃を加えない。
- 車などに乗せる場合や保管時は、横倒しの状態にしない。
※フレームが歪むなど、破損や故障の原因になります。

- 著しく高温または低温の環境下では使用しない。
※部品の変形や作動不良などの不具合が生じるおそれがあります。

注意

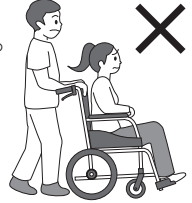

強 制

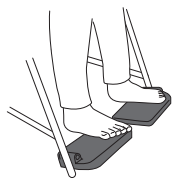- 各部の操作・調整をする場合は、安定した場所で行うこと。また駐車用ブレーキをかけて車いすを固定しておくこと。
※不安定な場所で行うと車いすも巻き込んで転倒しケガをするおそれがあります。
- 車いすを押す場合は必ず押手を使うこと。
※バランスを崩して転倒・転落するおそれがあります。

- テーブルに近づく際、介助者は使用者の手足がはさまらないことを確認してから操作すること。
※手足をけがするおそれがあります。





- 安定した姿勢で座ること。
※転倒・転落のおそれがあります。
- 靴を履いて使用すること。
※履かずに使用すると壁や柱で足をケガしたり、足がフットサポートから落ちて骨折するおそれがあります。

- 最大体重を守ること。
※フレームが歪むなど、破損や故障の原因になります。






お使いになる前に（つづき）

使用前点検

車いすを使用する前に各部の安全確認を行ってください。

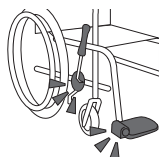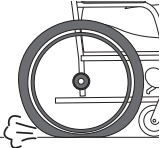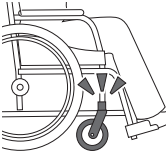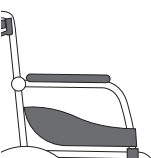使用者自身が点検することが難しい場合は介助者や販売店にご相談ください。

点検項目	点検内容
装着品の確認	フット・レッグサポートは装着されていますか 
車輪	空気が抜けていませんか 
キャスタ	キャスタ輪はしっかり固定されていますか 
駐車用ブレーキ	車輪はしっかりと止まりますか 
介助ブレーキ	車輪はしっかりと止まりますか 
	ブレーキの利きに左右差はありませんか 
	押手はしっかり固定されていますか 

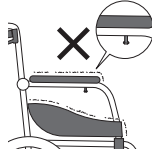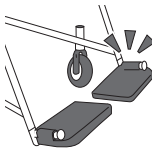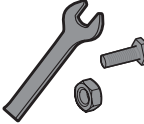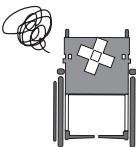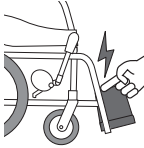点検項目	点検内容
アームサポート	肘当て・アームサポートフレームにガタやネジの緩みはありませんか 
フットサポート	フットサポートはしっかり固定されていますか 
フレーム	まっすぐに走りますか 
	各部ボルトやナットが緩んでいませんか 
	部品などに破損はありませんか 
	車いすにバリ（割れや鋭利な突起）などはありませんか 

ご使用方法

ブレーキを使う


■ 駐車用ブレーキ

車いすを駐停車するためのブレーキです。



警告

 強制	● 立ち上がる前に駐車用ブレーキをかけ、車いすが固定されていることを確認すること。 ※ 転倒のおそれがあります。
--	--


注意

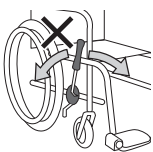 禁止	● 駐車用ブレーキは作動方向以外に力を加えない。また、必要以上に力を加えない。 ※ ブレーキが変形・破損するおそれがあります。 
--	---

注意

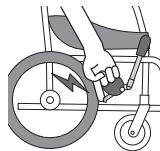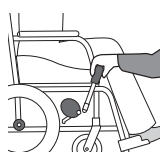 禁止	● 駐車用ブレーキ操作時は指などをはさみこまない。 ※ 指がタイヤとブレーキ板の間にはさまれケガをするおそれがあります。 
 強制	● 駐車用ブレーキは必ず手で操作すること。 ※ 足などで操作するとブレーキが破損するおそれがあります。 

1. ブレーキレバーを後方に引いて、車体を固定します。
2. (解除するとき) ブレーキレバーを前方に戻します。

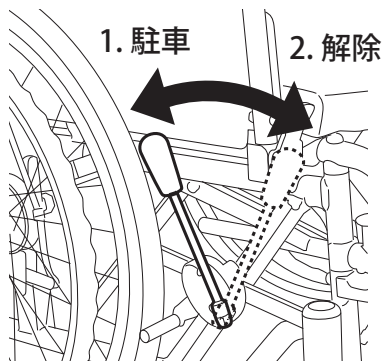

■ 介助ブレーキ


介助者が走行中の車いすを減速させる為のブレーキです。

警告

 禁止	● 急ブレーキや片側ブレーキは、絶対にかけない。 ※ 使用者が投げ出されたり、転倒・転落してケガをするおそれがあります。 
--	--


 強制	● 介助ブレーキをかける時は、必ず両方のブレーキレバーを握り、左右均等の力を加えること。 ※ バランスを崩してケガをするおそれがあります。
---	---


1. 両方のブレーキレバーを握るとブレーキがかかり、離すと解除します。

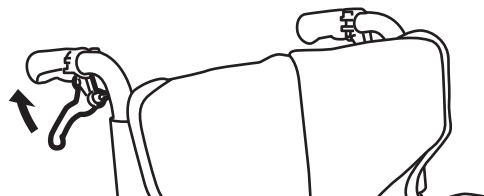


車いすをひらく

注意

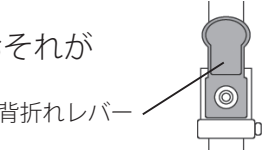
 禁 止	●シートパイプの横や下に手や指を置かない。 ●押手を起こす際背折れ金具周辺に手や指を置かない。 ※ケガをするおそれがあります。	
 強 制	●背折れレバーが図の向きになっていることを確認すること。 ※レバーが破損するおそれがあります。	

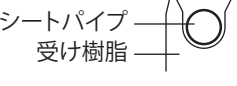 強 制	●押手がしっかり固定されているか確認すること。 ※背もたれが突然倒れ、ケガをするおそれがあります。	
	●シートパイプが受け樹脂ブロックに収まっていることを確認すること。	


1. 駐車用ブレーキをかけ、左右の車輪をロックします。
2. 片側ずつ、押手を起こし、固定します。

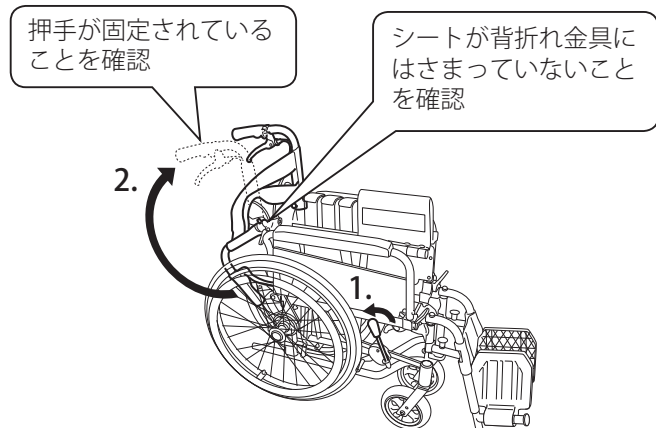


3. 左右のアームサポートを持って両側に軽く拡げます。

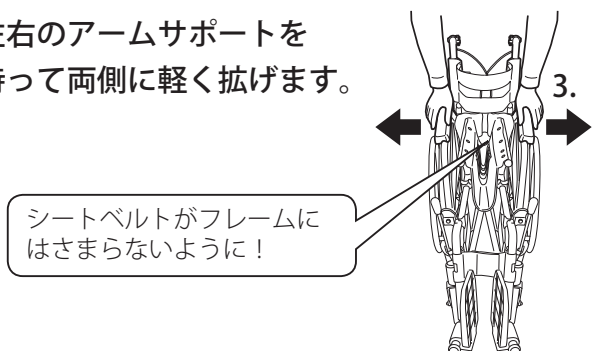

4. シートパイプ部分を押し下げます。

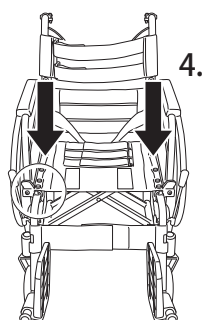


5. 片側ずつ、フットプレートを下ろします。
- ※出荷時は、フットプレートを外側に回転させて折りたたんでいます。
 ※フットサポートの高さを調整するには24ページを参照ください。

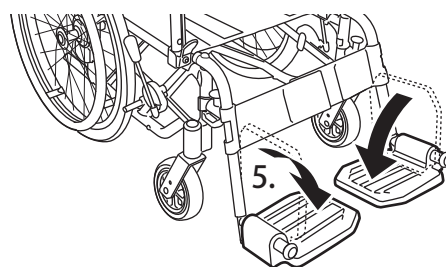


6. 座クッション、背クッションを取り付けます。

背クッションはポケットがついている方が後ろです。

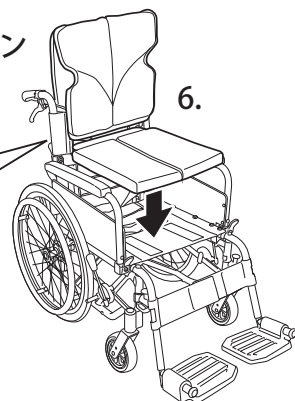

〈エレベータリング & スイングイン・アウト脚部仕様の場合〉

1. ～ 6. の手順後にレッグサポートを旋回します。

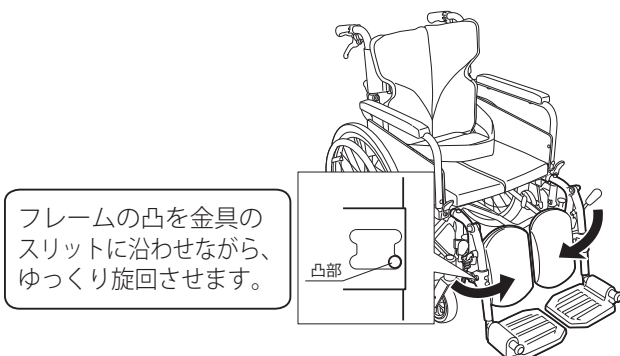


ご使用方法 (つづき)


車いすをたたむ

注意

 禁 止	●背折れ金具を折りたたむ際、背折れ金具周辺に手や指を置かない。 ※ケガをするおそれがあります。 
---	--

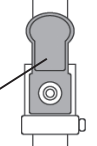
 強 制	●背折れレバーが図の向きになっていることを確認すること。 ※レバーが破損するおそれがあります。 
--	--

1. 駐車用ブレーキをかけ、左右の車輪をロックします。

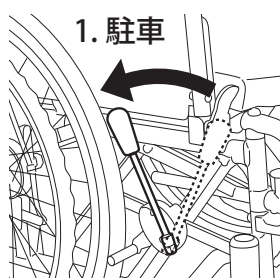


2. 片側ずつ、フットプレートを跳ね上げます。

3. 片側ずつ、押手を倒します。

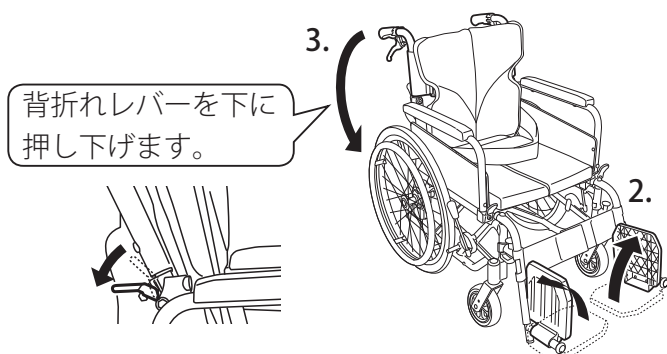


4. 前後のシート中央部を同時に引き上げ折りたたみます。

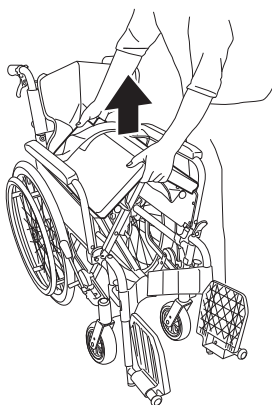

〈エレベータリング & スイングイン・アウト脚部仕様の場合〉

- 1.の手順後にレッグサポートを外側に旋回します。
(1.に引き続き 2.の手順で車いすをたたみます。)

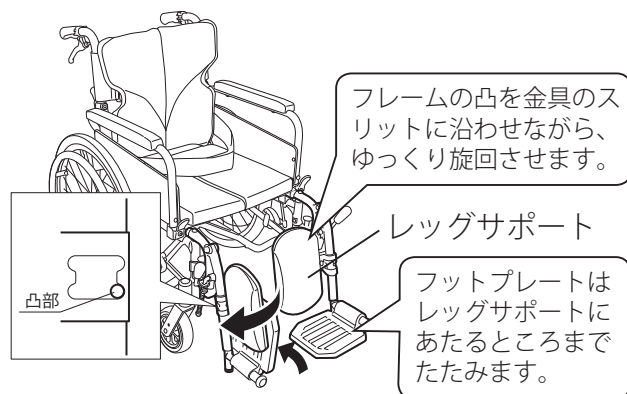

アドバイス


折りたたみの際、クッション類を取り外してから行うことでよりコンパクトに折りたためます。クッション類を取り付けたまま長期保管した場合、クッションが変形するおそれがあります。長期保管時は取り外してから保管するようにしてください。

シートベルトを使う

警告

 禁 止	●使用者はシートベルトをした状態で立ち上がらない。 ※車いすごと転倒し、ケガのおそれがあります。
---	---

車いすに深く腰掛け、面ファスナーの接着部分を10cm以上重ね合わせてしっかりと留めてください。

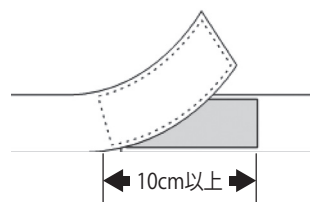

ご使用方法（つづき）


アームサポートの操作

アームサポートを跳ね上げるとベッドなどへ移乗しやすくなります。また付属のノブネジを取り付けることで、跳ね上げ機構がロックされます。



警告

 強 制	●使用時はアームサポートがしっかりと固定されていることを確認すること。 ※アームサポートが外れるなどの危険があります。
---	---

注意

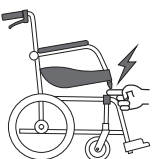
 強 制	●アームサポートの操作時は、可動部周辺での手や指、衣服等のはさみに注意すること。 ●アームサポートを操作する場合は、使用者に声をかけてから行うこと。 ※ケガをさせるおそれがあります。 
---	---

注意

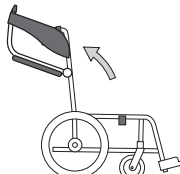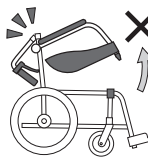 強 制	●アームサポートは、最後まで跳ね上げること。 ※移動時に肩や腕に接触しケガをするおそれがあります。 
 強 制	●ベッドなどに移乗する際は、跳ね上げたアームサポートに体が接触したり衣服の引っかかりに注意すること。 ※ケガをするおそれがあります。 
 禁 止	●跳ね上げと背もたれの折りたたみを同時に行わない。 ※フレームが変形・破損するおそれがあります。 
	●アームサポートに腕をのせたまま、可動させないこと。


■跳ね上げるとき

1. 駐車用ブレーキをかけ、左右の車輪をロックします。
2. アームサポートを上の方に跳ね上げます。
3. 使用後、アームサポートを下の方に押し下げます。
4. アームサポートが固定されていることを確認します。

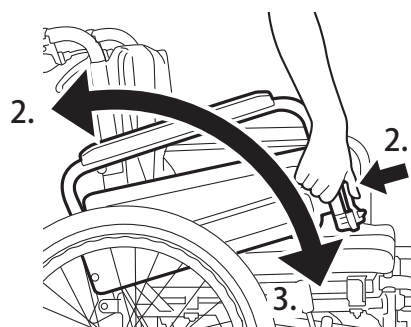

■アームサポートの固定方法

1. 駐車用ブレーキをかけ、左右の車輪をロックします。
2. アームサポートを下した状態で、同梱の跳ね上げ固定用ノブネジを受け樹脂ブロックの穴から挿入し、締め込みます。
3. アームサポートが固定されていることを確認します。

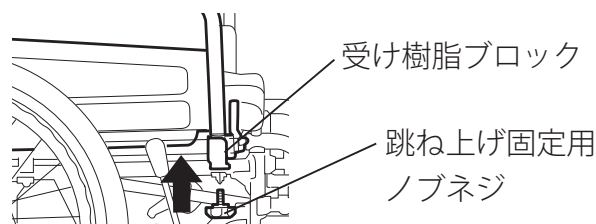

ご使用方法（つづき）


フット・レッグサポートの操作

脚部を開閉もしくは着脱することで移乗のスペースが確保されます。

また仕様はスイングイン・アウト式とレッグ角度を変更できるエレベータリング&スイングイン・アウト式がございます。フレーム外側に旋回することをスイングアウト、フレーム内側に旋回することをスイングインと言います。

（スイングイン・アウト式、エレベータリング&スイングイン・アウト式共通機能）

注意

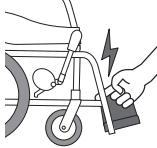 強 制	●フット・レッグサポート操作時は可動部周辺での手ばさみ、ぶつかりに注意すること。 ※ケガするおそれがあります。 
---	--


 強 制	●フット・レッグサポートを操作する場合は、使用者に声をかけてから行うこと。 ※使用者の手足を挟み、ケガをさせるおそれがあります。 ※急に車いすが動き、ケガをするおそれがあります。 ●ベッドなどに移乗する際は、フット・レッグサポートに体が接触したり衣服の引っ掛かりに注意すること。 ※接触しケガをするおそれがあります。 
--	--

■フット・レッグサポートを開閉するとき


警告

 禁 止	●スイングアウト（スイングイン）した状態で走行しない。 ※接触しケガをするおそれがあります。
---	---

1. 駐車用ブレーキをかけ、左右の車輪をロックします。
2. レッグサポート中央部の面ファスナーを外します。（スイングイン・アウト式のみ）
3. スイングアウトノブを引き上げたまま、脚部をスイングアウトもしくはスイングインします。
※スイングインの場合はフットサポートを折りたたんだ状態で行います。

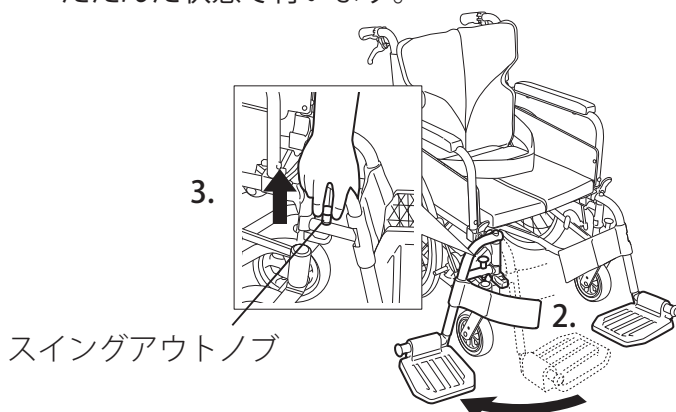


4. 使用後、フット・レッグサポートを元の位置に戻します。
5. レッグサポート中央部の面ファスナーを貼り合わせます。（スイングイン・アウト式のみ）
6. フット・レッグサポートを左右に揺らし、固定されていることを確認します。

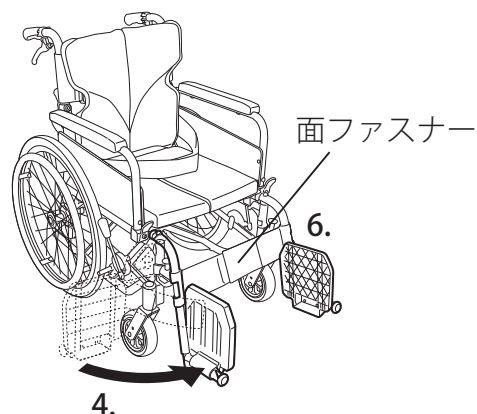

ご使用方法 (つづき)


■フット・レッグサポートを着脱するとき

1. 駐車用ブレーキをかけ、左右の車輪をロックします。

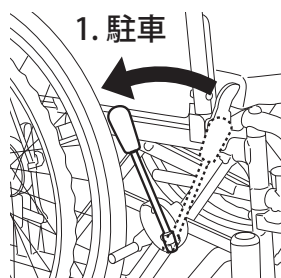


2. レッグサポート中央部の面ファスナーを外します。(スイングイン・アウト式のみ)
3. スイングアウトノブを引き上げたまま、フット・レッグサポートを90度ほどスイングアウトします。
4. 真上に引き抜きます。

抜けにくいときは左右に小刻みに振りながら抜いてください

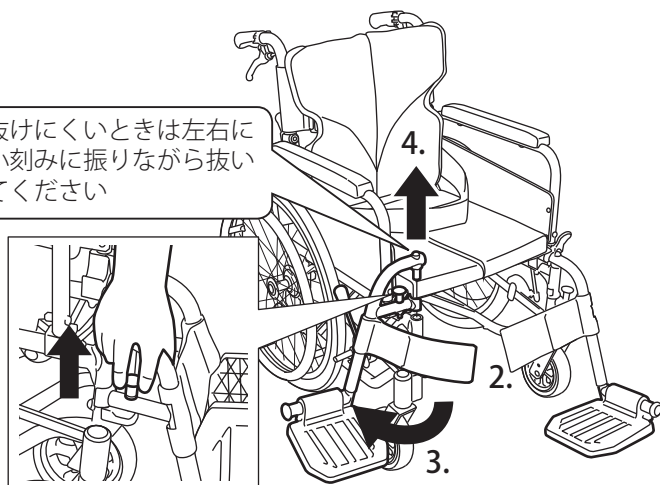

5. 使用後、フット・レッグサポートが90度ほど旋回している位置からフレームに差し込みます。
6. フット・レッグサポートを正面に旋回させます。
7. レッグサポート中央部の面ファスナーを貼り合わせます。(スイングイン・アウト式のみ)
8. フット・レッグサポートを左右に揺らし、固定されていることを確認します。

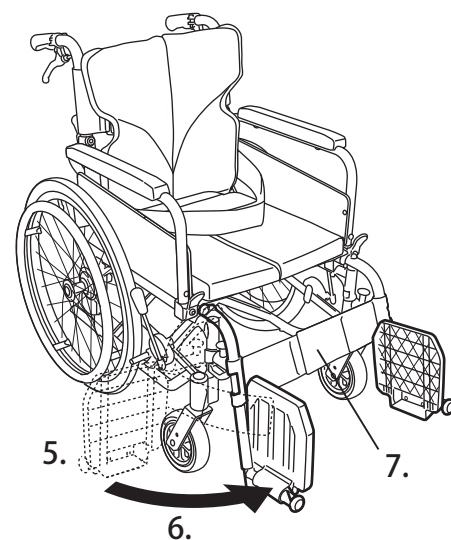

ご使用方法（つづき）

■フット・レッグサポート角度を変更するとき（エレベータリング&スイングイン・アウト式の場合）

使用者の身体状態にあわせて、任意の角度に調節できます。また、ふくらはぎパットの位置を2段階で調節していただけます。

注意




強 制

●エレベータリングを操作する場合は、両手にて操作すること。


※手や足を挟みケガをするおそれがあります。

〈フット・レッグサポート角度を上げる〉

1. 駐車用ブレーキをかけ、左右の車輪をロックします。

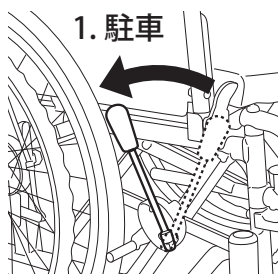


2. フット・レッグサポートを持ち上げると角度が変わり、持ち上げるのをやめるとそこでロックされます。

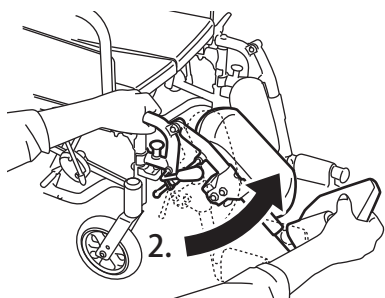


■ふくらはぎパットの位置を変更する

1. 駐車用ブレーキをかけ、左右の車輪をロックします。
2. フレームの凸部を金具のスリットに沿わせながら、ゆっくり旋回させます。
3. 左右に小刻みに振りながらスリットに沿って高さを変更します。

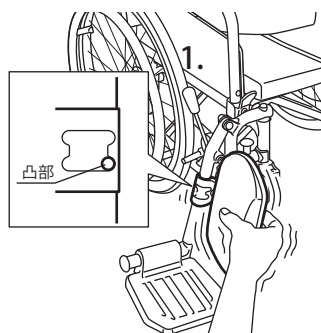


〈フット・レッグサポート角度を下げる〉

1. 駐車用ブレーキをかけ、左右の車輪をロックします。

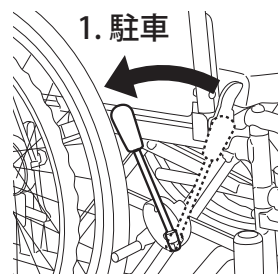

2. 片方の手でフット・レッグサポートを支えながら、もう一方の手でEJロックのニギリを後方に押します。
3. フット・レッグサポートを任意の位置まで下します。
4. EJロックのニギリから手を放すとフット・レッグサポートはロックされます。


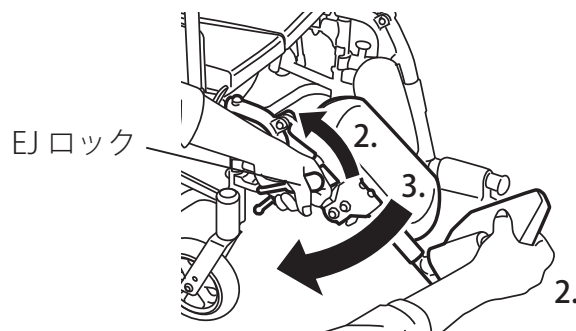


車いすに乗る / 車いすから降りる

危険

 禁 止	●移乗時はフットプレートの上に乗らない。 ※車いすごと転倒し、重大な事故につながるおそれがあります。 
 強 制	●移乗時は、介助者が安定した体勢で行うこと。 ※介助者や車いすも巻き込んで転倒し、重大な事故につながるおそれがあります。

警告

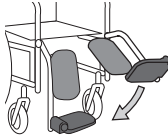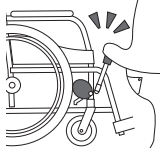 強 制	●移乗する際、エレベーター・スイングイン・アウト脚部を下ろしてから移乗すること。 ※脚部に荷重のかかるような移乗をした場合、車いすが転倒したり、破損するなどのおそれがあります。 
	●移乗の際、ブレーキニギリやフットサポートなどに引っかからない様、周りに注意してから行うこと。 ※転倒しケガをするおそれがあります。 

注意

 強 制	●介助者は移乗介助などの車いす操作時に、車いすが使用者にぶつからない様注意して操作すること。 ※ケガするおそれがあります。 
---	--

ご使用方法（つづき）

■車いすに乗る〈下記方法は一例です。安全に留意して、ご使用ください。〉

危険



禁止

●勢いをつけて、座らない。
※後方転倒のおそれがあり、
大変危険です。




警告




強制

●身体が安定しない方は、シートベルトを着用すること。
※身体が投げ出されることがあり、危険です。
●シートベルト不要の場合は、販売店に取り外しを依頼すること。
※シートベルトがスポークに絡まるなど、不意に車いすが停止し、使用者が投げ出されるおそれがあります。


1. 駐車用ブレーキをかけ、左右の車輪をロックします。

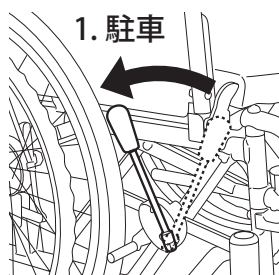

2. レッグサポート中央部の面ファスナーを外します。
3. フットプレートを跳ね上げます。

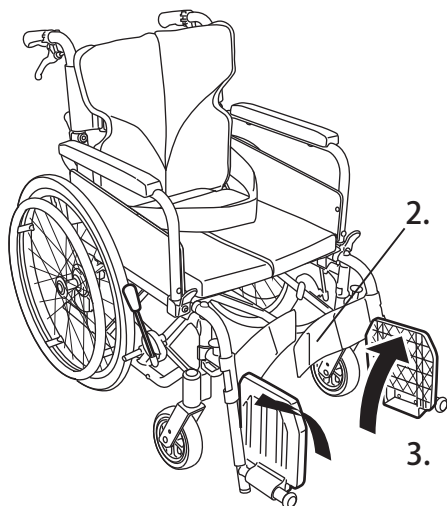


4. アームサポート前方を両手で持ちながら、ゆっくり座り込みます。

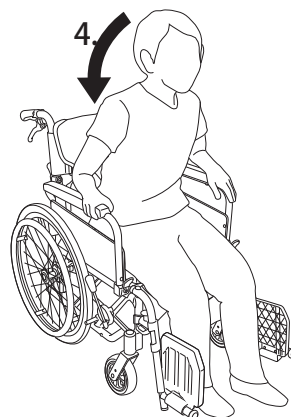

アドバイス

介助用で使用するときは、シートベルトを使用してください。


5. フットプレートを下ろします。
6. フットプレートに足をのせ、レッグサポート中央部の面ファスナーを付けます。

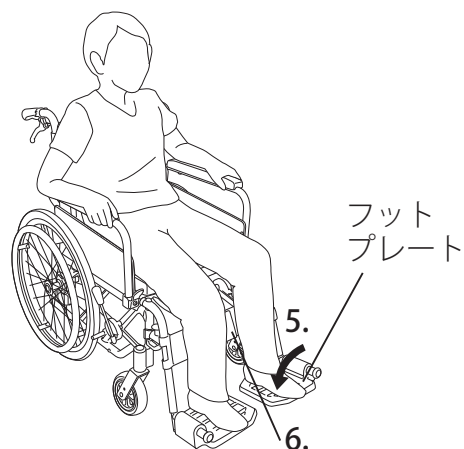


ご使用方法（つづき）

■車いすから降りる〈下記方法は一例です。安全に留意して、ご使用ください。〉

1. 駐車用ブレーキをかけ、左右の車輪をロックします。
(シートベルトをしている場合はシートベルトを外します。)

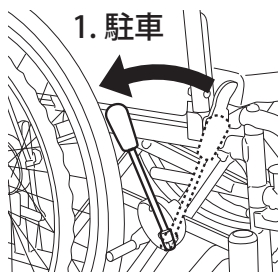


2. レッグサポート中央部の面ファスナーを外します。
3. フットプレートから足を下ろし、フットプレートを跳ね上げます。

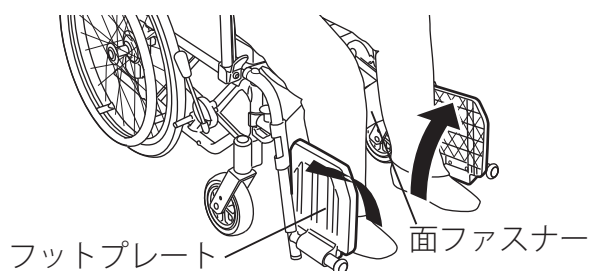

アドバイス

立ち上がり時は足を手前に引き込み、膝の角度を 90 度以下にすると立ち上がりやすくなります。

4. アームサポート前方を両手で持ちながら、ゆっくり立ち上がります。



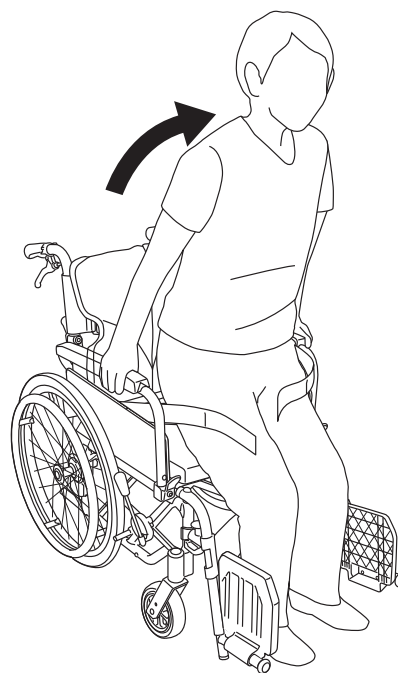


車いすを動かす


危険

 禁 止	●踏切の溝やグレーチング(溝蓋)など、くぼみのある路面はできるだけ走行しない。 ※キャストがはまり込み、交通事故などの重大事故につながるおそれがあります。また、やむを得ず横断する際は介助者に付き添っていただき、はまり込みが無いよう、安全に横断してください。 
	●走行中は、車いすから身体を乗り出さない。 
	●車道を走行しない。 ●不整地や危険が予測される場所は走行しない。 ●凍結した道路や雪、雨の中、夜間、濃霧、強風その他危険が予想される場合は走行しない。 ※交通事故に巻き込まれたり、車輪が思うように動かせないなど、重大な事故につながるおそれがあります。
	●傘や荷物を持って、片手で走行しない。 ※視界不良やバランスを崩すことによって重大な事故につながるおそれがあります。
	●スピードを出さない。 ※急カーブ、急ブレーキは転倒・転落のおそれがあり、重大な事故につながるおそれがあります。
	●足こぎ走行しない。 ●足こぎ走行する場合はセラピストに相談し使用すること。 ※キャストが足にあたり、ケガや転倒するおそれがあります。
 強 制	●駅のホームでの走行は注意すること。 ※ホームから転落したり、乗降時に電車とホームの間に落ち込んだり、人と接触したりしてケガのおそれがあります。
	●走行中は身体が前のめりにならないよう注意すること。 ※車いすが不安定になり、転倒など重大な事故につながるおそれがあります。

警告

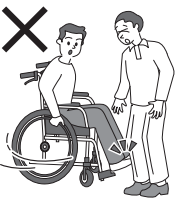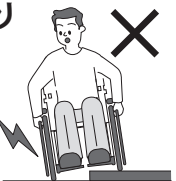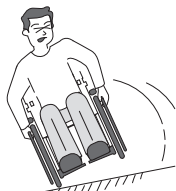 禁 止	●急発進、急停車、急な方向転換をしない。 ※転落・転倒など使用者の危険だけでなく、衝突など周りの方にもケガをさせるおそれがあります。 
	●石や段差など車輪を片上がりさせた状態で走行しない。 ※転倒してケガをするおそれがあります。 
 強 制	●使用者の足をフットプレートにのせ、レッグサポートを利用すること。 ※足が落ち込み、キャストに巻き込まれてケガをするおそれがあります。
	●発進するときや段差を乗り越えるときには、キャストのタイヤが段差に対して真っ直ぐになっていることを確認してから走行すること。 ※キャストが破損して事故につながるおそれがあります。 
	●濡れた路面など滑りやすい場所の走行は注意すること。
	●片流れ路面でのUターンや走行は、特に速度を落とすこと。 ※介助ブレーキが効かなかったり、転倒・転落するなどケガをするおそれがあります。 


注意

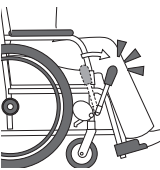 禁 止	●タイヤをもって車輪を操作しない。 ※駐車ブレーキで指をはさむなど、大変危険です。 
 強 制	●車いすを走行する場合は駐車用ブレーキが解除されていることを確認すること。 ※車いすの各部に異常な力がかかり破損のおそれがあります。 

ご使用方法（つづき）


■自走するとき

1. フットプレートに足をのせます。
2. 左右の駐車用ブレーキを解除します。
3. ハンドリムを持って駆動します。

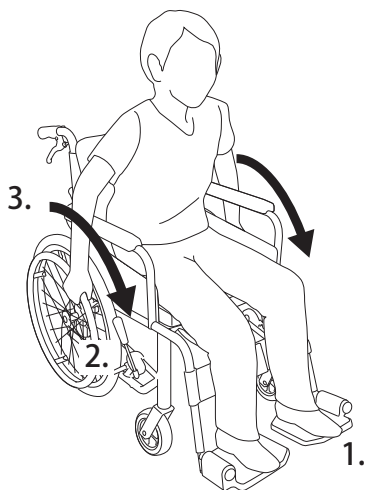

■介助するとき

1. 介助者は使用者の足がフットプレートにのっていることや、シートベルトで体が支えられていることを確認します。
2. 左右の駐車用ブレーキを解除します。
3. 押手を持って進行方向へ車いすを押します。
4. 介助ブレーキを使って速度が出過ぎないように操作します。

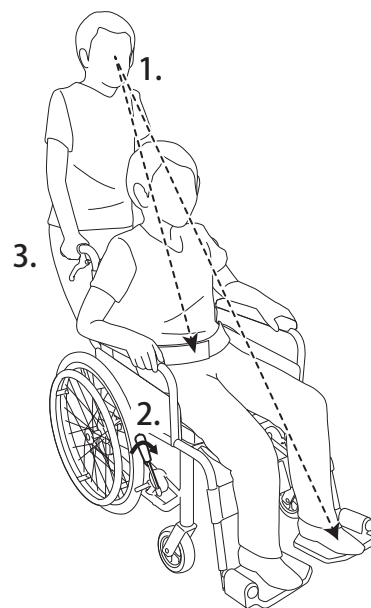


アドバイス

ハンドリムのこぎ始め位置は肘関節角度 120 度が目安です。上図のように円を描くようにこぐと最もこぎやすくなります。

傾いている路面を走行する場合は谷側のハンドリムをやや強めにこぐことで直進できます。

※身体と車いすの仕様により条件は異なります。

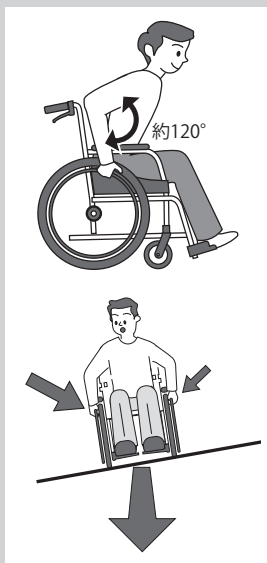

アドバイス

傾いている路面を走行する場合は谷側の押手をやや強めに押すことで直進できます。

坂道を走行する

危険

 禁 止	●急な坂道（勾配5度以上）では使用しない。 
 強 制	●傾斜地、坂道での走行は特に注意すること。 ※車いすが予想外の方へ進む、スピードが出やすいなど大変危険です。できるだけ介助者に支えてもらうようにしてください。

警告

 禁 止	●坂道や傾斜地では駐車しない。 ※滑りやすい路面では駐車用ブレーキをかけても車いすが動く場合があり、危険です。
 強 制	●坂道を下るときは後ろ向きで走行すること。 ※転倒・転落のおそれがあります。 


■上り坂

介助者は身体を少し前に倒して、押し戻されな
いよう、一歩ずつしっかりと押します。



■下り坂

坂を下るときは介助ブレーキを軽く使いながら、
後ろ向きに一歩ずつ下ります。

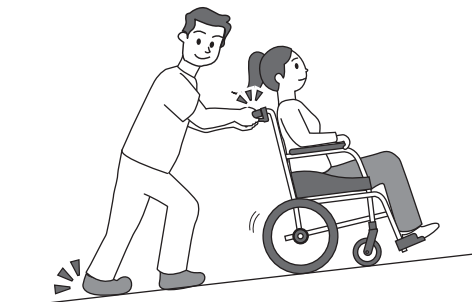


段差を乗り越える

警告



禁 止

● 5cm 以上の段差を乗り越えない。
※後方転倒のおそれがあり、大変危険です。

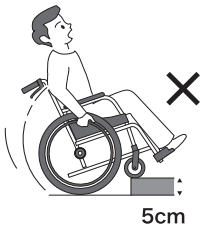


5cm




強 制

● 段差の前では一旦停止すること。
※フレーム及びキャストが損傷するおそれがあります。

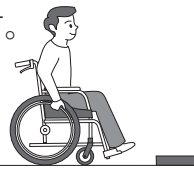


■自走で乗り越える

1. 段差の前で一時停止します。
2. 段差に対してキャストを直角にあてます。

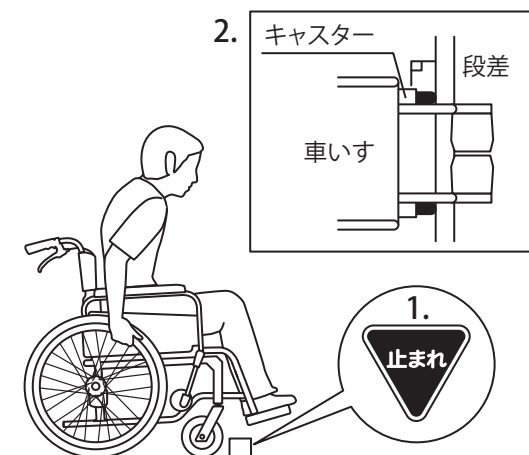


3. 深く座っている状態で身体を前傾させ、ハンドリムを強くこいで、前進します。

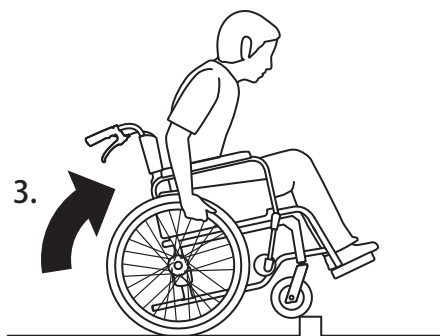


■介助者がいる場合の乗り越え

1. 段差の前で一時停止します。
2. ティッピングレバーを踏みながら、押手を後方へ引き、キャストを上げます。

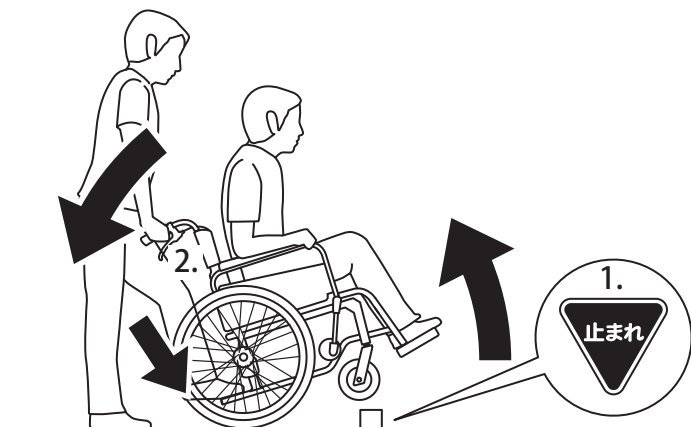

3. キャスタを上げた状態で前進し、段差を乗り越えます。

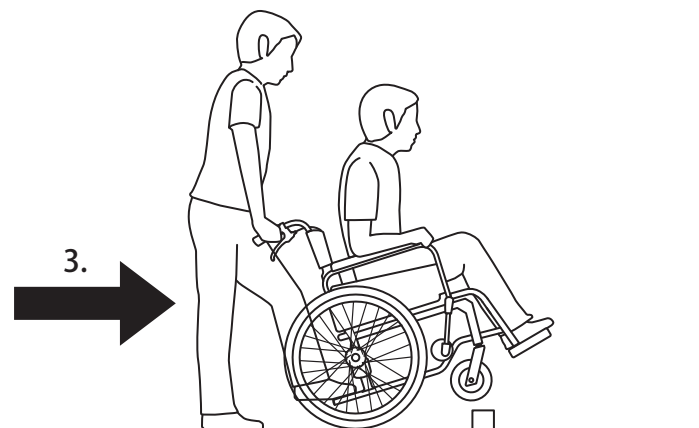

階段を下りる・上がる

危険



強 制

- 車いすを持ち上げる場合、駐車用ブレーキをかけ、固定されているパイプをしっかり支えること。

※転倒・転落のおそれがあり大変危険です。



警告



強 制


- 車いすを持ち上げる場合、使用者を支えたまま、必ず4人以上でフレームを持ち上げること。

※無理して持ち上げると介助者も巻き込んで転倒するおそれがあります。



■階段を上がる

1. 駐車用ブレーキをかけ、左右の車輪をロックします。
2. 固定されているフレームを持ち上げます。

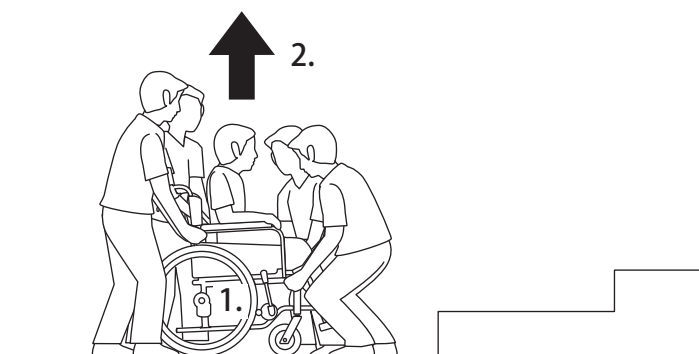


3. 階段にフットプレートが当たらないように注意しながら上ります。




■階段を下りる

1. 駐車用ブレーキをかけ、左右の車輪をロックします。
2. 固定されているフレームを持ち上げます。

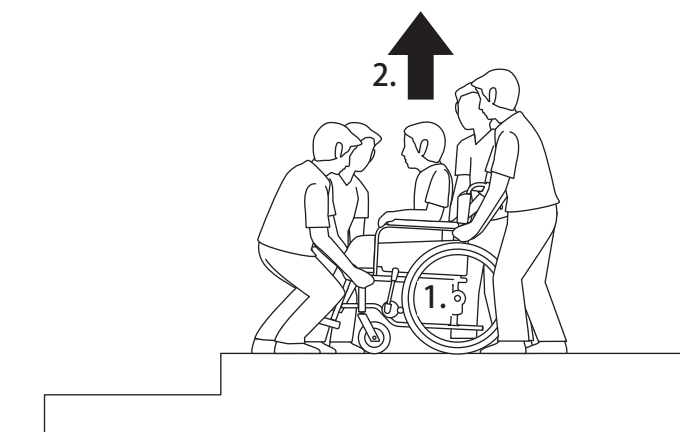

3. 車いすを水平に保った状態で下ります。

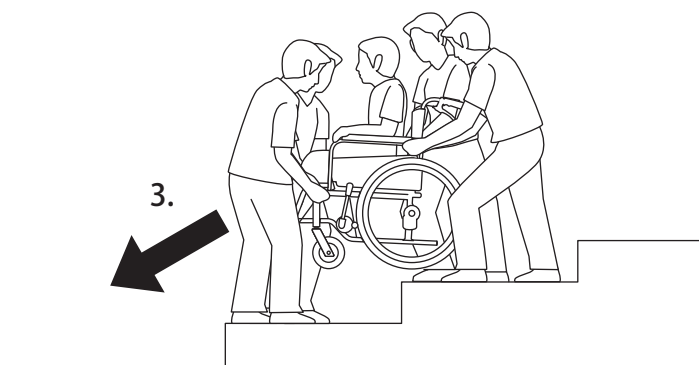

保管方法

警告



禁 止

●下記のようなところに車いすや部品を放置しない。

- ・車道に近いところ
 - ・人通りの多いところ
 - ・湿気の多いところ
 - ・路面に段差や凸凹のあるところ
 - ・海沿いの屋外（潮風の当たるところ）
 - ・雨、風のあたる場所
 - ・ほこりの多い場所
 - ・坂道
 - ・非常口、消火器、消火栓の前
 - ・暑い日や寒い日の戸外
 - ・直射日光の当たる場所（車内も含む）
 - ・子供がいたずらをするおそれのある場所
 - ・ストーブなど火気を使用し高温になる場所
- ※事故やサビ・破損の原因になります。

車いすは、お手入れ後、安全な場所に保管してください。また、保管の際は必ず車いすを立てた状態で保管してください。横倒しの状態で保管すると車軸やフレームに破損が生じるおそれがあります。

■長期保管について

長期間未使用の状態で保管すると、チューブ・虫ゴム・タイヤなどのゴム製品が劣化しているおそれがあります。使用前点検を実施して、必要があれば部品を交換してから使用してください。

各部の調整方法

フットサポートの高さを調整する

フットサポートを適切な高さに調整することで、使用者の座位が安定したり、体圧分散効果があります。



アドバイス

ケガ防止の為、作業するときは薄手の手袋を着用してください。

注意




禁止

●フットプレートと地面との隙間が5cm以下になるような調整はしない。


※フットプレートが障害物にぶつかり、破損するおそれがあります。



1. 駐車用ブレーキをかけ、左右の車輪をロックします。

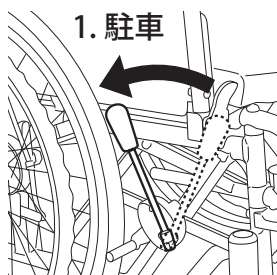


2. 片側の手でフットサポートを支えながら、もう一方の手で付属の工具を使って、フットサポート先端のボルトをゆっくりゆるめます。
(半～1周ほど回すとフットサポートが動きます。ゆるめすぎると固定しにくくなります。)
3. 適当な高さにあわせ、ボルトを締めます。

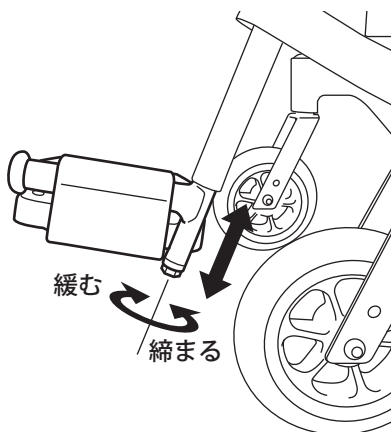


アドバイス

太ももが床面と水平になる高さを目安に調整してください。

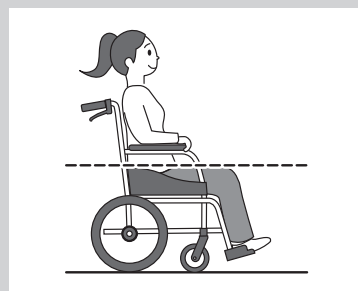

アドバイス

フットプレートが固くて動かない場合は、下図のように車いすを倒し、木槌等でボルト頭を叩いてください。

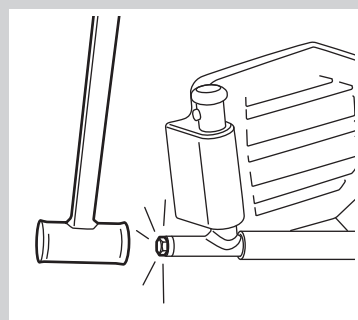

各部の調整方法（つづき）

シートの張りを調整する


バックサポート及びシートは適合調整シート（以下ベースシート）を採用しており、ベルトの張り加減を使用者に合わせることができます。適正な姿勢を保てるようにベースシートを調整してください。

注意


 禁 止	●ベースシートは、強く張りすぎない。 ※シートパイプが収まらなくなる場合があります。 ※フレームが変形するおそれがあります。
	●ベースシートは、極端に緩めすぎない。 ※フレームと身体の干渉や姿勢が不安定になるおそれがあります。

 強 制	●使用者が車いすに乗っている状態で調整する場合は1箇所ずつ行うこと。 ※シートが外れて転倒・転落するおそれがあります。
--	--


1. 駐車用ブレーキをかけ、左右の車輪をロックします。

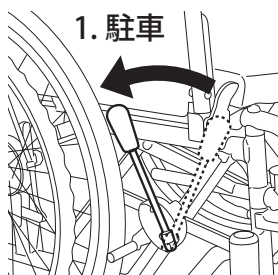


2. クッションを取り外します。

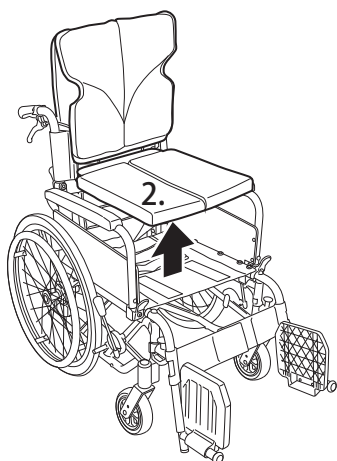

3. ベースシートの調整ベルトを使用者の体型に合わせて調整します。

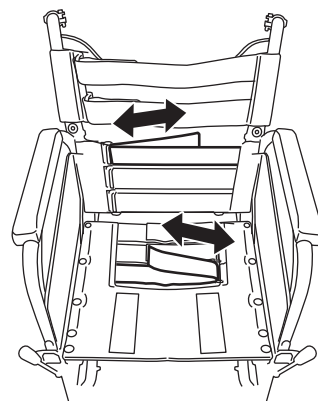

4. クッションを元に戻します。

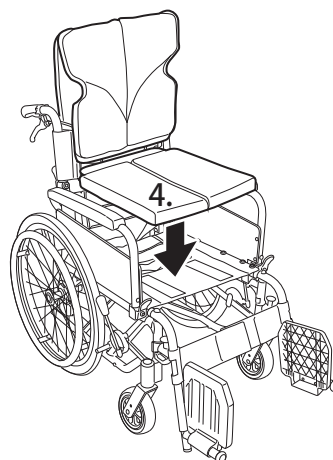

お手入れの仕方

定期点検

安全に使用して頂くためにご自身または取扱店で定期的に点検をして頂きますようお願いいたします。
長期間使用されなかった場合もリスト内の点検をしてください。点検後、必要に応じて部品交換または各部調整をしてからご使用ください。

警告



禁 止

●ブレーキ部品には絶対に注油しない。
※ブレーキ力が低下し、重大な事故につながるおそれがあります。

点検項目	点検内容	点検者 年 月 日	点検者 年 月 日	点検者 年 月 日
装着品の確認	フット・レッグサポートは装着されていますか			
	座クッション、背クッションは装着されていますか			
	レッグサポートは装着されていますか			
車輪	空気圧は 460kPa(22in)、490kpa (20in)、360kPa(16in) ですか			
	緩み、損傷、摩耗はありませんか			
	タイヤバルブセットに緩み、損傷はありませんか			
	キズ、ひび割れはありませんか			
	異物が刺さっていませんか			
	スムーズに回転しますか			
キャスト	しっかり固定されていますか			
	キャスト車輪はしっかり固定されていますか			
	キズ、ひび割れはありませんか			
	異物が刺さっていませんか			
	スムーズに回転しますか			
駐車用 ブレーキ	車輪はしっかりと止まりますか			
	取付部が緩んでいませんか			
	効きに左右差はありませんか			
介助 ブレーキ	車輪はしっかりと止まりますか			
	介助ブレーキの取付部が緩んでいませんか			
	効きに左右差はありませんか			
	ブレーキワイヤに切れ、ほつれはありませんか			
	ブレーキワイヤにさびはありませんか			
アーム サポート	肘当てにガタはありませんか			
	肘当てのネジは緩んでいませんか			
	アームサポートフレームにガタはありませんか			
	スムーズに操作できますか			
	肘当てにキズや亀裂はありませんか			
フット・ レッグ サポート	フットサポートはしっかり固定されていますか			
	フットプレートが自重で落下しませんか			
	固定は確実にできますか			
	スムーズに操作できますか			
	フットプレートにキズや割れはありませんか			
シート	著しいたるみはありませんか			
	ネジは緩んでいませんか			
	やぶれ・ほつれはありませんか			
全体	各部にガタつきはありませんか			
	ボルト・ナットが緩んでいませんか			
	押手は背折れ金具のスライドピンでしっかり固定できていますか			
	異音はありませんか			
	両車輪と両キャストの取り付け位置はあっていますか			
	両車輪と両キャストは全て地面に接地していますか			
	まっすぐ走行しますか			
	折りたたみはスムーズに行えますか			

お手入れの仕方（つづき）

清掃する

■安全に使用して頂くためにご自身または取扱店で定期的に清掃してください。

注意

 禁 止	●中性洗剤以外を使用しない。 ※変質・変色・傷みの原因となります。 ●たわし、みがき粉および硬いブラシは使用しない。 ※傷みの原因となります。	 禁 止	●熱湯やオゾンで洗淨しない。 ※故障・変質・変色の原因となります。
---	---	--	--

■金属部品（主フレーム）

主フレームなどの金属部やスポークは、乾いた布でよく汚れを落として拭き取ってください。凸凹のある部分の汚れ、頑固にこびり着いた汚れは、市販の中性洗剤を用いてください。

■樹脂（プラスチック）部品

樹脂部品には、市販の中性洗剤をご使用ください。

■クッション、シート類

シート部分をぬるま湯で拭き、きれいな水で仕上げ拭きを行い、乾かしてください。

面ファスナーに糸くず、汚れなどが付いたときは取除いてください。取除かないと、接着力が弱まり、衝撃を受けた際に転落事故の原因となります。

＜汚れがひどいとき＞

- ・汚れがとれにくい場合は、中性洗剤を用いてください。その後、乾燥させてください。
- ・しみは、スポンジまたは柔らかいブラシを用いて取除いてください。
- ・洗う場合は、ぬるま湯で手洗いしてください。洗濯機、乾燥機の使用はお避けください。

お手入れの仕方（つづき）

故障かな？と思ったら

車いすを使用されていて“おかしいな”と思ったら下表をご確認ください。

表以外の異常が発生した場合はそれ以上使用せず、取扱店にご相談ください。


車いすを使用する前に各部の安全確認を行ってください。

症状	確認事項	対応
車輪がスムーズに回転しない	車輪の回転中心に髪の毛などが絡まっていますか？あるいはシートベルトやワイヤが車輪に干渉していませんか？	絡まっている場合や干渉している部品がある場合は除去してください。
車輪あたりから異音がする	車輪の回転中心に髪の毛などが絡まっていますか？あるいはシートベルトやワイヤが車輪に干渉していませんか？	絡まっている場合や干渉している部品がある場合は除去してください。
駐車用ブレーキが効かない	空気圧は 460kPa(22in)、490kpa(20in)、360kPa(16in)(指で押すと指が押し戻される程度の強さ) になっていますか？	空気が少ない場合は空気入れで空気を入れてください。
タイヤの空気がすぐ抜ける	バルブを一度取り外し、虫ゴムを確認してください。ゴムは劣化していませんか？	劣化している場合は虫ゴムの交換が必要です。取扱店にご相談ください。
	虫ゴムに問題がない場合でも、1 日程度放置しただけで空気は抜けていますか？	空気が抜ける場合はチューブが破損している可能性があります。取扱店にご相談ください。
押手が固定されない。	背折れ金具にシートを挟んでいますか？	シートを挟んでいる場合は、かみこんでいる箇所を除去してください。
介助ブレーキの効きが甘い	介助ブレーキレバーを握った際に押手グリップに介助ブレーキレバーが接触しませんか。	ワイヤがのびている可能性があります。取扱店にご相談ください。
車いすがひらかない	ワイヤ・シートベルト・張り調整ベルトがフレームや背折れレバー等に引っかかっていますか。	引っかかりを解消してください。


- 1) 当社は「英式バルブ」のタイヤを採用している為、単体の圧力ゲージでもタイヤ・チューブの正確な空気圧測定はできません。空気圧は目安になります。
- 2) 車いす各部の組み付けに使われているネジは、JIS B 0205-1 ～ 4 及び JIS B 0209-1 ～ 5 に規定する一般用メートルネジです。

〈部品交換の目安〉


シート

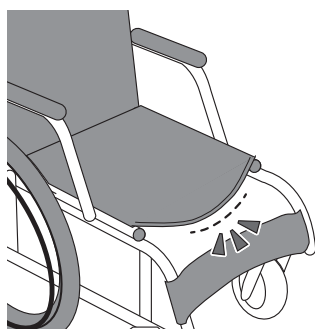

キャスト

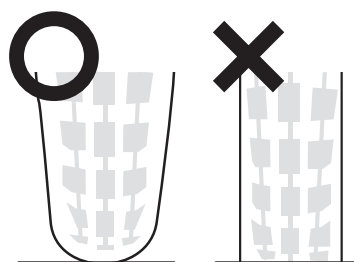

車輪

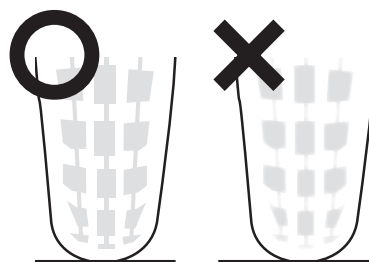

仕様

各部寸法

※記載の寸法や重量は設計値であり、実際の車体とは多少誤差がある場合があります。
(cm)

品名・名称	H（高床）	M（中床）	LO（低床）	SL（超低床）
座幅	38・40・42・45			
前座高	45.5	43	40.5	38
後座高	44	(22・20 インチ) 41 (16 インチ) 40	(22・20 インチ) 38.5 (16 インチ) 37.5	(22・20 インチ) 36.5 (16 インチ) 34.5
フットレグサポート・シート間距離	スイングアウト仕様：32～ エレベータリング&スイングイン・アウト仕様：34～			
シート奥行	40			
バックサポート高	40			
アームサポート高	23.5			
全高	88.5	86	83.5	81
折りたたみ時	69.5	(22・20 インチ) 66.5 (16 インチ) 66	(22・20 インチ) 64 (16 インチ) 63.5	(20 インチ) 61.5 (16 インチ) 61
全幅	(22・20 インチ) 58・60・62・65		(16 インチ) 55・57・59・62	
折りたたみ時	(22・20 インチ) 31		(16 インチ) 28	
全長	スイングアウト仕様 (22 インチ) 104 (20 インチ) 103 (16 インチ) 101 エレベータリング&スイングイン・アウト仕様 (22 インチ) 112 (20 インチ) 109 (16 インチ) 107			
重量 (kg)	スイングアウト仕様 22 インチ 16.4 (座幅 45cm のとき :17.4) 20 インチ 15.6 16 インチ 14.5 (座幅 45cm のとき :15.5) エレベータリング&スイングイン・アウト仕様 (22 インチ) 18.1 (20 インチ) 17.5 (16 インチ) 16.0			
使用者最大体重	100kg			

各部仕様

品名・名称	標準仕様・規格		
	KA822	KA820	KA816
フレーム	折りたたみ式 背折れ有り		
後輪	22in エアーバンド式車輪 _ 波型 樹脂	20in エアーバンド式車輪 _ 波型 樹脂	16in エアーバンド式車輪
タイヤ	22 × 3/8 エアータイヤ	20 × 1 3/8 エアータイヤ	16 × 1.50 エアータイヤ
チューブ	22 × 1 3/8 英式バルブ	20 × 1 3/8 英式バルブ	16 × 1.50 英式バルブ
ハンドリム	22in 波型 黒色	20 in 波型 黒色	—
キャスタ	(H・M) 7in ニューソフトキャスタ 2 穴ベアリング式 (LO・SL) 6in ニューソフトキャスタ 2 穴ベアリング式		
キャスタ輪	(H・M) 7in ニューソフトキャスタ車輪 (LO・SL) 6in ニューソフトキャスタ車輪		
ヨーク	2 穴 6/7in ベアリング式		
バックサポート	背ベースシート : 適合調整シート (黒) 背クッション : 着脱式 (9 色選択)		
シート	座ベースシート : 適合調整シート (黒) 座クッション : 3cm 厚 (9 色選択) 単層 中割れ式		
アームサポート	跳ね上げ式		
肘当て	A. スタンダードパッド		
フット・レグサポート	スイングイン・アウト式 / エレベータリング&スイングイン・アウト式		
フットサポート	C-2. 黒色		
フットプレート	c. 黒色		
レグサポート	(スイングイン・アウト) 中央分離式 / (エレベータリング&スイングイン・アウト) ふくらはぎパッド		
駐車ブレーキ	E. エッグストップ		
にぎり	黒色		
制動ブレーキ	バンド式		
ハンドグリップ	7. ネジ止め式 黒色		
SG マーク	あり [手動車いす (使用者最大体重 100kg)]		

廃棄する場合

製品を廃棄する場合は、各自治体の取決めに従ってください。

連絡先

■本社

〒 651-2411 兵庫県神戸市西区上新地 3-9-1 TEL078-969-2800

■東京サービスセンター

〒 110-0013 東京都台東区入谷 1-8-3 TEL03-3874-3511

■名古屋サービスセンター

〒 487-0027 愛知県春日井市松本町 1-3-11 TEL0568-52-4800

■本店サービスセンター

〒 651-2411 兵庫県神戸市西区上新地 3-9-1 TEL078-969-2820

■福岡サービスセンター

〒 819-0055 福岡県福岡市西区生の松原 1-18-3 TEL092-882-4722

- 修理・お手入れ・お取扱いなど、本書を読んでもわからないときは、製品の使用を中止し、お買い上げいただいた販売店へお問い合わせください。
- 転居や贈答品などでお困りの場合は、製品名・品番をご確認の上、上記連絡先へご相談ください。
- 本書に記載の意匠、仕様および部品は性能向上の為に一部予告なく変更することがあります。

保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で、お買い上げ日より1年以内に故障した場合は無償修理または交換いたします。
(下記記載の消耗部品および交換部品は含みません。)
 - ・キャスト ・シート類 ・ワイヤ
 - ・フットプレート ・バンドブレーキカバー ・肘当て
 - ・車輪 (タイヤ、チューブ、虫ゴムなど)
- 無償保証期間内に故障して修理を受ける場合は、お買い上げ頂いた販売店へご連絡ください。
- 無償保証期間内でも次の場合には保証適用除外となります。
 - イ) ご使用による消耗および取扱不注意による破損
例: タイヤの摩耗およびパンク、ワイヤ、シートの破損等
 - ロ) 地震、台風、水害などの天災および事故、火災による焼失・破損
 - ハ) お取扱の不注意、操作未熟ならびに故意または過失など誤って使用されたことによる破損
 - ニ) 保全上の不備および弊社以外で行った修理や改造等による破損
 - ホ) 弊社が指定する純正部品以外のパーツ等の使用により発生した破損
 - ヘ) 一般に車いすが走行しない場所、または特殊な状態での使用による破損
 - ト) 製品本来の使用目的にそぐわない使用による故障および破損
 - チ) 日本国外でご使用の場合
 - リ) 保証書の提示がない場合
- 保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
- 補修用性能部品は、製造打ち切り後5年保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 保証書にご記入頂いた個人情報、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検の為に記載内容を利用させて頂く場合がございますので、ご了承ください。

保証書

製品名 KA800 シリーズ

品番 _____

お客様名 _____ 様

ご住所 〒 _____

TEL () -

販売店名 _____ ⑩

ご住所 〒 _____

TEL () -

お買い上げ日 年 月 日
(保証期間は上記より1年間)

製造販売元 株式会社カワムラサイクル
〒651-2411 兵庫県神戸市西区上新地 3-9-1 TEL078-969-2800

一度使用された製品は、原則としてお取替えできません。
お問い合わせは、お買い上げいただいた販売店へお申し付けください。