

車いす総合カタログ

Vol.22-2

30th
since 1995



カワムラサイクル

撮影地：ノエビアスタジアム神戸

KOBE JAPAN

神戸は南に瀬戸内海、北は六甲山系に隣接し、豊かな自然に恵まれた穏やかな街です。また、古くからヨーロッパ航路の玄関口として多様な文化と交わり、国際色豊かな異国情緒漂う魅力的な都市として発展してきました。

1995年、わたしたちカワムラサイクルはこの地で生まれました。

至便な都市機能と豊かな自然が調和する神戸の街のように、車いすとそれに関わる方々や地域を繋ぎ、すべてが融和した豊かな暮らしのお手伝いをしたい——。社員一同、その思いを胸に今日も車いすと向き合っています。



INDEX

標準 モジュール	NEW STAYER+ 009 STAYER 011 BACKS 013 KR801N 014	KV 015 KA800 017 寸法表 019	008
Modernシリーズ	Modern シリーズの特長 022 NEW Rich-style 023 A-style 025 B-style 027	C-style 029 サユレン 031 寸法表 033	020
次世代型標準	WAVIT シリーズの特長 035 WAVITRoo 039 WAVITRoo+ 041 WAVIT 043	WAVIT+ 045 寸法表 047	034
軽量 六輪	ふわりす 049 ふわりす + 051 BML 053 低床こまわりくん 054	寸法表 055 ピックアップオプション 酸素ボンベ架台(2WAY用) ... 056	048
リクライニング	くるーん 059 RR52 061 RR53 062 RR60/RR70 063	クリオネット 064 KX 065 KXL 066 KPF 067 寸法表 069	058
子供用 簡易	KAC 071 KA6 072 RV 073 PC & PW 075	Pit 076 寸法表 077	070
シャワー用	KS2 079 KS3 079 KS4 080 KS7 080	KS10 081 KSC-1/ST 082 KSC-2/ST 082 KS11-PF/ST 083 KS12 084 寸法表 085	078
オーダーシステム	2週間オーダー 087 カラーオーダー 089		086
電動	KE45 091 KE43 092 ピックアップオプション うでささえ 093		090
歩行補助具	NEW Pastel ... 095 KW40 096 KW41 096 C'arco 096 KW15 097	KW16 097 KW17 097 C2021 098 シンフォニー SP ... 098 サニーウォーカー SP ... 097 アルト 098 ハーモニー AL 098 BP2 099 S11-M 100 カーボン4点駆動式モルタイプ ... 100 クーパー 100 ピックアップオプション 転倒防止金具 (モジュール式) ... 101	094
オプション&関連パーツ	クッション 103 ボディサポート 107 介助サポート 111	車いす便利品 115 車いす部品 117	102
Corporate Social Responsibility 121 会社概要 122			

商品開発体制

Product Development System

福祉用具は日用品として「使い勝手」が大切であり、
マーケットニーズを的確に製品企画に反映させる必要があります。
カワムラサイクルではスピーディなサンプル生産とモニタリングを繰り返し、
より良い製品を生み出す開発体制を整えています。
このような開発体制の下、安全性を確保しながらも、
新しい技術を採用して付加価値の高い商品開発を目指しています。

ACTION

実使用時にわかった点や良かった点をお客様に
ヒアリングし、社内で共有します。

PLAN

お客様からの声やニーズを基に仕様を検討します。
乗り心地や使いやすさについても研究し、なぜその寸
法が必要なのか、なぜその形状でないとダメなのかを
詳細に決定していきます。



CHECK

福祉用具のJIS規格はもちろん、
更に高品質な車いすをお届けする
ために厳しい社内基準を整え、
1台ずついいに検査をして
出荷します。

Do

企画書の要求仕様をカタチに
していきます。何度かサンプル
を製作し、モニタリング評価を
通じて改良を重ねていきます。

品質管理

Quality Control

カフムラサイクルは、安全・安心を目指し、徹底した品質管理の下、
企画から生産まで一貫した“ものづくり”を行います。

材料・部品の品質

金属・布・樹脂の材質分析を行い、環境と品質を確保します。

受入検査 ▶ 材料仕入れの段階で規格外のもの、指定仕様以外のものを
受け入れないよう厳重に検査しております。


履歴管理 ▶ 受入から組立、出荷までロット管理しております。



金属成分分析機



X線分析機

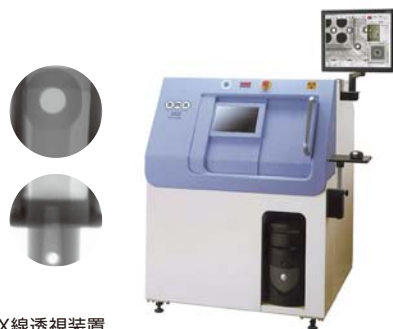

X線透視装置



硬度計



万能試験機



塩水噴霧試験機

安全性試験

JIS規格(JIST9201:2016)に基づいた社内試験設備や
第三者試験機関にて「走行耐久性試験」や「車いす落下試験」
などを日常的に実施し、安全性・耐久性の維持向上を図って
おります。

JIS規格にない形式の車いすについても社内基準を設け
安全性試験を行い、結果に基づき、仕様の見直しや新製品の
開発を行っています。

走行耐久性試験



車いす落下試験



当社社内試験設備



キャスト耐荷重試験



静的安定性試験



車いす機能

アイコン解説

形式



背固定式

通常の左右からの折りたたみは可能。

(主フレーム一体式)




背折れ式

(背折れ金具を使用)
ワンタッチで背部の折りたたみができます。車いす折りたたみ時にコンパクトになり、自動車のトランクなどへの収納がしやすくなります。

バックサポート・シート

○適合調整シート

ご利用の方の身体に合わせて
シートの張り調整ができます。
＜面ファスナー調整式＞

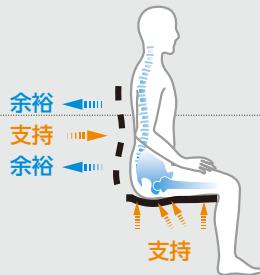

○シートクッション類

主に適合調整シート仕様と
組合せて使用します。
姿勢保持力と体の安定を図ります。



調整なしシート

車いす用シート生地をフレームにネジ固定した標準的な仕様です。



適合調整シート (背のみ)

背中の形状に合わせて、横方向の張り調整ができます。背部への圧迫の軽減を図ります。

姿勢保持



背・座クッション(着脱式)

簡単に着脱できます。
※背ポケット付。



アンカークッション

前方が高く、臀部が低いクッションです。座骨が前にズれるのを防ぎます。

前ズレ防止 姿勢保持

アームサポート(肘掛け)



固定式

主フレーム一体式



跳ね上げ式

後方に跳ね上げ、肘掛け部分をオープンにできます。ベッドサイドなどからの移乗がスムーズに行えます。

フット・レッグサポート(脚部)

フットプレートは標準
＜側方跳ね上げ式＞



固定式

主フレーム一体式



スイングアウト

脚部を開くことができます。
※着脱可能

キャスタ(前輪)



ニューソフトキャスタ

幅広でグリップ力と
耐久性に優れています。



ソフトキャスタ

タイヤが柔らかく、路面からの
衝撃吸収性に優れています。

車輪(後輪)

クッション性最良の空気入り仕様。クッション性を維持し、
パンクの心配がないノーパンク仕様などがあります。



エアタイヤ

タイヤ&チューブ



ソフトタイヤ (ノーパンク)

従来のハイポリマータイヤ(ノーパンク)と比較し、静止力30%UP(当社比)
(タイヤ&ポリウレタン製チューブレス)

モジュール

ご利用に合わせた調整・調節が可能です。



車輪サイズ組換可

車輪のサイズと取付位置により、自走用にも介助用にも対応します。



座面高さ調節

ご利用状況に合わせた車輪の組み換えにより、座面の高さを調節できます。

介助用ブレーキ／ 駐車用ブレーキ(連動)／ 駐車用ブレーキ



バンド式

ブレーキシューをドラムの外側から内側に押付け制動するブレーキ。



ドラム式

ブレーキシューをドラムの内側から外側に押付け制動するブレーキ。

赤枠で囲まれたアイコンは基本仕様となります

※車種別掲載ページのアイコン表記はいたしません。



ぴったりフィット

ティルトとリクライニング機能一体型。“倒す・起こす”の動作を繰り返しても、お尻がずれにくく安定した座位が保てます。



ティルト

姿勢を維持したまま、全体として角度が変えられ座圧を変更することができます。



リクライニング

座面は維持したまま、背部のみ独立して角度が変えられます。



フルリクライニング

座面は維持したまま、背部・脚部の角度が変えられます。

※背部・脚部:(独立型)
(連動型)2タイプ



適合調整シート(背・座)

背中とお尻の形状に合わせて、横方向の張り調整ができます。背部への圧迫の軽減を図ります。



左右独立適合調整シート

左右バランスを変えられます。背中の形状に合わせて、横方向の張り調整ができます。背部への圧迫の軽減を図ります。

姿勢保持

姿勢保持



低反発 アンカークッション

低反発アンカーは、低反発ウレタンとの二層式。座位保持をサポートします。



アンカーパッド

座骨の前ズレを防ぐ形状。クッションの下に設置使用します。



体幹支持パッド

左右独立適合調整シートに取り付け使用します。体の“横倒れ”を抑えることができます。

前ズレ防止 姿勢保持

前ズレ防止
※面ファスナー調整式

姿勢保持
※面ファスナー調整式



落とし込み式

座面まで下げることができます。サイドからの移乗をスムーズに行えます。



高さ調節式

段階的な調節ができます。



着脱式

取り付け・取り外しができます。



デスク型

机・テーブルなどに納まりやすい形状。



スイングイン・アウト

脚部の開・閉ができます。
※着脱可能



エレベーター

脚部角度が調節できます。膝を曲げられない方に適しています。
※着脱可能



エレベーター& スイングアウト

脚部角度が調節できます。また、脚部を開くこともできます。
※着脱可能



エレベーター& スイングイン・アウト

脚部角度が調節できます。また、脚部の開・閉ができます。
※着脱可能



アブソレックスキャスタ (サスペンション付)

車軸にサスペンションを内蔵しています。衝撃吸収性に優れています。



ハイポリマータイヤ (ノーパンク)

(一体成型ポリウレタン製)



ソリッドタイヤ (ノーパンク)

(一体成型ゴム製)



手押しハンドル 高さ調節

介助される方に合わせた調節ができます。



シート奥行調節

ご利用者に合わせ座シート奥行調節ができます。

《各部の調整について》

※調整については専門業者に作業をお願いしてください。
※調整の際は、ネジがしっかり締まっているか、ご確認ください。
※1ヶ月に1回、定期的な点検を行ってください。



駐車用ブレーキ 連動式

駐車用ブレーキが連動して作動する簡易型介助用ブレーキです。



足踏み ブレーキ

足で踏むことにより駐車用ブレーキをかけることができます。



伸縮式 駐車用ブレーキ

駐車用ブレーキレバーを引っ張ると長さが延長され、軽い力で操作できます。

その他



転倒防止金具


介助される方も安心。後方転倒を防ぎます。
※着脱式、キャスタなし・キャスタ付があります。



パチート 調節機構

パチート調節機構
工具レスでフットサポートの位置を調節できます。

標準・モジュール シリーズチャート

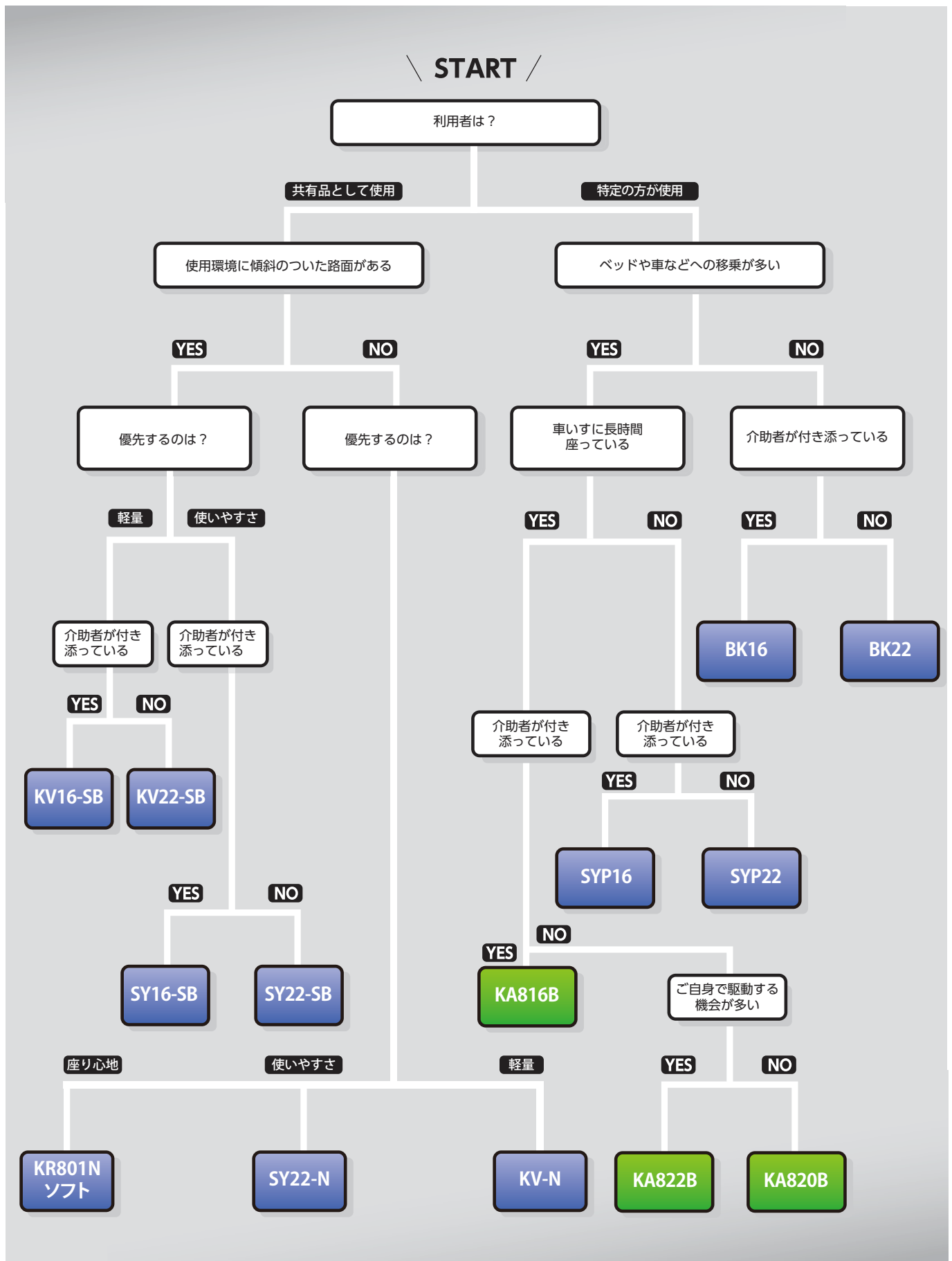

標準

“Standard Type”
Wheelchair

モジュール

“Module” Wheelchair

標準タイプはシンプル&使いやすさにこだわりました。

モジュールタイプはサイズ・バリエーションにこだわりました。

NEW STAYER+	009
STAYER	011
BACKS	013
KR801N	014
KV	015
KA800	017
寸法表	019



シート生地は次亜塩素酸ナトリウムやアルコールによる
お手入れが可能です。

ステイヤープラス

補装具
レディ
メイド式

STAYER+シリーズ

自走用
(介助兼用) **22** 車輪 **6** キャスタ
インチ×インチ




SYP22-40SB
シート:No.111

●調整なしシート

参考価格 **¥121,500** 非課税

NEW SYP22-40(42)SB シート色:No.111 **中床** (14.3kg)

TAIS:00160-000339

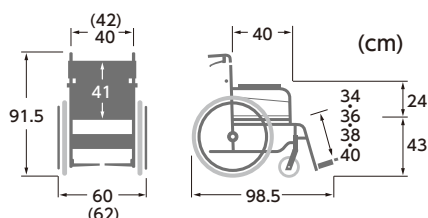

*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

SYP22-40SB
シート:No.112




調整なしベースシート+
カバーシート(背・座)

●調整なしベースシート+カバーシート 参考価格 **¥126,500** 非課税

NEW SYP22-40(42)SB シート色:No.112 **中床** (14.3kg)

TAIS:00160-000340

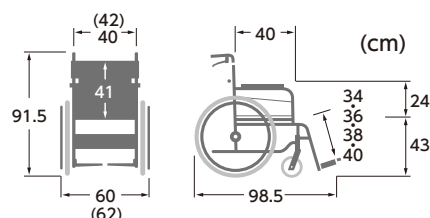

*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。



STAYER  手動車いす 100kg
使用者最大体重(積載物含む)

標準

Modern
シリーズ

次世代型
標準

軽量
六輪

リクライ
ニング

子供用
簡易

シャワー用

オーダー
システム

電動

歩行訓練
歩行補助具

オプション&
関連パーツ


介助用 **16** 車輪 **6** キャスタ
インチ×インチ



SYP16-40SB
シート:No.111

●調整なしシート 参考価格 **¥121,500** 非課税

NEW SYP16-40(42)SB シート色:No.111 中床 (13.2kg)
TAIS:00160-000341

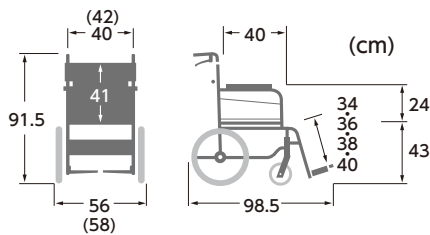

*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。




SYP16-40SB
シート:No.112



●調整なしベースシート+カバーシート 参考価格 **¥126,500** 非課税

NEW SYP16-40(42)SB シート色:No.112 中床 (13.2kg)
TAIS:00160-000342

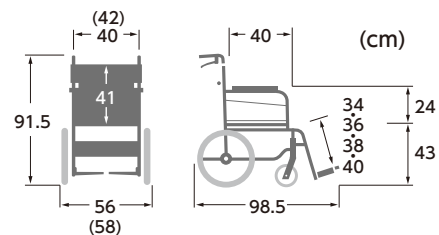

*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

ご注文の際ご指定ください。



●シート幅 **40・42cm** よりお選びいただけます。
※シート幅は、座った状態でのお尻の幅にプラス3〜5cm、
介助者の手が入る程度が目安です。



●シートカラー **2色** より
お選びいただけます。

No.111



ミント
(ポリエステル)

No.112



フジレザー
(ビニールレザー)

次亜塩素酸ナトリウムやアルコールなどの
お手入れが可能なシートを備えたアルミ製車いす

ステイヤー

補装具
レディ
メイド式

STAYERシリーズ

自走用 22^{車輪} インチ×6^{キャスト} インチ



SY22-40N
シート:No.111


●調整なしシート

参考価格 **¥75,000** 非課税

SY22-40(42)N

中床 (12.2kg)

TAIS:00160-000330

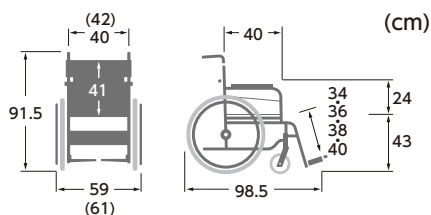

*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。



トリプルセット

参考価格 **¥101,000** 非課税

SY22-40(42)N-TS

自走用 22^{車輪} インチ×6^{キャスト} インチ



SY22-42N-SH
シート:No.112


●調整なしシート

参考価格 **¥75,000** 非課税

SY22-42N-SH

高床 (12.2kg)

TAIS:00160-000331

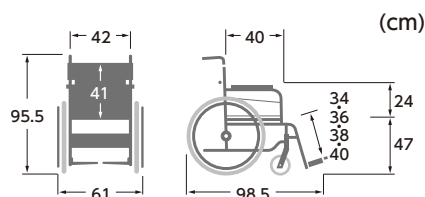

*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。



トリプルセット

参考価格 **¥101,000** 非課税

SY22-42N-SH-TS



トリプルセット (-TS)

ご依頼の多いオプションを予め取付けた
トリプルセットもご用意しています。

※ガートル棒はセット内容に含まれません。

※右側・左側をご指定ください。(指定がなければガートル止め金具は左側、
酸素ボンベ架台は右側へ取り付けとなります。)

ガートル止め金具
〈後ろ止め用〉



酸素ボンベ架台
〈2WAY用〉



(φ100mm以下用/
φ140mm以下用)

ハイパー
マー
(ノーパンク)

STAYER

手動車いす 100kg
使用者最大体重(積載物含む)

標準

Modern
シリーズ次世代型
標準軽量
六輪リクライ
ニング子供用
簡易

シャワー用

オーダー
システム

電動

歩行訓練
歩行補助具オプション&
関連パーツ自走用
(介助兼用) **22** 車輪 **6** キャスタ
インチ×インチ

背折れ式

ドラム式



シート:No.111


No.112

調整なしベースシート+
カバーシート(背・座)SY22-40SB
シート:No.112●調整なしシート 参考価格 **¥85,000** 非課税**SY22-40(42)SB** シート色:No.111 **中床** (13.2kg)

TAIS:00160-000326

●調整なしベースシート+カバーシート 参考価格 **¥90,000** 非課税**SY22-40(42)SB** シート色:No.112 **中床** (13.2kg)

TAIS:00160-000327

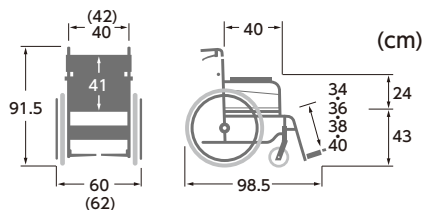

*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。



トリプルセット

参考価格 **¥111,000** 非課税**SY22-40(42)SB-TS** シート色:No.111参考価格 **¥118,000** 非課税**SY22-40(42)SB-TS** シート色:No.112

※トリプルセットの内容については、P.011をご覧ください。

介助用 **16** 車輪 **6** キャスタ
インチ×インチ

背折れ式

ドラム式




シート:No.112

SY16-40SB
シート:No.111●調整なしシート 参考価格 **¥85,000** 非課税**SY16-40(42)SB** シート色:No.111 **中床** (12.1kg)

TAIS:00160-000329

●調整なしベースシート+カバーシート 参考価格 **¥90,000** 非課税**SY16-40(42)SB** シート色:No.112 **中床** (12.1kg)

TAIS:00160-000328

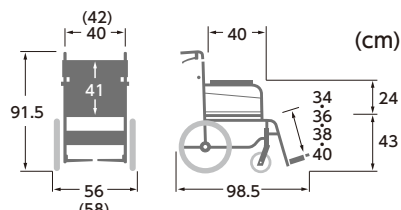

*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。



トリプルセット

参考価格 **¥111,000** 非課税**SY16-40(42)SB-TS** シート色:No.111参考価格 **¥118,000** 非課税**SY16-40(42)SB-TS** シート色:No.112

※トリプルセットの内容については、P.011をご覧ください。

ご注文の際ご指定ください。

●シート幅 **40・42cm** よりお選びいただけます。※シート幅は、座った状態でのお尻の幅にプラス3~5cm、
介助者の手が入る程度が目安です。

※SY22-42N-SHはシート幅42cmのみとなります。

※カバーシート仕様は、No.112フジレザーのみとなります。

●シートカラー **2色** より
お選びいただけます。

No.111

No.112

ミント
(ポリエステル)フジレザー
(ビニールレザー)

シンプルで使いやすく、背張り調整可能な車いす



バックス
補装具
レディ
メイド式

BACKSシリーズ

BACKS

手動車いす 100kg
使用者最大体重 (積載物含む)

自走用
(介助兼用) **22** 車輪
インチ× **6** キャスタ
インチ




BK22-40SB
シート:No.82

参考価格 **¥98,000** 非課税

BK22-40SB

中床 (13.8kg)

TAIS:00160-000337

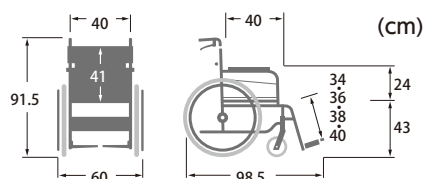

*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

介助用 **16** 車輪
インチ× **6** キャスタ
インチ




BK16-40SB
シート:No.82

参考価格 **¥98,000** 非課税

BK16-40SB

中床 (12.8kg)

TAIS:00160-000338

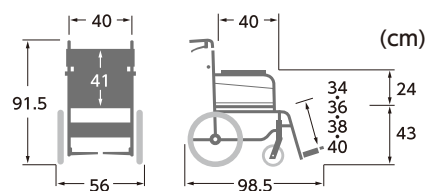

*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

1
color



No.82
チャコールグレー
(ポリエステル)

背張り調整



病院・施設で定番のスチール製車いす

補装具
レディ
メイド式

KR801N

JIS マーク
取得機種



手動車いす 100kg
使用者最大体重(積載物含む)

標準

Modern
シリーズ

次世代型
標準

軽量
六輪

リクライ
ニング

子供用
簡易

シャワー用

オーダー
システム

電動

歩行訓練
歩行補助具

オプション&
関連パーツ

自走用 **24** インチ車輪 × **7** インチキャスト



KR801Nソフト
シート:No.91

おすすめ
オプション

延長ブレーキ棒

20cm

取付価格 ¥2,700増/個 非課税

部品価格 ¥2,970/個 税込

TAIS:00160-000261

10cm

取付価格 ¥2,500増/個 非課税

部品価格 ¥2,750/個 税込

TAIS:00160-000170

※画像は延長ブレーキ
(20cm)装着

ネームプレート

取付価格 ¥2,420増/個 非課税

部品価格 ¥2,662/個 税込


オプション&関連パーツ(P.102~)も
併せてご参照ください。

●ソフトタイヤ仕様

参考価格 **¥95,000** 非課税

KR801Nソフト

高床 (18.5kg)

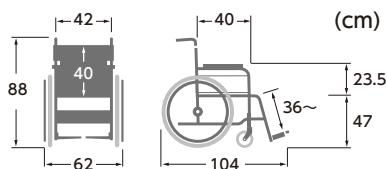

*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。
*取付部品等により重量・寸法等が多少変動いたします。ご了承ください。

1
color



No.91
エコネイビー
(ビニールレザー)



バリューセット (-VS)

ご依頼の多いオプションを予め取付けた
バリューセットもご用意しています。

●ソフトタイヤ仕様

参考価格 **¥106,500** 非課税

KR801Nソフト-VS



ガードル止め金具
(前止め用)



酸素ボンベ架台



(φ100mm以下用)

※ガードル棒はセット内容に含まれません。
※右側・左側をご指定ください。(指定がなければガードル止め金具・酸素ボンベ架台とも
右側へ取り付けとなります。)

コストパフォーマンス性に優れた車いす
病院や施設で使いやすいノーパンク仕様

補装具
レディ
メイド式

KVシリーズ

自走用
(介助兼用)

22

車輪

インチ×

6

キャスト

インチ



背折れ式



バンド式




KV22-40SB
シート:A22

参考価格 ¥88,000 非課税

KV22-40SB

中床 (12.7kg)

TAIS:00160-000233

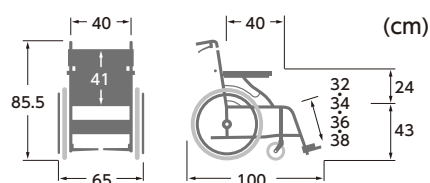

*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

介助用

16

車輪

インチ×

6

キャスト

インチ



背折れ式



バンド式




KV16-40SB
シート:A22

参考価格 ¥88,000 非課税

KV16-40SB

中床 (11.3kg)

TAIS:00160-000234

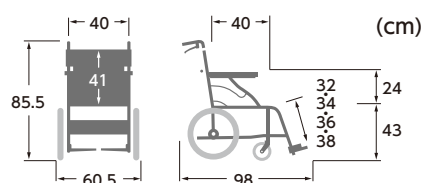

*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

フットサポート・シート間距離調節



(2cmピッチ)4段階で調節できます。

1
color



A22
黒チェック
(ポリエステル)



標準

Modern
シリーズ次世代型
標準軽量
六輪リクライ
ニング子供用
簡易

シャワー用

オーダー
システム


電動

歩行訓練
歩行補助具オプション&
関連パーツ自走用 22^{車輪}インチ×6^{キャスト}インチKV22-40N
シート:A22

参考価格 ¥73,500 非課税

KV22-40N


中床 (11.3kg)

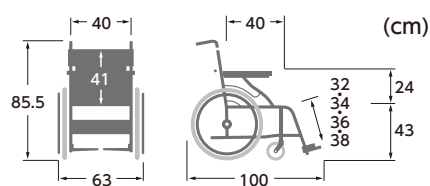

*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

おすすめ
オプションガードル止め金具
〈前止め用〉

取付価格 ¥4,400増/個 非課税
 部品価格 ¥3,993/個 税込
 TAIS:00160-000167

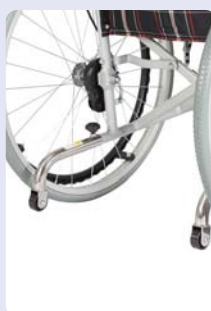転倒防止金具
〈キャスト付〉

取付価格 ¥8,470増/台 非課税
 部品価格 ¥9,317/台 税込



延長ブレーキ棒


20cm

取付価格 ¥2,700増/個 非課税
 部品価格 ¥2,970/個 税込
 TAIS:00160-000261

10cm

取付価格 ¥2,500増/個 非課税
 部品価格 ¥2,750/個 税込
 TAIS:00160-000170

※画像は延長ブレーキ (20cm) 装着

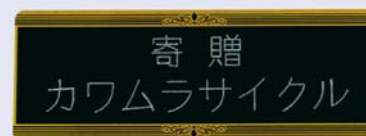

ネームプレートS


取付価格 ¥2,420増/個 非課税
 部品価格 ¥2,662/個 税込

オプション&関連パーツ(P.102〜)も
併せてご参照ください。

自走用にも介助用にも対応、カワムラサイクルの代名詞

補装具
レディ
メイド式

KA800シリーズ

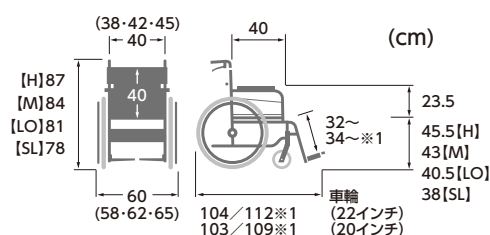KA822-40B-M
シート:No.102

※1)エレベータリング&スイングイン・アウト式

※各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

自走用
(介助兼用) 22^{車輪}インチ

●スイングイン・アウト式フット・レッグサポート 参考価格 ￥154,000 非課税

KA822-40(38・42)B-H 高床 キャスタ 7 インチ (16.4kg)

TAIS:00160-000084

KA822-40(38・42)B-M 中床 キャスタ 7 インチ (16.4kg)

TAIS:00160-000084

KA822-40(38・42)B-LO 低床 キャスタ 6 インチ (16.1kg)

TAIS:00160-000084

●シート幅45cm仕様/
スイングイン・アウト式フット・レッグサポート 参考価格 ￥173,000 非課税

KA822-45B-H 高床 キャスタ 7 インチ (17.4kg)

KA822-45B-M 中床 キャスタ 7 インチ (17.4kg)

KA822-45B-LO 低床 キャスタ 6 インチ (17.1kg)

●エレベータリング&
スイングイン・アウト式フット・レッグサポート 参考価格 ￥165,000 非課税

KA822-40(38・42)ELB-H 高床 キャスタ 7 インチ (18.1kg)

TAIS:00160-000101

KA822-40(38・42)ELB-M 中床 キャスタ 7 インチ (18.1kg)

TAIS:00160-000101

KA822-40(38・42)ELB-LO 低床 キャスタ 6 インチ (17.8kg)

TAIS:00160-000101

●シート幅45cm仕様/
エレベータリング&
スイングイン・アウト式フット・レッグサポート 参考価格 ￥185,000 非課税

KA822-45ELB-H 高床 キャスタ 7 インチ (19.1kg)

KA822-45ELB-M 中床 キャスタ 7 インチ (19.1kg)

KA822-45ELB-LO 低床 キャスタ 6 インチ (18.8kg)

KA820-40B-M
シート:A11自走用
(介助兼用) 20^{車輪}インチ

●スイングイン・アウト式フット・レッグサポート 参考価格 ￥154,000 非課税

KA820-40(38・42)B-M 中床 キャスタ 7 インチ (15.9kg)

TAIS:00160-000087

KA820-40(38・42)B-LO 低床 キャスタ 6 インチ (15.6kg)

TAIS:00160-000087

KA820-40(38・42)B-SL 低床 キャスタ 6 インチ (15.6kg)

TAIS:00160-000087

●エレベータリング&
スイングイン・アウト式フット・レッグサポート 参考価格 ￥165,000 非課税

KA820-40(38・42)ELB-M 中床 キャスタ 7 インチ (17.8kg)


TAIS:00160-000102

KA820-40(38・42)ELB-LO 低床 キャスタ 6 インチ (17.5kg)

TAIS:00160-000102

KA820-40(38・42)ELB-SL 低床 キャスタ 6 インチ (17.5kg)

TAIS:00160-000102

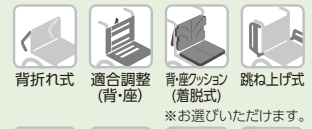

背折れ式 適合調整 (背・座) 背座クッション (着脱式) 跳ね上げ式
※お選びいただけます。

手動車いす 100kg
使用者最大体重 (積載物含む)



車輪サイズ 組替可 座面高さ 調節 バンド式 スイング インアウト式 ※ エレベータリング スイングアウト ※

モジュール

Modern シリーズ

次世代型 標準

軽量 六輪

リクライ ニング

子供用 簡易

シャワー用


オーダー システム

電動

歩行訓練 歩行補助具

オプション& 関連パーツ

KA816-40ELB-M
シート:A11

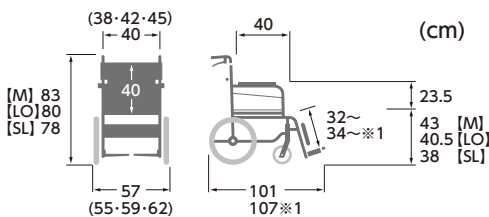

※1) エレベータリング&スイングイン・アウト式
※各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

介助用 16 インチ 車輪

●スイングイン・アウト式フット・レッグサポート 参考価格 **¥154,000** 非課税

KA816-40(38・42)B-M 中床 カスタ 7 インチ (14.8kg)

TAIS:00160-000088

KA816-40(38・42)B-LO 低床 カスタ 6 インチ (14.5kg)

TAIS:00160-000088

KA816-40(38・42)B-SL 低床 カスタ 6 インチ (14.5kg)

TAIS:00160-000088

●シート幅45cm仕様/
スイングイン・アウト式フット・レッグサポート 参考価格 **¥173,000** 非課税

KA816-45B-M 中床 カスタ 7 インチ (15.8kg)

KA816-45B-LO 低床 カスタ 6 インチ (15.5kg)

KA816-45B-SL 低床 カスタ 6 インチ (15.5kg)

●エレベータリング&
スイングイン・アウト式フット・レッグサポート 参考価格 **¥165,000** 非課税

KA816-40(38・42)ELB-M 中床 カスタ 7 インチ (16.3kg)

TAIS:00160-000106

KA816-40(38・42)ELB-LO 低床 カスタ 6 インチ (16.0kg)

TAIS:00160-000106

KA816-40(38・42)ELB-SL 低床 カスタ 6 インチ (16.0kg)

TAIS:00160-000106

●シート幅45cm仕様/エレベータリング&
スイングイン・アウト式フット・レッグサポート 参考価格 **¥185,000** 非課税

KA816-45ELB-M 中床 カスタ 7 インチ (17.3kg)

KA816-45ELB-LO 低床 カスタ 6 インチ (17.0kg)

KA816-45ELB-SL 低床 カスタ 6 インチ (17.0kg)

ご注文の際ご指定ください。



●シート幅 **38・40・42・45cm** よりお選びいただけます。

※アームパイプ内寸法は、シート幅プラス2cmとなります。

※シート幅は、座った状態でのお尻の幅にプラス3~5cm、
介助者の手が入る程度が目安です。



●シートカラー **9色** よりお選びいただけます。


※シート幅45cm仕様は、シートカラー(A9 緑チェック)のみとなります。



No.99 シアンレザー (ビニールレザー)



No.100 ドットブラウン (ポリエステル)

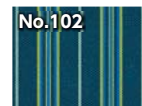

No.102 ビーコックブルー (ポリエステル)



A3 紺チェック (ポリエステル)



A9 緑チェック (ポリエステル)



A10 赤チェック (ポリエステル)



A11 紫チェック (ポリエステル)



No.71 オータムフラワー (ポリエステル)



No.88 エコブラック (ビニールレザー)

エレベータリング&スイングイン・アウト式 フット・レッグサポート

ふくらはぎパッド位置調節も可能です。



スイングイン・アウト式 フット・レッグサポート スイングイン機構

左右のフット・レッグサポートを内側に折りたたみ格納できます。左右にスペースがない場所に適しています。
(左右スイングイン時)



スイングアウト機構

左右フット・レッグサポートの開放が可能。前方からの移乗時などに適しています。
(左右スイングアウト時)



寸法表 (cm)

自走式

※シート幅寸法は、バックサポートフレーム内寸法です。

※各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

※シート色、取付部品により重量・寸法が多少変動いたします。ご了承ください。

シリーズ	品番	キヤスタ (インチ)	車輪 (インチ)	シート 幅	前 座 高	後 座 高	バック サポート シート 間隔	アーム サポート 高	シート 奥行	バック サポート 高	全 幅	全 高	全 長	折りたたみ 時全幅	折りたたみ 時全高	折りたたみ 時全長	重量 (kg)	掲載 ページ
STAYER+	SYP22-40(42)SB	6	22	40(42)	43	40	34・36・38・40	24	40	41	60(62)	91.5	98.5	33 ×	67.5	× 73.5	14.3	9・10
	SYP16-40(42)SB	6	16	40(42)	43	40	34・36・38・40	24	40	41	56(58)	91.5	98.5	29 ×	67.5	× 68.5	13.2	
STAYER	SY22-40(42)N	6	22	40(42)	43	40	34・36・38・40	24	40	41	59(61)	91.5	98.5	32 ×	91.5	× 97	12.2	11・12
	SY22-42N-SH	6	22	42	47	44	34・36・38・40	24	40	41	61	95.5	98.5	32 ×	95.5	× 97	12.2	
	SY22-40(42)SB	6	22	40(42)	43	40	34・36・38・40	24	40	41	60(62)	91.5	98.5	33 ×	67.5	× 95.5	13.2	
	SY16-40(42)SB	6	16	40(42)	43	40	34・36・38・40	24	40	41	56(58)	91.5	98.5	29 ×	67.5	× 86.5	12.1	
BACKS	BK22-40SB	6	22	40	43	40	34・36・38・40	24	40	41	60	91.5	98.5	33 ×	67.5	× 95.5	13.8	13
	BK16-40SB	6	16	40	43	40	34・36・38・40	24	40	41	56	91.5	98.5	29 ×	67.5	× 86.5	12.8	
KR801N	KR801N ソフト	7	24	42	47	45	36~	23.5	40	40	62	88	104	30 ×	88	× 104	18.5	14
KV	KV22-40SB	6	22	40	43	40	32・34・36・38	24	40	41	65	85.5	100	35 ×	67	× 100	12.7	15・16
	KV16-40SB	6	16	40	43	40	32・34・36・38	24	40	41	60.5	85.5	98	31 ×	67	× 89	11.3	
	KV22-40N	6	22	40	43	40	32・34・36・38	24	40	41	63	85.5	100	35 ×	85.5	× 100	11.3	
KA800	KA822-40(38・42)B-H	7	22	40(38・42)	45.5	44	32~	23.5	40	40	60(58・62)	87	104	31 ×	69.5	× 77	16.4	17・18
	KA822-40(38・42)B-M	7	22	40(38・42)	43	41	32~	23.5	40	40	60(58・62)	84	104	31 ×	66.5	× 77	16.4	
	KA822-40(38・42)B-LO	6	22	40(38・42)	40.5	38.5	32~	23.5	40	40	60(58・62)	81	104	31 ×	63.5	× 77	16.1	
	KA822-40(38・42)ELB-H	7	22	40(38・42)	45.5	44	34~	23.5	40	40	60(58・62)	87	112	31 ×	69.5	× 77	18.1	
	KA822-40(38・42)ELB-M	7	22	40(38・42)	43	41	34~	23.5	40	40	60(58・62)	84	112	31 ×	66.5	× 77	18.1	
	KA822-40(38・42)ELB-LO	6	22	40(38・42)	40.5	38.5	34~	23.5	40	40	60(58・62)	81	112	31 ×	63.5	× 77	17.8	
	KA822-45B-H	7	22	45	45.5	44	32~	23.5	40	40	65	87	104	31 ×	69.5	× 77	17.4	
	KA822-45B-M	7	22	45	43	41	32~	23.5	40	40	65	84	104	31 ×	66.5	× 77	17.4	
	KA822-45B-LO	6	22	45	40.5	38.5	32~	23.5	40	40	65	81	104	31 ×	63.5	× 77	17.1	
	KA822-45ELB-H	7	22	45	45.5	44	34~	23.5	40	40	65	87	112	31 ×	69.5	× 77	19.1	
	KA822-45ELB-M	7	22	45	43	41	34~	23.5	40	40	65	84	112	31 ×	66.5	× 77	19.1	
	KA822-45ELB-LO	6	22	45	40.5	38.5	34~	23.5	40	40	65	81	112	31 ×	63.5	× 77	18.8	
	KA820-40(38・42)B-M	7	20	40(38・42)	43	41	32~	23.5	40	40	60(58・62)	84	103	31 ×	66.5	× 74.5	15.9	
	KA820-40(38・42)B-LO	6	20	40(38・42)	40.5	38.5	32~	23.5	40	40	60(58・62)	81	103	31 ×	63.5	× 74.5	15.6	
	KA820-40(38・42)B-SL	6	20	40(38・42)	38	36.5	32~	23.5	40	40	60(58・62)	78	103	31 ×	61.5	× 74.5	15.6	
	KA820-40(38・42)ELB-M	7	20	40(38・42)	43	41	34~	23.5	40	40	60(58・62)	84	109	31 ×	66.5	× 74.5	17.8	
	KA820-40(38・42)ELB-LO	6	20	40(38・42)	40.5	38.5	34~	23.5	40	40	60(58・62)	81	109	31 ×	63.5	× 74.5	17.5	
	KA820-40(38・42)ELB-SL	6	20	40(38・42)	38	36.5	34~	23.5	40	40	60(58・62)	78	109	31 ×	61.5	× 74.5	17.5	
	KA816-40(38・42)B-M	7	16	40(38・42)	43	40	32~	23.5	40	40	57(55・59)	83	101	28 ×	66	× 71	14.8	
	KA816-40(38・42)B-LO	6	16	40(38・42)	40.5	37.5	32~	23.5	40	40	57(55・59)	80	101	28 ×	63.5	× 71	14.5	
	KA816-40(38・42)B-SL	6	16	40(38・42)	38	34.5	32~	23.5	40	40	57(55・59)	78	101	28 ×	61	× 71	14.5	
	KA816-40(38・42)ELB-M	7	16	40(38・42)	43	40	34~	23.5	40	40	57(55・59)	83	107	28 ×	66	× 71	16.3	
	KA816-40(38・42)ELB-LO	6	16	40(38・42)	40.5	37.5	34~	23.5	40	40	57(55・59)	80	107	28 ×	63.5	× 71	16.0	
	KA816-40(38・42)ELB-SL	6	16	40(38・42)	38	34.5	34~	23.5	40	40	57(55・59)	78	107	28 ×	61	× 71	16.0	
	KA816-45B-M	7	16	45	43	40	32~	23.5	40	40	62	83	101	28 ×	66	× 71	15.8	
	KA816-45B-LO	6	16	45	40.5	37.5	32~	23.5	40	40	62	80	101	28 ×	63.5	× 71	15.5	
	KA816-45B-SL	6	16	45	38	34.5	32~	23.5	40	40	62	78	101	28 ×	61	× 71	15.5	
	KA816-45ELB-M	7	16	45	43	40	34~	23.5	40	40	62	83	107	28 ×	66	× 71	17.3	
	KA816-45ELB-LO	6	16	45	40.5	37.5	34~	23.5	40	40	62	80	107	28 ×	63.5	× 71	17.0	
	KA816-45ELB-SL	6	16	45	38	34.5	34~	23.5	40	40	62	78	107	28 ×	61	× 71	17.0	

体型や環境に合わせた車いすが見つかる
バリエーション豊富なモダンシリーズ。

Modern シリーズ

“Modern series”

NEW Rich-style	023
A-style	025
B-style	027
C-style	029
サユレン	031
寸法表	033



Modern シリーズチャート

／ START ／

座った姿勢を保つことができる

それなりの時間なら…

少し疲れるかも…

座位保持が難しい

主にどこで使いますか？

自力で移乗できる

屋内

屋外

YES

NO

KMD-R12
背折れタイプ

自分で移動できる／したい

別売りクッションとの併用を考えている

YES

NO

KMD-A22
背固定タイプ

KMD-A22
背折れタイプ

KMD-A16
背折れタイプ

YES

NO

小柄な方である

小柄な方である

YES

NO

YES

NO

自分で移動できる／したい

自分で移動できる／したい

自分で移動できる／したい

自分で移動できる／したい

YES

NO

YES

NO

KMD-C20
低床タイプ

KMD-C16
低床タイプ

KMD-B20
低床タイプ

KMD-B16
低床タイプ

YES

NO

YES

NO

KMD-C22
中・高床タイプ

KMD-C16
中床タイプ

KMD-B22
中床タイプ

KMD-B16
中床タイプ

Modernシリーズ別 機能一覧

標準
モジュール

Modern
シリーズ

次世代型
標準

軽量
六輪

リクライ
ニング

子供用
簡易

シャワー用

オーダー
システム

電動

歩行訓練
歩行補助具

オプション&
関連パーツ

	A-style 標準タイプ 	B-style 多機能タイプ 	C-style 多機能プラス タイプ 	Rich-style ティルト& リクライニングタイプ 
1. 伸縮式 駐車用ブレーキ	●	●	●	—
2. パチート 調節機能	●	●	●	●
3. 座クッション	●	●	●	●
4. 大きな 背ポケット	●	●	●	—
5. 適合調整 シート	—	●	●	●
6. 跳ね上げ式 アームサポート	—	●	●	—
7. 高さ調節式 アームサポート	—	—	●	●
8. スイングイン・アウト式 フット・レッグサポート	—	●	●	—
9. エレベータリング式 フット・レッグサポート	—	●	●	●
10. 足踏みブレーキ	サユレン仕様あり	サユレン仕様あり	サユレン仕様あり	クリックブレーキ
1.伸縮式駐車用ブレーキ 駐車用ブレーキレバーを引っ張ると、 長さが10cm延長され、軽い力で 操作できます。 	2.パチート 調節機能 工具レスで簡単にフットプレート 高さを変更できます。  パチパチと音が 鳴りしっかり止まる!	3.座クッション 3cm厚のクッションが標準装備です。 (Rich-styleは7cm厚) 	4.大きな背ポケット 背ポケットはA4のクリアファイルが すっぽり収まる大きさです。 	5.適合調整シート 背中形状に合わせて、 横方向の張り調整ができます。 背部への圧迫の軽減を図ります。 
6.跳ね上げ式アームサポート 後方に跳ね上げ、肘掛け部分を オープンにできます。 ベッドサイドなどからの移乗が スムーズに行えます。 	7.高さ調節式アームサポート 肘掛けの段階的な調節が できます。 	8.スイングイン・アウト式 フット・レッグサポート 脚部の開・閉ができます。 	9.エレベータリング式 フット・レッグサポート 脚部角度が調節できます。 	10.足踏みブレーキ 介助者が足で操作するブレーキ。  ※画像はクリックブレーキ

リクライニング時の背ずれを抑制した新ティルト&リクライニング車いす

補装具
レディ
メイド式

Modern Rich-style



動画をチェック

介助用 **12** 車輪 **6** キャスタ
インチ×インチKMD-R12
シート:No.82

リクライニング操作で発生する”背ずれ”を抑制

ティルト時

シート調整角度: 5~20°


<無段階調整>



リクライニング時

バックサポート調整角度: 95~145°


<無段階調整>

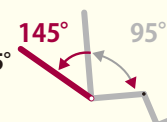参考価格 **¥300,000** 非課税

NEW KMD-R12

高床 (28kg)

TAIS:00160-000347

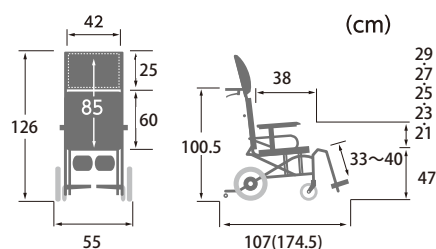

()内、最長時寸法

*手押しハンドル高さ、全長、全高、フットサポート・シート間距離は、バックサポートを最も起こした時の寸法です。

*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

1
color


No.82

チャコールグレー
(ポリエステル)認識しやすい
カラーレバー操作部が認識しやすい様に、
レバーをカラーリングしました。

パチート調節機能



折りたたみ可能

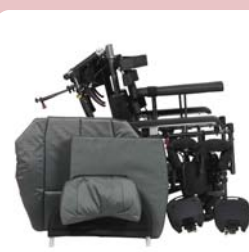



Modern
series
モダンシリーズ

手動車いす 100kg
使用者最大体重 (積載物含む)


標準
モジュール

KMD-R12の特長

新ティルト&リクライニング機構

スラリク機構

バックサポートを“倒す・起こす”の動作を繰り返しても背中がズレにくく、安定した座位が保てます。

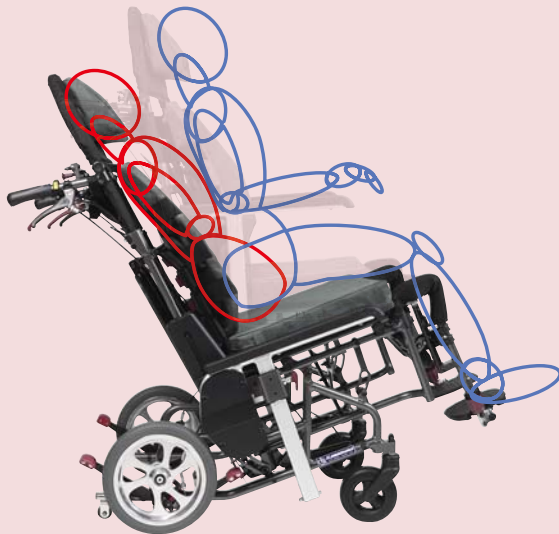

リクライニング時も身体が安定

リクライニング動作に伴い、ランバー角度も可変 国内特許申請中



足ズレ抑制のエレベーター式 フット・レッグサポート



自然な脚の軌道を描く新しいエレベーター機構。しっかりと適切な状態で脚を支えることで、長時間座っていても疲れにくくなります。

クリックブレーキ “踏んで”ブレーキ、“踏んで”解除。リクライニング状態や前方からの操作もラクラク。



リムビーズ 背クッション裏のベルトに挟み込むだけの簡単装着。

国内特許申請中



ポケット状のベルトに装着するだけで中材のストロービーズが優しくホールド。装着する位置や方法で背クッションが立体的な形状に変化します。座ってる状態でも微調整が可能。また、通気性も良く、手洗い可能。



開いた状態



折りたたんだ状態



Modern
シリーズ

次世代型
標準

軽量
六輪

リクライ
ニング

子供用
簡易

シャワー用

オーダー
システム

電動

歩行訓練
歩行補助具

オプション&
関連パーツ

使いやすい標準タイプ。外出が多い方におすすめです。

補装具
レディ
メイド式

Modern A-style

自走用

22インチ×6インチ



ソフト
(ノーパンク)




KMD-A22-40S-SH
シート:No.82

参考価格 ¥108,000 非課税

KMD-A22-40(42)S-M(H/SH)

中・高床 (13.5kg)

TAIS:00160-000286

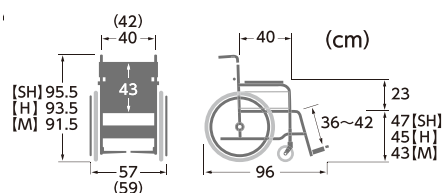

*各寸法にはシート・クッション等の厚みは含まれておりません。



トリプルセット

参考価格 ¥132,000 非課税

KMD-A22-40(42)S-M(H/SH)-TS

自走用
(介助兼用)

22インチ×6インチ



背折れ式



車輪サイズ
組替可



ドラム式




KMD-A22-40-M
シート:A10

参考価格 ¥108,000 非課税

KMD-A22-40(42)-M(H/SH)

中・高床 (13.8kg)

TAIS:00160-000286

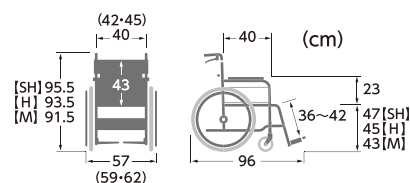

*各寸法にはシート・クッション等の厚みは含まれておりません。



トリプルセット

参考価格 ¥132,000 非課税

KMD-A22-40(42・45)-M(H/SH)-TS



トリプルセット (-TS)

ご依頼の多いオプションを予め取り付けたトリプルセットもご用意しています。

※ガードル棒はセット内容に含まれません。
 ※酸素ポンベはセット内容に含まれません。
 ※右側・左側をご指定ください。(指定がなければガードル止め金具は左側、酸素ポンベ架台は右側へ取り付けとなります。)

ガードル止め金具
(後ろ止め用)



酸素ポンベ架台
(2WAY用)



+

(φ100mm以下用/
φ140mm以下用)

背座クッション
(脱着式)伸縮式
駐車用ブレーキパチート
調節機構座面高さ
調節Modern
series
モダンシリーズ

国内特許取得済

手動車いす 100kg
使用者最大体重(積載物含む)標準
モジュール

介助用

16インチ×6インチ
車輪 カスタム背折れ式 車輪サイズ
組替可 ドラム式KMD-A16-40-M
シート:No.68

参考価格 ¥108,000 非課税

KMD-A16-40(42)-M(H/SH)


中・高床 (13.0kg)

TAIS:00160-000287

KMD-A16-45-M(H/SH)

中・高床 (13.0kg)

TAIS:00160-000304

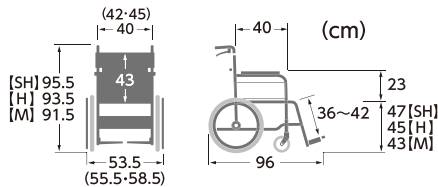

*各寸法にはシート・クッション等の厚みは含まれておりません。



トリプルセット

参考価格 ¥132,000 非課税

KMD-A16-40(42・45)-M(H/SH)-TS

※トリプルセットの内容については、P.025をご覧ください。

ご注文の際に指定ください。



●シート幅 40・42・45cm よりお選びいただけます。

※KMD-Aの背固定タイプは、シート幅40・42cmよりお選びください。

※シート幅は、座った状態でのお尻の幅にプラス3〜5cm、介助者の手が入る程度が目安です。

●座面高さ 43(M)・45(H)・47(SH)cm

よりお選びいただけます。

9
color

●シートカラー (9色) よりお選びいただけます。

※シート幅45cm仕様は(No.19黒)のみとなります。

No.82

チャコールグレー
(ポリエステル)

No.83

ライトブルー
(ポリエステル)

No.85

若葉色
(ポリエステル)

A9

緑チェック
(ポリエステル)

A10

赤チェック
(ポリエステル)

A11

紫チェック
(ポリエステル)

No.88

エコブラック
(ビニールレザー)

No.68

黒メッシュ
(ポリエステル)

No.19

黒
(ポリエステル)おすすめ
オプション

空気補充が不要のノーパンク車輪



ソフトタイヤ付車輪

取付価格 ¥9,200増/台 非課税

Modern
シリーズ次世代型
標準軽量
六輪リクライ
ニング子供用
簡易

シャワー用

オーダー
システム

電動

歩行訓練
歩行補助具オプション&
関連パーツ

脚部と肘部が可動し、乗り降りのスペースが確保しやすい多機能タイプ。

補装具
レディ
メイド式

Modern B-style

自走用
(介助兼用)

22^{車輪}インチ×6^{キャスト}インチ



KMD-B22-40-M
シート:No.83

●スイングイン・アウト式フット・レッグサポート 参考価格 **¥124,000** 非課税

KMD-B22-40(38・42・45)-M(H/SH) 中・高床 (15.6kg)


TAIS:00160-000288

●エレベータリング式フット・レッグサポート 参考価格 **¥151,000** 非課税

KMD-B22-40(38・42・45)-EL-M(H/SH) 中・高床 (17.9kg)

TAIS:00160-000289

※)エレベータリング式

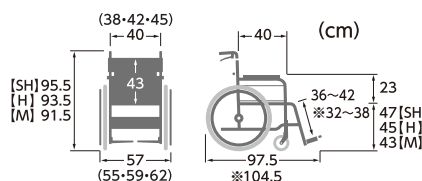

*各寸法にはシート・クッション等の厚みは含まれておりません。

自走用
(介助兼用)

20^{車輪}インチ×6^{キャスト}インチ



KMD-B20-40-LO
シート:No.88

●スイングイン・アウト式フット・レッグサポート 参考価格 **¥124,000** 非課税

KMD-B20-40(38・42・45)-LO(SL/SSL) 低床 (15.4kg)


TAIS:00160-000288

●エレベータリング式フット・レッグサポート 参考価格 **¥151,000** 非課税

KMD-B20-40(38・42・45)-EL-LO(SL/SSL) 低床 (17.7kg)

TAIS:00160-000289

※)エレベータリング式

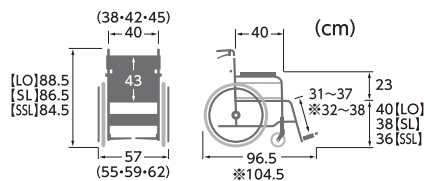

*各寸法にはシート・クッション等の厚みは含まれておりません。

ご注文の際ご指定ください。



●シート幅 **38・40・42・45cm** よりお選びいただけます。

※シート幅は、座った状態でお尻の幅にプラス3～5cm、
介助者の手が入る程度が目安です。

●座面高さ **36(SSL)・38(SL)・40(LO)・43(M)・45(H)・47(SH)cm**

よりお選びいただけます。

9
color

●シートカラー **9色** よりお選びいただけます。

※シート幅45cm仕様は(No.19黒)のみとなります。

No.82

チャコールグレー
(ポリエステル)

No.83

ライトブルー
(ポリエステル)

No.85

若葉色
(ポリエステル)

A9

緑チェック
(ポリエステル)

A10

赤チェック
(ポリエステル)

A11

紫チェック
(ポリエステル)

No.88

エコブラック
(ビニールレザー)

No.68

黒メッシュ
(ポリエステル)

No.19

黒
(ポリエステル)



Modern
SERIES
モダンシリーズ

標準
モジュール

介助用

16インチ×6インチ



KMD-B16-40-M
シート:A9


●スイングイン・アウト式フット・レッグサポート 参考価格 **¥124,000** 非課税

KMD-B16-40(38・42・45)-M(H/SH) 中・高床 (14.4kg)
TAIS:00160-000290

●エレベーター式フット・レッグサポート 参考価格 **¥151,000** 非課税

KMD-B16-40(38・42・45)-EL-M(H/SH) 中・高床 (16.7kg)
TAIS:00160-000291

※)エレベーター式

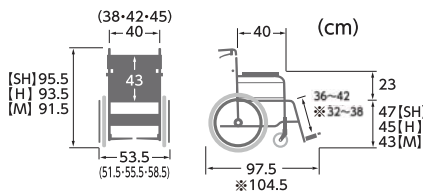

*各寸法にはシート・クッション等の厚みは含まれておりません。



KMD-B16-40-LO
シート:A11


●スイングイン・アウト式フット・レッグサポート 参考価格 **¥124,000** 非課税

KMD-B16-40(38・42・45)-LO(SL/SSL) 低床 (14.4kg)
TAIS:00160-000290

●エレベーター式フット・レッグサポート 参考価格 **¥151,000** 非課税

KMD-B16-40(38・42・45)-EL-LO(SL/SSL) 低床 (16.7kg)
TAIS:00160-000291

※)エレベーター式

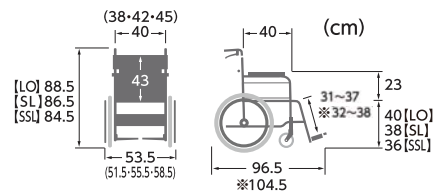


*各寸法にはシート・クッション等の厚みは含まれておりません。

B-styleは脚部の仕様が選べます



スイングイン・アウト
脚部の開・閉が
できます。

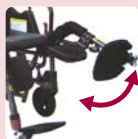

エレベーター式
脚部角度が調節
できます。

おすすめ
オプション

空気補充が不要のノーパンク車輪



ソフトタイヤ付車輪
取付価格 **¥9,200増/台** 非課税

Modern
シリーズ

次世代型
標準

軽量
六輪

リクライ
ニング

子供用
簡易

シャワー用

オーダー
システム

電動

歩行訓練
歩行補助具

オプション&
関連パーツ

脚部と肘部が可動し、乗り降りのスペースが確保しやすい多機能タイプ。
さらにアームサポートの高さ調節ができます。

補装具
レディ
メイド式

Modern C-style

自走用
(介助兼用)

22 車輪 6 カスタ
インチ×インチ



KMD-C22-40-M
シート:No.85

●スイングイン・アウト式フット・レッグサポート 参考価格 **¥146,000** 非課税

KMD-C22-40(38・42・45)-M(H/SH) 中・高床 (16.5kg)


TAIS:00160-000292

●エレベータリング式フット・レッグサポート 参考価格 **¥174,000** 非課税

KMD-C22-40(38・42・45)-EL-M(H/SH) 中・高床 (18.8kg)

TAIS:00160-000293

※)エレベータリング式

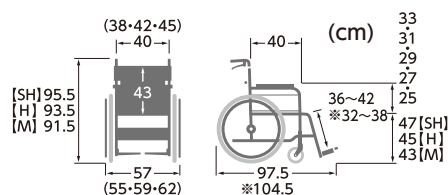

*各寸法にはシート・クッション等の厚みは含まれておりません。

自走用
(介助兼用)

20 車輪 6 カスタ
インチ×インチ



KMD-C20-40-LO
シート:No.19

●スイングイン・アウト式フット・レッグサポート 参考価格 **¥146,000** 非課税

KMD-C20-40(38・42・45)-LO(SL/SSL) 低床 (16.3kg)


TAIS:00160-000292

●エレベータリング式フット・レッグサポート 参考価格 **¥174,000** 非課税

KMD-C20-40(38・42・45)-EL-LO(SL/SSL) 低床 (18.6kg)

TAIS:00160-000293

※)エレベータリング式

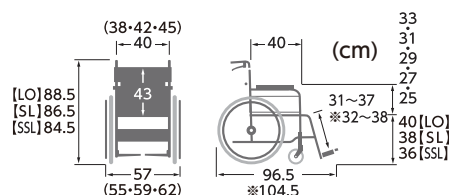

*各寸法にはシート・クッション等の厚みは含まれておりません。

ご注文の際ご指定ください。



●シート幅 **38・40・42・45cm** よりお選びいただけます。

※シート幅は、座った状態でお尻の幅にプラス3～5cm、
介助者の手が入る程度が目安です。

●座面高さ **36(SSL)・38(SL)・40(LO)・43(M)・45(H)・47(SH)cm**
よりお選びいただけます。

9
color

●シートカラー 9色 よりお選びいただけます。

※シート幅45cm仕様は (No.19黒) のみとなります。

No.82

チャコールグレー
(ポリエステル)

No.83

ライトブルー
(ポリエステル)

No.85

若葉色
(ポリエステル)

A9

緑チェック
(ポリエステル)

A10

赤チェック
(ポリエステル)

A11

紫チェック
(ポリエステル)

No.88

エコブラック
(ビニールレザー)

No.68

黒メッシュ
(ポリエステル)

No.19

黒
(ポリエステル)

介助用

16インチ×6インチ



KMD-C16-40-M
シート:No.82

●スイングイン・アウト式フット・レッグサポート 参考価格 **¥146,000** 非課税

KMD-C16-40(38・42・45)-M(H/SH) 中・高床 (15.3kg)


TAIS:00160-000294

●エレベーター式フット・レッグサポート 参考価格 **¥174,000** 非課税

KMD-C16-40(38・42・45)-EL-M(H/SH) 中・高床 (17.6kg)

TAIS:00160-000295

※)エレベーター式

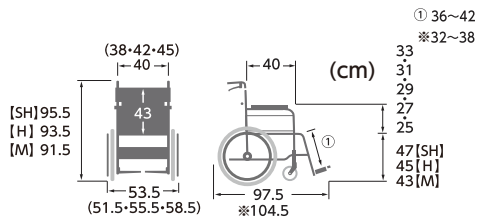

*各寸法にはシート・クッション等の厚みは含まれておりません。



KMD-C16-40-LO
シート:A9

●スイングイン・アウト式フット・レッグサポート 参考価格 **¥146,000** 非課税

KMD-C16-40(38・42・45)-LO(SL/SSL) 低床 (15.3kg)


TAIS:00160-000294

●エレベーター式フット・レッグサポート 参考価格 **¥174,000** 非課税

KMD-C16-40(38・42・45)-EL-LO(SL/SSL) 低床 (17.6kg)

TAIS:00160-000295

※)エレベーター式

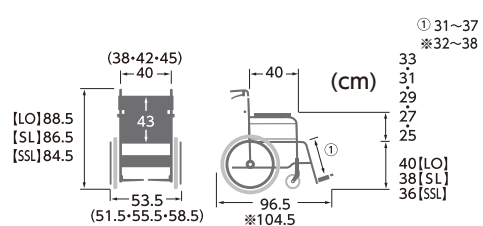


*各寸法にはシート・クッション等の厚みは含まれておりません。

C-styleは脚部の仕様が選べます



スイングイン・アウト
脚部の開・閉が
できます。

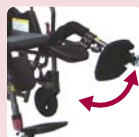

エレベーター式
脚部角度が調節
できます。

おすすめ
オプション

空気補充が不要のノーパンク車輪



ソフトタイヤ付車輪

取付価格 **¥9,200増/台** 非課税



動画をチェック

サユレン - SAYUREN -

補装具
レディ
メイド式

足踏み付左右連動ブレーキ仕様

左右どちらかの駐車用ブレーキ
もしくは足踏みブレーキをかけるだけで、
両輪にブレーキがかかります。



腰をかがめなくてもロック/解除ができるので介助負担を軽減します。



伸縮式駐車用ブレーキを延長することで軽い力で操作ができます。片側で両側の駐車用ブレーキを作動できるためスペースがないところでもご利用いただけます。



KMD-A22-40-M/SR
シート:No.19

自走用 (介助兼用) **22** 車輪 **6** キャスタ
インチ×インチ

参考価格 **¥136,000** 非課税

KMD-A22-40 (42・45) -M (H/SH) /SR

中・高床 (14.6kg)

TAIS:00160-000311


介助用 **16** 車輪 **6** キャスタ
インチ×インチ

参考価格 **¥136,000** 非課税

KMD-A16-40 (42・45) -M (H/SH) /SR

中・高床 (13.9kg)

TAIS:00160-000312

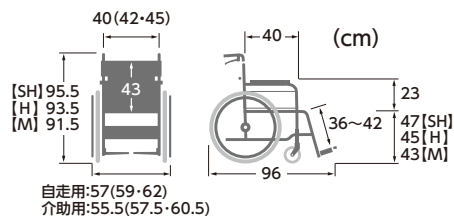

*各寸法には、シート・シートフッション等の厚みは含まれません。

ご注文の際ご指定ください。



●A-styleはシート幅 **40・42・45cm**

よりお選びいただけます。

●B-style・C-styleはシート幅 **38・40・42・45cm**

よりお選びいただけます。

※シート幅は、座った状態でのお尻の幅にプラス3〜5cm、
介助者の手が入る程度が目安です。



●座面高さ **43(M)・45(H)・47(SH)cm**

よりお選びいただけます。

仕様の詳細はP.025〜P.030をご参照ください。



●シートカラー **9色** よりお選びいただけます。

※シート幅45cm仕様は (No.19黒) のみとなります。

No.82 チャコールグレー (ポリエステル)	No.83 ライトブルー (ポリエステル)	No.85 若葉色 (ポリエステル)	A9 緑チェック (ポリエステル)	A10 赤チェック (ポリエステル)
A11 紫チェック (ポリエステル)	No.88 エコブラック (ビニールレザー)	No.68 黒メッシュ (ポリエステル)	No.19 黒 (ポリエステル)	

※足踏みブレーキ部は右側取付が標準仕様となります。



KMD-B22-40-M/SR
シート:A10

自走用
(介助兼用) **22** 車輪 **6** キャスタ
インチ×インチ

●スイングイン・アウト式フット・レッグサポート 参考価格 **¥156,000** 非課税

KMD-B22-40(38・42・45)-M(H/SH)/SR 中・高床 (16.4kg)

TAIS:00160-000313

●エレベータリング式フット・レッグサポート 参考価格 **¥181,000** 非課税

KMD-B22-40(38・42・45)-EL-M(H/SH)/SR 中・高床 (18.7kg)

TAIS:00160-000319

介助用 **16** 車輪 **6** キャスタ
インチ×インチ

●スイングイン・アウト式フット・レッグサポート 参考価格 **¥156,000** 非課税

KMD-B16-40(38・42・45)-M(H/SH)/SR 中・高床 (15.3kg)


TAIS:00160-000314

●エレベータリング式フット・レッグサポート 参考価格 **¥181,000** 非課税

KMD-B16-40(38・42・45)-EL-M(H/SH)/SR 中・高床 (17.6kg)

TAIS:00160-000320

※)エレベータリング式

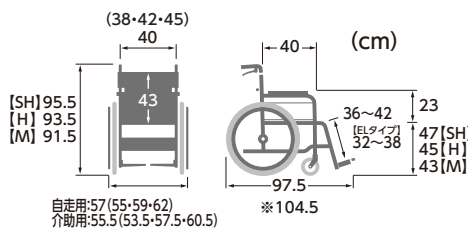

*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。



KMD-C22-40-M/SR
シート:No.82

自走用
(介助兼用) **22** 車輪 **6** キャスタ
インチ×インチ

●スイングイン・アウト式フット・レッグサポート 参考価格 **¥178,000** 非課税

KMD-C22-40(38・42・45)-M(H/SH)/SR 中・高床 (17.3kg)

TAIS:00160-000315

●エレベータリング式フット・レッグサポート 参考価格 **¥205,000** 非課税

KMD-C22-40(38・42・45)-EL-M(H/SH)/SR 中・高床 (19.6kg)

TAIS:00160-000321

介助用 **16** 車輪 **6** キャスタ
インチ×インチ

●スイングイン・アウト式フット・レッグサポート 参考価格 **¥178,000** 非課税

KMD-C16-40(38・42・45)-M(H/SH)/SR 中・高床 (16.2kg)


TAIS:00160-000316

●エレベータリング式フット・レッグサポート 参考価格 **¥205,000** 非課税

KMD-C16-40(38・42・45)-EL-M(H/SH)/SR 中・高床 (18.5kg)

TAIS:00160-000322

※)エレベータリング式

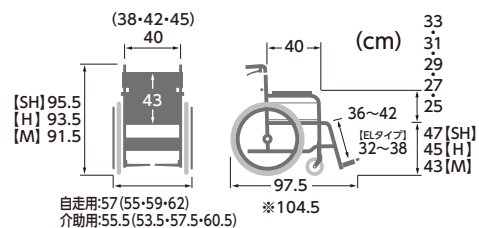


*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

B・C-styleは脚部の仕様が選べます



スイングイン・アウト
脚部の開・閉が
できます。

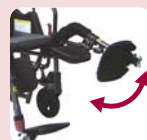

エレベータリング
脚部角度が調節
できます。

おすすめ
オプション

空気補充が不要のノーパンク車輪



ソフトタイヤ付車輪

取付価格 ¥9,200増/台 非課税

寸法表 (cm)

自走式 ※シート幅寸法は、バックサポートフレーム内寸法です。
介助式 ※各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。
※シート色、取付部品により重量・寸法が多少変動いたします。ご了承ください。

シリーズ	品番	車輪 (インチ) キャスタ(インチ)	シート幅	前座高	後座高	バックシート間隔	アームサポート高	バックシート奥行高	全幅	全高	全長 (最長時)	折りたたみ時全幅	折りたたみ時全高	折りたたみ時全長	重量 (kg)	掲載ページ
Rich-style	KMD-R12	6 12	42	47	—	33~40	21-23-25-27-29	38 85	55	126	107 (174.5)	35 ×	83	× 90	28	23・24
A-style	KMD-A22-40(42)S-M(H/SH)	6 22	40(42)	43(45/47)	40(42/44)	36~42	23	40 43	57(59)	91.5(93.5/95.5)	96	30 × 91.5(93.5/95.5)	× 94	13.5	25・26・31	
	KMD-A22-40(42・45)-M(H/SH)	6 22	40(42・45)	43(45/47)	40(42/44)	36~42	23	40 43	57(59・62)	91.5(93.5/95.5)	96	30 × 64(66/68)	× 94	13.8		
	KMD-A22-40(42・45)-M(H/SH)/SR	6 22	40(42・45)	43(45/47)	40(42/44)	36~42	23	40 43	57(59・62)	91.5(93.5/95.5)	96	30 × 64(66/68)	× 94	14.6		
	KMD-A16-40(42・45)-M(H/SH)	6 16	40(42・45)	43(45/47)	40(42/44)	36~42	23	40 43	53.5(55.5・58.5)	91.5(93.5/95.5)	96	27 × 64(66/68)	× 85	13		
	KMD-A16-40(42・45)-M(H/SH)/SR	6 16	40(42・45)	43(45/47)	40(42/44)	36~42	23	40 43	55.5(57.5・60.5)	91.5(93.5/95.5)	96	29 × 64(66/68)	× 85	13.9		
B-style	KMD-B22-40(38・42・45)-M(H/SH)	6 22	40(38・42・45)	43(45/47)	40(42/44)	36~42	23	40 43	57(55・59・62)	91.5(93.5/95.5)	97.5	30 × 66.5(68.5/70.5)	× 76.5	15.6	27・28・32	
	KMD-B22-40(38・42・45)-M(H/SH)/SR	6 22	40(38・42・45)	43(45/47)	40(42/44)	36~42	23	40 43	57(55・59・62)	91.5(93.5/95.5)	97.5	30 × 66.5(68.5/70.5)	× 76.5	16.4		
	KMD-B20-40(38・42・45)-LO(SL/SSL)	6 20	40(38・42・45)	40(38/36)	37(35/33)	31~37	23	40 43	57(55・59・62)	88.5(86.5/84.5)	96.5	30 × 64(62/60)	× 74	15.4		
	KMD-B16-40(38・42・45)-M(H/SH)	6 16	40(38・42・45)	43(45/47)	40(42/44)	36~42	23	40 43	53.5(51.5・55.5・58.5)	91.5(93.5/95.5)	97.5	27 × 66.5(68.5/70.5)	× 67.5	14.4		
	KMD-B16-40(38・42・45)-M(H/SH)/SR	6 16	40(38・42・45)	43(45/47)	40(42/44)	36~42	23	40 43	55.5(53.5・57.5・60.5)	91.5(93.5/95.5)	97.5	29 × 66.5(68.5/70.5)	× 67.5	15.3		
	KMD-B16-40(38・42・45)-LO(SL/SSL)	6 16	40(38・42・45)	40(38/36)	37(35/33)	31~37	23	40 43	53.5(51.5・55.5・58.5)	88.5(86.5/84.5)	96.5	27 × 63(61/59)	× 67.5	14.4		
	KMD-B22-40(38・42・45)-EL-M(H/SH)	6 22	40(38・42・45)	43(45/47)	40(42/44)	32~38	23	40 43	57(55・59・62)	91.5(93.5/95.5)	104.5	30 × 66.5(68.5/70.5)	× 76.5	17.9		
	KMD-B22-40(38・42・45)-EL-M(H/SH)/SR	6 22	40(38・42・45)	43(45/47)	40(42/44)	32~38	23	40 43	57(55・59・62)	91.5(93.5/95.5)	104.5	30 × 66.5(68.5/70.5)	× 76.5	18.7		
	KMD-B20-40(38・42・45)-EL-LO(SL/SSL)	6 20	40(38・42・45)	40(38/36)	37(35/33)	32~38	23	40 43	57(55・59・62)	88.5(86.5/84.5)	104.5	30 × 64(62/60)	× 74	17.7		
	KMD-B16-40(38・42・45)-EL-M(H/SH)	6 16	40(38・42・45)	43(45/47)	40(42/44)	32~38	23	40 43	53.5(51.5・55.5・58.5)	91.5(93.5/95.5)	104.5	27 × 66.5(68.5/70.5)	× 67.5	16.7		
	KMD-B16-40(38・42・45)-EL-M(H/SH)/SR	6 16	40(38・42・45)	43(45/47)	40(42/44)	32~38	23	40 43	55.5(53.5・57.5・60.5)	91.5(93.5/95.5)	104.5	29 × 66.5(68.5/70.5)	× 67.5	17.6		
	KMD-B16-40(38・42・45)-EL-LO(SL/SSL)	6 16	40(38・42・45)	40(38/36)	37(35/33)	32~38	23	40 43	53.5(51.5・55.5・58.5)	88.5(86.5/84.5)	104.5	27 × 63(61/59)	× 67.5	16.7		
C-style	KMD-C22-40(38・42・45)-M(H/SH)	6 22	40(38・42・45)	43(45/47)	40(42/44)	36~42	25・27・29・31・33	40 43	57(55・59・62)	91.5(93.5/95.5)	97.5	30 × 66.5(68.5/70.5)	× 76.5	16.5	29・30・32	
	KMD-C22-40(38・42・45)-M(H/SH)/SR	6 22	40(38・42・45)	43(45/47)	40(42/44)	36~42	25・27・29・31・33	40 43	57(55・59・62)	91.5(93.5/95.5)	97.5	30 × 66.5(68.5/70.5)	× 76.5	17.3		
	KMD-C20-40(38・42・45)-LO(SL/SSL)	6 20	40(38・42・45)	40(38/36)	37(35/33)	31~37	25・27・29・31・33	40 43	57(55・59・62)	88.5(86.5/84.5)	96.5	30 × 64(62/60)	× 74	16.3		
	KMD-C16-40(38・42・45)-M(H/SH)	6 16	40(38・42・45)	43(45/47)	40(42/44)	36~42	25・27・29・31・33	40 43	53.5(51.5・55.5・58.5)	91.5(93.5/95.5)	97.5	27 × 66.5(68.5/70.5)	× 67.5	15.3		
	KMD-C16-40(38・42・45)-M(H/SH)/SR	6 16	40(38・42・45)	43(45/47)	40(42/44)	36~42	25・27・29・31・33	40 43	55.5(53.5・57.5・60.5)	91.5(93.5/95.5)	97.5	29 × 66.5(68.5/70.5)	× 67.5	16.2		
	KMD-C16-40(38・42・45)-LO(SL/SSL)	6 16	40(38・42・45)	40(38/36)	37(35/33)	31~37	25・27・29・31・33	40 43	53.5(51.5・55.5・58.5)	88.5(86.5/84.5)	96.5	27 × 63(61/59)	× 67.5	15.3		
	KMD-C22-40(38・42・45)-EL-M(H/SH)	6 22	40(38・42・45)	43(45/47)	40(42/44)	32~38	25・27・29・31・33	40 43	57(55・59・62)	91.5(93.5/95.5)	104.5	30 × 66.5(68.5/70.5)	× 76.5	18.8		
	KMD-C22-40(38・42・45)-EL-M(H/SH)/SR	6 22	40(38・42・45)	43(45/47)	40(42/44)	32~38	25・27・29・31・33	40 43	57(55・59・62)	91.5(93.5/95.5)	104.5	30 × 66.5(68.5/70.5)	× 76.5	19.6		
	KMD-C20-40(38・42・45)-EL-LO(SL/SSL)	6 20	40(38・42・45)	40(38/36)	37(35/33)	32~38	25・27・29・31・33	40 43	57(55・59・62)	88.5(86.5/84.5)	104.5	30 × 64(62/60)	× 74	18.6		
	KMD-C16-40(38・42・45)-EL-M(H/SH)	6 16	40(38・42・45)	43(45/47)	40(42/44)	32~38	25・27・29・31・33	40 43	53.5(51.5・55.5・58.5)	91.5(93.5/95.5)	104.5	27 × 66.5(68.5/70.5)	× 67.5	17.6		
	KMD-C16-40(38・42・45)-EL-M(H/SH)/SR	6 16	40(38・42・45)	43(45/47)	40(42/44)	32~38	25・27・29・31・33	40 43	55.5(53.5・57.5・60.5)	91.5(93.5/95.5)	104.5	29 × 66.5(68.5/70.5)	× 67.5	18.5		
	KMD-C16-40(38・42・45)-EL-LO(SL/SSL)	6 16	40(38・42・45)	40(38/36)	37(35/33)	32~38	25・27・29・31・33	40 43	53.5(51.5・55.5・58.5)	88.5(86.5/84.5)	104.5	27 × 63(61/59)	× 67.5	17.6		

独自の曲線フレームが身体にフィットする
次世代型標準タイプです。

次世代型標準

“Next generation
Type Wheelchair”

WAVITRoo	039
WAVITRoo+	041
WAVIT	043
WAVIT+	045
寸法表	047





ウェイビット
WAVIT シリーズ

座るとフィット

使いやすい

WAVIT
ウェイビット



動画をチェック

ウェイビット ルー
WAVIT
Roo



動画をチェック



WAVIT・WAVITRoo シリーズチャート

標準
モジュール

Modern
シリーズ

次世代型
標準

軽量
六輪

リクライ
ニング

子供用
簡易


シャワー用

オーダー
システム

電動

歩行訓練
歩行補助具

オプション&
関連パーツ

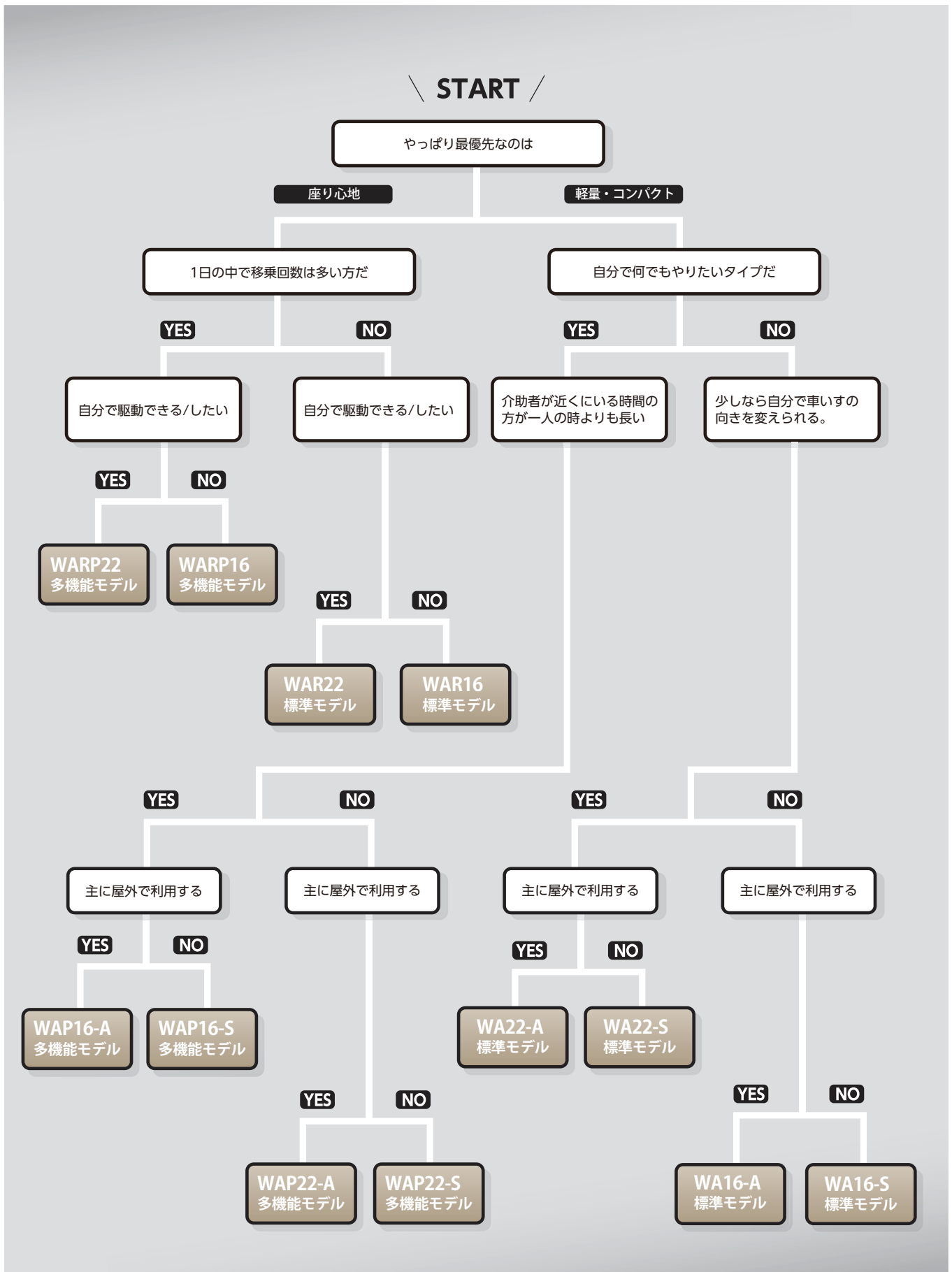

“WAVITRoo” “WAVITRoo+” 共通機能

独自のシーティングシステム 無理のないラクな姿勢で座位を保つことができます。



動画を
チェック



腰上から
膝裏までの
ラインをサポート

ラビック

LAVIC サポート

ランバーサポート

Lumbar support

背中のS字ラインが再現されやすくなり、胸を張った姿勢へ誘導します。



アンカーサポート

Anchor support

前ズレを抑制します。



ペルビックサポート

Pelvic support

骨盤を起こし、上体の荷重を効率的に支えます。



Bridge ブリッジ

フレーム背面に“ブリッジ”という名の連結材を取り付けました。



動画を
チェック



車いすを上げる
だけで自動で
ブリッジが作動

フレームのしなりが軽減されるため、背中と背シートの接地面積が増え、乗り心地がUPします。

一般的な標準車いす



▼ 座ると…



シートがたわんで乗り心地や駆動性に影響がでることも・・・。

WAVITRoo



▼ 座ると…



ブリッジがつっぱることで座り心地がキープされます。

その他の機能

パチパチと音が
鳴りしっかり
止まる!



パチート調節機能



国内特許取得済

工具レスで簡単にフットプレート高さを変更できます。
0.5cmピッチ×13段階

軽い力で
操作ラクラク。



伸縮式駐車用ブレーキ


駐車用ブレーキレバーを引っ張ると、長さが10cm延長され、軽い力で操作できます。

“WAVIT” “WAVIT+” 共通機能

独自の曲線フレーム

圧力測定 ※当社調べ

WAVIT

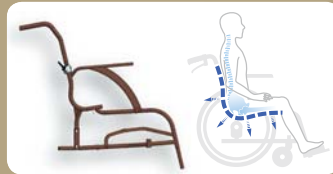

一般的な標準車いす





座った直後

15分後



座った直後

15分後

バックサポート

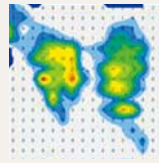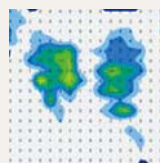



接触面積が広い

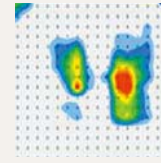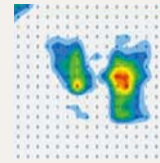

シート



時間経過による
座圧の変化が少ない

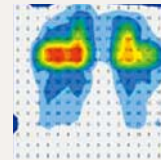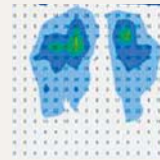

機能一覧

	座幅	前座高	伸縮式 駐車用ブレーキ	パチート 調節機能	跳ね上げ式 アームサポート	スイングイン・アウト式	エレベータリング式
							
WAVIT	40・42cm	44.5cm					
WAVIT+	40・42cm	44.5cm			●	●	
WAVITRoo	40・42・45cm	[SH]47cm [H]45cm [M]43cm	●	●			
WAVITRoo+	40・42・45cm	[SH]47cm [H]45cm [M]43cm	●	●	●	●	●

標準
モジュール

Modern
シリーズ

次世代型
標準

軽量
六輪

リクライ
ニング

子供用
簡易

シャワー用

オーダー
システム

電動

歩行訓練
歩行補助具

オプション&
関連パーツ

剛性度が高く、曲線美が印象的な標準モデル

ウェイビットルー

補装具
レディ
メイド式

WAVITRooシリーズ

自走用 (介助兼用) 22 車輪 インチ × 6 キャスタ インチ

WAR22-40-SH
シート:3D メッシュ

参考価格 ¥145,000 非課税


WAR22-40(42)-M(H/SH) 中・高床 (13.3kg)

TAIS:00160-000307

参考価格 ¥145,000 非課税

WAR22-45-M(H/SH) 中・高床 (13.7kg)

TAIS:00160-000307

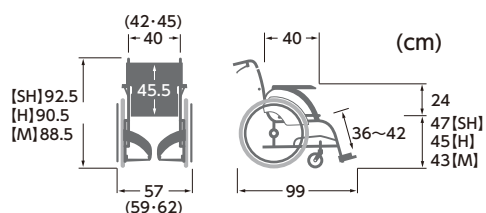

*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

介助用 16 車輪 インチ × 6 キャスタ インチ

WAR16-40-M
シート:ファブリック

参考価格 ¥145,000 非課税


WAR16-40(42)-M(H/SH) 中・高床 (12.7kg)

TAIS:00160-000308

参考価格 ¥145,000 非課税

WAR16-45-M(H/SH) 中・高床 (13.1kg)

TAIS:00160-000308

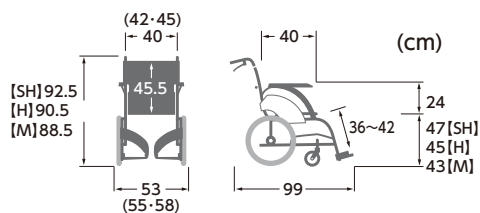

*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

ご注文の際ご指定ください。





●シート幅 40・42・45cm よりお選びいただけます。

※シート幅は、座った状態でのお尻の幅にプラス3〜5cm、介助者の手が入る程度が目安です。

●座面高さ 43(M)・45(H)・47(SH)cm よりお選びいただけます。



●リバーシブルシート 2タイプ よりお選びいただけます。

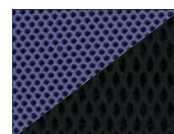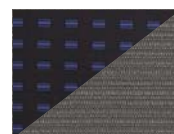3Dメッシュ
(3Dメッシュラベンダー&
3Dメッシュ黒)
(ポリエステル)ファブリック
(ナイトパープル&
チャコールグレー)
(ポリエステル)

WAVITRooの特長

トータルコンタクト

Total contact

背ベースシートのトップと座ベースシートの前端に伸縮生地をレイアウトしました。



部分は伸縮性生地を使用しています。

背

駆動時は肩甲骨への圧迫を弱める効果があり、リラックス姿勢の時はハイバックサポートとして機能します。

座

フットサポートに脚をのせた際にシートと膝裏が干渉する違和感を緩和します。

スタンダップ

Stand up

前方と後方で異なる座面角度によりシーソーの原理で立ち上がりに弾みがつきやすくなりました。



立ち上がりをサポート！



フレームの前端を下げているため前荷重姿勢を取りやすい。




前荷重をかけにくい。

圧力測定 ※当社調べ

WAVITRoo

一般的な標準車いす

バックサポート

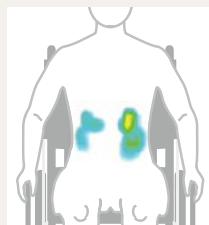


接地面積が広い。

高

接地面積が狭い。




シート

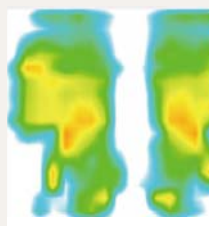

身体のラインに沿っているため体圧分散されている。

低

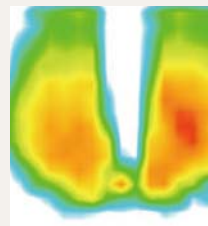

圧が集中してかかっている。

介助者だけでなく、利用者ご自身でも操作しやすい多機能モデル

ウェイビットループラス

 補装具
レディ
メイド式

WAVITRoo+ シリーズ

 自走用
(介助兼用) **22** 車輪
インチ× **6** キャスタ
インチ

 WARP22-40-M
シート:ファブリック

 ●スイングイン・アウト式フット・レッグサポート 参考価格 **¥168,000** 非課税

WARP22-40(42)-M(H/SH) **中・高床** (14.8kg)

TAIS:00160-000309

WARP22-45-M(H/SH) **中・高床** (15.2kg)

TAIS:00160-000309


 ●エレベータリング式フット・レッグサポート 参考価格 **¥195,000** 非課税

WARP22-40(42)EL-M(H/SH) **中・高床** (17.1kg)

TAIS:00160-000323

WARP22-45EL-M(H/SH) **中・高床** (17.5kg)

TAIS:00160-000323

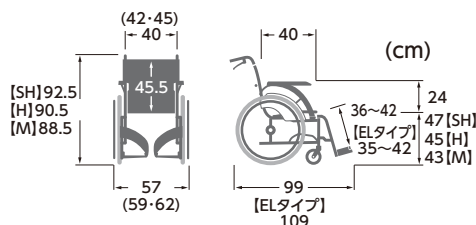

*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

 介助用 **16** 車輪
インチ× **6** キャスタ
インチ

 WARP16-40-SH
シート:3D メッシュ

 ●スイングイン・アウト式フット・レッグサポート 参考価格 **¥168,000** 非課税

WARP16-40(42)-M(H/SH) **中・高床** (14.2kg)

TAIS:00160-000310

WARP16-45-M(H/SH) **中・高床** (14.6kg)

TAIS:00160-000310


 ●エレベータリング式フット・レッグサポート 参考価格 **¥195,000** 非課税

WARP16-40(42)EL-M(H/SH) **中・高床** (16.5kg)

TAIS:00160-000324

WARP16-45EL-M(H/SH) **中・高床** (16.9kg)

TAIS:00160-000324


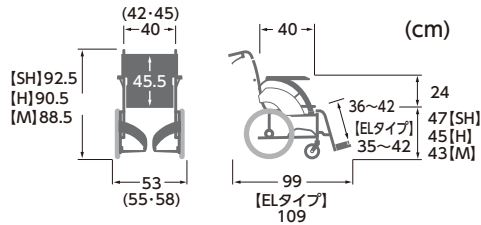



*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

ご注文の際ご指定ください。

●シート幅 **40・42・45cm** よりお選びいただけます。

※シート幅は、座った状態でのお尻の幅にプラス3〜5cm、介助者の手が入る程度が目安です。

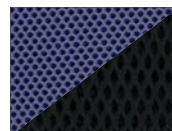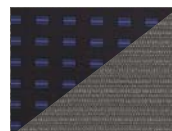●座面高さ **43(M)・45(H)・47(SH)** よりお選びいただけます。●リバーシブルシート **2タイプ** よりお選びいただけます。
 3Dメッシュ
(3Dメッシュラベンダー&
3Dメッシュ黒)
(ポリエステル)

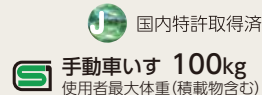 ファブリック
(ナイトパープル&
チャコールグレー)
(ポリエステル)



標準
モジュール

Modern
シリーズ

次世代型
標準

軽量
六輪

リクライ
ニング

子供用
簡易

シャワー用

オーダー
システム

電動

歩行訓練
歩行補助具

オプション&
関連パーツ

WAVITRoo+の特長

トータルコンタクト

Total contact



部分は伸縮性生地を使用しています。

背

駆動時は肩甲骨への圧迫を弱める効果があり、リラックス姿勢の時はハイバックサポートとして機能します。

座

フットサポートに脚をのせた際にシートと膝裏が干渉する違和感を緩和します。


つまむレバーから握るレバーへ

従来の指で操作するレバーと違い、手全体を使った操作にすることで力の弱い方でも利用しやすいレバーになりました。



● 握りやすいレバー形状

操作部を認識しやすい様、レバーをカラーリングしました。また、指をかける箇所には凹凸をつけて握りやすい設計としました。

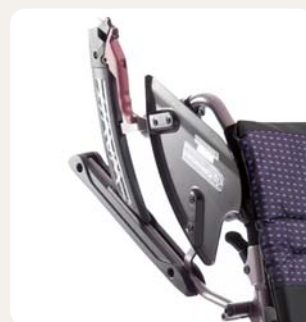

スイングイン機構

● スイングイン・アウト式 フット・レッグサポート (着脱可能)

フット・レッグサポートを内側へ格納・外側へ開放が可能で、握りながら真上に引き抜いて着脱することができます。スペースがない場所に適しています。




着脱レバー操作



スイングアウト機構

● エレベーター式 フット・レッグサポート

脚部角度が調整でき、膝を曲げられない方に適しています。

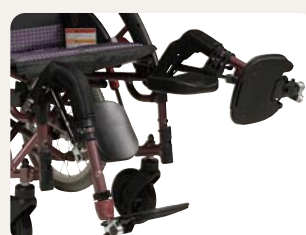

エレベーター式機構

独自の曲線フレームが乗り心地とコンパクトさを生み出しました。

ウェイビット

補装具
レディ
メイド式

WAVITシリーズ

自走用
(介助兼用) **22** 車輪
インチ× **6** キャスタ
インチ



WA22-40A
シート:No.95

●ソフトタイヤ仕様 参考価格 **¥143,000** 非課税

WA22-40(42)S

中床 (12.2kg)


TAIS:00160-000237

●エアタイヤ仕様 参考価格 **¥143,000** 非課税

WA22-40(42)A

中床 (11.8kg)

TAIS:00160-000237

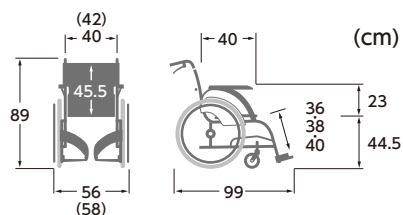

*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

介助用 **16** 車輪
インチ× **6** キャスタ
インチ



WA16-40S
シート:A13

●ソフトタイヤ仕様 参考価格 **¥143,000** 非課税

WA16-40(42)S

中床 (10.9kg)


TAIS:00160-000238

●エアタイヤ仕様 参考価格 **¥143,000** 非課税

WA16-40(42)A

中床 (10.6kg)

TAIS:00160-000238

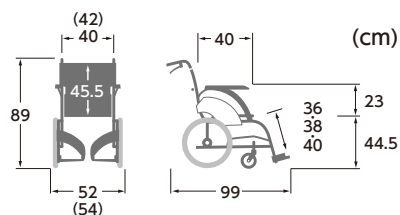

*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

ご注文の際ご指定ください。



●シート幅 **40・42cm** よりお選びいただけます。

*シート幅は、座った状態でのお尻の幅にプラス3～5cm、
介助者の手が入る程度が目安です。



●シートカラー **2色** よりお選びいただけます。

A13



濃紺チェック
(ポリエステル)

No.95



カフェモカ
(ポリエステル)

※お選びいただけます。



背折れ式



ドラム式



ソフト
(ノーバンク)
※

WAVIT
ウェイビット



国内特許取得済



手動車いす 100kg
使用者最大体重(積載物含む)

標準
モジュール

Modern
シリーズ

次世代型
標準

軽量
六輪

リクライ
ニング

子供用
簡易

シャワー用

オーダー
システム

電動


歩行訓練
歩行補助具

オプション&
関連パーツ

WAVITの特長


コンパクト立体構造フレーム

従来のシート幅を確保しつつ車輪の張り出しを抑え、全幅をスリム化。操作性と旋回性の向上を図りました。

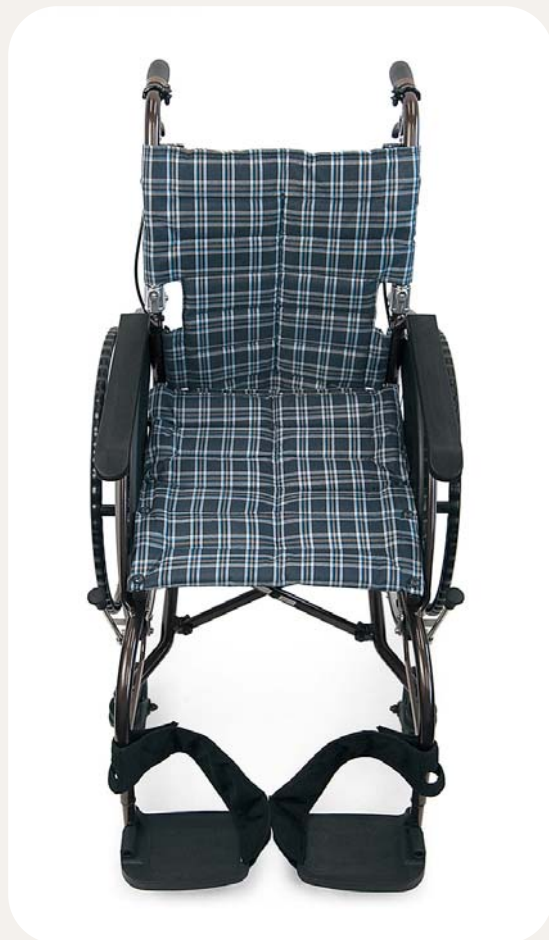

● 駆動しやすい(自走のみ)

全幅56cm(シート幅40cm)の上、ハンドリムが身体に近いので、駆動時に力が入りやすいです。

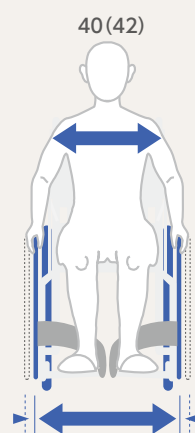

自走用
(介助兼用) **56 (58) cm**

● ワイドレッグフレーム

一般的な標準フレームより3cmレッグフレームを広げ、スペースを確保しました。介助者にご利用者が使用しやすい設計です。

選べる車輪



●ソフトタイヤ仕様
空気補充が不要です。



●エアタイヤ仕様
軽量でクッション性が良好です。

介助者も操作しやすいことを考えた多機能モデル

ウェイビットプラス

補装具
レディ
メイド式

WAVIT+シリーズ

自走用
(介助兼用) **22** インチ × **6** インチ



WAP22-40A
シート:A13

●ソフトタイヤ仕様 参考価格 **¥169,000** 非課税


WAP22-40(42)S 中床 (14.2kg)

TAIS:00160-000242

●エアタイヤ仕様 参考価格 **¥169,000** 非課税

WAP22-40(42)A 中床 (13.9kg)

TAIS:00160-000242

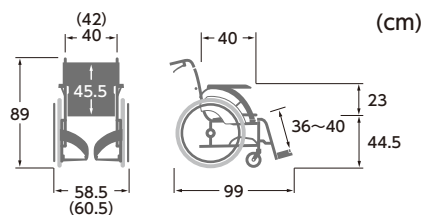

*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

介助用 **16** インチ × **6** インチ



WAP16-40A
シート:No.95

●ソフトタイヤ仕様 参考価格 **¥169,000** 非課税


WAP16-40(42)S 中床 (12.8kg)

TAIS:00160-000243

●エアタイヤ仕様 参考価格 **¥169,000** 非課税

WAP16-40(42)A 中床 (12.5kg)

TAIS:00160-000243

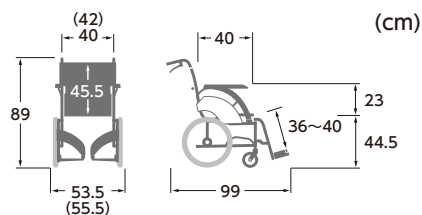

*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

ご注文の際ご指定ください。



●シート幅 **40・42cm** よりお選びいただけます。

※シート幅は、座った状態でのお尻の幅にプラス3〜5cm、介助者の手が入る程度が目安です。



●シートカラー **2色** より

お選びいただけます。

A13



濃紺チェック
(ポリエステル)

No.95



カフェモカ
(ポリエステル)

※お選びいただけます。



WAVIT
ウェイビット



国内特許取得済

手動車いす 100kg
使用者最大体重 (積載物含む)

標準
モジュール

Modern
シリーズ

次世代型
標準

軽量
六輪

リクライ
ニング

子供用
簡易

シャワー用

オーダー
システム

電動

歩行訓練
歩行補助具

オプション&
関連パーツ

WAVIT+の特長


つまむレバーから握るレバーへ

従来の指で操作するレバーと違い、手全体を使った操作にすることで力の弱い方でも利用しやすいレバーになりました。



● 握りやすいレバー形状

操作部を認識しやすい様、レバーをカラーリングしました。また、指をかける箇所には凹凸をつけて握りやすい設計としました。

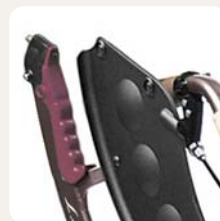

スイングイン機構

● スイングイン・アウト式フット・レッグサポート(着脱可能)

フット・レッグサポートを内側へ格納・外側へ開放が可能な上、握りながら真上に引き抜いて着脱することができます。スペースがない場所に適しています。



着脱レバー操作



スイングアウト機構

選べる車輪



● ソフトタイヤ仕様 空気補充が不要です。



● エアタイヤ仕様 軽量でクッション性が良好です。

寸法表 (cm)

自走式 ※シート幅寸法は、バックサポートフレーム内寸法です。
介助式 ※各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。
※シート色、取付部品により重量・寸法が多少変動いたします。ご了承ください。

シリーズ	品番	車輪 (インチ) キヤスタ(インチ)	シート 幅	前 座 高	後 座 高	バック サポート シート 間隔	アーム サポート 高	シート 奥行	バック サポート 高	全 幅	全 高	全 長	折りたたみ時全幅	折りたたみ時全高	折りたたみ時全長	重量 (kg)	掲載ページ
WAVITRoo	WAR22-40(42)-M(H/SH)	6 22	40(42)	43(45/47)	38(40/42)	36~42	24 40	45.5	57(59)	88.5(90.5/92.5)	99	35 × 66(68/70) × 92	13.3				39・40
	WAR22-45-M(H/SH)	6 22	45	43(45/47)	38(40/42)	36~42	24 40	45.5	62	88.5(90.5/92.5)	99	35 × 66(68/70) × 92	13.7				
	WAR16-40(42)-M(H/SH)	6 16	40(42)	43(45/47)	38(40/42)	36~42	24 40	45.5	53(55)	88.5(90.5/92.5)	99	31 × 66(68/70) × 85.5	12.7				
	WAR16-45-M(H/SH)	6 16	45	43(45/47)	38(40/42)	36~42	24 40	45.5	58	88.5(90.5/92.5)	99	31 × 66(68/70) × 85.5	13.1				
WAVITRoo+	WARP22-40(42)-M(H/SH)	6 22	40(42)	43(45/47)	38(40/42)	36~42	24 40	45.5	57(59)	88.5(90.5/92.5)	99	35 × 66(68/70) × 75	14.8				41・42
	WARP22-45-M(H/SH)	6 22	45	43(45/47)	38(40/42)	36~42	24 40	45.5	62	88.5(90.5/92.5)	99	35 × 66(68/70) × 75	15.2				
	WARP16-40(42)-M(H/SH)	6 16	40(42)	43(45/47)	38(40/42)	36~42	24 40	45.5	53(55)	88.5(90.5/92.5)	99	31 × 66(68/70) × 68	14.2				
	WARP16-45-M(H/SH)	6 16	45	43(45/47)	38(40/42)	36~42	24 40	45.5	58	88.5(90.5/92.5)	99	31 × 66(68/70) × 68	14.6				
	WARP22-40(42)EL-M(H/SH)	6 22	40(42)	43(45/47)	38(40/42)	35~42	24 40	45.5	57(59)	88.5(90.5/92.5)	109	35 × 66(68/70) × 75	17.1				
	WARP22-45EL-M(H/SH)	6 22	45	43(45/47)	38(40/42)	35~42	24 40	45.5	62	88.5(90.5/92.5)	109	35 × 66(68/70) × 75	17.5				
	WARP16-40(42)EL-M(H/SH)	6 16	40(42)	43(45/47)	38(40/42)	35~42	24 40	45.5	53(55)	88.5(90.5/92.5)	109	31 × 66(68/70) × 68	16.5				
	WARP16-45EL-M(H/SH)	6 16	45	43(45/47)	38(40/42)	35~42	24 40	45.5	58	88.5(90.5/92.5)	109	31 × 66(68/70) × 68	16.9				
WAVIT	WA22-40(42)S/A	6 22	40(42)	44.5	41	36・38・40	23 40	45.5	56(58)	89	99	33 × 67 × 95	12.2/11.8				43・44
	WA16-40(42)S/A	6 16	40(42)	44.5	41	36・38・40	23 40	45.5	52(54)	89	99	30 × 67 × 87	10.9/10.6				
WAVIT+	WAP22-40(42)S/A	6 22	40(42)	44.5	41	36~40	23 40	45.5	58.5(60.5)	89	99	34 × 67.5 × 71	14.2/13.9				45・46
	WAP16-40(42)S/A	6 16	40(42)	44.5	41	36~40	23 40	45.5	53.5(55.5)	89	99	30 × 67.5 × 62.5	12.8/12.5				

低床の六輪タイプ。足こぎしやすく、狭い場所でもこまわりが効きます。

持ち上げやすい軽量タイプです。
軽さだけではなく、デザインや機能面もこだわりました。

軽 量

“Light Weight”
Wheelchair

六 輪

“Six-Wheeled” Wheelchair

ふわりす	049
ふわりす+	051
BML	053
低床こまわりくん	054
寸法表	055



カワムラサイクル史上最軽量モデル



動画をチェック

補装具
レディ
メイド式

ふわりすシリーズ

自走用 (介助兼用) **22** 車輪 インチ× **6** キャスタ インチ




KF22-40SB
シート:No.97

参考価格 **¥126,000** 非課税

KF22-40(42)SB

中床 (9.6kg)

TAIS:00160-000241

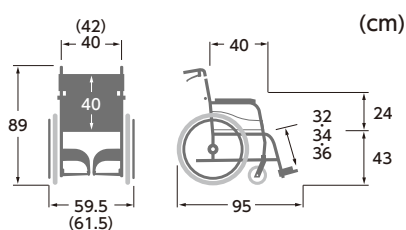

*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

介助用 **16** 車輪 インチ× **6** キャスタ インチ




KF16-40SB
シート:No.96

参考価格 **¥126,000** 非課税

KF16-40(42)SB

中床 (8.9kg)

TAIS:00160-000240

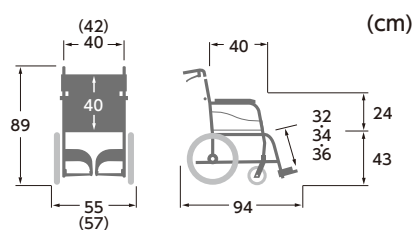

*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

ご注文の際ご指定ください。



●シート幅 **40・42cm** よりお選びいただけます。

※シート幅は、座った状態でのお尻の幅にプラス3～5cm、介助者の手が入る程度が目安です。

4
color

●シート幅 **40** cmはシートカラー **4色** よりお選びいただけます。

2
color

●シート幅 **42** cmは、No.96さんごピンク、No.97すみれパープルの **2色** のみとなります。

No.96



さんごピンク
(ポリエステル)

No.97



すみれパープル
(ポリエステル)

No.105



アイスグリーン
(ポリエステル)

No.106



あんずイエロー
(ポリエステル)



背折れ式 バンド式



国内特許取得済



手動車いす 100kg
使用者最大体重(積載物含む)

標準
モジュール

Modern
シリーズ

次世代型
標準

軽量

リクライ
ニング

子供用
簡易

シャワー用

オーダー
システム

電動

歩行訓練
歩行補助具

オプション&
関連パーツ

ふわりすの特長

カワムラサイクル史上最軽量

軽いので持ち運びやすく、取り回しもラクラク。



従来の強度は保ちつつ、
製造精度と各部パーツ
の見直しにより、自走用
(介助兼用)で総重量
10kg未満を達成。

専用アルミヨーク等



自走用
(介助兼用)

9.6kg

介助用

8.9kg

標準車感覚の軽量車いす

車いすに必要な機能は省かずに軽量化しています。

① こぎやすい バックサポート角

バックサポートを8度後傾
させることにより、シートが
背中に沿いやすくなります。
駆動の際も腕に干渉しにく
なっています。



④ フットサポート・ シート間距離調節

(2cmピッチ)
3段階で調節できます。



② 長めのアームサポート

プッシュアップしやすい
位置までアームサポートの
長さを確保しています。



③ ヒールループ標準装備

かかとのずれ落ちを防ぎ
ます。
フットプレート跳ね上げ時、
立ち座りしやすいよう足
が引ける状態になります。



車載が多い方にもおすすめの軽量多機能モデル



動画をチェック

補装具
レディ
メイド式

ふわりす+シリーズ

自走用
(介助兼用) **22** インチ × **6** インチ




KFP22-40SB
シート:No.97

参考価格 **¥145,000** 非課税

KFP22-40 (42) SB

中床 (10.9kg)

TAIS:00160-000249

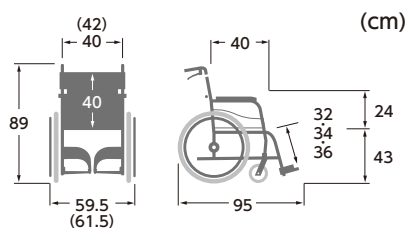

*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

介助用 **16** インチ × **6** インチ




KFP16-40SB
シート:No.96

参考価格 **¥145,000** 非課税

KFP16-40 (42) SB

中床 (9.9kg)

TAIS:00160-000248

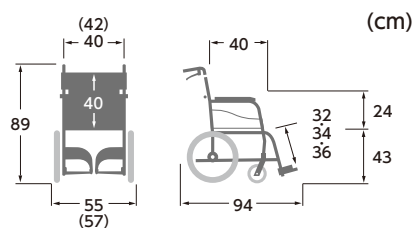

*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

ご注文の際ご指定ください。



●シート幅 **40・42cm** よりお選びいただけます。

※シート幅は、座った状態でのお尻の幅にプラス3～5cm、
介助者の手が入る程度が目安です。



●シートカラー **2色** より

お選びいただけます。

No.96



さんごピンク
(ポリエステル)

No.97



すみれパープル
(ポリエステル)



手動車いす 100kg
使用者最大体重 (積載物含む)

標準
モジュール

Modern
シリーズ

次世代型
標準

軽量

リクライ
ニング

子供用
簡易

シャワー用

オーダー
システム

電動

歩行訓練
歩行補助具

オプション&
関連パーツ

ふわりす+の特長

跳ね上げしやすい操作レバー

ご利用者も介助者も使いやすい。



操作部を認識しやすい様、レバーをカラーリングしました。
また、跳ね上げレバーは、指をかけやすいようにサイドガードの形状にも工夫しました。



標準車感覚の軽量車いす

車いすに必要な機能は省かずに軽量化しています。

① 跳ね上げ式 アームサポート

後方に跳ね上げ、肘掛け部分をオープンにできます。ベッドサイドなどからの移乗がスムーズに行えます。



② こぎやすい バックサポート角

バックサポートを8度後傾させることにより、シートが背中に沿いやすくなります。駆動の際も腕に干渉しにくくなっています。



③ 長めのアームサポート プッシュアップしやすい 位置までアームサポート の長さを確保しています。



④ スイングアウト式 フット・レッグサポート

脚部を開くことができます。着脱もできるので移乗などに便利です。



⑤ ヒールループ標準装備

かかとのずれ落ちを防ぎます。
フットプレート跳ね上げ時、立ち座りしやすいよう足が引ける状態になります。



⑥ フットサポート・ シート間距離調節 (2cmピッチ) 3段階で調節できます。



オシャレで軽量、コンパクトシリーズ



補装具
レディ
メイド式

BMLシリーズ

手動車いす 100kg
使用者最大体重(積載物含む)

自走用
(介助兼用) **22** インチ × **7** キャスタ
車輪 インチ



BML22-40SB
シート:No.93

介助用 **16** インチ × **7** キャスタ
車輪 インチ




BML16-40SB
シート:No.92

参考価格 **¥90,000** 非課税

BML22-40SB

中床 (11.7kg)

TAIS:00160-000174

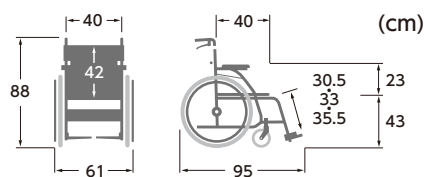


*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

参考価格 **¥90,000** 非課税

BML16-40SB

中床 (10.3kg)


TAIS:00160-000176

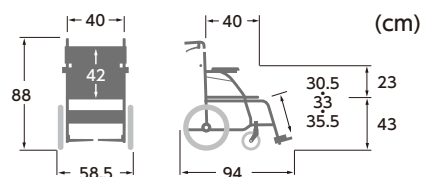

*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

ご注文の際
ご指定ください。

2 color ●シートカラー **2色** より
お選びいただけます。

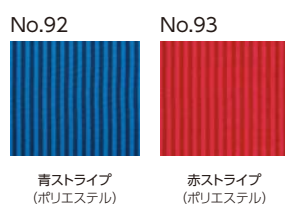


青ストライプ
(ポリエステル)

赤ストライプ
(ポリエステル)

ソフトタイヤ付車輪

従来のノーパンクタイヤと比較して
静止力が30%UPします。(当社比)

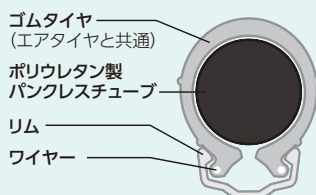

- ひび割れや変色が起こりにくく、耐久性、静止力に優れています。
- 空気補充不要。
- 空気の入れすぎや高温等による破裂がありません。

フットサポート・シート間距離調節



(2.5cmピッチ) 3段階で調節できます。

標準
モジュールModern
シリーズ次世代型
標準

軽量

六輪

リクライ
ニング子供用
簡易

シャワー用

オーダー
システム

電動

歩行訓練
歩行補助具オプション&
関連パーツ補装具
レディ
メイド式

低床こまわりくんシリーズ

自走用
(介助兼用) **20** 車輪
インチ× **4** 前後キャスタ
インチKAK20-40B-LO
シート:A9参考価格 **¥191,000** 非課税

KAK20-40B-LO

低床 (18.0kg)

TAIS:00160-000265

介助用 **16** 車輪
インチ× **4** 前後キャスタ
インチKAK16-40B-LO
シート:A11参考価格 **¥191,000** 非課税

KAK16-40B-LO

低床 (16.8kg)


TAIS:00160-000267

自走用
(介助兼用) **18** 車輪
インチ× **4** 前後キャスタ
インチ参考価格 **¥191,000** 非課税

KAK18-40B-LO

低床 (17.7kg)

TAIS:00160-000266

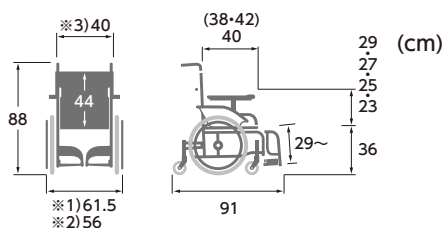

全幅

※1) 車輪20・18インチ

※2) 車輪16インチ

シート幅

※3) アームパイプ内寸の寸法です。

※各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

ご注文の際ご指定ください。

3
color

●シートカラー (3色) よりお選びいただけます。

A9

緑チェック
(ポリエステル)

A11

紫チェック
(ポリエステル)

No.88

エコブラック
(ビニールレザー)

70cm幅の廊下を曲がれます。

適合調整シート&座シート奥行調節機能等、コンパクトで機能も充実ノーパンク仕様。シート高さは低めの36cm、低床タイプ。

スイングアウト式 フット・レッグサポート

乗り降りや足こぎする際、足元を広く使えます。

シート奥行調節可能


シート奥行を2cmピッチ3段階で調節できます。

※シート奥行は、40cmの設定にて出荷いたします。



ヒールループ標準装備

かかとのずれ落ちを防ぎます。フットプレート跳ね上げ時、立ち座りしやすいよう足が引ける状態になります。

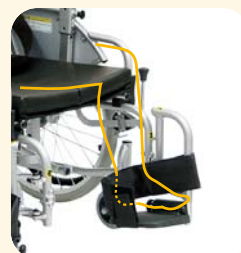

寸法表 (cm)

シリーズ	品番	※シート幅寸法は、バックサポートフレーム内寸法です。 ※各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。 ※シート色、取付部品により重量・寸法が多少変動いたします。ご了承ください。																		掲載ページ
		キャスタ(インチ)	車輪(インチ)	後キャスタ(インチ)	シート幅	前座高	後座高	バックサポートシート間距離	アームサポート高	シート奥行	バックサポート高	全幅	全高	全長	折りたたみ時全幅	折りたたみ時全高	折りたたみ時全長	重量(kg)		
ふわりす	KF22-40(42)SB	6	22	—	40(42)	43	40.5	32・34・36	24	40	40	59.5(61.5)	89	95	33 × 66 × 93	9.6	49・50			
	KF16-40(42)SB	6	16	—	40(42)	43	40.5	32・34・36	24	40	40	55(57)	89	94	28 × 66 × 84	8.9				
ふわりす+	KFP22-40(42)SB	6	22	—	40(42)	43	40.5	32・34・36	24	40	40	59.5(61.5)	89	95	33 × 66 × 71.5	10.9	51・52			
	KFP16-40(42)SB	6	16	—	40(42)	43	40.5	32・34・36	24	40	40	55(57)	89	94	28 × 66 × 62.5	9.9				
BML	BML22-40SB	7	22	—	40	43	40	30.5・33・35.5	23	40	42	61	88	95	33 × 67.5 × 93.5	11.7	53			
	BML16-40SB	7	16	—	40	43	40	30.5・33・35.5	23	40	42	58.5	88	94	30 × 67.5 × 85	10.3				
KAK-LO	KAK20-40B-LO	4	20	4	※40	36	33.5	29～	23・25・27・29	40(38・42)	44	61.5	88	91	35 × 66 × 71	18.0	54			
	KAK18-40B-LO	4	18	4	※40	36	33.5	29～	23・25・27・29	40(38・42)	44	61.5	88	91	35 × 66 × 71	17.7				
	KAK16-40B-LO	4	16	4	※40	36	33.5	29～	23・25・27・29	40(38・42)	44	56	88	91	31 × 66 × 71	16.8				

※アームパイプ内寸法
座パイプ外外寸法(380mm)

酸素ボンベ架台〈2WAY用〉 (転倒防止金具を 取り付けた酸素ボンベ架台)



装着例

※酸素ボンベは商品には含まれません。

“2サイズ”の酸素ボンベに “1個”で対応できます。

標準品

TAIS:00160-000306

参考価格	新車ご購入時の 取付価格※1	中床用 低床用	¥23,100 増/個 非課税
	部品のみ ご購入価格	中床用 低床用	¥24,200/個 税込

・中床用(ティッピング高さ約13~19cm)

・低床用(ティッピング高さ約7~12cm)

その他専用品

KA800シリーズ、RR42/RR43シリーズ、RR52/RR53シリーズ、KPFシリーズ、WARシリーズ※2、WARPシリーズ※2、SYP


参考価格	新車ご購入時の 取付価格※1	中床用 低床用	¥28,600 増/個 非課税
	部品のみ ご購入価格	中床用 低床用	¥30,250/個 税込

※1 新車ご購入時の取付価格には部品の代金を含んでおります。


※2 左側仕様となります。一部取り付けできない仕様があります。

重量：2.9kg

工具レスの簡単切り替え

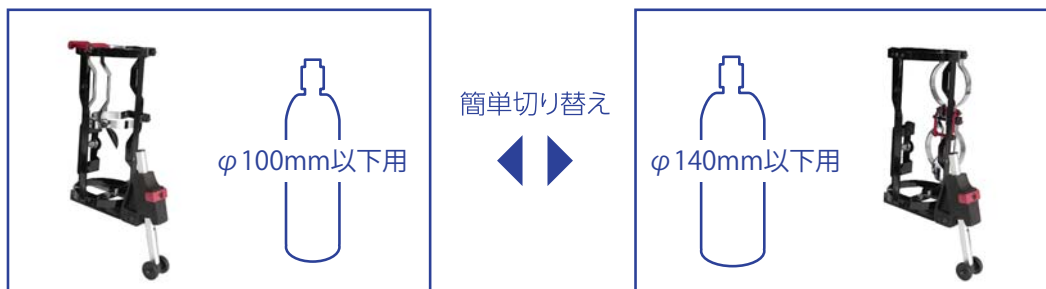

転倒防止付きだから安心

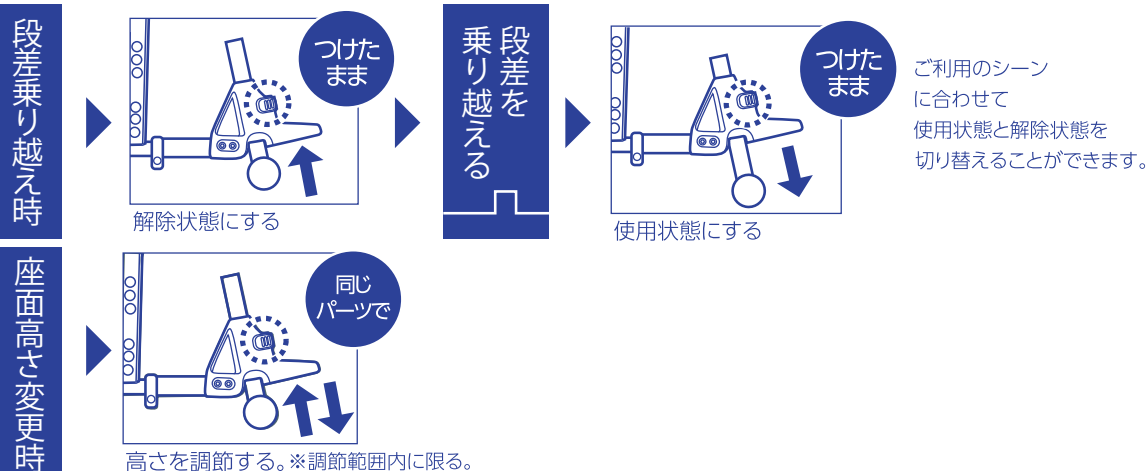


<中床用>取付可能車種:KR801N,KMD-Aシリーズ,KA800-H・M(専),KA822-LO(専),KA820-LO(専),KMD-B/C・M・H・SH,RR52/53シリーズ(専),KFPシリーズ,KFPシリーズ,KV,SY-SH

<低床用>取付可能車種:KA800-SL(専),KA816-LO(専),KMD-B/C-LO・SL・SSL,RR42シリーズ(専)/RR43シリーズ(専),KPFシリーズ(専),WAR22-H/SH(専)、WARP22-H/SH(専)、WAR16-H(専)、WARP16-H(専)、SY-N,SY-NB,BK,SYP(専)

(専):専用品

リクライニング シリーズチャート

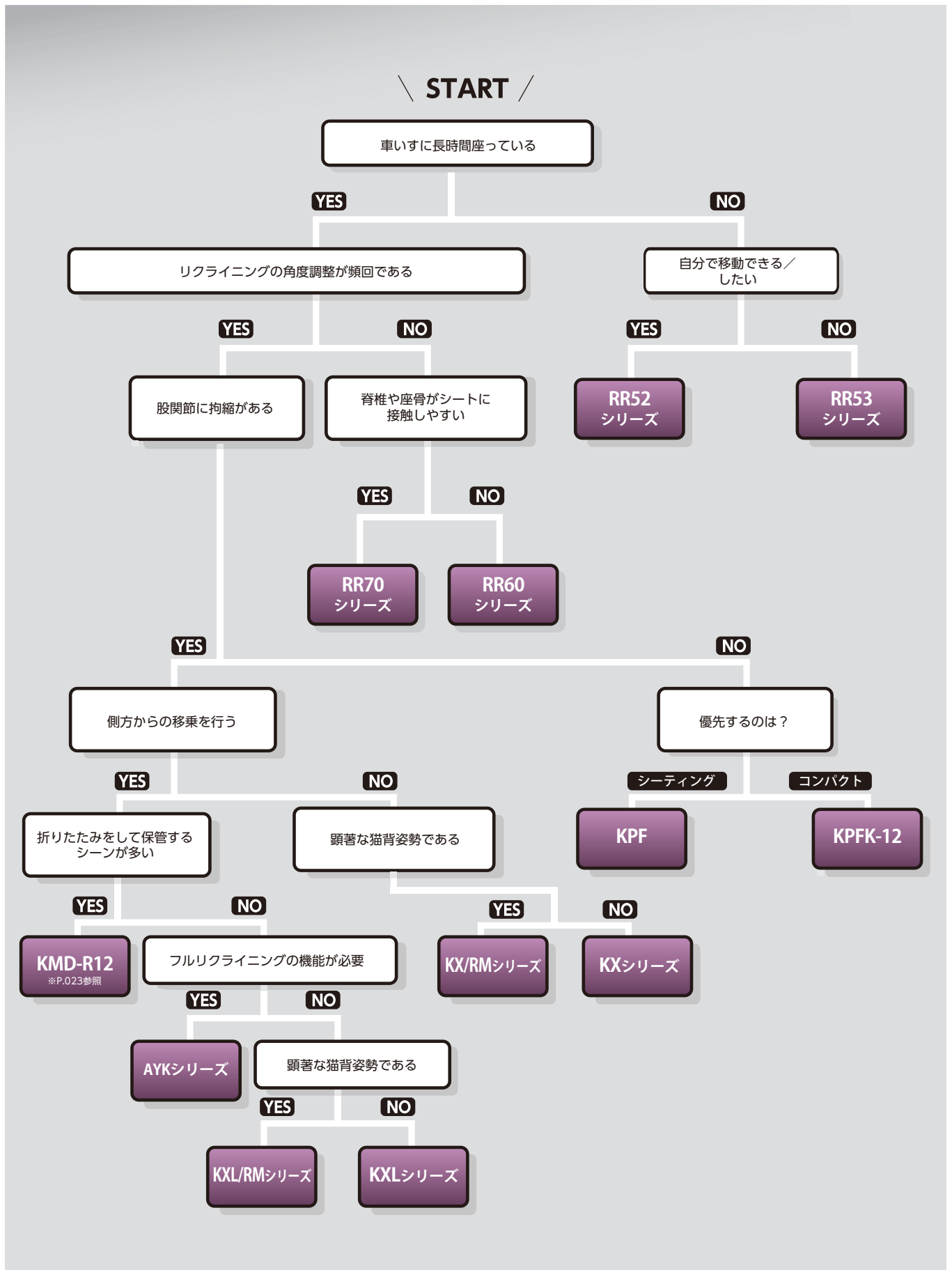

リクライニングのくつろぎ感、ティルトによる安定性など
姿勢保持や座り心地を重視したタイプです。

リクライニング

“Reclining” Wheelchair

くるーん	059
RR52	061
RR53	062
RR60/RR70	063
グリオネット	064
KX	065
KXL	066
KPF	067
寸法表	069



姿勢保持のお手本!!KPFのコンパクトタイプ



動画をチェック

補装具
レディ
メイド式

くるーん

介助用 **12** 車輪 **6** キャスタ
インチ×インチ




KPFK-12
シート:No.102

参考価格 **¥247,000** 非課税

KPFK-12

低床 (21.5kg)

TAIS:00160-000250

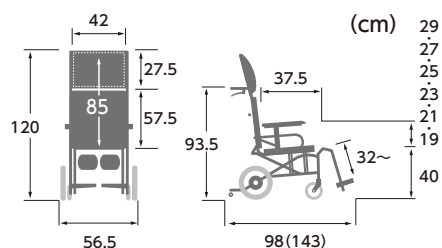

()内、最長時寸法

*手押しハンドル高さ、全長、全高、フットサポート・シート間距離は、バックサポートを最も起こした時の寸法です。

*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

1
color



No.102
ピーコックブルー
(ポリエステル)


認識しやすい
カラーレバー

操作部が認識しやすい様に、
レバーをカラーリングしました。



角度調整式フットサポート

コンパクトに収納可能

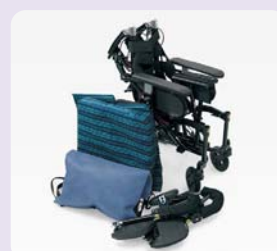



標準
モジュール

Modern
シリーズ

次世代型
標準

軽量
六輪

リクライ
ニング

子供用
簡易

シャワー用

オーダー
システム

電動

歩行訓練
歩行補助具


オプション&
関連パーツ

くるーんの特長

新リクライニング機構

ぴったりフィット機構

〈国内特許取得済〉

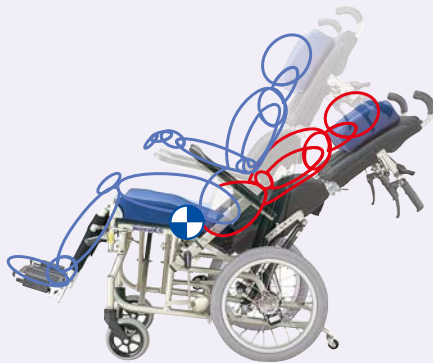

バックサポートを“倒す・起こす”の動作を繰り返してもお尻がズレにくく、安定した座位が保てます。



ティルト・リクライニング角度

120° 90°

＜無段階調整＞

背張り調整 ベルトの伸縮により、背中動きを追従。



■スキニーズベルト

背中への張り調整部に伸縮する部分を設けました。この部分の「スキマ」の空き方を見ながらベルトの張り直しをすることで、従来より簡単に調整ができます。



頭部支持クッション 左右独立して厚さ調整ができるため、様々な姿勢に合わせることができます。



※未調整時のサイズ


■すきまレスピロー

大粒ビーズが頭部の動きに追従し、しっかりと保持します。左右に取り付けられたベルトの長さを調整することで、枕の厚さを簡単に変えられます。



調整方法をチェック

位置の目安

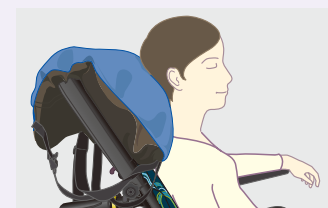

[アルミ]
フルリクライニングの定番(自走用)

補装具
レディ
メイド式

RR52




自走用
(介助兼用)

24^{車輪}インチ×7^{キャスト}インチ



RR52-N
シート:A3

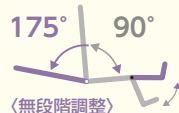

1
color




A3
紺チェック
(ポリエステル)

●標準型アームサポート仕様

参考価格 **¥170,800** 非課税

RR52-NB

高床 (22.9kg)

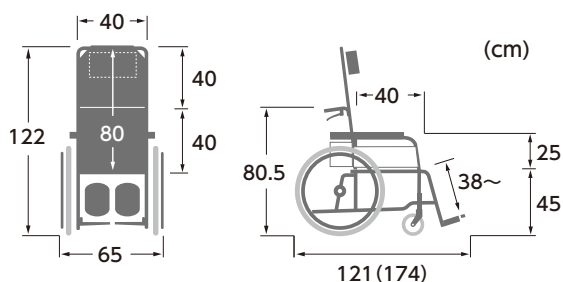

()内、最長寸法


*手押しハンドル高さ、全長、全高、フットサポート・シート間距離は、バックサポートを最も起こした時の寸法です。
*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

着脱式アームサポート
取り付け・取り外しがで
きます。



エレベーター&
スイングアウト式

脚部角度が調節できます。
また、脚部を開くこともできます。
※着脱可能

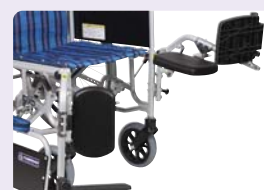

[アルミ]
フルリクライニングの定番(介助用)

補装具
レディ
メイド式

RR53



標準
モジュール

Modern
シリーズ

次世代型
標準

軽量
六輪

リクライ
ニング

子供用
簡易

シャワー用

オーダー
システム

電動


歩行訓練
歩行補助具

オプション&
関連パーツ

介助用 **16** 車輪 **7** キャスタ
インチ×インチ



RR53-NB
シート:A3

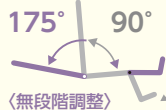

1
color



A3
紺チェック
(ポリエステル)


●標準型アームサポート仕様

参考価格 **¥170,800** 非課税

RR53-NB

TAIS:00160-000278

高床 (20.9kg)

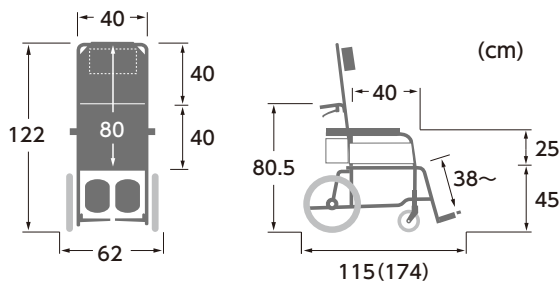

*手押しハンドル高さ、全長、全高、フットサポート・シート間距離は、バックサポートを最も起こした時の寸法です。
*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

折りたたみ
コンパクトに保管して
いただけます。



おすすめ
オプション



装着例

**酸素ボンベ架台
〈RR専用〉**

φ100mm以下用 (参考価格)

取付価格 **¥11,990増/個** 非課税

部品価格 **¥11,979/個** 税込

TAIS:00160-000270

φ130mm以下用 (参考価格)

取付価格 **¥14,410増/個** 非課税

部品価格 **¥14,641/個** 税込

TAIS:00160-000271

※各取付車種用をご指定ください。
※中床用か低床用をご指定下さい。
※右側・左側をご指定ください。
(指定がなければ右側へ取り付けとなります。)
※ボンベサイズによりバックサポート角度が
制限される場合があります。

オプション&関連パーツ(P.102~)も
併せてご参照ください。

バックサポートとフット・レッグサポートが連動して動きます。

補装具
レディ
メイド式

RR60/RR70シリーズ



フルリクライニング



背座クッション（着脱式）



落とし込み式



高さ調節式



バンド式




足踏み式

※車種によって異なります。

バックサポート、
フット・レッグサポート
連動調整

<無段階調整>

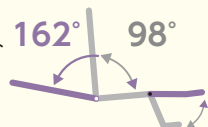介助用 **12** 車輪 **7** キャスタ
インチ×インチ

シートクッション厚み

〈バックサポート 5.5cm厚〉
〈座 5.5cm厚〉
〈フット・レッグサポート 5.5cm厚〉RR60NB
シート:No.114

跳ね上げ式フットサポート

乗車の際や収納時などに、フット
サポートが折りたためます。介助用 **12** 車輪 **7** キャスタ
インチ×インチ

シートクッション厚み

〈バックサポート 8cm厚〉
〈座 7cm厚〉
〈フット・レッグサポート 4.5cm厚〉RR70N
シート:No.43

● 介助用ブレーキなし

参考価格 **¥184,000** 非課税

RR60N

中床 (23.0kg)

TAIS:00160-000068


● 介助用ブレーキ付

参考価格 **¥194,000** 非課税

RR60NB

中床 (24.0kg)

TAIS:00160-000164

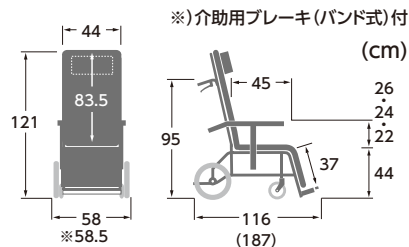

()内、最長時寸法

※手押しハンドル高さ、全長、全高、フットサポート・シート間距離は、
バックサポートを最も起こした時の寸法です。

※各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

● 介助用ブレーキなし

参考価格 **¥207,000** 非課税

RR70N

中床 (23.0kg)

TAIS:00160-000118


● 介助用ブレーキ付

参考価格 **¥217,000** 非課税

RR70NB

中床 (24.0kg)

TAIS:00160-000284

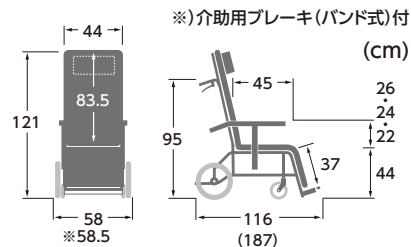

()内、最長時寸法

※手押しハンドル高さ、全長、全高、フットサポート・シート間距離は、
バックサポートを最も起こした時の寸法です。

※各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

2 color

RR60シリーズ

● シートカラー (2色) より
お選びいただけます。

No.114

ラベンダー
(アクリル)

No.43

緑
(ビニールレザー)

1 color

RR70シリーズ

※ シートカラー選択は
ありません。

No.43

緑
(ビニールレザー)

フルリクライニング機能とティルト機能を兼ねそろえた車いす
姿勢保持力も優れています。



補装具
レディ
メイド式

クリオネットシリーズ あい&ゆうき



標準
モジュール

Modern
シリーズ

次世代型
標準

軽量
六輪

リクライ
ニング

子供用
簡易

シャワー用


オーダー
システム

電動


歩行訓練
歩行補助具

オプション&
関連パーツ

ティルト時
シート調整角度:0~30°
<無段階調整>

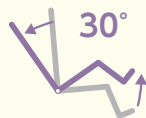

フルリクライニング時
バックサポート調整角度:0~80°
<無段階調整>

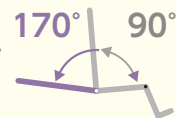

介助用 **12** 車輪 **6** カスタ
インチ×インチ

足ベルトタイプ



AYK-40
シート:No.40



ふくらはぎパッドタイプ



パッドの角度も調節できます。

AYK-40EL
シート:A13




●足ベルトタイプ

参考価格 **¥220,000** 非課税

AYK-40

中床 (24.0kg)

TAIS:00160-000212

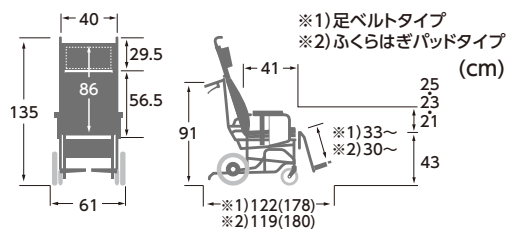

()内、最長時寸法

*手押しハンドル高さ、全長、全高、フットサポート・シート間距離は、
バックサポートを最も起こした時の寸法です。

*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。



●ふくらはぎパッドタイプ

参考価格 **¥230,000** 非課税

AYK-40EL

中床 (25.5kg)

TAIS:00160-000268

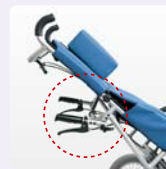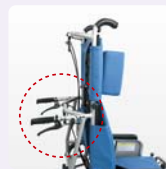

手押しハンドル角度調整

シート可動時やティルト・リクライニング状態での
使用の際に、介助される方が操作しやすい角度に
調節できます。

ティルト機能



AYK-40 140cm
AYK-40EL 139cm

リクライニング
機能



AYK-40 178cm
AYK-40EL 180cm

2
color

●シートカラー
2色 より
お選びいただけます。

A13



濃紺チェック
(ポリエステル)

No.40



青レザー
(ビニールレザー)

元祖ティルト&リクライニング車いす

補装具 レディメイド式 **KXシリーズ**



自走用 (介助兼用) **22** インチ車輪 × **7** インチキャスタ




KX22-42II
シート:No.99

- ラクまくら
角度可変式
ヘッドサポート
(標準装備)仕様

<可動域>
●前方32cm・後方19cm・
上方36cm・左右20cmまで可動。
※工具なしで取付・調整可能です。

※ラクまくら単品の部品価格
¥30,250/個 (税込) となります。

スイングイン・アウト式

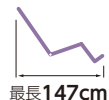

- スイングイン・アウト式フット・レッグサポート

標準仕様 参考価格 **¥193,800** (非課税)

KX22-42II 高床 (24.5kg)

TAIS:00160-000125

ラクまくら(標準装備)仕様 参考価格 **¥222,000** (非課税)

KX22-42II/RM 高床 (25.5kg)

- エレベータリング&スイングイン・アウト式フット・レッグサポート


標準仕様 参考価格 **¥211,800** (非課税)

KX22-42EL-II 高床 (26.0kg)

TAIS:00160-000205

ラクまくら(標準装備)仕様 参考価格 **¥240,000** (非課税)

KX22-42EL-II/RM 高床 (27.0kg)

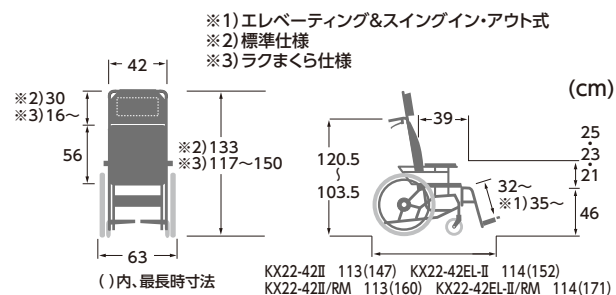

*手押しハンドル高さ、全長、全高、フットサポート・シート間距離は、バックサポートを最も起こした時の寸法です。*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

介助用 **16** インチ車輪 × **6** インチキャスタ



KX16-42II
シート:A13

- スイングイン・アウト式フット・レッグサポート

標準仕様 参考価格 **¥193,800** (非課税)

KX16-42II 中床 (23.0kg)

TAIS:00160-000126

ラクまくら(標準装備)仕様 参考価格 **¥222,000** (非課税)

KX16-42II/RM 中床 (24.0kg)

- エレベータリング&スイングイン・アウト式フット・レッグサポート


標準仕様 参考価格 **¥211,800** (非課税)

KX16-42EL-II 中床 (24.5kg)

TAIS:00160-000206

ラクまくら(標準装備)仕様 参考価格 **¥240,000** (非課税)

KX16-42EL-II/RM 中床 (25.5kg)

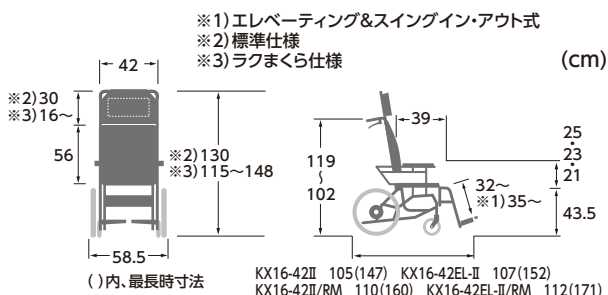

ご注文の際ご指定ください。

3 color ●シートカラー (3色) より
お選びいただけます。

No.99 A13 No.47



シアンレザー (ビニールレザー) 濃紺チェック (ポリエステル) 本革調 緑 (ビニールレザー)

エレベータリング&
スイングイン・アウト式
※パッドの取付位置調節可能



折りたたみ
コンパクトに保管して
いただけます。



KXのシンプルタイプ

補装具
レディ
メイド式

KXLシリーズ



標準
モジュール

Modern
シリーズ

次世代型
標準

軽量
六輪

リクライ
ニング

子供用
簡易

シャワー用

オーダー
システム

電動

歩行訓練
歩行補助具

オプション&
関連パーツ

介助用 **16** 車輪 **6** キャスタ
インチ×インチ



KXL16-42
シート:No.47

●スイングアウト式フット・レッグサポート

標準仕様

参考価格 **¥166,000** 非課税

KXL16-42

中床 (21.0kg)

TAIS:00160-000244

ラクまくら(標準装備)仕様

参考価格 **¥196,000** 非課税

KXL16-42/RM

中床 (22.0kg)

TAIS:00160-000317

●エレベーター&スイングアウト式フット・レッグサポート

標準仕様

参考価格 **¥184,000** 非課税

KXL16-42EL

中床 (23.5kg)

TAIS:00160-000204


ラクまくら(標準装備)仕様

参考価格 **¥212,000** 非課税

KXL16-42EL/RM

中床 (24.5kg)

TAIS:00160-000318

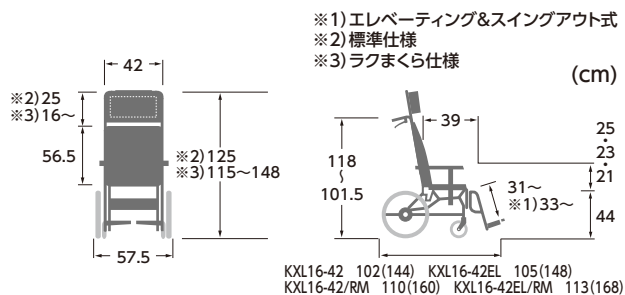

*手押しハンドル高さ、全長、全高、フットサポート・シート間距離は、バックサポートを最も起こした時の寸法です。
*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。


“拘束ゼロ”の座位保持をめざして

KX・KXL 共通

●ティルト機能(シート調整角度:0~20°)



●リクライニング機能(バックサポート調整角度:0~30°)

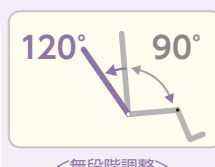

前後折りたたみ式

エレベーター&スイングアウト式(KXL)
エレベーター&スイングイン・アウト式(KX)

※パッドの取付位置調節可能



●ラクまくら
角度可変式ヘッドサポート
(標準装備)仕様

<可動域>

●前方32cm・後方19cm・上方36cm
左右20cmまで可動。
※工具なしで取付・調整可能です。

※ラクまくら単品の部品価格は ¥30,250/個 (税込) となります。

ご注文の際ご指定ください。

3 color ●シートカラー (3色) より
お選びいただけます。

No.99

A13

No.47



シアンレザー
(ビニールレザー)



濃紺チェック
(ポリエステル)



本革調 緑
(ビニールレザー)



標準
モジュール

Modern
シリーズ

次世代型
標準

軽量
六輪

リクライ
ニング

子供用
簡易

シャワー用

オーダー
システム

電動

歩行訓練
歩行補助具

オプション&
関連パーツ

KPFの特長

座位保持を追求

お尻が前にズレにくい! ティルトとリクライニングがひとつになった!!

新リクライニング機構

ぴったりフィット機構


バックサポートを“倒す・起こす”の動作を繰り返してもお尻がズレにくく、安定した座位が保てます。



ティルト・リクライニング角度

135° 110°

<無段階調整>

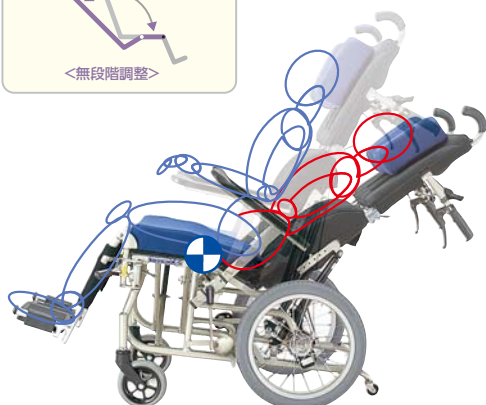

低反発アンカークッション

身体をやさしく包みこむようなフィット感で座り心地と座位保持をサポートします。

前 7cm

後 5cm




体が横倒れしにくい!

左右独立適合調整シート・体幹支持パッド

背中中の形状に合わせて張り調整ができます。背部への圧迫が少なくなり、体の“横倒れ”を抑えることができます。

※面ファスナー調整式ですので、位置の変更も可能です。

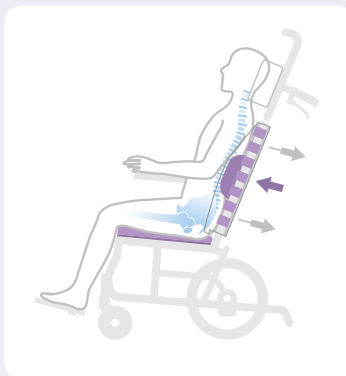

コンパクトに収納可能



寸法表 (cm)

自走式 ※シート幅寸法は、バックサポートフレーム内寸法です。
 介助式 ※各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。
 ※シート色、取付部品により重量・寸法が多少変動いたします。ご了承ください。

シリーズ	品番	キヤスタ (インチ)	車輪 (インチ)	シート 幅	前 座 高	後 座 高	シート 間隔	アーム サポート 高	シート 奥行	バック サポート 高	全 幅	全 高	全 長 (最長時)	折りたたみ時 全幅	折りたたみ時 全高	折りたたみ時 全長	重量 (kg)	掲載 ページ
くるーん	KPFK-12	6	12	42	40	37	32~	19・21・23・ 25・27・29	37.5	85	56.5	120	98(143)	35 × 77 × 72	21.5			59・60
RR52/53	RR52-NB	7	24	40	45	43	38~	25	40	80	65	122	121(174)	39 × 82 × 89	22.9			61
	RR53-NB	7	16	40	45	42	38~	25	40	80	62	122	115(174)	36 × 82 × 83	20.9			62
RR60	RR60N	7	12	44	44	40.5	37	22・24・26	45	83.5	58	121	116(187)	58 × 67 × 101	23.0			63
	RR60NB	7	12	44	44	40.5	37	22・24・26	45	83.5	58.5	121	116(187)	58.5 × 67 × 101	24.0			
RR70	RR70N	7	12	44	44	40.5	37	22・24・26	45	83.5	58	121	116(187)	58 × 67 × 101	23.0			63
	RR70NB	7	12	44	44	40.5	37	22・24・26	45	83.5	58.5	121	116(187)	58.5 × 67 × 101	24.0			
グリオネット	AYK-40	6	12	40	43	—	33~	21・23・25	41	86	61	135	122(178)	61 × 87 × 83	24.0			64
	AYK-40EL	6	12	40	43	—	30~	21・23・25	41	86	61	135	119(180)	61 × 87 × 83	25.5			
KX	KX22-42II	7	22	42	46	—	32~	21・23・25	39	86	63	133	113(147)	63 × 67 × 100	24.5			65
	KX22-42II/RM	7	22	42	46	—	32~	21・23・25	39	86	63	117~150	113(160)	63 × 67 × 100	25.5			
	KX22-42EL-II	7	22	42	46	—	35~	21・23・25	39	86	63	133	114(152)	63 × 67 × 100	26.0			
	KX22-42EL-II/RM	7	22	42	46	—	35~	21・23・25	39	86	63	117~150	114(171)	63 × 67 × 100	27.0			
	KX16-42II	6	16	42	43.5	—	32~	21・23・25	39	86	58.5	130	105(147)	58.5 × 65 × 94	23.0			
	KX16-42II/RM	6	16	42	43.5	—	32~	21・23・25	39	86	58.5	115~148	110(160)	58.5 × 65 × 94	24.0			
	KX16-42EL-II	6	16	42	43.5	—	35~	21・23・25	39	86	58.5	130	107(152)	58.5 × 65 × 94	24.5			
	KX16-42EL-II/RM	6	16	42	43.5	—	35~	21・23・25	39	86	58.5	115~148	112(171)	58.5 × 65 × 94	25.5			
KXL	KXL16-42	6	16	42	44	—	31~	21・23・25	39	81.5	57.5	125	102(144)	57.5 × 60 × 91	21.0			66
	KXL16-42/RM	6	16	42	44	—	31~	21・23・25	39	81.5	57.5	115~148	110(160)	57.5 × 60 × 91	22.0			
	KXL16-42EL	6	16	42	44	—	33~	21・23・25	39	81.5	57.5	125	105(148)	57.5 × 60 × 91	23.5			
	KXL16-42EL/RM	6	16	42	44	—	33~	21・23・25	39	81.5	57.5	115~148	113(168)	57.5 × 60 × 91	24.5			
KPF	KPF16-40(42)	6	16	40(42)	46	—	33~	19・21・23・25・27	36	84	60(62)	126	124(155)	38 × 86 × 101	20.5			67
	KPF16-40(42)ABF	6	16	40(42)	46	—	33~	19・21・23・25・27	36	84	60(62)	126	124(155)	38 × 86 × 101	21.0			68

旅行や通院など、シーンに応じた使用が可能。

明るいフレームカラーでお子さまに「移動する楽しさ」を伝えます。

子供用

“Child Type”
Wheelchair

簡易

“Portable
Wheelchair”

KAC	071
KA6	072
RV	073
PC & PW	075
Pit	076
寸法表	077



お出掛けが楽しくなるカラーリングの子供用自走車いす。



背折れ式

補装具
レディ
メイド式

KACシリーズ

自走用 (NB:介助兼用) **20** インチ 車輪 **5** キュスタ インチ



KAC-N32
フレーム:イエロー
シート:No.19

● 介助用ブレーキなし

参考価格 **¥162,000** 非課税

KAC-N32

低床 (12.2kg)



バンド式




KAC-NB32
フレーム:レッド
シート:No.19

● 介助用ブレーキ付

参考価格 **¥173,000** 非課税

KAC-NB32

低床 (13.2kg)

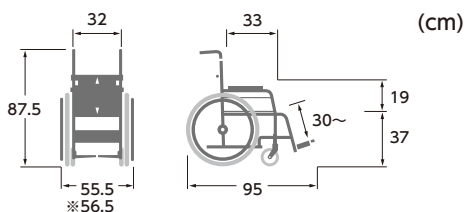

※) 介助用ブレーキ付の場合

*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

ご注文の際ご指定ください。

2
color

● フレームカラー **2色** より
お選びいただけます。

レッド



イエロー



1
color



No.19

黒
(ポリエステル)

外出のお供に持ち運びのしやすい簡易車いす。
旅行や通所、通院など短時間のご使用に適しています。

KA6



背折れ式

ハイポリマー
(ノーパンク)駐車ブレーキ
連動式

手動車いす 75kg

使用者最大体重(積載物含む)

標準
モジュール

介助用 **12** 車輪 **6** キャスタ
インチ×インチ



KA6
シート:No.101

Modern
シリーズ次世代型
標準軽量
六輪リクライ
ニング

子供用


簡易

シャワー用

参考価格 **¥85,000** 非課税

KA6

中床 (8.9kg)

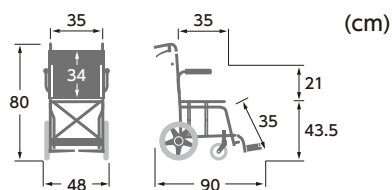

*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

コンパクトに折りたため、
専用のバッグ(別売)に収納出来ます。



折りたたみ時

おすすめ
オプション

(KA6専用収納バッグ)

<参考価格> **¥10,384** 税込オーダー
システム

電動

歩行訓練
歩行補助具オプション&
関連パーツ

ご注文の際ご指定ください。

3
color

●シートカラー **3色** より
お選びいただけます。

No.101



ドットブルー
(ポリエステル)

No.80



プラム
(ポリエステル)

No.81



グリーンストライプ
(ポリエステル)

大切なお子さまの安全な移動をささえます。

<ご注文・お問い合わせ>

お電話 092-932-7600

FAX. 092-932-1037

<https://kisakukobo.jp>

補装具
レディ
メイド式

RV (ポジショニング) シリーズ

(株)カワムラサイクルは、(株)きさく工房と
共同で姿勢保持機能をとくに必要とする方に向
けて、車いすを開発提供いたしております。



ティルト

ポケットⅡr

介助用

RV-pocket Ⅱr

充実した姿勢保持機能がお子様の「楽に座る」と
「楽しく移動」を快適にします。



この製品はQRコードで
詳しい内容をご覧いた
だけます。



アームガードも
張り感UP

新JISと、さらに
自社基準による
走行耐久試験を
クリア

シーティング
機能も上々!

ゆったり背座幅



シアンブルー



コスモスピンク



サンオレンジ

○フレームカラー:ブラック
○シートカラー:4色



アッシュブラック

※ISO(国際規格)による衝突安全テスト[ISO7176-19AnnexA]にSサイズからLLサイズまで全てのサイズで合格しました。

▶ 無段階ティルト機構

座角0度～45度、背座角95度(※オプション部品で105度、115度設定に変更可)、背角85度～40度(水平から)

▶ バックサポート高さ調整機能を基本装備(※LLサイズにはバックサポート高さ調整機能はありません。)

▶ インナーパッド標準高さ5cmとハイトイプ7cmが選択できます!

▶ ヘッドサポートやアームガードなど肌が接触しやすい部分には、肌触りが優しく通気性の良い生地「ブライトニット」を使用しています。

▶ シートとバックサポートを覆うトップカバーの芯材は除圧効果があり洗濯しやすい立体編み物のフュージョン。

▶ 荷台スペースを広くとったベースフレーム。


改良のため仕様は予告なく変更することがあります。

● 張り調整式のシートとバックサポートについて

座る人の身体特性に個別に対応し、
後方にティルトしたシートにゆったりと体を
あずけていられるように、シートとバックサポート
の張り調整を行うことを目的としたものです。

調整の例


→ 張る
→ ゆるめる

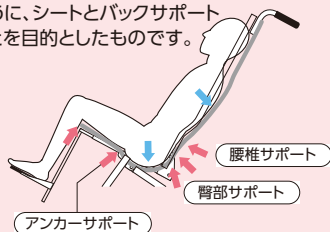


● 骨盤が前方に滑り出しにくくなるよう、また体幹部をバック
サポートにゆったりあずけていられるように(前方に押し出され
ないように)調整します。

● 体幹サポートインナーパッドについて

側方からのサポートを追加する目的で、
体幹サポートインナーパッドを用います。

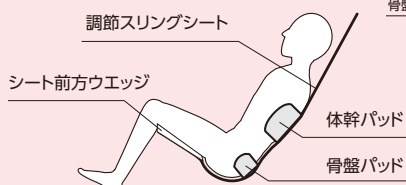

● インナーパッドは4個セットになっています。
調節スリングシートにインナーパッドを取り付けて、その上からバックサポートのトップカバーを
取り付けて使用します。

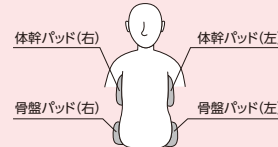

RVのRはリクライニング・リラックス・レクリエーションを、Vはビークル（乗り物）を意味します。お子さまがより快適にまた気軽に外出できることをめざして名付けました。

※ご購入・販売に関しましては〔株式会社 きさく工房〕へお問い合わせください。

<ご注文・お問い合わせ>

お電話 092-932-7600

FAX. 092-932-1037

<https://kisakukobo.jp>

Kisaku 販売元〔株式会社きさく工房〕

〒811-2126 福岡県粕屋郡宇美町障子岳南 5-10-11

標準
モジュール

Modern
シリーズ

次世代型
標準

軽量
六輪

リクライ
ニング

子供用

シャワー用

オーダー
システム

電動

歩行訓練
歩行補助具


オプション&
関連パーツ

■基本寸法 (cm)

※寸法単位 cm

サイズ	背幅	座幅	A背高	B座奥行	Cフットサポート高	E前座高 ※ティルト角10°のとき	F支点高	W×D×H車体寸法 (折りたたみ寸法)	重量 (シート含む)	対応身長
S	36	36.3	65~71	18.5~24.5	8.5~26.5	50.3	46.4	54×74×110 (54×37.5×74.5)	12.1kg	約90~110
M	36	36.3	70~76	23~31	22.5~34.5	50.7	46.4	54×74×114 (54×42×77)	13.1kg	約110~130
L	38.5	38.8	77~83	28~38	24.5~38.5	53	48.4	56.5×77.5×123 (56.5×45.5×82)	14.1kg	約120~140
LL	42.5	42.8	82*	35~43	29.5~43.5	54.5	48.2	65×85.5×128 (65×57×86)	16.6kg	約145~165

■上記の表は、基本的な装備、シートユニットでの計測値であり、部品の構成によって重量や寸法など変更となる場合があります。※1.LLサイズには、バックサポート高さ調整機構はありません。
※詳しくは(株)きさく工房ホームページをご覧ください。

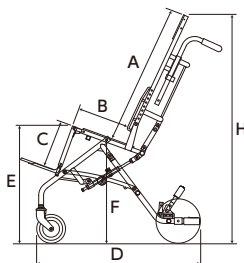

基本装備

<無段階ティルト機構>
シート角5度~45度の範囲で任意に
設定可能。



<バックサポート高さ調節>
成長変化に合わせて段階的に
伸ばしていくことができます。



<コンパクトな折りたたみ>
3アクションで折りたたみ。
開き防止ベルトが付属します。



<ISO(国際規格)による衝突安全テスト>



オプション ご注文の際ご指定ください。

<ヘッドサポート>



<胸肩ベルト>




<トランクサポートベルトI型
骨盤サポートベルト>



<トランクサポートベルトII型>



<インナーパッド>

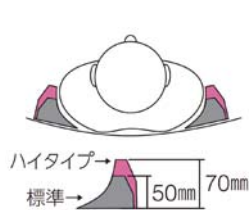

<アームサポート金具>



○高さ・角度調節式

<介助ブレーキ>



<転倒防止装置>



<日よけ>



<背座間角度調整部品>



<セミモールド座面>



<上肢保持用テーブル>



<アンダートレイ>



<開閉式アームガード>



<車載固定部品>



PC&PW

(ポジショニング)シリーズ

＜ご注文・お問い合わせ＞

お電話 092-932-7600

FAX. 092-932-1037

<https://kisakukobo.jp>

(株)カフムラサイクルは、(株)きさく工房と
共同で姿勢保持機能をとくに必要とする方に向
けて、車いすを開発提供いたしております。



ティルト

PC ポジショニングチェアは製造終了のため在庫が無くなり次第、販売終了となります。

ご購入を検討される際は、[株式会社きさく工房]へお問い合わせください。LサイズとLLサイズの販売は終了いたしました。

介助用

ポジショニングシリーズは、姿勢保持機能をとくに必要とする方のシーティング用フレームです。
ご利用者の姿勢保持能力や変形拘縮などの身体の状態に合わせて、シート・バックサポート・各種姿勢保持パーツを個別に製作し、
取り付けることを前提に開発しました。

PC (室内用)

●フレーム／パールグレー

仕様 PC-Sで個別に対応した一例

主に自宅用としてご利用いただくため、
小回りの良さと、畳や床に傷につけにくい
キャストになっています。



厚生労働省
補装具費支給制度の姿勢
保持装置の完成用部品に
登録されています。

PC-S

PC-M



PCサイズ <S・M> 2種

各サイズとも調整が可能です。幼児(2才位)から大人までご利用いただけます。

PW (屋外用)

●フレーム／パールゴールド

仕様 PW-Mで個別に対応した一例

屋外用のキャスト、車輪を装備。
主に学校・施設等でご利用いただくため
のフレームです。



PW-L

PW-LL



PWサイズ <S・M・L・LL> 4種

※ヘッドサポート金具「NJ-3」はオプション。
※ヘッドサポートや背と座の支持部は、個別に製作した例です。
※アームサポート金具はオプションです。

<背・座・足台を一体のまま支持部全体で傾ける ティルト構造フレーム>

PC・PW (特長)

- 個別に製作したシート(シート・バックサポート)が取り付けられます。
- 使用される方の成長や状態の変化に対応してフレームの各部分が調節できます。
- 座位姿勢のままシートの角度が4°から45°～55°の間の
任意の角度にワンタッチでできます。
- 背座角(両面角)調節可能です。(95°～108°:4°ピッチ)
- アームサポートは、跳ね上げ可能です。
高さ・角度調節可能。(角度 0°～21°:7°ピッチ)
- ヘッドサポートは、前後・高さ・角度調節可能です。
(角度 -20°～+20°) (ワンタッチ着脱可能)
- 手押しハンドルの方向・高さを自由に変更可能です。
- バックサポート・フットサポートは、高さ調節可能
- シートフレームは、奥行調節可能
- 折りたたみが可能です。(バックサポートは着脱して下さい。)

姿勢保持装置は他の補装具と同様に医師の処方のもとに製作されるものであり、
使用者の状態の変化などに対応するため、定期的なチェックを受けながら使用する
必要があります。コンパクトで、持ち運びの容易な姿勢保持装置とするためには、
折りたたみ機能は欠くことのできない重要な要素です。

※写真はいずれもPC-S ※機能はPWも全く同様です。



テーブルを取付けた状態



折りたたんだ状態



シートの角度(4°)



シートの角度(45°)

販売元からはフレーム部分のみの販売になります。

シーティング部分は使用される方に合わせて個別に製作しなければなりません。

シーティング部分まで含めた全体でのお問い合わせは各地域での姿勢保持具製作者にご相談下さい。

PC



■寸法・重量 (cm)

サイズ	背幅	座幅	A 背高	B 座奥行	C 足台高	E 座面高	本体寸法 (全幅×全長×全高)
S	40	36	36.5	26～36	11～23	37	40×67.5×78
M	43	39	43.5	31.5～41.5	21.5～30	39	42.5×68.5×87.5

PW

■寸法・重量 (cm)

サイズ	背幅	座幅	A 背高	B 座奥行	C 足台高	E 座面高	本体寸法 (全幅×全長×全高)
S	40	36	36.5	26～36	11～23	44	56.5×70×83
M	43	39	43.5	31.5～41.5	21.5～30	44	59×73.5×91.5
L	46.5	42	50	38～52	26～36	44	62.5×76×91.5
LL	46.5	42	54.5	40～54	27.5～39.5	48	62.5×81×100

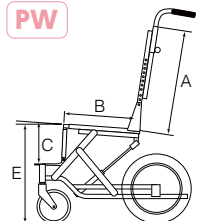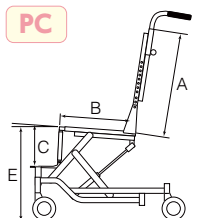

※ご購入・販売に関しましては〔株式会社 きさく工房〕へお問い合わせください。

<ご注文・お問い合わせ>

お電話 092-932-7600

FAX. 092-932-1037

https://kisakukobo.jp

Pit (ポジショニング) シリーズ

Kisaku 販売元〔株式会社きさく工房〕

〒811-2126 福岡県粕屋郡宇美町障子岳南 5-10-11

標準
モジュール

Modern
シリーズ

次世代型
標準

軽量
六輪

リクライ
ニング

子供用

シャワー用

オーダー
システム

電動

歩行訓練
歩行補助具

オプション&
関連パーツ

Pit II

Pit II

「お手軽で姿勢保持機能を備えた姿勢保持装置」Pit II。
シートの肌触りが優しく、シートカラーのバリエーションもなんと6色。



この製品は
QRコードで
詳しい内容
をご覧いた
だけます。




座位姿勢や膝下の長さ
に合わせて、座面の高さ
が調整できます。




座シートクッションは
大腿部を支える、外転
サポート付きです。



ヘッドサポートの
角度調整が可能です。

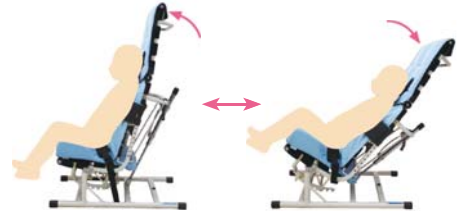


<ティルト角度、無段階可変(実用目安78度〜35度)>

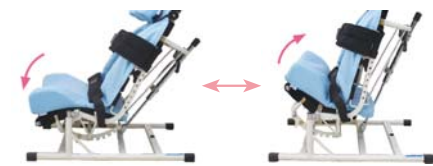

<背・座 両面角可変(股関節屈曲位〜伸展位)>

- ▶ 姿勢保持機能
 - シートとバックサポートは姿勢に合わせて張り調整がおこなえます。
 - 体幹サポートインナーパッド及びシート前方ウェッジによるサポート調整。
- ▶ ティルト式角度可変(約78度〜22度)
- ▶ 背・座 両面角可変(股関節屈曲位〜伸展位)
- ▶ シート奥行き調整式 ▶ シートユニット
 - 全体にメッシュ生地を採用し、さらに背シートの芯材には通気性に優れた立体編物フュージョンを採用。
- ▶ 折りたたみ式 ▶ キャリングバック付属

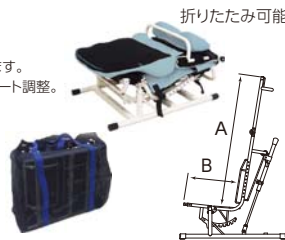

- フレーム標準色:アイボリー・ブラック
- カバー標準色:スカイブルー・ピンク・パープル・ネイビー・ブラウン・ブラック
- サイズ:S・M・L

■寸法・重量(cm) ※基本重量:標準的なシートユニットを取り付けた場合の重量

サイズ	シート幅	A バックサポート高	B シート奥行	基本重量
S	36	62.5	20.5〜24.5	6.3kg
M	38.5	70	23.5〜29.5	6.8kg
L	41	76	28.5〜36.5	7.2kg

Pit II オプション 多彩なオプションにより、用途に合わせた組み合わせが可能。



アクアPit II

Aqua pit II

Pitシリーズ (シャワーチェア バージョン)



基本仕様



オプション装着時



<ティルト式角度可変>




<ヘッドサポートウォッシュャブルポジション>

豊富なオプション



高さ調整用台座

- ▶ 姿勢保持機能:シートとバックサポートは姿勢に合わせて張り調整がおこなえます。
- ▶ ティルト式角度可変機構
- ▶ 「ヘッドサポートのウォッシュャブルポジション」を新たに搭載!
- ▶ 背・座両面角可変機構(股関節屈曲角度の調節)
- ▶ シート奥行調節
- ▶ シート高さ調節
- ▶ 張り調整式のシートとバックサポートを見直し、水溜りを軽減
- ▶ カビが付きにくいポリエステル100%のメッシュ生地(撥水加工処理)

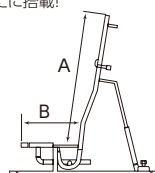

- フレーム標準色:アイボリー ○ シート標準色:ブルー ○ サイズ:S・M・L

■寸法・重量(cm)

※オプションのレッグサポート装着時

サイズ	背幅	座幅	A背高	B座奥行	※レッグサポート長	C 支点高	本体寸法 (全幅×全長×全高)	折りたたみ寸法 (全幅×全長×全高)	重量 (シート含む)	対応身長
S	36	36	62.5	20.5〜24.5	22.5〜28.5	16.5〜23.5	41.5×55.5×74.5	41.5×80×29	5.8	90〜110
M	38.5	38.5	70	23.5〜29.5	26.5〜35.5	16.5〜23.5	44×55.5×82	44×86.5×30	6.6	100〜130
L	41	41	76	28.5〜36.5	28.5〜37.5	17.5〜24.5	46.5×59.5×84.5	46.5×89.5×30	7	120〜140

寸法表 (cm)

自走式

※シート幅寸法は、バックサポートフレーム内寸法です。

介助式

※各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

※シート色、取付部品により重量・寸法が多少変動いたします。ご了承ください。

シリーズ	品番	キャスタ(インチ)	車輪(インチ)	シート幅	前座高	後座高	バックサポートシート間距離	アームサポート高	シート奥行	バックサポート高	全幅	全高	全長	折りたたみ時全幅	折りたたみ時全高	折りたたみ時全長	重量(kg)	掲載ページ
KAC	KAC-N32	5	20	32	37	35	30～	19	33	32	55.5	87.5	95	31 × 60 × 94	12.2			71
	KAC-NB32	5	20	32	37	35	30～	19	33	32	56.5	87.5	95	32 × 60 × 94	13.2			
KA6	KA6	6	12	35	43.5	41	35	21	35	34	48	80	90	27 × 61 × 64	8.9			72

コンパクト性やシート高さ調節、姿勢保持など
介護の状況に合わせてお選びいただけます。

シャワー用

“Shower Chair”



KS2.....	079
KS3.....	079
KS4.....	080
KS7.....	080
KS10	081
KSC-1/ST	082
KSC-2/ST	082
KS11-PF/ST	083
KS12	084
寸法表	085

よりよい介護のために、医療現場からご家庭までご使用いただけます。

KSシリーズ

病院
施設用 シャワー用 浴そう対応 **14** 車輪 **7** キャスタ
インチ×インチ



段差の乗り越えがしやすい車輪14インチ。



シート:レッド


KS2(標準)フリあり
シート:イエロー

ステンレスフレーム

参考価格 **¥116,380** 税込

KS2 <フリありシート>

高床 (14.2kg)

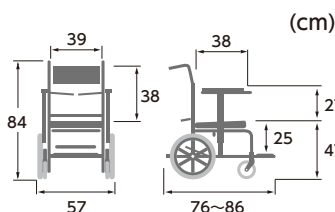

*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みを含んでおります。

前後式バックサポート



背中を洗う際、バックサポートを倒すことができます。

家庭
在宅介護用 シャワー用 浴そう対応 **9** 車輪 **5** キャスタ
インチ×インチ



ご家庭でも使いやすい全幅49cm、コンパクトサイズ。



シート:イエロー

KS3(標準)フリあり
シート:レッド


ステンレスフレーム

参考価格 **¥116,380** 税込

KS3 <フリありシート>

高床 (12.6kg)

TAIS:00160-000222

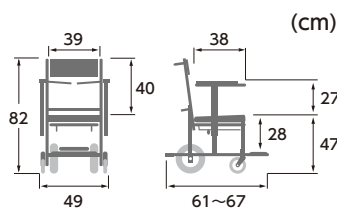

*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みを含んでおります。

前後式バックサポート



背中を洗う際、バックサポートを倒すことができます。

○シート下にバケツ(KS用 座面下バケツ)を取り付けられます(別売)。



<浴そう対応> ステンレスフレーム

*金属部はネジまで、さびに強いオールステンレス製。

対応機種 ▶ KS2・KS3・KS4

浴そうに入れてご使用になる場合は、ご注文の際にお申し付けください。



**KS用
座面下バケツ**

¥968/個 税込



取付可能機種 ▶ KS3・KS4



○シート下にバケツ取付用のレールがあります。
○後ろからスライドして出し入れできます。

*レールはデーパー状になっているので前方にはずれ落ちません。



入浴・トイレ用車いすは、介護保険において
特定福祉用具の対象種目となっています。

標準
モジュール

Modern
シリーズ

次世代型
標準

軽量
六輪

リクライ
ニング

子供用
簡易

シャワー用

オーダー
システム

電動

歩行訓練
歩行補助具

オプション&
関連パーツ

家庭
在宅介護用

シャワー用

浴槽対応

9車輪 5キャスト
インチ×インチ



シャワー、室内と1台2役。
介助しやすい跳ね上げ式アームサポート。



KS4(標準)クリあり
シート:イエロー


ステンレスフレーム

参考価格 **¥116,380** 税込

KS4 <クリありシート>

高床 (11.1kg)

TAIS:00160-000223

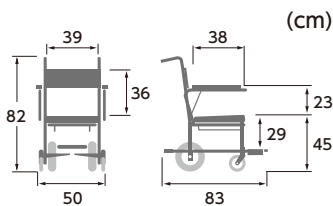

*各寸法には、シート・シートクッション等の
厚みを含んでおります。

折りたたみ跳ね上げ式
フットサポート



フットプレートを折りたたみ
収納できます。

○シート下にバケツ (KS用 座面下バケツ) を取り付けられます (別売)。

病院
施設用

家庭
在宅介護用

シャワー用

22車輪 6キャスト
インチ×インチ



自走・シャワー用車いす。
標準型車いす仕様をとり入れました。



KS7(標準)クリあり
シート:イエロー



折りたたみ可能


アルミフレーム

参考価格 **¥147,950** 税込

KS7 <クリありシート>

低床 (13.5kg)

*受注生産となります。
TAIS:00160-000008

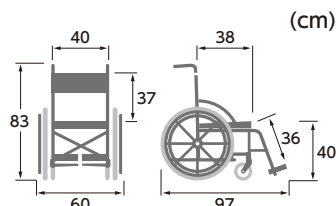

*各寸法には、シート・シートクッション等の
厚みを含んでおります。

着脱式
フット・レッグサポート



コンパクトになります。

ご注文の際ご指定ください。対応機種 KS2・KS3・KS4・KS7

2
color

認識しやすい 2色 のカラーよりお選びいただけます。



イエロー

or

レッド

座
シート
選
択

滑りにくい
やわらか素材。
材質:EVA(独立気泡)

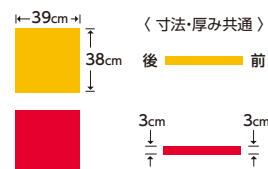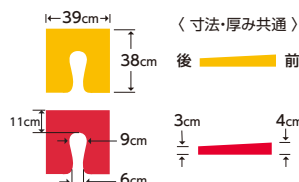

コンパクトからシート高さ調節式まで充実のラインナップ

KSシリーズ



8車輪 2インチ×6キャスト



跳ね上げ式

スイング
イン・アウト式

足踏み式

ウレタン発泡
(ノーパンク)

転倒防止バー

シートの高さを3段階で調節できます。

KS10クリあり
シート:レッド

折りたたみ式バックサポート




ステンレスフレーム

参考価格 ¥149,050 税込

KS10 <クリありシート>

中床 低床 (11.5kg)

TAIS:00160-000224

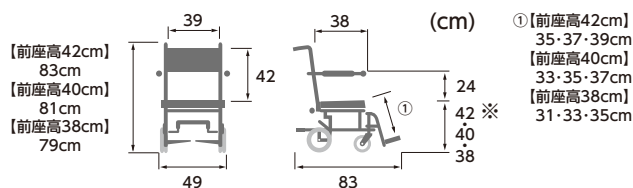

シート(座面)高さ調節式フレーム

ご利用者の体格に合わせ、段階的な調節が可能です。

予めシートの高さを
ご指定いただけます。

ご注文の際ご指定ください。

シートは、滑りにくいやわらか素材。 素材:EVA(独立気泡)


2
color

●シートカラーは 2色 からお選びいただけます。

イエロー or レッド

※座シートはクリありのみとなります。

<寸法・厚み共通>

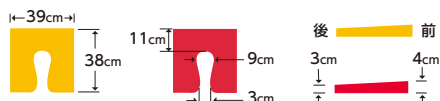



入浴・トイレ用車いすは、介護保険において
特定福祉用具の対象種目となっています。

標準
モジュール

Modern
シリーズ

次世代型
標準

軽量
六輪

リクライ
ニング

子供用
簡易

シャワー用

オーダー
システム

電動

歩行訓練
歩行補助具

オプション&
関連パーツ



3 キャスタ
インチ×3 キャスタ
インチ



跳ね上げ式 前後スライド式 転倒防止バー



KSC-1/ST(標準)クリあり
シート:レッド

“軽量&コンパクト”
簡易シャワー車いす<低床>モデル

折りたたみ式バックサポート



< KSC-1・KSC-2共通 >

●全キャスト仕様
省スペース・
簡易シャワー車いす


(ステンレスフレーム)

参考価格 **¥74,800** (税込)

KSC-1/ST <クリありシート>

低床 (9.8kg)

TAIS:00160-000300

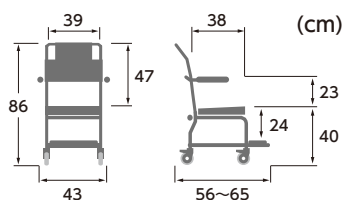

※アームサポート内側寸法は36cm

※各寸法には、シート・シートクッション等の
厚みを含んでおります。

キャスト
ロック機能付



3 キャスタ
インチ×8 前輪
インチ



跳ね上げ式 前後スライド式 転倒防止バー



KSC-2/ST(標準)クリあり
シート:イエロー

●後キャスト仕様
省スペース・
簡易シャワー車いす


(ステンレスフレーム)

参考価格 **¥74,800** (税込)

KSC-2/ST <クリありシート>

低床 (10kg)

TAIS:00160-000301

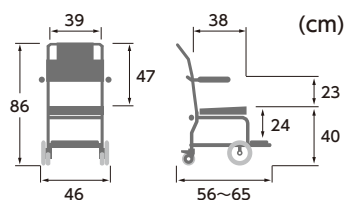

※アームサポート内側寸法は36cm

※各寸法には、シート・シートクッション等の
厚みを含んでおります。

キャスト
ロック機能付



ご注文の際ご指定ください。

2
color

認識しやすい **2色** のカラーよりお選びいただけます。

イエロー or **レッド**


※標準はクリありとなります。※クリなしシート変更の場合(¥13,200増/台 (税込))となります。

座


**シート
選 択**

滑りにくい
やわらか素材。
材質:EVA(独立気泡)

(標準)
クリあり

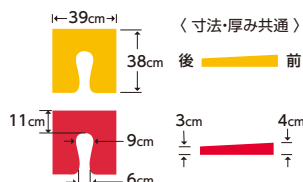

クリなし

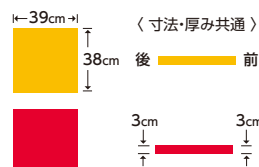

姿勢保持リクライニングタイプ&シートが取り外しできるタイプ

KSシリーズ




“姿勢保持”ティルト・リクライニング<ぴったりフィット>モデル



ステンレスフレーム 参考価格 ¥191,400 税込

KS11-PF/ST <クリありシート> 高床 (19.6kg)

TAIS:00160-000302

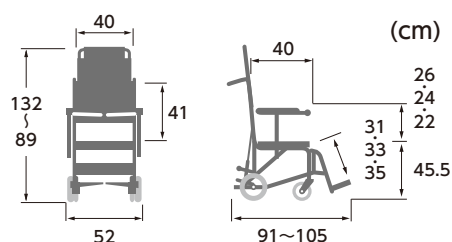


*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みを含んでおります。

シートは、滑りにくいやわらか素材。材質:EVA(独立気泡)

1 color ●シートカラーは、**イエロー** のみとなります。

※座シートはクリありのみとなります。

<寸法・厚み共通>

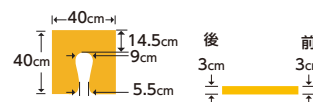

新リクライニング ぴったりフィット機構

バックサポートを“倒す・起こす”の動作を繰り返してもお尻がズレにくく、安定した座位が保てます。



ティルト・リクライニング角度

118° 100°

<無段階調整>





入浴・トイレ用車いすは、介護保険において
特定福祉用具の対象種目となっています。

標準
モジュール

Modern
シリーズ

次世代型
標準

軽量
六輪

リクライ
ニング

子供用
簡易

シャワー用

オーダー
システム

電動

歩行訓練
歩行補助具

オプション&
関連パーツ



12インチ×5インチ



落とし込み式



スイングアウト式



軽量



足踏み式



転倒防止バー

段差の乗り越えがしやすい車輪12インチ。



KS12クリあり
シート:グリーン



KS12クリあり
シート:イエロー


カラダもシートも洗しやすい シャワー用車いす

ウェーブフレーム

背中からお尻にかけて洗しやすいウェーブフレーム。カラダとの空間が広く、後ろからも横からも手が入りやすいフレーム構成です。

シートの取り外しが可能!

いつでも気持ちよく清潔にご使用いただけます。

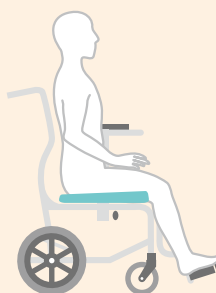

背シート

座シート

簡単・しっかり固定! 着脱シートレバー

固定

着脱



シート一体のレバーを90°回転。シートのズレも少なくしっかりと固定されます。

フットサポート・ シート間距離調節



(2cmピッチ)
3段階で調節
できます。


アルミフレーム

参考価格 ¥133,100 税込

KS12 <クリありシート>

高床 (14.8kg)

TAIS:00160-000239

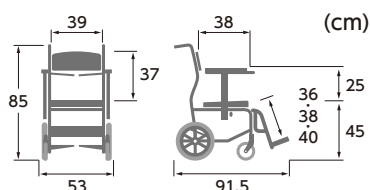

*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みを含んでおります。

ご注文の際ご指定ください。

シートは、滑りにくいやわらか素材。材質:EVA(独立気泡)


2 color

●シートカラーは 2色 からお選びいただけます。

イエロー or グリーン

※座シートはクリありのみとなります。

〈寸法・厚み共通〉

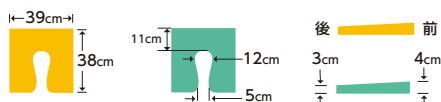

KS12 専用オプション

キャストロック機能付

取付価格 ¥36,300増/台 税込



キャストロック機能付

寸法表 (cm)

自走式 ※シート幅寸法は、バックサポートフレーム内寸法です。
介助式 ※各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。
※シート色、取付部品により重量・寸法が多少変動いたします。ご了承ください。

シリーズ	品番	キャスター(インチ)※3	車輪(インチ)	シート幅	前座高	後座高	バックサポートシート間距離	アームサポート高	シート奥行	バックサポート高	全幅	全高	全長(最長時)	折りたたみ時全幅	折りたたみ時全高	折りたたみ時全長	重量(kg)	掲載ページ
シャワー用	KS2	7	14	39	47	44	25	27	38	38	57	84	76~86	57 ×	84 ×	76	14.2	79
	KS3	5	9	39	47	42	28	27	38	40	49	82	61~67	49 ×	82 ×	61	12.6	
	KS4	5	9	39	45	42	29	23	38	36	50	82	83	50 ×	82 ×	63	11.1	80
	KS7	6	22	40	40	37	36	—	38	37	60	83	97	30 ×	83 ×	97	13.5	
	KS10	6	8	39	42(38・40)	39(35・37)	※1	24	38	42	49	※2	83	49 × 59(55・57) ×	68		11.5	81
	KSC-1/ST	3	3	39	40	38	24	23	38	47	43	86	56~65	43 ×	53 ×	61	9.8	82
	KSC-2/ST	8	3	39	40	38	24	23	38	47	46	86	56~65	46 ×	53 ×	61	10	
	KS11-PF/ST クリあり	6	8	40	45.5	—	31・33・35	22・24・26	40	41	52	89~132	91~105	52 ×	88.5 ×	66	19.6	83
	KS12	5	12	39	45	42	36・38・40	25	38	37	53	85	91.5	53 ×	85 ×	70.5	14.8	84

※1【前座高42cm】35・37・39cm、【前座高40cm】33・35・37cm、【前座高38cm】31・33・35cm
※2【前座高42cm】83cm、【前座高40cm】81cm、【前座高38cm】79cm
※3KSC-2/STの場合は、前輪となります。

体格に沿った設計からカラーコーディネートまで、
あなただけの車いすをお作りします。

オーダー システム

CUSTOM MADE
Wheelchair

2週間オーダー087

カラーオーダー089



正式発注から原則として2週間以内に出荷いたします。

2週間オーダーシステム

カワムラサイクル「2週間オーダーシステム」は、
弊社が独自に開発設計したスピーディ対応オーダーシステムです。

01



利用者・介助者を採寸

利用者の座位姿勢状態、介助者の立位状態を採寸します。

02



車いすの各部寸法を決定

採寸の結果を基に、シート幅、前座高、シート奥行、アームサポート高さ、
バックサポート高さ、手押しハンドル高さ、各種寸法を決定していきます。

03



各部の仕様・部品を決定

利用者の利用状況、能力、環境を考慮し、車いすの仕様を決めます。
フレームカラーやシートカラーの組み合わせにより、自分だけの車いすが作れます。

04



注文

確定した内容で発注。

05



生産

社内工場にて丁寧ににつくりします。
基本フレームには、7000系アルミを主な材料として使用します。

06



完成 納品

ご注文から2週間でカワムラサイクルから出荷いたします。

完成品
参考例



〔 完成品イメージの一例 〕 ご相談・ご購入の際、思い浮かべるイメージのご参考にお役立てください。

※体重などの条件により追加加工を要する場合は、別途料金を申し受ける場合がございます。
 ※フレームカラー／シートカラー・クッションカラーは、**P.089**よりお選びいただけます。
ご注意 ※掲載以外のオプション品については、**P.102～P.116** [オプション・関連パーツ]よりお選びいただけます。
 ※この他にも2週間の納期内でお受けできる場合がございます。お気軽にお問い合わせください。
 ※ご相談・ご注文の際は、最寄りの取扱販売店、弊社までお気軽にお問い合わせください。

標準
モジュール

Modern
シリーズ

次世代型
標準

軽量
六輪

リクライ
ニング

子供用
簡易

シャワー用





オーダー
システム

電動

歩行訓練
歩行補助具

オプション&
関連パーツ

2週間オーダー選択仕様&パーツ (選択仕様の一部)

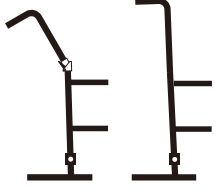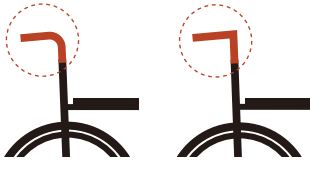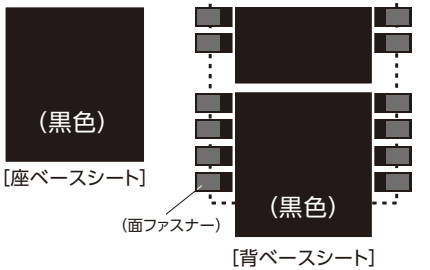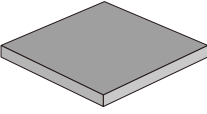車輪 (後輪)  エアタイヤ (16・20・22・24)インチ	ハンドリム  樹脂/波型・黒 (20・22・24)インチ ステンレス (20・22・24)インチ	キャスト (前輪)  ニューソフトキャスト (4・5・6・7)インチ
フット・レッグサポート (脚部)  固定式	フットサポート (ステップ)  側方跳ね上げ式 フットサポート 黒	アームサポート (肘掛け) 固定式  (標準型) (アール型) (デスク型)
背フレーム  背折れ式 背固定式	駐車用ブレーキ (駐車ブレーキ)  ミニ駐車ブレーキ (前後式) カバーなし エッグストップ ミニエッグL (ロング) ミニエッグS (ショート)	
手押しハンドル (押手)  曲げタイプ 直角タイプ	グリップ (ハンドグリップ)  反射板付 ネジ止め式	シートベルト  面ファスナー式
シート  左右独立標準適合調整シート (黒色) [座ベースシート] (黒色) [背ベースシート] (面ファスナー)	座クッション  3cm厚 シートクッション (材質:低反発ウレタン) シートカラーはN色からお選びいただけます。 P.089 ご参照	サイドガード (側板) カラー  フレームカラーと同様の13色よりお選びいただけます。 P.089 ご参照 泥除け  フレームカラーと同様の13色よりお選びいただけます。 P.089 ご参照

ご注文の際は、「2週間オーダーシステム発注書」をご利用ください。
 弊社ホームページよりダウンロードして頂けます。

ホームページ  <https://kawamura-cycle.co.jp>

カラーオーダー



フレームカラー見本

■ スタANDARD

シルバー



● N 色 (10色)

ブラック



レッド



サンイエロー



ダークブルー



パールグリーン



シルキーブラウン



T P ゴールド



アイボリー



メタリックパープル



メタリックブルー



● S 色 (2色)

黒メタリック



メタリックレッド






● サイドガード(側板) カラー

● 泥除けカラー

各カラーをフレームカラー
見本よりお選びいただけます。

シートカラー見本

● N 色 (13色)

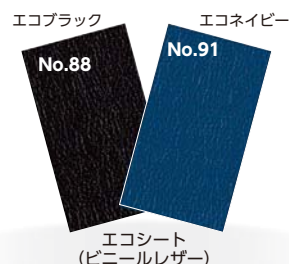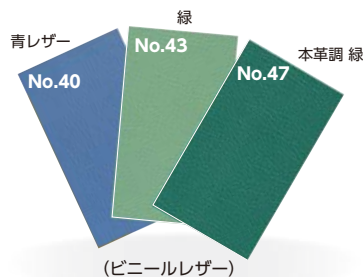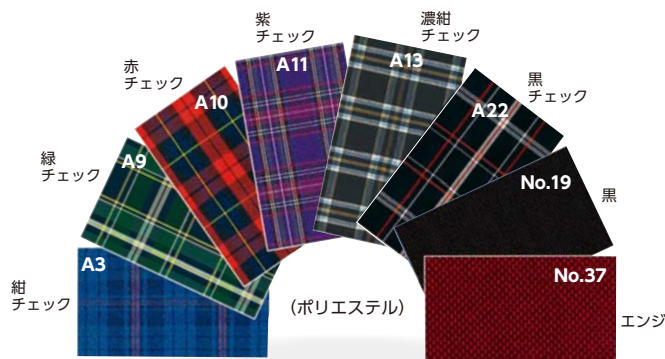

● S 色 (23色)



※印刷物のため実際の色と多少異なります。

省電力性能や回転半径の小ささ、前後スライド・左右回転シートなど
ニーズに合ったセレクトでお出かけが楽しくなります。

電 動

Electric Motor Type

KE45091

KE43092



簡単操作でスピーディに移動できます。

KE45・43(ロマンス)シリーズ

13 駆動輪
インチ




KE45

省電力、高輝度LEDヘッドランプ
高位置ウinker&ハイマウントランプ
大型タイヤ採用、走破・走行性が向上。

- バッテリー残量計
- 前進/後進切替スイッチ
- 速度調節つまみ
- 方向指示器
- ホーン



45・90
30
前後スライド・左右回転シート
中心より前後30mmのスライド、
左右45度、90度の2段階回転機能。

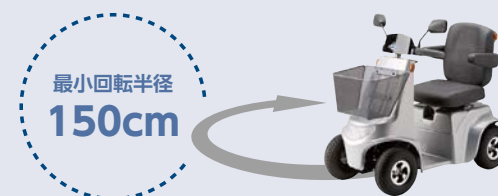

参考価格 **¥418,000** 非課税

KE45 <ロマンス プラチナネオ>


(111kg バッテリー含む)

TAIS:00160-000281



標準装備

- 左右バックミラー
- 前部カゴ(約20ℓ)
～業界最大容量～

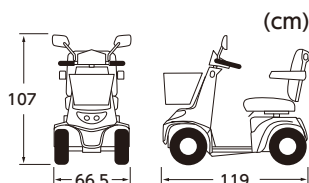

*電動車いす安全普及協会規格適合 *JIST9206電磁エミッション、電磁イミュニティ規格適合

仕様

- シート幅:43cm ■ 肘内寸法:39cm
- ステップ高さ:11.6cm フラット
- 前輪・駆動輪:直径32×幅9cm(4.00-5-4PR)・ノーパンクタイヤ/黒
- 実用登坂角度:10°
- 走行速度:前進(0～6km/h)・後進(0～2km/h)
- 連続走行距離:29km
(新品バッテリーで平らな道を体重75kgの人が、6km/hで走行した場合)
- モーター出力:24V 600W×1ヶ
- バッテリー(5時間率):12V 32Ah×2ヶ(密閉式)
- 充電:充電器内蔵(家庭用コンセント100Vより充電できます。)
- 使用者最大重量:100kg(積載物含む)

KE43/KE45
専用
オプション

ご購入の際合わせてご指定ください。

右側バックミラー



対応機種 ▶ KE43 (取付金具付)

取付価格 **¥1,600増** 非課税

部品価格 **¥1,760** 税込

*梱包上の都合により、一部部品は同梱対応とさせていただきます。

フロアマット



対応機種 ▶ KE45・KE43

取付価格 **¥2,500増** 非課税

部品価格 **¥2,750** 税込

KE45・43 共通機構

対応機種 KE45・KE43



オートハザード
ランプ機能
後進時、停止時には
自動的に点滅。



ウィンカーオート
キャンセル機能
カーブを曲がり終えれ
ば自動的にウィンカー
の点滅が消えます。



振り込み
非常停止機能
アクセルレバーを強
く握ると非常停止。



ノーパンク
タイヤ
トラブルに強い
タフなタイヤ。



オート
パワーオフ機能
15分以上操作がな
ければ自動的に電
源が切れます。



コーナリング
自動減速機能
カーブを曲がる際、
自動的に減速。



4輪
サスペンション
4輪サスペンション
により優しい乗り心
地です。



(電動カート)
運転免許不要

標準
モジュール

Modern
シリーズ

次世代型
標準

軽量
六輪

リクライ
ニング

子供用
簡易

シャワー用

オーダー
システム

電動

歩行訓練
歩行補助具

オプション&
関連パーツ

10 駆動輪
インチ

KE43



コンパクト設計・軽量 バッテリー簡単交換

- バッテリー残量計
- 前進/後進切替スイッチ
- 速度調節つまみ
- 方向指示器
- ホーン
- アクセルガード



前後スライド・左右回転シート
中心より前後30mmのスライド、
左右90度の位置に回転。



参考価格 ¥323,000 非課税

KE43 <ロマンス ゴールド>

(69kg バッテリー含む)


TAIS:00160-000336



<国家公安委員会認定>
<交 K10-15>

標準装備

- 左側バックミラー
- 前部カゴ

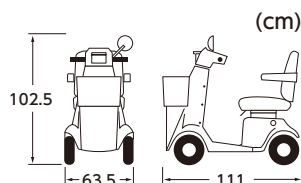

*電動車いす安全普及協会規格適合 *JIST9206電磁エミッション、電磁イミュニティ規格適合

仕様

- シート幅:40cm ■ 肘内寸法:39cm
- ステップ高さ:前19cm・後15cm
- 前輪・駆動輪:直径26×幅8.5cm (3.00-4-4PR)・ノーパンクタイヤ/黒
- 実用登坂角度:10°
- 走行速度:前進 (0~6km/h)・後進 (0~2km/h)
- 連続走行距離:25km
(新品バッテリーで平らな道を体重75kgの人が、6km/hで走行した場合)
- モーター出力:24V 600W×1台
- バッテリー (5時間率):12V 20Ah×2台 (密閉式)
- 充電:充電器内蔵 (家庭用コンセント100Vより充電できます。)
- 使用者最大重量:100kg (積載物含む)

<価格:参考価格>

ステッキスタンド



対応機種 KE45・KE43

取付価格 ¥8,000増 非課税

部品価格 ¥8,800 税込

※取付時は、左・右をご指定ください。

車体カバー



対応機種 KE45・KE43

部品価格

¥6,600 税込



電動カート 総合補償プラン

〈詳しくは弊社、または担当代理店
にお問い合わせください〉

傷害保険と賠償責任をセットした
幅広い補償内容の保険
「電動カート総合補償プラン」を
ご用意しております。

うでささえ



腕のずれ・落下を
防ぎます



うでささえ

TAIS:00160-000218

新車ご購入時の取付価格 **¥4,290増** 非課税

部品のみご購入価格 **¥4,719** 税込

(取付価格には部品の代金を含んでおります。)



ご利用者さまの声から誕生した“うでささえ”

腕がずれると
車輪やハンドリムにはさまり
ケガをするおそれが...

腕がずれると
座位が崩れる...



ソフトでグリップ感のある素材が
腕を支えます

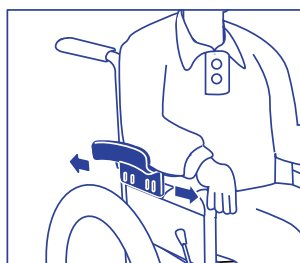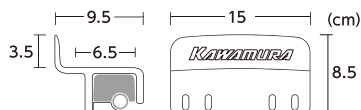

取付位置を調節できる



簡単に取付 / 取り外し可能

取付可能車種：KX シリーズ、KAC シリーズ、BML シリーズ、KV シリーズ

「出来ることは自分でしたい」
自立を支える商品から、歩行車など暮らしの負担軽減に。



歩行補助具

Walking Aid

NEW Pastel	095
KW40	096
KW41	096
C'arco	096
KW15	097
KW16	097
KW17	097
C2021	098
シンフォニーSP	098
サニーウォーカーSP	098
アルト	098
ハーモニーAL	098
BP2	099
S11-M	100
カーボン4点可動式スモールタイプ	100
クーパー	100

一歩一歩、自分のペースで歩くことができます。

KWシリーズ

Letltte

耐荷重 100kg
使用者最大体重(積載物含む)

屋外用 室内用 8車輪 8インチ×8インチ カスタム 四輪歩行車



- 手押しハンドル高さ調節5段階
- 全輪・軽量樹脂ホイール
- 取り外し可能なバッグ付
- 制動も駐車もできるループブレーキレバー付
- 標準仕様

杖置き付

参考価格 **¥66,000** (税込)**NEW** Pastel<KW-LP-M>

(7.2kg)



- 手押しハンドル高さ調節5段階
- 全輪・軽量樹脂ホイール
- 取り外し可能なバッグ付
- 制動も駐車もできるループブレーキレバー付
- 標準仕様

杖置き付

参考価格 **¥66,000** (税込)**NEW** Pastel<KW-LP-L>

(7.4kg)



- 手押しハンドル高さ調節5段階
- 車輪・抑速ブレーキ内蔵ホイール
- 取り外し可能なバッグ付
- 制動も駐車もできるループブレーキレバー付
- 抑速ブレーキ付仕様

杖置き付

参考価格 **¥107,800** (税込)**NEW** Pastel<KW-LPC-M>

(8.5kg)

KW-LPC

急加速時のみ
自動ブレーキが作動。
車輪の回転を抑え
転倒を防止します。



抑速ブレーキ 内蔵ホイール

ブレーキ力は4段階で
設定可能



- 手押しハンドル高さ調節5段階
- 車輪・抑速ブレーキ内蔵ホイール
- 取り外し可能なバッグ付
- 制動も駐車もできるループブレーキレバー付
- 抑速ブレーキ付仕様

杖置き付

参考価格 **¥107,800** (税込)**NEW** Pastel<KW-LPC-L>

(8.7kg)

[M]	[L]			(cm)
88.2	94.2	37(40)	20	
85.9	91.9			
83.6	89.6			
81.3	87.3			
79	85			

KW-LP-M(L):51(54)※25(26)
KW-LPC-M(L):53(56)※27(28)
※折りたたみ時

座面寸法 幅37(40)cm×奥行20cm (本体主要:アルミ製)
■バッグ最大積載量:5kg



バッグ取り外し時



折りたたみ時(自立します)

ループブレーキレバー

(KW-LP・KW-LPC)
制動ブレーキとしても、
駐車ブレーキとしても
働きます。

〈制動〉



〈駐車〉



屋外用 室内用 8車輪 10キャスト
インチ×インチ 四輪歩行車



- 手押しハンドル高さ調節5段階
- 杖置き付
- 全輪・軽量樹脂ホイール
- 取り外し可能なバッグ付
- 制動も駐車もできるループブレーキレバー付

● 標準仕様

参考価格 **¥49,500** (税込)**KW40**

(7.7kg)

TAIS:00160-000231



- 手押しハンドル高さ調節5段階
- 杖置き付
- 車輪・抑速ブレーキ内蔵ホイール
- 取り外し可能なバッグ付
- 制動も駐車もできるループブレーキレバー付

● 抑速ブレーキ付仕様

参考価格 **¥69,300** (税込)**KW41**

(8.7kg)


TAIS:00160-000232

KW41

急加速時のみ
自動ブレーキが作動。
車輪の回転を抑え
転倒を防止します。

**抑速ブレーキ
内蔵ホイール**

ブレーキ力は3段階で
設定可能

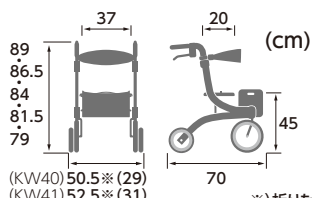

座面寸法 幅37cm×奥行20cm (本体主要:アルミ製)
■最大積載量:5kg



バッグ取り外し時



折りたたみ時(自立します)

(ループブレーキレバー) <制動> <駐車>

制動ブレーキとしても、
駐車ブレーキとしても
働きます。




屋外用 室内用 8車輪 8キャスト
インチ×インチ 四輪歩行車

- 本体は軽量なカーボンフレーム
- 杖置き付
- 手押しハンドル高さ調節7段階
- 取り外し可能なバッグ付
- 制動も駐車もできるループブレーキレバー付

参考価格 **¥118,800** (税込)**C'arco <KW50>**

(6.1kg)

TAIS:00160-000246

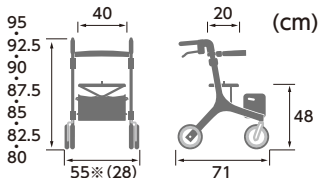

座面寸法 幅40cm×奥行20cm (本体主要:カーボン製)
■最大積載量:5kg



カーボン+歩こう
(C) (arco)



折りたたみ時(自立します)

ご自分のペースでお体に合わせてお使いください。

KWシリーズ／歩行補助具

室内用 4インチ×4インチ 車輪 キャスタ 四輪歩行車

参考価格 **¥49,280** 非課税

KW15N-L

(8.5kg)

TAIS:00160-000334

参考価格 **¥48,680** 非課税

KW15N-M

(8.0kg)

TAIS:00160-000333

参考価格 **¥48,070** 非課税

KW15N-S

(7.3kg)

TAIS:00160-000332

- 全 幅: (L) 67cm (M) 67cm (S) 57cm
- 奥 行: 77cm 75cm 68cm
- 全 高: 97~112cm (L)
: 82~97cm (M)
: 67~77cm (S)

- (肘受内側寸法)
- 幅40cm×奥行46cm (L)
- 幅37cm×奥行46cm (M)
- 幅32cm×奥行42cm (S)
(本体主要: スチール製)



折りたたみ時
(自立はしません)

室内用 4インチ×4インチ 車輪 キャスタ 四輪歩行車

参考価格 **¥55,220** 非課税

KW16 <スタンダード>

(12kg)

- 高さ調節8段階
- 馬ていが幅広タイプ

※車輪転がり抵抗器付

KW16B

TAIS:00160-000335

¥80,520 非課税

- 全 幅: 68cm
- 奥 行: 85cm
- 全 高: 86.5~104cm (8段階)
- (肘受内側寸法)
- 幅37.5cm×奥行48.5cm (本体主要: スチール製)



折りたたみ時
(自立します)

室内用 4インチ×4インチ 車輪 キャスタ 四輪歩行車

参考価格 **¥58,850** 非課税

KW17 <コンパクト>

(10.5kg)

- 狭いところでも使用しやすい
幅狭タイプ
- 高さ調節8段階
- 馬ていが幅広タイプ

- 全 幅: 59cm
- 奥 行: 63.5cm
- 全 高: 80~97.5cm (8段階)
- (肘受内側寸法)
- 幅37.5cm×奥行37.5cm (本体主要: スチール製)



折りたたみ時
(自立します)

自立を支える商品のご紹介。

歩行補助具／シルバーカー

標準
モジュール

Modern
シリーズ

次世代型
標準

軽量
六輪

リクライ
ニング

子供用
簡易

シャワー用

オーダー
システム

電動

歩行訓練
歩行補助具

オプション&
関連パーツ

室内用 4車輪 4インチ×4インチ キャスタ 立ち上がり歩行器



参考価格 ¥21,600 非課税

C2021-W<標準> (2.8kg)

参考価格 ¥21,600 非課税

C2021-CW<コンパクト> (2.7kg)

- イスやトイレでの離着席がしやすい、二段グリップ方式
 - 高さ調節6段階 ● 折りたたみ可能(自立はしません)
- (W) (CW)
- 全 幅: 58cm : 47cm
- 全 長: 49cm : 45cm
- 全 高: 78~91cm(W) 下段グリップ高: 56~69cm
- 全 高: 73~86cm(CW) 下段グリップ高: 48~61cm
- (本体主要: アルミ製)

お散歩に
おすすめ

シルバーカー感覚で使える
コンパクトな歩行車。



Bチェック
ブルー



花柄 BK



CLブラウン
格子柄

シンフォニー SP

(5.9kg)

参考価格 ¥41,800 税込

- ループブレーキレバー付。握ればハンドブレーキ、下に倒せば駐車ストッパーがかかります。
- 左右片方だけのブレーキ操作で両後輪にブレーキがかかります。
- 座面を跳ね上げると体を車体により近づけられます。
- ハンドル高さ4段階調整
- 前車輪は固定・左右各60°の2段階
- コンパクトに自立する折りたたみ式

使用時 (cm)		幅		奥行		座高さ		シート幅		座奥行	
高さ	幅	奥行	座高さ	シート幅	座奥行	高さ	幅	奥行	座高さ	シート幅	座奥行
78.5~88	50	56	41	34.5	27						
収納時 (cm)		幅		奥行							
高さ	幅	奥行	高さ	幅	奥行						
86.5	50	28.5									

4
color

Bチェックブルー
花柄BK
CLブラウン
格子柄

お散歩に
おすすめ

コンパクトで、
使い勝手がいい。



格子NB

サニウォーカーSP [中・小]

参考価格 ¥34,100 税込

- ループブレーキレバー付。握ればハンドブレーキ、下に倒せば駐車ストッパーがかかります。
 - 左右片方だけのブレーキ操作で両後輪にブレーキがかかります。
 - ハンドル高さ3段階調整
 - ツエ・カサ立て付
 - 前車輪は固定・左右各60°の2段階
 - コンパクトに自立する折りたたみ式
- ◎【中・小】サイズをご指定ください。

1
color

格子 NB

使用時 (cm)		幅		奥行		座高さ		シート幅		座奥行	
高さ	幅	奥行	座高さ	シート幅	座奥行	高さ	幅	奥行	座高さ	シート幅	座奥行
中 86~92	48.5	59	44	27.5	20						
小 79~85	48.5	59	44	27.5	20						
収納時 (cm)		幅		奥行							
高さ	幅	奥行	高さ	幅	奥行						
中 65	48.5	35	65	48.5	35						
小 65	48.5	35	65	48.5	35						

（重量 中:4.9kg）

（重量 小:4.8kg）

お買物に
おすすめ

コンパクトで収容力も抜群!



格子NB



花柄BR

アルト (回転車付)

(5.0kg)

参考価格 ¥34,100 税込

- 駐車ストッパー付
- ハンドブレーキ付
- ハンドル高さ3段階調整
- ツエ・カサ立て付
- 買い物カゴを載せられる (奥行外寸23cmまで) ストッパー付
- 前車輪は固定・左右60°の2段階
- コンパクトに自立する折りたたみ式

2
color

格子NB
花柄BR

使用時 (cm)		幅		奥行		座高さ		シート幅		座奥行	
高さ	幅	奥行	座高さ	シート幅	座奥行	高さ	幅	奥行	座高さ	シート幅	座奥行
82.5~90	48	54	47.5	28	19.5						
収納時 (cm)		幅		奥行							
高さ	幅	奥行	高さ	幅	奥行						
66.5	48	34	66.5	48	34						

（重量 中:4.9kg）

（重量 小:4.8kg）

お買物に
おすすめ

スタイリッシュでおしゃれな
シルバーカー



オプション
ハーモニーAL用
保冷バック

ハーモニーAL

(5.2kg)

参考価格 ¥29,700 税込

- 駐車ブレーキ付
- ハンドブレーキ付
- ハンドル高さ3段階調整
- ツエ・カサ立て付
- ホイルキャップ反射板付
- 前車輪は固定・左右60°の2段階
- コンパクトに自立する折りたたみ式

※保冷バック付もごさいます。
ご注文時にご指定ください。

使用時 (cm)		幅		奥行		座高さ		シート幅		座奥行	
高さ	幅	奥行	座高さ	シート幅	座奥行	高さ	幅	奥行	座高さ	シート幅	座奥行
83~91	46	54	49	32	30						
収納時 (cm)		幅		奥行							
高さ	幅	奥行	高さ	幅	奥行						
91	46	31	91	46	31						

ご自分のペースでお体に合わせてお使いください。

BP2／杖

屋内での使用に最適なコンパクト・簡易タイプ




BP2 <簡易平行棒> (20.8kg)

TAIS:00160-000093

参考価格 **¥40,700** 税込

- 高さ調節／71～86cm(4段階調節)
- 長さ調節／151～251cm(5段階調節)
- 内 幅／50cm
- 手摺外径／φ29・φ32mm
- 全 幅／87cm

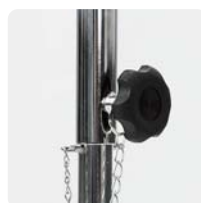


高さ調節部



長さ調節部



※付き添いの方が付いて、1人でご使用ください。

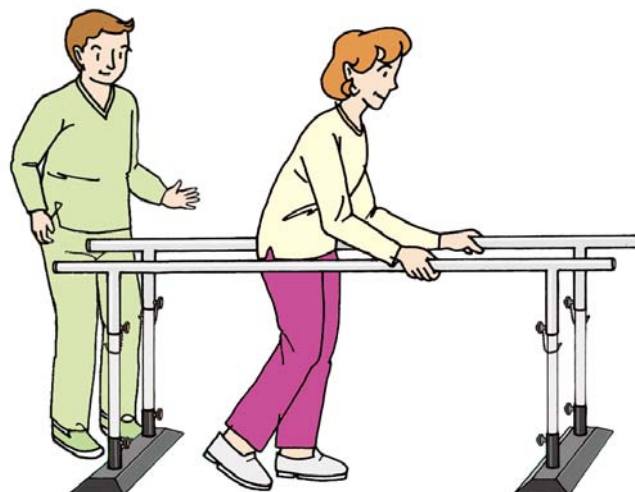


ご自分のペースでお体に合わせてお使いください。

杖

S11-M (中)2本組 <松葉杖>

参考価格 **¥8,250** 非課税

重 量	870g
長 さ	114.5～134.5cm
脇あて・グリップ	TPR
色	シルバー
先ゴム	φ23mm用 グレー

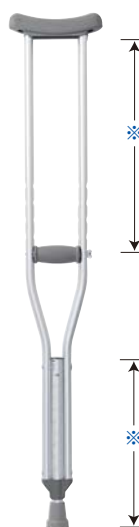

脇あてからグリップの間の調節が可能です。

- 3.7cmピッチ (5段階) (32.5～48.5cm)



- 2.5cmピッチ (9段階) 調節ロックピンを押し長さを合わせます。



標準
モジュール

Modern
シリーズ

次世代型
標準

軽量
六輪

リクライ
ニング

子供用
簡易

シャワー用

オーダー
システム

電動

歩行訓練
歩行補助具

オプション&
関連パーツ

<4点支持杖(低重心)>

カーボン4点可動式スモールタイプ

参考価格 **¥21,500** 非課税

重 量	440g
長 さ	62.5～88cm (2.55cmピッチ11段階調節)
グリップ	ゴム製 (TPE)
色	01 カーボン柄グレー 02 かすみ草
先ゴム	黒



01
カーボン柄グレー



02
かすみ草



- 支柱が前後に可動します。

クーパー <ロフトランドクラッチ> C-400L

参考価格 **¥8,500** 非課税

TAIS:01268-000001

重 量	620g
長 さ	85～118cm
アーム・グリップ	樹脂製 Nグリップ
色	シルバー
先ゴム	グレー



アームからグリップ間の調節が可能です。

- 20～28cm (4段階) 調節ロックピンを押し長さを合わせます。

グリップから先ゴム間の調節が可能です。

- 65～90cm (11段階) 調節ロックピンを押し長さを合わせます。



- 手への負担が少ない Nグリップ仕様
- 握力が弱い方におすすめです。



転倒防止金具 ＜モジュール式＞



装着例

調節式なので、様々な
座面高さの車いすに
合わせることができます。

TAIS:00160-000305

モジュール中床用(ティップング高さ約13～19cm)

- ティップング径φ20mm用
- ティップング径φ22mm用

モジュール低床用(ティップング高さ約7～12cm)

- ティップング径φ20mm用
- ティップング径φ22mm用

※ティップング高さとは、
ティップングバーの上面
から地面までの鉛直方向
の距離をさします。

ティップング高さ




参考価格	新車ご購入時の 取付価格※	¥13,200 増/台 非課税
	部品のみ ご購入価格	¥14,520/台 税込

※新車ご購入時の取付価格には部品の代金を含んでおります。
重量：1.2kg

段差乗り越え・座面高さ変更


段差乗り越え時

転倒防止
(モジュール式)

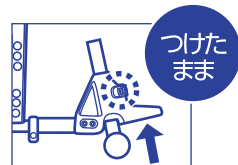


解除状態にする

通常の
転倒防止

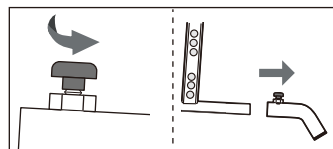


ノブネジをゆるめる 転倒防止を取り外す

段差を乗り越える

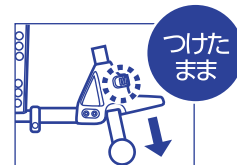


使用状態にする

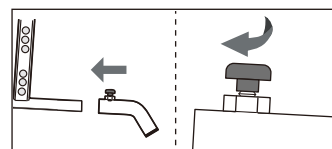

転倒防止を装着する ノブネジをしめる


座面高さ変更時

転倒防止
(モジュール式)

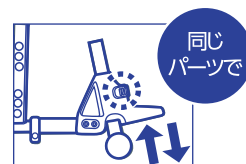

高さを調節する。※調節範囲内に限る。

通常の
転倒防止

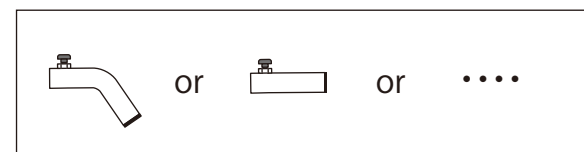

高さに合わせた転倒防止が必要

交換部品からご利用状況に合わせたもの、
安全性を高めたものまで幅広くご用意しました。

オプション& 関連パーツ

Option & Parts

クッション	103
ボディサポート	107
介助サポート	111
車いす便利品	115
車いす部品	117













クッション

クッションマッピング

※このグラフは専用カバーを取り付けた状態で適切な空気調整を行った場合の数値です。
※通気性の良いカバーと、一つ一つのセルが身体の動きに応じて自在に動くことで、セルの隙間から蒸れが防止されます。
但し、身体状況や気候等によって感じ方は異なります。

自社調べ

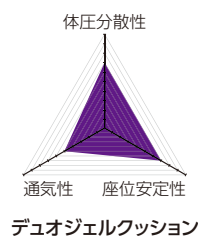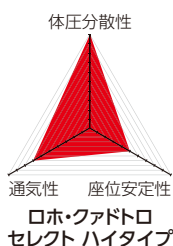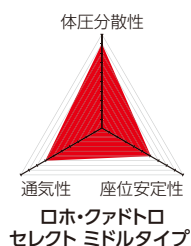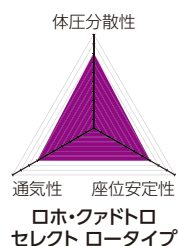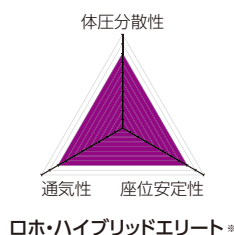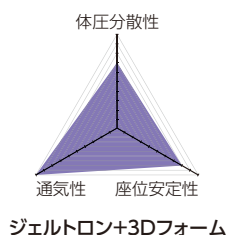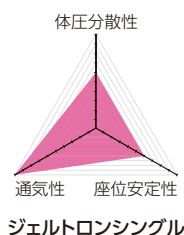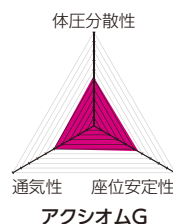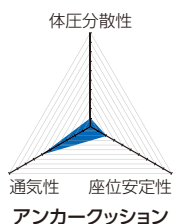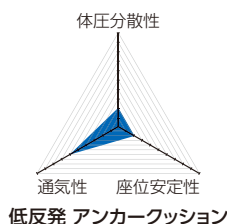

ウレタン・多層構造クッション

● 低反発アンカークッション



サイズ(40×40×(前7/後5)cm

シートカラー

<参考価格>

デニム

¥9,680/個 税込

● オークダーカラー N 色 ¥12,100/個 税込

○ 前ずれ防止
クッション



● アンカークッション



サイズ(40×40×(前5/後3)cm

シートカラー

<参考価格>

デニム

¥6,050/個 税込

● オークダーカラー N 色 ¥7,260/個 税込

○ 前ずれ防止
クッション



● オークダーカラー (P.089ご参照) N 色よりカラーをご指定ください。<別途料金> S 色もございます。

ウレタン

● アクシオムG



○ 人体計測学に基づいた形状の
高密度高級ウレタンタイプ
4wayストレッチ防水カバー付き

材質:ポリウレタン100%

TAIS:00468-000056

(cm)

<参考価格> ¥22,000/個 税込

アクシオムG_40*40 幅40×奥行40×厚み(大腿部直下6 側面8)

[付属カバー]:ポリエステル100%

アクシオムG_40*45 幅40×奥行45×厚み(大腿部直下6 側面8)

他のクッションサイズについてはお気軽にご相談ください。

標準
モジュール

Modern
シリーズ

次世代型
標準

軽量
六輪

リクライ
ニング

子供用
簡易

シャワー用

オーダー
システム


電動

歩行訓練
歩行補助具

オプション &
関連パーツ

立体格子ジェルクッション

● ジェルトロンシングル

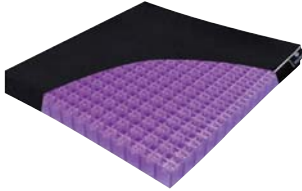

サイズ(38×38×3.5)cm

○優れた体圧分散と垂直、斜め、ずれ方向の荷重も吸収し座位を安定させます。
(裏面滑り止め加工)

シートカラー <参考価格>
ブラック タイプ[38]
(GTC1S) **¥14,000/個** 税込
〔付属カバー〕: ポリエステル・裏: 滑り止め加工

座骨の局部圧を軽減
前ずれも吸収




蒸れずにさらっとした感触



ハイブリッドクッション(ジェル&ウレタン)

● ジェルトロンシングル+3Dフォーム

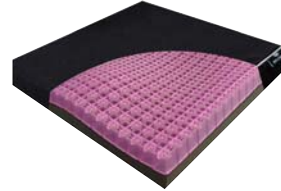

サイズ(38×38×6.5)cm

○でん部の形状に合わせたフォームとジェルトロンの組合せで前後のずれを減らし、お尻の位置の安定性を高めました。(裏面滑り止め加工)

シートカラー <参考価格>
ブラック タイプ[38]
(GTC1S3D) **¥18,000/個** 税込
〔付属カバー〕: ポリエステル・裏: 滑り止め加工

ハイブリッドクッション(エア&ウレタン)

● ロボ・ハイブリッドエリート

○体圧分散と姿勢保持を高めたエアセルとウレタンの軽量ハイブリッド



(2バルブタイプ)

<1バルブタイプ>
座位バランスが取れる方向け



<参考価格> **¥73,590/個** 税込

(品番)	(セルの高さ)	(幅×奥行)cm
530847	8.3	38×40
530848	8.3	40×40
530849	8.3	40×43

〔付属カバー〕
●カバー ●ロボポンプ ●取扱説明書
●修理保証請求カード ●専用修理キット

<2バルブタイプ>
傾きのある方向け



<参考価格> **¥75,570/個** 税込

(品番)	(セルの高さ)	(幅×奥行)cm
530853	8.3	38×40
530854	8.3	40×40
530855	8.3	40×43

エアクッション

● ロボ・クワトロセレクト

○4つの空気室が柔軟に座圧を分散すると共に、座位バランスを調整し、床ずれを予防します。



(ハイトタイプ カバー付)

<参考価格> **¥73,590/個** 税込



4つの独立した空気室




アイソフローバルブISO FLO®

(品番)	(セルの高さ)	(幅×奥行)cm
530823 ハイタイプ(8×9)	10	38×43
530824 ハイタイプ(9×9)	10	43×43
530827 ミドルタイプ (8×8)	8.3	38×38
530828 ミドルタイプ (8×9)	8.3	38×43
530832 ロータイプ (8×8)	5	38×38
530833 ロータイプ (8×9)	5	38×43

〔付属品〕
●専用カバー ●ロボポンプ ●取扱説明書
●修理保証請求カード ●専用修理キット

ハイブリッドクッション(ジェル&ウレタン)

● デュオジェルクッション

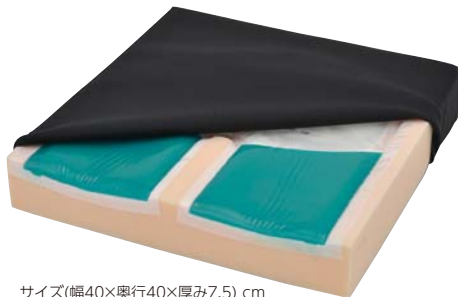

サイズ(幅40×奥行40×厚み7.5) cm
重量:約1.7kg

CK-385<参考価格> **¥42,900/個** 税込

〔付属カバー〕
上面:表地ポリエステル100%(伸縮)裏地ポリウレタンフィルム(防水)
下面:ターボリン布 (防水・防炎・すべり止め加工)


① ずれ・摩擦を軽減
(流動シリコンジェル)

② 大腿部を安定
サポート
(シリコンジェル
TRUGEL)

③ 姿勢保持
(高密度ウレタン
フォーム)

④ 体圧分散
(低反発ウレタン
フォーム)

U字構造










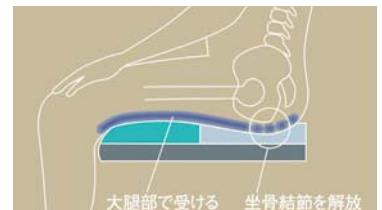


大腿部で受ける 坐骨結節を解放

クッション

クッションマッピング

自社調べ

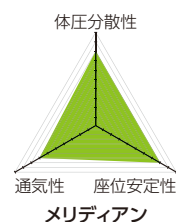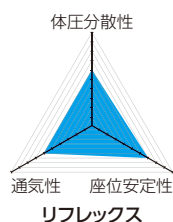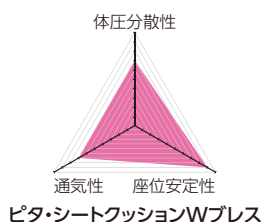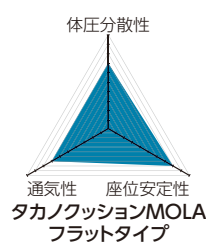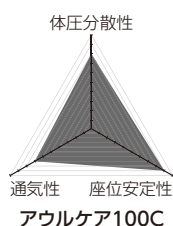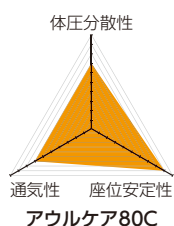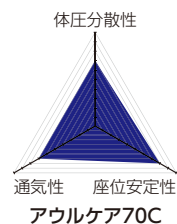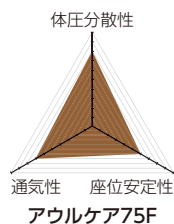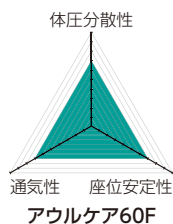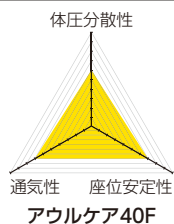

ハイブリッドクッション(ジェル&ウレタン)

○アウルケアシリーズ

ジェルの流動性とウレタンフォームの軽さの組み合わせにより、「衝撃」「圧力」「ズレ」の問題を解決したクッションです。

●アウルケア40F



厚さ4cmの薄さで
足つき性の良い薄型タイプ

●アウルケア60F



適度な厚みで
体圧分散性を持つ標準タイプ

●アウルケア75F



坐骨部の深い沈み込み量を確認した
減圧重視タイプ

●アウルケア70C



アンカー形状により前ずれを防ぐ
姿勢保持タイプ

●アウルケア80C



3D形状で最大限の薄さを実現した
汎用性の高い姿勢保持タイプ

●アウルケア100C



起状の強い3D形状で沈み込みのある
ハイスぺックな姿勢保持タイプ

タイプ	座幅	品名 品番	サイズ(cm)	重量(約 kg)	本体+カバー付 <参考価格>
フラット	40幅	アウルケア40F OWL40F-BK1-4040	幅40×奥行40×厚4	1.1	¥26,950/個 税込
		アウルケア60F OWL60F-BK1-4040	幅40×奥行40×厚6	1.2	¥29,150/個 税込
		アウルケア75F OWL75F-BK1-4040	幅40×奥行40×厚7.5	1.4	¥31,350/個 税込
		アウルケア70C OWL70C-BK1-4040	幅40×奥行40×厚4.6~7	1.3	¥30,800/個 税込
コンター	40幅	アウルケア80C OWL80C-BK1-4040	幅40×奥行40×厚3.5~8	1.6	¥33,000/個 税込
		アウルケア100C OWL100C-BK1-4040	幅40×奥行40×厚5.5~10	1.6	¥36,300/個 税込

全タイプカバー付き



フラットタイプカバー



コンタータイプカバー

他のクッションサイズについてはお気軽にご相談ください。

標準
モジュール

Modern
シリーズ

次世代型
標準

軽量
六輪

リクライ
ニング

子供用
簡易

シャワー用

オーダー
システム

電動

歩行訓練
歩行補助具

オプション &
関連パーツ

ウレタン

●タカノクッションMOLA(モーラ)

○ツギハギのない滑らかな3D形状のモールドウレタンフォームで、快適な座り心地をサポート。

●フラットタイプ



<参考価格> **¥27,500/個** (税込)

品番	幅	奥行	高さ
TC-ML38F	38		
TC-ML40F	40	40	坐骨部55 大腿部60
TC-ML43F	43		

(付属カバー):


インナーカバー:ポリウレタン・ポリエステル、アウターカバー:ポリエステル・PVCレザー

●コンタータイプ



<参考価格> **¥30,800/個** (税込)

品番	幅	奥行	高さ
TC-ML38C	38		
TC-ML40C	40	40	坐骨部50 大腿部75
TC-ML43C	43		

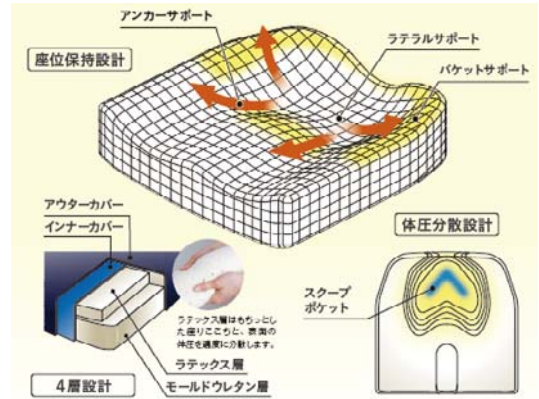

アウターカバー(防水・吸湿)
外して洗濯可能。



インナーカバー(防水・防水ファスナー)
拭拭で簡単お手入れ。
次亜塩素酸や
消毒用エタノール等使用可能。




ハイブリッドクッション

●ピタ・シートクッションWブレス

○身体をやさしく支えるジェルが優れた除圧効果を発揮し、長時間座っても疲れにくくお尻も痛くなりません。
安定した座位とフィット感を実現し、前ズレ対策に効果的です。



サイズ(40×40×6.5)cm

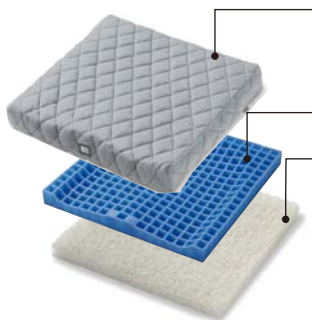

すべりにくく、肌に優しいナノ・ファイバーカバー
ナノ・ファイバーは髪の毛の7500分の1という極細繊維のため、摩擦係数が高く、
良好な滑り止め効果と、肌へのストレスのかかりにくいソフトな肌触りという特徴
を併せ持っています。

体圧分散効果の高い立体格子状ジェル

座位保持をアシストするブレス

PTW65 <参考価格> **¥27,500/個** (税込)

(付属カバー): 表面:ポリエステル100%

裏面:ポリエステル55% ポリウレタン45%

[中材] 上層 立体格子状ジェル;熱可塑性エラストマー

下層 プレス:合成繊維(ポリエステル系繊維)

ハイブリッドクッション(ウレタンフォーム&エア)

●リフレックス

○空気の浮力とエアフォームの座位の
安定により、座圧の軽減を実現します。



サイズ(40×40×8)cm


<参考価格> **¥33,880/個** (税込)

(付属カバー): 伸縮性ポリウレタン(黒色)1枚

(幅×奥行×高さ)cm

38×38	×8	40×45	×8
40×40		43×43	

「空気自動開閉バルブ」に
より調整不要で、
自動的に最適な座圧を
保ちます。

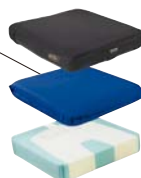

●メリディアン

○前後2つの空気室構造が
圧力分散効果を増加させます。



<6>
サイズ(40×40)cm

<参考価格> **¥66,000/個** (税込)

(付属カバー): 伸縮性ポリウレタンカバー
(黒色)1枚

(幅×奥行)cm/バルブ数:2

製品 No	幅	高さ
4	38×38	
6	40×40	
8	45×40	

高さ共通 約10cm(カバー込み)

○空気ポンプ不要。
バルブを開くと自動
的にクッションが膨ら
みます。



ボディサポート

※オプションは単品購入の場合は **税込** となります。
 ※**非課税**の車いすに装着して購入した場合は **非課税** となります。
 ※取付方法や必要工具は、カワムラサイクルホームページをご確認ください。

頭部支持


● 背延長



＜枕付き＞
 装着例(濃紺レザー)
 重量:濃紺レザー-2.1kg
 黒1.9kg



＜枕なし＞
 装着例(濃紺レザー)
 重量:濃紺レザー-1.8kg
 黒1.6kg

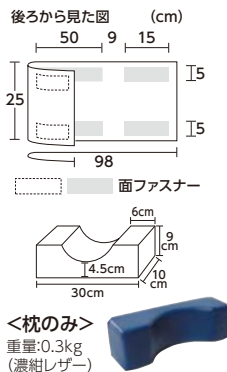

<参考価格>				
基本カラー		黒 (ポリエステル)	<枕付き> 取付価格: ¥15,730 / 個 非課税 部品価格: ¥17,303 / 個 税込	
			濃紺レザー (ビニールレザー)	<枕なし> 取付価格: ¥12,100 / 個 非課税 部品価格: ¥13,310 / 個 税込
			<枕のみ> 部品価格: ¥3,729 / 個 税込	
	● オーダーカラー			<枕付き> 取付価格: ¥18,150 / 個 非課税 部品価格: ¥19,965 / 個 税込
				<枕なし> 取付価格: ¥14,520 / 個 非課税 部品価格: ¥15,972 / 個 税込
		(P.089 ご参照)		<枕のみ> 部品価格: ¥3,993 / 個 税込
N 色よりカラーをご指定ください。				

○今お使いの車いすに取付可能。

● すきまレスピロー



頭部と枕のスキマを0に!

大粒ビーズが頭部の動きに追従し、しっかりと保持します。
 上下に取り付けられたベルトの長さを調整することで枕の厚さを簡単に変えられます。

取付可能な車いす

● 背延長タイプのヘッドサポートが付いた車いす


重量:0.5kg 材質:ビニールレザー

TAIS:00160-000285

すきまレスピロー <参考価格> 部品価格: ¥16,500 / 個 **税込**

● スーパーヘッド

車いす用ヘッドレスト
SuperHead
 スーパーヘッド

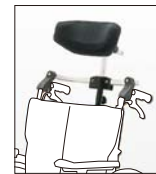

装着例

＜折りたたみ収納可能＞



枕の位置は上下前後に自由に調整、さらに頭の傾きに合わせて360°調整できます。
 楽な姿勢で車いすに座ることができます。

取付可能な車いす

● バックサポートパイプ 直径φ19mm～φ22mm

● 手押しハンドル曲げタイプ

重量:1.1kg 材質:アルミ・ウレタン

※サイズをご指定ください。

● 対応するシート幅

サイズ	平面式	立体式
S	28～36cm	32～40cm
M	34～44cm	38～48cm

サイズ

S	<参考価格>	取付価格: ¥21,600 / 個 非課税
M		部品価格: ¥23,760 / 個 税込

アームサポート

● うでささえ

○ 腕のずれ・落下を防ぎます。



装着例



取付可能車種: KXシリーズ、KACシリーズ、
 BMLシリーズ、KVシリーズ

TAIS:00160-000218

<参考価格> 取付価格: ¥4,290 / 個 **非課税**
 部品価格: ¥4,719 / 個 **税込**

材質(ウレタン樹脂、他) 付属(六角レンチ)
 重量:0.3kg

〈参考価格〉
について

取付価格：新車ご購入時の取付

※非課税の車いすに取り付ける場合の価格を表示しております。
課税の車いすに取り付ける場合は課税となります。

※部品代と工賃を含みます。

※ご購入時は車種をご指定下さい。取り付けできない、
あるいは特注対応が必要な場合がございます。

部品価格：部品のみご購入価格

※取付工賃は含んでおりません。

車いすの仕様により、別途費用が必要となるもの、
取り付けできないものもあります。

標準
モジュール

Modern
シリーズ

次世代型
標準

軽量
六輪

リクライ
ニング

子供用
簡易

シャワー用

オーダー
システム


電動

歩行訓練
歩行補助具

オプション&
関連パーツ

体幹支持

●車いすサポートシートα(別売りバックサポートα)

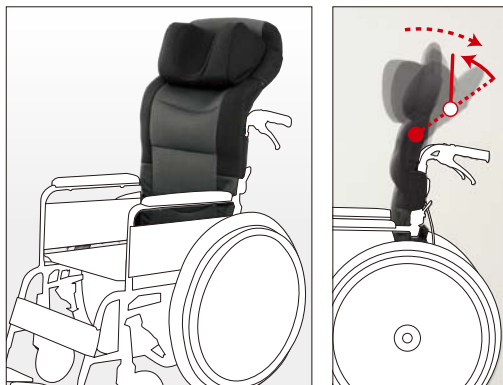

サイズ(幅40×高さ90×奥行8)cm 重量:3.6kg

○簡単装着。体幹と頭部の姿勢保持負担を軽減。
表面生地は、通気性によりダブルラッセル素材。
頭部を支えるクッションの角度を二か所で調整可能。

〈シート幅40cm 標準型車いす対応型〉


〈参考価格〉

部品価格：¥40,000/個 税込

カラー(ブラック)

●エクスジェル バッククッション

体幹の崩れやすい方はハイタイプ。
比較的座位が保てる方にはロータイプ。

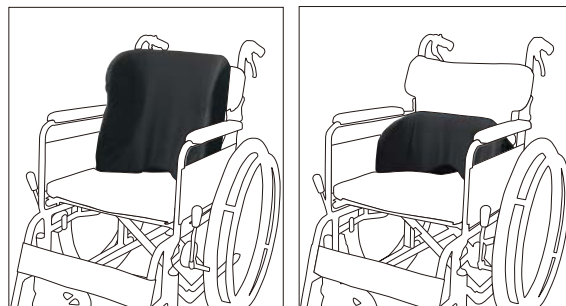

ハイタイプ

サイズ
(幅40×高さ38×奥行17)cm
重量:1.1kg

ロータイプ

サイズ
(幅40×高さ18×奥行14)cm
重量:0.5kg

○骨盤を左右からサポートすることにより、
体幹が安定します。調節がいらず置くだけで
簡単にお使いいただけます。

ハイタイプ

〈参考価格〉

¥22,000/個 税込

ロータイプ

〈参考価格〉

¥13,200/個 税込

カラー(ブラック)

●サイドサポートクッション骨盤パッドセット (サイドサポートクッションS/L,骨盤パッド)



○車いすでの横倒れを防ぎます。サイドサポートと骨盤パッドを
合わせて使用することにより、より保持力を高めて使用する
ことができます。



Sサイズ Lサイズ
サイドサポートクッション

骨盤パッド

サイズ

S (骨盤パッド付)
L (骨盤パッド付)

〈参考価格〉

部品価格：¥20,900/個 税込

●パッドとの併用で姿勢の保持力をアップします。

サイズ:サイドサポートクッションS(W36×D10×H33)cm
サイドサポートクッションL(W36×D10×H38)cm
骨盤パッド(W50×D2×H15)cm

カラー:ブラック

材質:サイドサポートクッション(ウレタン、TECCELLボード、フェイクレザー)
骨盤パッド(ウレタン、フェイクレザー)

ボディサポート

※オプションは単品購入の場合は **税込** となります。
 ※**非課税**の車いすに装着して購入した場合は **非課税** となります。
 ※取付方法や必要工具は、カワムラサイクルホームページをご確認ください。

フットサポート

●つま先止め

○足のずれ・落下を防ぎます。



装着例

カラー

<参考価格>

黒(ナイロン)

取付価格: ¥2,480 増/個 **非課税**

部品価格: ¥2,728 /個 **税込**

◆ オーダーカラー

取付価格: ¥2,670 増/個 **非課税**


部品価格: ¥2,937 /個 **税込**

◆ オーダーカラー

(P.089 ご参照)

●色よりカラーを

ご指定ください。

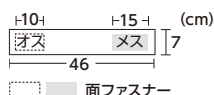

※取付時、フットプレートに穴をあけていただく必要がございます。
 ※フットサポート、フットプレートの部品販売時に取り付けて出荷の場合、(部品価格+取付工賃)での販売となります。

※取付時、フットプレートに穴をあけていただく必要がございます。
 ※フットサポート、フットプレートの部品販売時に取り付けて出荷の場合、(部品価格+取付工賃)での販売となります。

●フットガード

○フットプレートから足が落ちてしまう方におすすめします。
 左右兼用で靴をはいたままでも装着可能な、ゆったりサイズです。



M(茶)



L(黒)



LL(グレー)

サイズ(周囲)

M	約29~39cm
L	約31~43cm
LL	約33~47cm

サイズ(カラー)

<参考価格>

M(茶) / L(黒) / LL(グレー) 部品価格: ¥3,740 /個 **税込**

サイズ: 左右兼用
 M(茶): 22~24cm, L(黒): 24~26cm, LL(グレー): 26~28cm
 ※手洗い可能(脱水・乾燥機不可)

※サイズ(カラー)をご指定ください。

○つま先ガードもあります。

●専用つま先ガード


M(茶) / L(黒) / LL(グレー)

¥990(単品/ **税込**)

(専用つま先ガード)を装着した状態。




●面ファスナー式で簡単に固定、調整ができます。

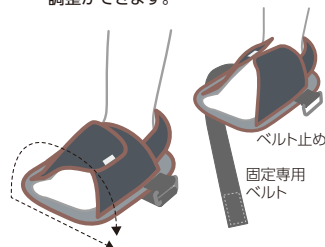

シートベルト

○これであんしん! からだにソフトでしっかりガード。

●あんしんベルト

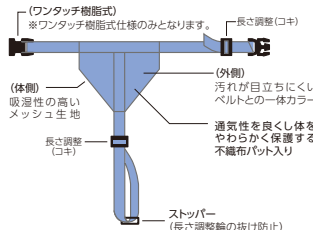

横ベルトはひじ掛けの上から背もたれ後ろに回してバックル固定します。

<参考価格>

部品価格: ¥6,600 /個 **税込**

●保護パット一体設計で、部分圧迫がさげられます。
 ●簡単着脱、丸洗い可能。

●ハイレイズベルト



<参考価格>

部品価格: ¥6,600 /個 **税込**

●内面はウイルスを不活化させる抗ウイルス仕様
 ●簡単着脱、丸洗い可能。

抗ウイルス仕様


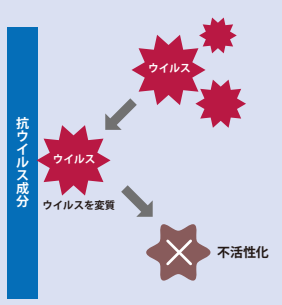


表: ポリエステル90% 綿10%
 裏: ポリエステル100%
 中綿: ポリエステル100%
 ベルト: ポリプロピレン

○シートベルト各種ご用意。お気軽にご相談ください。

●面ファスナー式

面ファスナー固定式

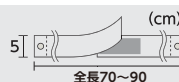

(標準:黒)

<参考価格>

取付価格: ¥3,850 増/個 **非課税**

部品価格: ¥4,235 /個 **税込**

◆ オーダーカラー <参考価格>

取付価格: ¥4,240 増/個 **非課税**

部品価格: ¥4,664 /個 **税込**

●折り返し式

面ファスナー固定式



(標準:黒)

<参考価格>

取付価格: ¥4,120 増/個 **非課税**

部品価格: ¥4,532 /個 **税込**

●ワンタッチ樹脂式



(標準:黒)

<参考価格>

取付価格: ¥4,600 増/個 **非課税**

部品価格: ¥5,060 /個 **税込**

●ワンタッチ金具式



(標準:黒)

<参考価格>

取付価格: ¥5,810 増/個 **非課税**

部品価格: ¥6,391 /個 **税込**

※面ファスナー部分: 20cm ※面ファスナー接着部分は10cm以上になるように調整してください。

各種シートベルト

その他の寸法についても、別途承ります。お問い合わせください。

〈参考価格〉
について

取付価格：新車ご購入時の取付

※非課税の車いすに取り付ける場合の価格を表示しております。
課税の車いすに取り付ける場合は課税となります。

※部品代と工賃を含みます。

※ご購入時は車種をご指定下さい。取り付けできない、
あるいは特注対応が必要な場合がございます。

部品価格：部品のみご購入価格

※取付工賃は含んでおりません。

車いすの仕様により、別途費用が必要となるもの、
取り付けできないものもあります。

標準
モジュール

Modern
シリーズ

次世代型
標準

軽量
六輪

リクライ
ニング

子供用
簡易

シャワー用

オーダー
システム

電動

歩行訓練
歩行補助具

オプション&
関連パーツ


ブレーキ

○毎日使うものだから、安心して使える事がベスト。各種ブレーキのご紹介。

●延長ブレーキ棒(長さ2タイプ)



ニギリ(B2)

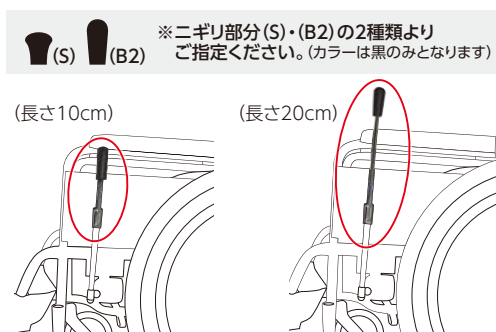

TAIS:00160-000170

〈参考価格〉

長さ **10cm**

取付価格：¥2,500増/個 **非課税**

部品価格：¥2,750/個 **税込**

TAIS:00160-000261

〈参考価格〉

長さ **20cm**

取付価格：¥2,700増/個 **非課税**

部品価格：¥2,970/個 **税込**

取付方法

ニギリ部分を外し延長ブレーキ棒を差し込んでネジを締め付けます。
(Ⓢドライバーが必要です。)

●足踏みブレーキ

○後方介助に便利です。



重量:標準車0.6kg/台

シリーズ	〈参考価格〉	
	取付価格 非課税	部品価格 税込
・標準車(自走車輪用)	¥11,000増/台	¥12,100/台
・標準車(介助車輪用)	¥11,000増/台	¥12,100/台

テーブル

テーブルサイズ：幅54×奥行48cm共通

●面ファスナー止め

○ご使用時に簡単に着脱ができます。



乗降時

TAIS:00160-000217

〈参考価格〉

取付価格：¥9,020増/台 **非課税**

部品価格：¥9,317/個 **税込**

重量:2.5kg

装着方法



テーブル底面に付いた、強力面ファスナー方式で車いすの
アームサポート部に簡単に固定、着脱ができます。

●前後着脱式

○取付部を軸に跳ね上げて乗降します。



乗降時

〈参考価格〉

取付価格：¥11,440増/台 **非課税**

部品価格：¥11,979/個 **税込**

重量:3.0kg

装着方法



左右いずれかのアームサポート部にテーブル取付金具を
装着、固定。テーブルを(前後)着脱ができます。

●上下着脱式

○取付部を軸にクルリとまわして乗降します。



乗降時

〈参考価格〉

取付価格：¥10,230増/台 **非課税**

部品価格：¥10,648/個 **税込**

重量:3.3kg

装着方法



左右いずれかのアームサポート部にテーブル取付金具を
装着、固定。テーブルを(上下)着脱ができます。

介助サポート

※オプションは単品購入の場合は **税込** となります。

※**非課税**の車いすに装着して購入した場合は **非課税** となります。

※取付方法や必要工具は、カワムラサイクルホームページをご確認ください。

転倒防止金具

●＜キャスト付＞

○介護する方も安心、後方転倒を防ぎます。



＜参考価格＞
取付価格：¥8,470増/台 **非課税**
部品価格：¥9,317/台 **税込**

●＜キャストなし＞



＜参考価格＞
取付価格：¥5,280増/台 **非課税**
部品価格：¥5,808/台 **税込**

※受注生産となります。

※取付車種をご指定ください。モジュール車いすの場合、後輪サイズと前座高も必要です。

※酸素ボンベ架台との同時装着はできません。 ※取付時、ティッピングゴムを外す必要があります。

※新車ご購入時の取り付けの際、一部の車種につきましては梱包状態により同梱出荷対応となります。（この場合も取付価格が適用となります。）

●＜モジュール式＞

○調節式なので、様々な座面高さの車いすに合わせることができます。



装着例

中床用φ20・φ22


ティッピング高さ およそ13～19cm

＜参考価格＞
取付価格 **非課税** 部品価格 **税込**
¥13,200増/台 ¥14,520/台

低床用φ20・φ22

ティッピング高さ およそ7～12cm

＜参考価格＞
取付価格 **非課税** 部品価格 **税込**
¥13,200増/台 ¥14,520/台

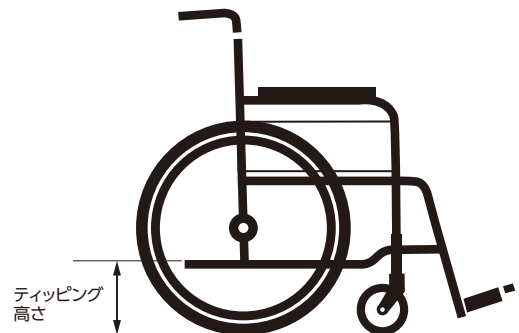

ティッピング高さ

ティッピング高さとは、ティッピングバーの上面から地面までの鉛直方向の距離をさします。

TAIS:00160-000305


重量:1.2kg

詳細はP.101をご確認ください。

その他

●杖置き(杖立て) TAIS:00160-000169


○杖や松葉杖を携帯するのに便利です。

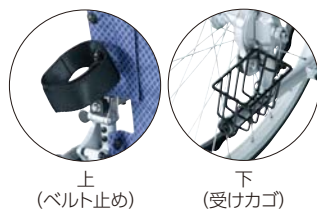

上
(ベルト止め)


下
(受けカゴ)

＜参考価格＞
取付価格：¥2,420増/個 **非課税**
部品価格：¥2,541/個 **税込**

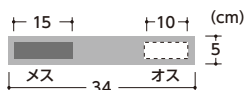

※取り付け時、ティッピングゴムを外す必要があります。

重量:0.1kg

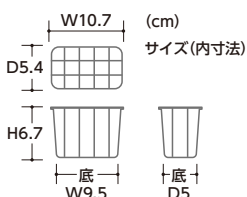

●イーザーグライド M・L ※サイズをご指定ください。

○高い強度と優れた柔軟性により、移乗先との間を橋渡しします。



写真はMサイズです。



＜イメージ＞

サイズ (幅×長さ)cm カラー **＜参考価格＞**
M 33×60 黒 部品価格：¥33,000/個 **税込**
L 33×75 黒 部品価格：¥41,800/個 **税込**

- 表面は柔らかで裏面には滑り止め帯付き。
 - 座ったままの乗り降りが可能。
 - 両端を折り曲げることができ、突起物などから身体を保護。
- 重量:M 0.9kg
L 1.3kg

〈参考価格〉
について

取付価格：新車ご購入時の取付

※非課税の車いすに取り付ける場合の価格を表示しております。
課税の車いすに取り付ける場合は課税となります。

※部品代と工賃を含みます。

※ご発注時は車種をご指定下さい。取り付けできない、
あるいは特注対応が必要な場合がございます。

部品価格：部品のみご購入価格

※取付工賃は含んでおりません。

車いすの仕様により、別途費用が必要となるもの、
取り付けできないものもあります。

ガートル止め金具・ガートル棒

● **ガートル止め金具** ※ご利用の際は、後方への転倒にご注意ください。 ※ガートル棒は別売りとなります。 ※指定がなければ右側へ取り付けとなります。



〈前止め用〉 TAIS:00160-000167

〈参考価格〉

取付価格：¥4,400増/個 **非課税**

部品価格：¥3,993/個 **税込**

※ (φ22mm) のフレームパイプに取付可。
重量:0.2kg



装着例

その他 〈専用前止め金具〉

シリーズ	〈参考価格〉 取付価格 非課税	〈参考価格〉 部品価格 税込
・KX/KXL	¥7,150増/個	¥7,260/個
・KPF	¥17,600増/個	¥18,150/個
・AYK	¥7,150増/個	¥7,260/個
・RR60/RR70	¥5,500増/個	¥5,324/個



〈後ろ止め用〉 TAIS:00160-000167

〈参考価格〉

取付価格：¥4,400増/個 **非課税**

部品価格：¥3,993/個 **税込**

※リクライニング機能のある車いすには取り付けできません。
重量:0.3kg



装着例

その他 〈専用後ろ止め金具〉

シリーズ	〈参考価格〉 取付価格 非課税	〈参考価格〉 部品価格 税込
・KA800、SYP	¥5,390増/個	¥5,203/個
・KMD、WA16、WAP16	¥4,400増/個	¥3,993/個

● ガートル棒

〈参考価格〉 部品価格：¥3,993/個 **税込**

重量:0.7kg

〈ステンレス製:φ19mm〉



サイズ
(cm)

● 伸縮式ガートル棒

TAIS:00160-000168

〈参考価格〉 部品価格：¥4,840/個 **税込**


重量:0.8kg

〈ステンレス製:φ19mm〉

(最伸時:H146)

〈無段階〉

(最縮時:H78)

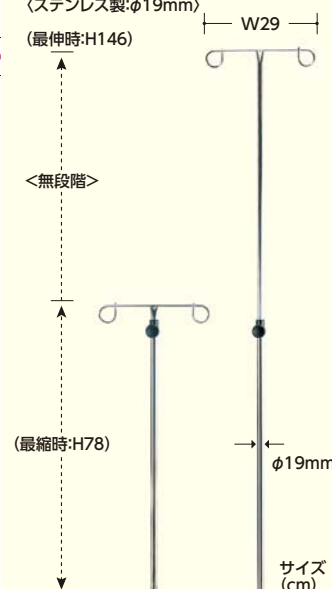

サイズ
(cm)

標準
モジュール

Modern
シリーズ

次世代型
標準

軽量
六輪

リクライ
ニング

子供用
簡易

シャワー用

オーダー
システム

電動

歩行訓練
歩行補助具

オプション &
関連パーツ

介助サポート

※オプションは単品購入の場合は **税込** となります。
 ※**非課税**の車いすに装着して購入した場合は **非課税** となります。
 ※取付方法や必要工具は、カワムラサイクルホームページをご確認ください。

酸素ボンベ架台

○使用頻度の多いボンベサイズに適合する、内径2タイプを各種ご用意しました。

●<2WAY用>(転倒防止金具を取り付けた酸素ボンベ架台)

 国内特許取得済

○2サイズ(φ100mm以下用/φ140mm以下用)の酸素ボンベに1台で対応できます。(工具レスの簡単切り替え)



TAIS:00160-000306

装着例

重量:2.9kg

※中床用か低床用をご指定下さい。

※右側・左側をご指定ください。(指定がなければ右側へ取り付けとなります。)

※酸素ボンベは商品に含まれません。

詳細はP.056をご確認ください。

<中床用>

ティップング高さ およそ13~19cm

<参考価格>


取付価格 非課税	部品価格 税込
¥23,100増/個	¥24,200/個

<低床用>

ティップング高さ およそ7~12cm

<参考価格>

取付価格 非課税	部品価格 税込
¥23,100増/個	¥24,200/個

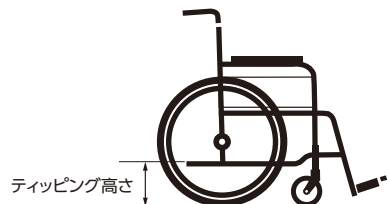

ティップング高さ

ティップング高さとは、ティップングバーの上面から地面までの鉛直方向の距離をさします。

その他<専用酸素ボンベ架台2WAY用>

シリーズ

<参考価格>

	取付価格 非課税	部品価格 税込
・KA800	¥28,600増/個	¥30,250/個
・RR42 / RR43	¥28,600増/個	¥30,250/個
・RR52 / RR53, KPF, WAR22-H/SH※, KPF, WAR22-H/SH※, WAR16-H※, WAR16-H※	¥28,600増/個	¥30,250/個
・SYP	¥28,600増/個	¥30,250/個

※WAR/WARPシリーズは左側仕様となります。

ボンベ外径

φ100mm以下用 → (外径φ100mm以下の酸素ボンベ)

φ130mm以下用 → (外径φ130mm以下の酸素ボンベ)

※ご利用の際は、後方への転倒にご注意ください。
 ※転倒防止金具との同時装着はできません。

●<標準車用> ※一部専用酸素ボンベ架台もございます。



装着例

φ100mm以下用 <参考価格>

TAIS:00160-000166

取付価格: ¥10,780増/個 **非課税**

部品価格: ¥10,648/個 **税込**

重量:0.9kg

φ130mm以下用 <参考価格>

TAIS:00160-000269

取付価格: ¥13,200増/個 **非課税**

部品価格: ¥13,310/個 **税込**

重量:1.0kg

※右側・左側をご指定ください。(指定がなければ右側へ取り付けとなります。)

●<RR専用>リクライニング車



装着例

φ100mm以下用 <参考価格>

TAIS:00160-000270

取付価格: ¥11,990増/個 **非課税**

部品価格: ¥11,979/個 **税込**

φ130mm以下用 <参考価格>

TAIS:00160-000271

取付価格: ¥14,410増/個 **非課税**

部品価格: ¥14,641/個 **税込**

※各取付車種用をご指定ください。(RR52-53用)

※右側・左側をご指定ください。

(指定がなければ右側へ取り付けとなります。)

※RR60・70Iには取り付けできません。

<リクライニング(時)車の場合>

※ボンベサイズによりバックサポート角度が制限される場合があります。

●<KX専用>ティルト・リクライニング車



装着例

φ100mm以下用 <参考価格>

TAIS:00160-000272

取付価格: ¥16,830増/個 **非課税**

部品価格: ¥17,303/個 **税込**

φ130mm以下用 <参考価格>

TAIS:00160-000273

取付価格: ¥19,250増/個 **非課税**

部品価格: ¥19,965/個 **税込**

<リクライニング(時)車の場合>

※ボンベサイズによりバックサポート角度が制限される場合があります。

※KXLには取り付けできません。

その他<専用酸素ボンベ架台>

φ100mm以下用

<参考価格>

シリーズ	取付価格 非課税	部品価格 税込
・KA800 TAIS:00160-000274	¥12,100増/個	¥12,100/個
・KPF TAIS:00160-000276	¥12,100増/個	¥12,100/個
・KMD TAIS:00160-000166	¥10,780増/個	¥10,648/個
・KV16	¥11,990増/個	¥11,979/個
・SYP	¥12,100増/個	¥12,100増/個

φ130mm以下用

<参考価格>

シリーズ	取付価格 非課税	部品価格 税込
・KA800 TAIS:00160-000275	¥14,850増/個	¥15,125/個
・KPF TAIS:00160-000277	¥14,850増/個	¥15,125/個
・KMD TAIS:00160-000269	¥13,200増/個	¥13,310/個
・KV16	¥14,410増/個	¥14,641/個
・SYP	¥14,850増/個	¥15,125増/個

※右側・左側をご指定ください。

(指定がなければ右側へ取り付けとなります。)

<跳ね上げ式アームサポートの場合>

※ボンベサイズにより跳ね上げ可動域が制限される場合があります。

＜参考価格＞
について

取付価格：新車ご購入時の取付

※非課税の車いすに取り付ける場合の価格を表示しております。
課税の車いすに取り付ける場合は課税となります。

※部品代と工賃を含みます。

※ご購入時は車種をご指定下さい。取り付けできない、
あるいは特注対応が必要な場合がございます。

部品価格：部品のみご購入価格

※取付工賃は含んでおりません。

車いすの仕様により、別途費用が必要となるもの、
取り付けできないものもあります。

カバー

○保管の際に、車いすの汚れを室内に持ち込まないためのカバーです。畳などの傷つきやすい床面の傷みも和らげます。

● ホイルソックス(後輪用) ※サイズとカラーをご指定ください。



22インチ

装着例(赤)



16インチ

装着例(緑)

特小 (14in)用	中 (20~22in)用	
サイズ(インチ)	小 (16in)用 大 (24in)用	カラー(赤・緑)
	特中 (18in)用	
＜参考価格＞ 部品価格：¥3,960/台 税込		

＜取付方法＞ 引っ張って伸ばし、タイヤの周りにはめます。(伸縮性のある生地です。)

● ホイルソックス(前輪用)



装着例



ご使用のキャスタサイズに
合わせて切断してください。

カラー(赤)	＜参考価格＞
部品価格：¥1,870/台	税込



＜取付方法＞ 引っ張って伸ばし、面ファスナーで固定します。
(伸縮性のある生地です。)

○フリース仕立ての柔らかかったかカバー。



装着例(ブラウン)

※カラーをご指定ください。



ブラウン



グレー

● フットレストカバー <KR-13>

＜参考価格＞

部品価格：¥3,740/台 税込

- ヒールループの付いたフットサポートにも取付可能。
- フットプレートの硬い底付き感を緩和します。
- 取付は面ファスナー式の簡単装着。
- 手洗い可能でお手入れも簡単。
- 装着可能限度フットプレートサイズ：
幅17×奥行15×厚さ1.5cm

材 質：表地(アクリル・ポリエステル)
裏地(ポリエステル100%)
トリミング部分(合成皮革)、
中材(ポリエステル)
サイズ：(幅20.5×奥行16.5×厚さ5)cm
重 量：約120g(1台)
カラー：2色(ブラウン/グレー)

○シートの汚れを防ぐ防水カバー



● 車いす WP シートカバー

＜参考価格＞

部品価格：¥2,200/個 税込

- 消臭・防水仕様
- 裏面はすべりにくい素材を使用しており
使用時にズレにくい
- 紐を結ぶだけの簡単装着
- 洗濯可能

サイズ：(幅36.5×長さ90)cm
材質：表/ポリエステル100%
裏/ポリウレタンフィルム
カラー：ブルー

○屋外使用などでの袖の汚れ、衣服への泥はねを防ぎます。

● 泥除け



装着例 標準(クリア塗装) 材質：ステンレス(SUS430)

※取付時、フレームに穴をあけていただく必要がございます。
※取付金具は、すべてシルバーになります。

＜標準＞ ステンレス(クリア塗装)

＜参考価格＞

取付価格：¥7,120増/台 非課税

部品価格：¥3,993/台 税込

＜オーダーカラー＞ ステンレス(塗装)

＜参考価格＞

取付価格：¥19,820増/台 非課税

部品価格：¥17,303/台 税込

◆ オーダーカラー(P.089)よりカラーをご指定ください。

取付可能車種：KVシリーズ、KR801N

※車輪サイズ(インチ)をご指定ください。

標準
モジュール

Modern
シリーズ

次世代型
標準

軽量
六輪

リクライ
ニング

子供用
簡易

シャワー用

オーダー
システム

電動

歩行訓練
歩行補助具

オプション&
関連パーツ

車いす便利品

※オプションは単品購入の場合は **税込** となります。
 ※**非課税**の車いすに装着して購入した場合は **非課税** となります。
 ※取付方法や必要工具は、カワムラサイクルホームページをご確認ください。

カバー

● スポークカバー

<スタンダード>



装着例(無色透明)

● スタンダード仕様

車輪サイズ (インチ)	カラー
22in	無色透明
20in	クリアブラウン
18in	白色半透明
16in	白色半透明

車輪サイズ(インチ)	取付価格 非課税	部品価格 税込
22in・18in・16in <参考価格>	¥4,400増/個	¥4,235/個
20in <参考価格>	¥5,600増/個	¥5,500/個

● 窓付レインポンチョDX

○車いすに座ったまま被ることができるポンチョ。



<参考価格>

部品価格: ¥6,578/個 **税込**

材質: ポリエステル100%
 カラー: ブルー

- 撥水加工・止水加工
- 透明窓で手元の確認が可能
- 便利な収納袋付

● ソフグリ2

○滑りづらく漕ぎやすい、ハンドリムカバー。



<参考価格>

部品価格: ¥8,250/台 **税込**

カラー: 黒

- 22～24インチタイヤのハンドリムに対応。
- 伸縮素材でハンドリムに被せるだけで装着可能。
- 表面の滑り止め素材により、ハンドリムの操作が楽に行えます。

＜参考価格＞
について

取付価格：新車ご購入時の取付

※非課税の車いすに取り付ける場合の価格を表示しております。
課税の車いすに取り付ける場合は課税となります。

※部品代と工賃を含みます。

※ご購入時は車種をご指定下さい。取り付けできない、
あるいは特注対応が必要な場合がございます。


部品価格：部品のみご購入価格

※取付工賃は含んでおりません。

車いすの仕様により、別途費用が必要となるもの、
取り付けできないものもあります。

保管・メンテナンス

● 車いすカバー

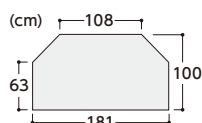

＜参考価格＞

部品価格：¥1,760/個 税込

素 材:EVA ※撥水加工
カラー:グレー
※標準車用

● 樹脂製フロアポンプゲージ付き



カラー:ブラック

カラー:イエロー

＜参考価格＞

部品価格：¥3,819/個 税込

- 見やすい空気圧ゲージ付で、安心・安全の
空気圧管理に役立ちます。
 - 英・米・仏式バルブ対応口金付。
 - ロングホース（1メートル）採用で取り扱いやすい。
- カラー:イエロー (BFP-PGAY2-LH)
ブラック (BFP-PGAB2-LH)
※カラーをご指定ください。

● ドリームシールハンディー （パンク防止剤）



＜参考価格＞

部品価格：¥3,080/個 税込

- NASAの月面探査車両のタイヤ開発に貢献した
タイヤ保護剤。
- 予めタイヤに注入することにより、パンクを防ぎ、
自然に抜ける空気もれを抑えます。

容量 (260ml) ※1本で約1台分

その他

● ネームプレート（30文字まで）

＜ネームプレート＞



例

＜参考価格＞

取付価格：¥2,420増/個 非課税
部品価格：¥2,662/個 税込



材質:アルミ
サイズ:H6×W13cm

＜ネームプレートS＞



例

＜参考価格＞

取付価格：¥2,420増/個 非課税
部品価格：¥2,662/個 税込



材質:アルミ
サイズ:H4.6×W12cm

※取り付け位置をご指定ください。座って（右側・左側、左右）など。

※裏面が粘着面になっています。

※専用品がございます。お問合せ下さい。(KA800シリーズ、KPFシリーズ、RR60/70シリーズ)

標準
モジュール

Modern
シリーズ

次世代型
標準

軽量
六輪

リクライ
ニング

子供用
簡易

シャワー用

オーダー
システム

電動

歩行訓練
歩行補助具

オプション&
関連パーツ

車いす部品

※オプションは単品購入の場合は **税込** となります。
 ※**非課税**の車いすに装着して購入した場合は **非課税** となります。

フットサポート (ステップセット) < 価格:参考価格 >

※座って(右側・左側)をご指定ください。



●フットサポート



記号	形式	対応フレーム パイプ内径 (mm)	ステップ 板カラー	特徴等	主な対応車種	対応 ステップ板	取付価格/台 非課税	部品価格/個 税込
C-2		φ17.5	黒		KA800, KX-EL	c		
C-6		φ19	黒	ポスト黒	KR801N	c		
D		φ16	黒		KPF, KX-N	d		
D-3		φ16	黒	前出し	KXL-EL, RR42/43, RR52/53	d		
O		φ16	黒		KXL, AYK	o		
O-2		φ16	黒	ポスト短	KAK-LO	o		
O-4		φ16	黒	前出し	AYK-EL	o		
O-5	側方 跳ね上げ式	φ16	黒		WAP	o		
P		φ16	黒		KAC-N(I)	p		
U-1		φ16/パチート	黒		KMD-A42幅以下, KMD-B&C低床42幅以下, WAR&WARP42幅以下	u		
U-2		φ16/パチート	黒	工具レス調整	KMD-B&C中床42幅以下	u		
U45-1		φ16/パチート	黒		KMD-B&C低床45幅, WAR&WARP45幅, KMD-A45幅	u45		
U45-2		φ16/パチート	黒		KMD-B&C中床45幅	u45		
V		φ16	黒		KPFK-12	v	¥3,740増	¥6,050
V-1	角度調整式	φ16/パチート	黒	工具レス調整	KMD-EL42幅以下, WARP-EL42幅以下, KMD-R12	v-1		¥8,778
V45-1		φ16/パチート	黒		KMD-EL45幅, WARP-EL45幅	v		
T	側方 跳ね上げ式	φ16	黒		対応フレーム/パイプ内径がφ16のものに対応 ※	—	¥6,600増	¥4,719

※一部取付けられない機種がございます。

フットプレート (ステップ板) < 価格:参考価格 >

※座って(右側・左側)をご指定ください。




●フットプレート



記号	対応フレーム パイプ内径 (mm)	ステップ 板カラー	主な対応車種	部品価格/個 税込
c	φ22	黒 (KS用) レッド イエロー	KA800, KR801N, KX-EL, KS10, KS4, KS4	
d	φ22	黒	KPF, KX-N, RR42/43, RR52/53, KXL-EL	
h	φ22	黒	KA6	
m(スリット有)	φ19	黒	KS12	
o	φ22	黒	KAK-LO, AYK, AYK-EL, KXL, WAP	
p	φ22.5	黒	KAC-N(I)	
r	φ19	黒	WA, KF, KFP, KS7, SY, BK, SYR	
s	φ18	黒	BML, KV	
v	—	黒	KPFK-12, KMD-EL45幅, WARP-EL45幅	
v-1	—	黒	KMD-EL42幅以下, WARP-EL42幅以下, KMD-R12	¥2,178
u	—	黒	KMDシリーズ42幅以下, WAR&WARP42幅以下	¥1,694
u45	—	黒	KMDシリーズ45幅, WAR&WARP45幅	¥2,662

駐車用ブレーキ ※座って(右側・左側)をご指定ください。掲載画像は、座って右側です。 < 価格:参考価格 >

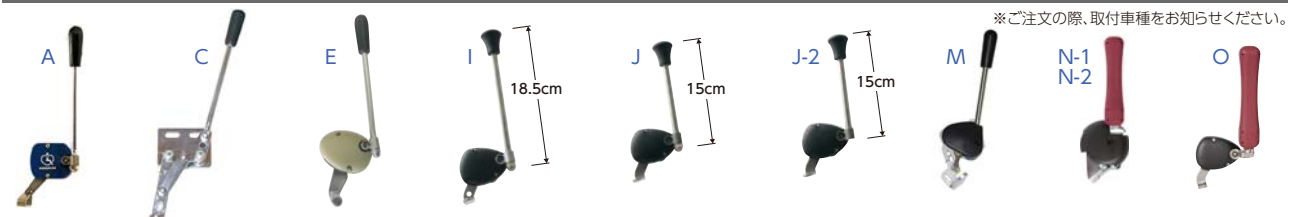

●駐車ブレーキ

部品価格/個 税込

部品価格/個 税込

A	ミニ駐車ブレーキ(前後式)	¥6,545
C	カバーなし	¥4,257
E	エッグストップ	¥6,545
I	ミニエッグ L(ロング)	¥6,545
J	ミニエッグ S(ショート)	¥6,545

J-2	ミニエッグS(ショート軽量)	¥6,545
M	軽量	¥6,314
N-1	伸縮式	¥7,920
N-2	伸縮式	¥7,920
O	伸縮式(小)	¥7,920

〈主な対応車種〉

A	KX, KAC
C	KR801N, RR42/43, RR52/53, KV, SY, BK, SYP
E	KA800, KPF
I	KA6
J	BML, KAK-LO

J2	WA, WAP
M	KF, KFP
N-1	KMD-A※
N-2	KMD-B※, KMD-C※
O	WAR, WARP

※サユレン仕様は除く

〈参考価格〉
について

取付価格：新車ご購入時の取付

※非課税の車いすに取り付ける場合の価格を表示しております。
課税の車いすに取り付ける場合は課税となります。

※部品代と工賃を含みます。

※ご購入時は車種をご指定下さい。取り付けできない、
あるいは特注対応が必要な場合がございます。

部品価格：部品のみご購入価格


※取付工賃は含んでおりません。

車いすの仕様により、別途費用が必要となるもの、
取り付けできないものもあります。

ハンドリム

〈価格・参考価格〉

● 樹脂 (波型・黒)

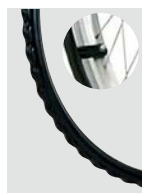

部品価格 ¥4,202/個 (税込)

(in = インチ)

24 in	波 型
22 in	
20 in	
18 in	

● 樹脂 (波型・軽量)



部品価格 ¥4,246/個 (税込)

(in = インチ)

22 in	波 型
20 in	

● ステンレス



部品価格 ¥4,664/個 (税込)

(in = インチ)

24 in	φ19mm
22 in	
20 in	

※ノーパンクタイヤ車輪の場合は、ハンドリムの交換は出来ません。(樹脂 (波型・軽量) を除く)

グリップ (ハンドグリップ)

〈価格・参考価格〉



1

部品価格 (税込)
¥341/個
(ポリ塩化ビニル)



7

部品価格 (税込)
¥429/個
(ポリ塩化ビニル)



8

部品価格 (税込)
¥726/個
(ポリ塩化ビニル)
(手押しハンドル/パイプ径)


1	反射板付	φ22mm
	反射板付	φ19mm
7	ネジ止め式	φ22mm
8	反射板なし	φ22mm

肘当て

〈価格・参考価格〉

A スタンダードパッド


● 一体成形軟質樹脂

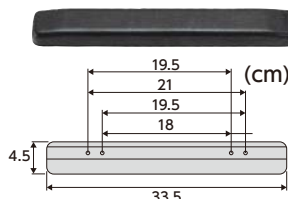

部品価格 ¥1,914/個 (税込)

B エッグパッド (左・右) をご指定ください。


● 一体成形軟質樹脂

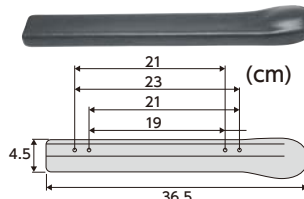

部品価格 ¥2,717/個 (税込)

D ロングパッド (左・右) をご指定ください。


● 一体成形軟質樹脂

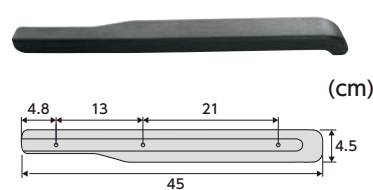

部品価格 ¥2,717/個 (税込)

E ショートパッド


● 一体成形軟質樹脂

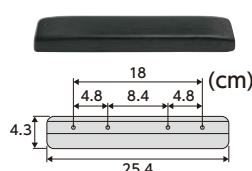

部品価格 ¥1,914/個 (税込)

H イージーパッド (左・右) をご指定ください。


● 一体成形軟質樹脂

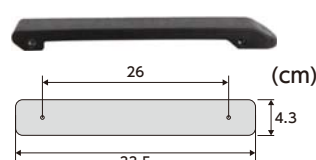

部品価格 ¥3,025/個 (税込)

I 軽量パッド


● 一体成形軟質樹脂

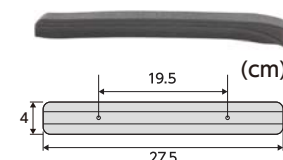

部品価格 ¥1,815/個 (税込)

K 幅広パッド


● 一体成形軟質樹脂

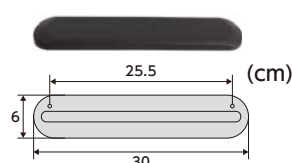

部品価格 ¥3,025/個 (税込)

M イージーパッド


● 一体成形軟質樹脂

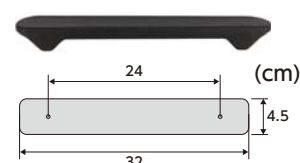

部品価格 ¥3,025/個 (税込)

N イージーパッド

● 一体成形軟質樹脂

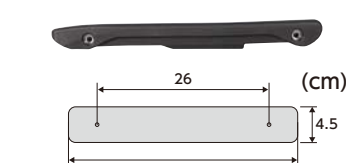

部品価格 ¥3,025/個 (税込)

〈主な対応車種〉

A KA800、KX、KR801N、AYK、KV

B KAK-LO、KPF

D KXL、KMD-R12

E KAC

H WA、WAP

I KF、KFP※

K KPFK-12

※車種ご指定ください。

M KMD、SY、BK、SYP

N WAR、WARP

● 木製肘当て

紫チェック



肘当り面スポンジ入り。

部品価格:お問い合わせください

※木製肘当ては幅や高さ、長さ、張り生地をご要望に合わせておつくりします。(各寸法をご指定ください)

標準

モジュール

Modern
シリーズ

次世代型
標準

軽量
六輪

リクライ
ニング

子供用
簡易

シャワー用

オーダー
システム

電動

歩行訓練
歩行補助具

オプション &
関連パーツ

車いす部品

※オプションは単品購入の場合は **税込** となります。
 ※**非課税**の車いすに装着して購入した場合は **非課税** となります。

車 輪

〈価格:参考価格〉

クッション性比較

最良



●エアタイヤ付車輪

タイヤ&チューブで構成。空気補充が必要です。
 ※クッション性は最良です。



●ソフトタイヤ付車輪

タイヤ&ポリウレタン製バンクスチューブで構成。
 ひび割れや変色が起こりにくく、耐久性、静止性に優
 れています。
 ※クッション性が高く屋外でも使用できます。

NO
パンク



●ハイポリマータイヤ付車輪

空気を含んだポリウレタンを充てん一体成型。
 ※クッション性が高く屋外でも使用できます。

NO
パンク



●ソリッドタイヤ付車輪

ゴム製一体成型。
 ※転がり抵抗が小さく、室内の平らな床に
 適しています。

NO
パンク

良好

ハブの種類について



ノーマル

車いす本体の仕様が介助用ブレーキ
 なしの場合、または駐車ブレーキ連動
 式の場合。



バンドブレーキ ドラムブレーキ

車いす本体にバンド式介助用ブレーキ
 もしくはドラム式介助用ブレーキが付
 いている場合。

●エアタイヤ付車輪、ソフトタイヤ付車輪 (車輪外径・タイヤ幅:mm)

種類	インチ	ISO表示	車輪 外径	タイヤ 幅	ハブ	取付価格/台 非課税	部品価格/個 税込
エアタイヤ	24×1 3/8	37-540	612	34	ノーマル	—	¥8,657
					バンドブレーキ		¥11,055
ソフトタイヤ	24×1 3/8	37-540	612	34	ノーマル	¥9,200 増	¥10,252
					バンドブレーキ		¥12,650
エアタイヤ	22×1	25-501	552	23	バンドブレーキ	—	¥18,051
					バンドブレーキ		¥21,758
エアタイヤ	22×1 3/8	37-501	575	34	ノーマル	¥9,200 増	¥8,657
					バンドブレーキ		¥12,650
ソフトタイヤ	22×1 3/8	37-501	575	34	ノーマル	¥9,200 増	¥10,252
					バンドブレーキ		¥12,650
エアタイヤ	20×1 3/8	37-451	523	35	ノーマル	—	¥10,252
					バンドブレーキ		¥12,650
ソフトタイヤ	20×1 3/8	37-451	523	35	バンドブレーキ	¥9,200 増	¥12,650
					バンドブレーキ		¥12,650
エアタイヤ	16×1.50	40-305	390	38	ノーマル	×	¥7,359
					バンドブレーキ		¥10,252
ソフトタイヤ	16×1.50	40-305	390	38	バンドブレーキ	×	¥12,650
					バンドブレーキ		¥12,650
エアタイヤ	12 1/2×2 1/4	57-203	310	47	ノーマル	×	¥10,120
					バンドブレーキ		¥11,363

※上表内で同サイズであっても専用車輪の場合がございます。ご注文の際は車種名をご指定ください。
 ※1) ハンドリム(波型・黒)・(波型・軽量)の2種類よりご指定ください。ハンドリムについてはP.118をご参照ください。

●ハイポリマータイヤ付車輪 (車輪外径・タイヤ幅:mm)

インチ	車輪 外径	タイヤ 幅	ハブ	ハンドリム 有○/無×	取付価格/台 非課税	部品価格/個 税込
22×1	557	26	バンドブレーキ (WAR・WARP用)	波型・軽量	¥9,200増	¥12,650
22×1 3/8	550	27	ノーマル(KV用)※	波型・黒		¥10,252
	565	31	ノーマル(SY用)	波型・軽量		¥10,252
	550	27	バンドブレーキ (KV用)※	波型・黒		¥12,650
	565	31	バンドブレーキ (SY・BK用)	波型・軽量		¥12,650
20×1 3/8	505	32	バンドブレーキ (KAK・LO用)	波型・黒	¥9,200増	¥12,650
18×1 3/8	460	30	バンドブレーキ (KAK・LO用)	波型・黒		
16×1.75	373	35	バンドブレーキ (KV用)	×		
16×1.50	375	35	バンドブレーキ (KAK・LO用)	×		
	386	35	バンドブレーキ (WAR・WARP用)	×		
	386	35	バンドブレーキ (SY・BK用)	×		
12 1/2×2 1/4	271	35	バンドブレーキ (KFF・12・KND・R12用)	×	—	—

※右用・左用をご指定ください。

●ソリッドタイヤ付車輪 (車輪外径・タイヤ幅:mm)

インチ	車輪 外径	タイヤ 幅	ハブ	ハンドリム 有○/無×	取付価格/台 非課税	部品価格/個 税込
24×1	600	32	ノーマル	波型・黒	¥3,240 増	¥7,843

●エア車輪用

(車輪外径・タイヤ幅:mm)

〈タイヤ〉のみ



インチ	ISO表示	車輪外径	タイヤ幅	部品価格/個 税込
24×1 3/8	37-540	612	34	¥3,388
22×1 3/8	37-501	575	34	
20×1 3/8	37-451	523	35	
16×1.50	40-305	390	38	
16×1.50(軽量)	40-305	390	38	¥4,598
12 1/2×2 1/4	57-203	310	47	
22×1	25-501	552	23	

〈チューブ〉のみ (フラップ付)



インチ	部品価格/個 税込
24×1 3/8	¥1,815
22×1 3/8	
20×1 3/8	
16×1.50 & 1.75	
12 1/2×2 1/4	
22×1	¥2,057

フラップ・バルブセット付属

〈参考価格〉
について

取付価格：新車ご購入時の取付

※非課税の車いすに取り付ける場合の価格を表示しております。
課税の車いすに取り付ける場合は課税となります。

※部品代と工賃を含みます。

※ご購入時は車種をご指定下さい。取り付けできない、
あるいは特注対応が必要な場合がございます。

部品価格：部品のみご購入価格

※取付工賃は含んでおりません。

車いすの仕様により、別途費用が必要となるもの、
取り付けできないものもあります。

標準
モジュール

Modern
シリーズ

次世代型
標準

軽量
六輪

リクライ
ニング

子供用
簡易

シャワー用

オーダー
システム

電動

歩行訓練
歩行補助具

オプション &
関連パーツ

キャスト ※ご購入時は車種をご指定ください。

〈価格/参考価格〉

○パッキン式

(in=インチ)

●樹脂ヨーク付



ニューソフトキャスト

4in・5in・6in・7in

部品価格 ¥7,425/個 税込



ソフトキャスト

6in・7in

部品価格 ¥9,922/個 税込

○ベアリング式

(in=インチ)

●アルミ製ヨーク付 (KA800用)



ニューソフトキャスト

6in
7in

部品価格 ¥7,425/個 税込

(SY・BK用)

(KF・KFP用)



ニューソフト黒キャスト

6in

部品価格 ¥10,307/個 税込

○ナット固定式

(in=インチ)

●樹脂ヨーク付 (取付車種をご指定ください) (画像はKV用です。)



ニューソフト黒キャスト

6in
7in

部品価格 ¥9,086/個 税込

●樹脂ヨーク付(3穴) (KMD、WAR、WARP用)



ニューソフト黒キャスト

6in

部品価格 ¥10,307/個 税込

※車種によって仕様が異なります。※ヨーク用ベアリング、ナット、カラーは含まれません。

※車種によって仕様が異なります。※ヨーク用ナットは含まれません。

○サスペンション内蔵キャスト〈アブソレックスキャスト〉

(in=インチ)

●樹脂ヨークタイプ



〈パッキン式〉

5in
6in
7in

部品価格 ¥13,200/個 税込

部品価格 ¥14,300/個 税込

●アルミ製ヨークタイプ



〈ベアリング式〉

6in
7in

部品価格 ¥13,200/個 税込

部品価格 ¥14,300/個 税込

●アブソレックスキャスト車輪のみ

○車軸にサスペンションを内蔵したキャスト車輪です。
路面からの衝撃、振動を吸収します。



5in・6in

取付価格 ¥15,400増/台 非課税
部品価格 ¥9,900/個 税込

7in

取付価格 ¥16,500増/台 非課税
部品価格 ¥11,000/個 税込

Corporate Social Responsibility

我々は、一層の品質向上に努め、
人と環境にやさしい福祉用具の開発に取り組んでまいります。
また、地球環境を守る活動にも積極的に取り組んでまいります。

環境にやさしい車いす



環境汚染防止



環境有害物質の除去



耐久性の向上



廃棄物の削減

※環境保護対応のため、製品の仕様を変更する場合があります。予めご了承ください。

SGマーク認定工場



SGマークは、Safety Goods (安全な商品) の略号で、一般財団法人製品安全協会が認定基準を定め、この基準に適合していると認められた製品にのみ表示されるマークです。なお、SGマークの貼付された製品は、万が一の製品の欠陥に備えて人身事故に対する対人賠償責任保険が付いています。カフムラサイクルは、1999年7月にSGマークの工場認定を取得いたしました。

JIS (日本産業規格) 認定



高齢化社会の進展に伴う福祉用具の需要の増加により、国民生活の安全・安心の確保等の観点から、第三者認証制度がスタートいたしました。

カフムラサイクルは、2010年3月、JISマーク表示制度の認証機関である一般財団法人電気安全環境研究所 (JET) から、手動車いすの製品規格、製品試験、製造工場における品質管理実施状況等の審査を経て、福祉用具JIS認証を取得いたしました。


取付車種：KR801Nソフト

品質マネジメントシステム 環境マネジメントシステム

ISO9001&ISO14001統合認証取得

00898-2004-AQ-KOB-JAB / 00898-2004-AE-KOB-JAB

・本社
・神戸工場・神戸第二工場・いなみの工場
・本店サービスセンター

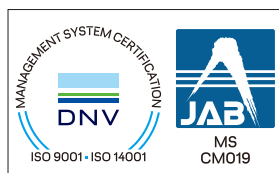

【品質・環境方針】

- 汚染の予防に努め、マネジメントプログラムの継続的改善を図る。
- 法規制、当社が同意するその他の要求事項を遵守する。
- 当社と係わるすべての利害関係者との良好な関係を築く。
- 安全で快適な福祉用具の普及により社会的使命を果たす。

カフムラサイクルは、2003年12月、ISO9001ならびにISO14001を同時に認証取得いたしました。

カワムラサイクル



<https://www.kawamura-cycle.co.jp>

新商品のご案内から、商品カタログや動画・取扱説明書などの各種情報を発信しています。是非アクセスしてみてください。



会社概要

- 社 名 株式会社 カワムラサイクル
- 代 表 者 代表取締役社長 真鍋 克則
- 設 立 平成7年8月31日
- 事 業 内 容
 1. 車いす、医療用機器及び同付属品の製造・販売
 2. 介護用品及び介護機器の製造・販売
 3. 健康器具の製造・販売
- 本 社 所 在 地 〒651-2411 兵庫県神戸市西区上新地3丁目9番1
TEL.078(969)2800(代) FAX.078(969)2811(代)

本 社/本店サービスセンター



Head Office/Kobe Service Center

神戸工場



Kobe Factory

神戸第二工場



Kobe Second Factory

いなみの工場



Inamino Factory



ホームページ <https://www.kawamura-cycle.co.jp>

サービスセンター

- | | | | |
|---------------|-------------------------------|------------------|------------------|
| ● 東京サービスセンター | 〒110-0013 東京都台東区入谷1丁目8番3 | TEL.03(3874)3511 | FAX.03(3874)3514 |
| ● 名古屋サービスセンター | 〒487-0027 愛知県春日井市松本町1丁目3番11 | TEL.0568(52)4800 | FAX.0568(52)4802 |
| ● 本店サービスセンター | 〒651-2411 兵庫県神戸市西区上新地3丁目9番1 | TEL.078(969)2800 | FAX.078(969)2822 |
| ● 福岡サービスセンター | 〒819-0055 福岡県福岡市西区生の松原1丁目18番3 | TEL.092(882)4722 | FAX.092(882)4723 |

工 場

- 神 戸 工 場 〒651-2411 兵庫県神戸市西区上新地3丁目9番1
- 神 戸 第 二 工 場 〒651-2411 兵庫県神戸市西区上新地3丁目7番3
- い な み の 工 場 〒675-1116 兵庫県加古郡稲美町蛸草1番13

- 仕様および価格は、製品開発・改良のため予告なく変更されることがあります。ご了承ください。
- 商品写真は印刷物のため、実際の色と多少異なる場合があります。ご了承ください。
- 当社商品はPL保険に加入しております。



見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

ユニバーサルデザインフォントとは、UD(年齢や障害の有無に関係なく
多くの人が利用できるように考えられたデザイン)の考えに基づき、
[可読性][視認性][判別性]に優れ、
年齢・性別に関係なく、誰もが読みやすく、見やすいデザインが
施された書体のことです。

お問い合わせは下記までお気軽にどうぞ。

車いすの専門メーカー

株式会社 カワムラサイクル URL <https://www.kawamura-cycle.co.jp>

- 本社 〒651-2411 兵庫県神戸市西区上新地3丁目9番1
TEL.078(969)2800 FAX.078(969)2811
- 東京サービスセンター 〒110-0013 東京都台東区入谷1丁目8番3
TEL.03(3874)3511 FAX.03(3874)3514
- 名古屋サービスセンター 〒487-0027 愛知県春日井市松本町1丁目3番11
TEL.0568(52)4800 FAX.0568(52)4802
- 本店サービスセンター 〒651-2411 兵庫県神戸市西区上新地3丁目9番1
TEL.078(969)2800 FAX.078(969)2822
- 福岡サービスセンター 〒819-0055 福岡県福岡市西区生の松原1丁目18番3
TEL.092(882)4722 FAX.092(882)4723

〈代理店〉

「参考価格」は弊社が参考のために表示する価格です。販売価格は販売業者様が自主的に決定されるものです。
掲載の価格は、2025年4月時点のものになります。



税込価格**550円** (Vol.22-2 2025年版) 2025.04