

持ち上げやすい軽量タイプです。
軽さだけではなく、デザインや機能面もこだわりました。


軽 量

“Light Weight” Wheelchair

NEW ふわりすg	009
ふわりす	011
ふわりす+	013
BML	015



軽量 シリーズチャート

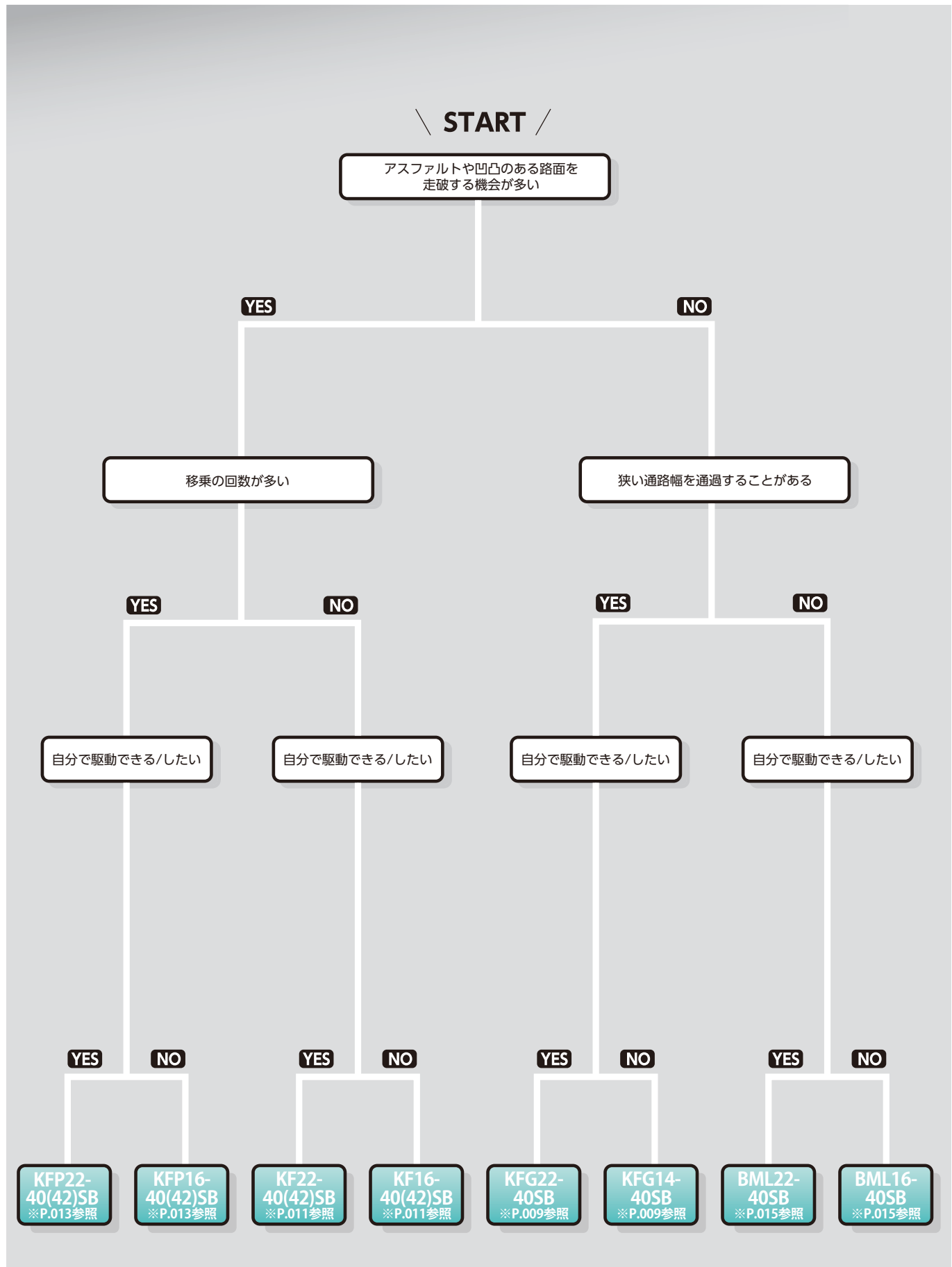

軽量

Modern
シリーズ

WAVIT
シリーズ

標準

モジュール

六輪

リクライ
ニング

子供用

簡易

シャワー用

オーダー
システム

電動

歩行車

歩行
補助具

オプション&
関連パーツ

軽さとスリムさを追求したモデル



動画をチェック

補装具
レディ
メイド式

ふわりす^{グラム}gシリーズ

自走用




KFG22-40SB
シート:No.116

参考価格 **¥140,000** 非課税

NEW KFG22-40SB **中床** (9.8kg)

TAIS:00160-000349

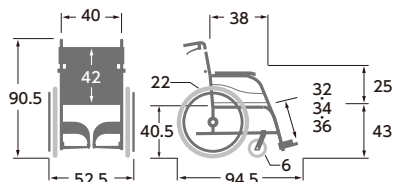

[折りたたみ:全幅25.5×全高68×全長88]
*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。
*単位はcmです。車輪・キャストのみinch。

介助用




KFG14-40SB
シート:No.116

参考価格 **¥140,000** 非課税

NEW KFG14-40SB **中床** (8.8kg)

TAIS:00160-000350

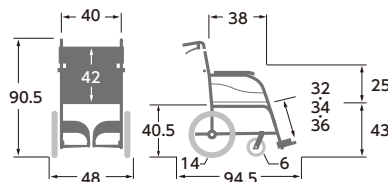

[折りたたみ:全幅21.5×全高68×全長80]
*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。
*単位はcmです。車輪・キャストのみinch。



シートNo.116
ビリジアン
(ネオプレン)



背・座シート



背折れ式 ドラム式 ハイポリマー
(ノーパンク)

ふわりすg 手動車いす 100kg 使用者最大体重(積載物含む)

軽量

ふわりすグラムの特長

軽量×スリム 取り回しや収納もスムーズ



自走用 52.5cm

介助用 48cm

軽量×ノーパンクタイヤ仕様 空気補充が不要



自走用 9.8kg

介助用 8.8kg

ハンドリム形状 自然なフィット感のあるハンドリム



ハンドリムの内径と外径それぞれに凹凸をつけ、手にしっかりとフィット。滑りにくく握りやすい設計です。(自走のみ)

手洗いでできる 取り外し可能なカバーシート



日常のお手入れも手軽に行えます。乾きやすい素材を採用しているためいつでも快適にお使いいただけます。

Modern
シリーズ

WAVIT
シリーズ

標準

モジュール

六輪

リクライ
ニング

子供用

簡易

シャワー用

オーダー
システム

電動

歩行車

歩行
補助具

オプション&
関連パーツ

軽くて持ち運びがしやすい軽量モデル



動画をチェック

補装具
レディ
メイド式

ふわりすシリーズ

自走用




KF22-40SB
シート:No.97

参考価格 **¥126,000** 非課税

KF22-40(42)SB

中床 (9.6kg)

TAIS:00160-000241

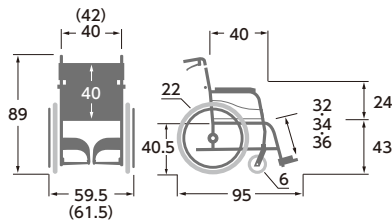

[折りたたみ:全幅33×全高66×全長93]
*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。
*単位はcmです。車輪・キャスタのみinch。

介助用




KF16-40SB
シート:No.96

参考価格 **¥126,000** 非課税

KF16-40(42)SB

中床 (8.9kg)

TAIS:00160-000240

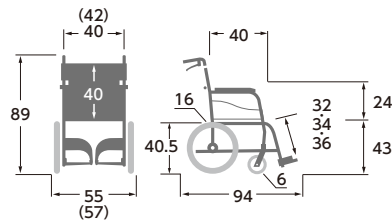

[折りたたみ:全幅28×全高66×全長84]
*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。
*単位はcmです。車輪・キャスタのみinch。

ご注文の際ご指定ください。



●シート幅 **40・42cm** よりお選びいただけます。
*シート幅は、座った状態でのお尻の幅にプラス3~5cm、
介助者の手が入る程度が目安です。



●シート幅 **40** cmはシートカラー
4色 よりお選びいただけます。



●シート幅 **42** cmは、No.96さんごピンク、
No.97すみれパープルの
2色 のみとなります。

No.96



さんごピンク
(ポリエステル)

No.97



すみれパープル
(ポリエステル)

No.105



アイスグリーン
(ポリエステル)

No.106



あんずイエロー
(ポリエステル)

おすすめ
オプション

空気補充が不要の
ノーパンク車輪



ソフトタイヤ付車輪

取付価格 <22インチ>
¥19,780増/台 非課税
TAIS: 00160-000298

取付価格 <16インチ>
¥9,200増/台 非課税



国内特許取得済
手動車いす 100kg
使用者最大体重(積載物含む)

軽量

Modern
シリーズ

WAVIT
シリーズ

標準

モジュール

六輪

リクライ
ニング

子供用

簡易

シャワー用

オーダー
システム

電動

歩行車

歩行
補助具

オプション&
関連パーツ

ふわりすの特長

車に積み込みしやすい

軽いので持ち運びやすく、取り回しもラクラク。



従来の強度は保ちつつ、製造精度と各部パーツの見直しにより、自走用(介助兼用)で総重量10kg未満を達成。



専用アルミヨーク等

自走用(介助兼用) **9.6kg** 介助用 **8.9kg**

標準車感覚の軽量車いす

車いすに必要な機能は省かずに軽量化しています。

① こぎやすい バックサポート角

バックサポートを8度後傾させることにより、シートが背中に沿いやすくなります。駆動の際も腕に干渉しにくくなっています。



④ フットサポート・ シート間距離調節

(2cmピッチ)
3段階で調節できます。



② 長めのアームサポート

プッシュアップしやすい位置までアームサポートの長さを確保しています。



③ ヒールループ標準装備

かかとのずれ落ちを防ぎます。フットプレート跳ね上げ時、立ち座りしやすいよう足が引ける状態になります。



車載が多い方にもおすすめの軽量多機能モデル



動画をチェック

補装具
レディ
メイド式

プラス
ふわりす+シリーズ

自走用




KFP22-40SB
シート:No.97

参考価格 **¥145,000** 非課税

KFP22-40 (42) SB 中床 (10.9kg)

TAIS:00160-000249

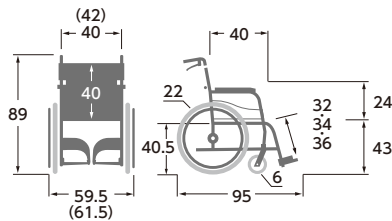

[折りたたみ:全幅33×全高66×全長71.5]
*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。
*単位はcmです。車輪・キャストのみinch。

介助用




KFP16-40SB
シート:No.96

参考価格 **¥145,000** 非課税

KFP16-40 (42) SB 中床 (9.9kg)

TAIS:00160-000248

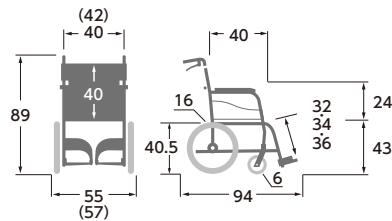

[折りたたみ:全幅28×全高66×全長62.5]
*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。
*単位はcmです。車輪・キャストのみinch。

ご注文の際ご指定ください。



●シート幅 **40・42cm** よりお選びいただけます。

※シート幅は、座った状態でのお尻の幅にプラス3~5cm、
介助者の手が入る程度が目安です。



●シートカラー **2色** より
お選びいただけます。

No.96



さんごピンク
(ポリエステル)

No.97



すみれパープル
(ポリエステル)

おすすめ
オプション


空気補充が不要の
ノーパンク車輪



ソフトタイヤ付車輪

取付価格 <22インチ>
¥19,780増/台 非課税
TAIS: 00160-000298

取付価格 <16インチ>
¥9,200増/台 非課税

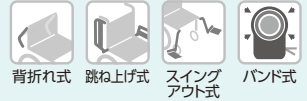

手動車いす 100kg
使用者最大体重(積載物含む)

軽量

Modern
シリーズ

WAVIT
シリーズ

標準

モジュール

六輪

リクライ
ニング

子供用

簡易

シャワー用

オーダー
システム

電動

歩行車

歩行
補助具

オプション&
関連パーツ

ふわりす+の特長

跳ね上げしやすい操作レバー

ご利用者も介助者も使いやすい。



操作部を認識しやすい様、レバーをカラーリングしました。また、跳ね上げレバーは、指をかけやすいようにサイドガードの形状にも工夫しました。



標準車感覚の軽量車いす

車いすに必要な機能は省かずに軽量化しています。

① 跳ね上げ式 アームサポート

後方に跳ね上げ、アームサポートをオープンにできます。ベッドサイドなどからの移乗がスムーズに行えます。



⑤ ヒールループ標準装備

かかとのずれ落ちを防ぎます。フットプレート跳ね上げ時、立ち座りしやすいよう足が引ける状態になります。



② こぎやすい バックサポート角

バックサポートを8度後傾させることにより、シートが背中に沿いやすくなります。駆動の際も腕に干渉しにくくなっています。



⑥ フットサポート・ シート間距離調節 (2cmピッチ) 3段階で調節できます。



③ 長めのアームサポート プッシュアップしやすい 位置までアームサポート の長さを確保しています。



④ スイングアウト式 フット・レッグサポート

脚部を開くことができます。着脱できるので移乗などに便利です。



オシャレで軽量、コンパクトシリーズ

アイコンの解説は、P.005 をご覧ください。



補装具
レディ
メイド式

BMLシリーズ

手動車いす 100kg
使用者最大体重(積載物含む)

自走用




BML22-40SB
シート:No.93

参考価格 **¥90,000** 非課税

BML22-40SB

中床 (11.7kg)

TAIS:00160-000174

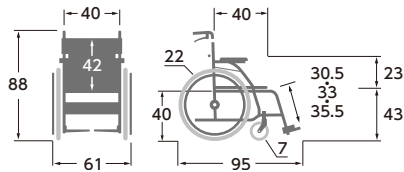

[折りたたみ:全幅33×全高67.5×全長93.5]
*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。
*単位はcmです。車輪・キャスタのみinch。

介助用




BML16-40SB
シート:No.92

参考価格 **¥90,000** 非課税

BML16-40SB

中床 (10.3kg)


TAIS:00160-000176

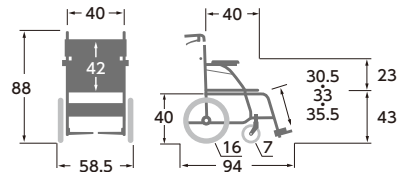


[折りたたみ:全幅30×全高67.5×全長85]
*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。
*単位はcmです。車輪・キャスタのみinch。

ご注文の際
ご指定ください。

2 color ●シートカラー **2色** より
お選びいただけます。

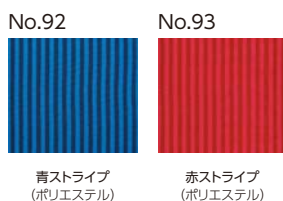

ソフトタイヤ付車輪

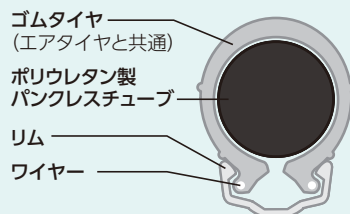

- ひび割れや変色が起こりにくく、耐久性、静止力に優れています。
- 空気補充不要。
- 空気の入れすぎや高温等による破裂がありません。

フットサポート・シート間距離調節



(2.5cmピッチ) 3段階で調節できます。

ピックアップオプション

酸素ボンベ架台〈2WAY用〉 (転倒防止金具を 取り付けた酸素ボンベ架台)



装着例

※酸素ボンベは商品には含まれません。

“2サイズ”の酸素ボンベに “1個”で対応できます。

標準品

TAIS:00160-000306

参考価格	新車ご購入時の 取付価格※1	中床用 低床用	¥23,100 増/個
	部品のみ ご購入価格	中床用 低床用	¥24,200/個

- ・中床用(ティッピング高さ約13~19cm)
- ・低床用(ティッピング高さ約7~12cm)


その他専用品

KA800シリーズ、RR52/RR53シリーズ、
KPFシリーズ、WARシリーズ※2、WARPシリーズ※2、SYP

参考価格	新車ご購入時の 取付価格※1	中床用 低床用	¥28,600 増/個
	部品のみ ご購入価格	中床用 低床用	¥30,250/個


- ※1 新車ご購入時の取付価格には部品の代金を含んでおります。
 - ※2 左側仕様となります。一部取り付けできない仕様があります。
- 重量：2.9kg

工具レスの簡単切り替え

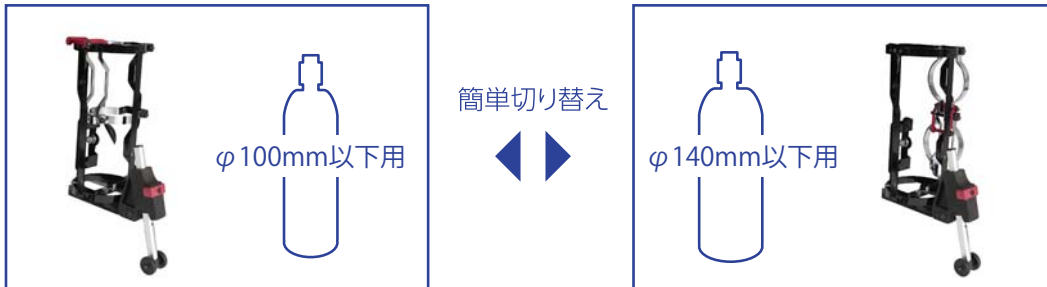


転倒防止金具付きだから安心

段差乗り越え時

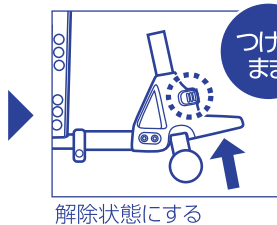


段差を
乗り越える

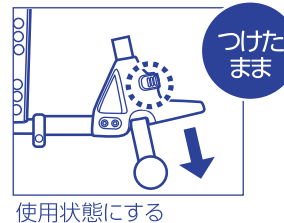

ご利用のシーン
に合わせて
使用状態と解除状態を
切り替えることができます。

座面高さ変更時

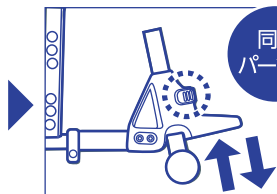

高さを調節する。※調節範囲に限る。