

体型や環境に合わせた車いすが見つかる  
バリエーション豊富なモダンシリーズ。

# Modern シリーズ

“Modern series”

<b>NEW</b> Rich-style .....	023
A-style .....	025
B-style .....	027
C-style .....	029
サユレン .....	031
寸法表 .....	033



# Modern シリーズチャート

START

座った姿勢を保つことができる

それなりの時間なら…

少し疲れるかも…

座位保持が難しい

主にどこで使いますか？

自力で移乗できる

屋内

屋外

YES

NO

**KMD-R12**  
背折れタイプ

自分で移動できる／したい

別売りクッションとの併用を考えている

YES

NO

**KMD-A22**  
背固定タイプ

**KMD-A22**  
背折れタイプ

**KMD-A16**  
背折れタイプ

YES

NO

小柄な方である

小柄な方である

YES

NO

YES

NO

自分で移動できる／したい

自分で移動できる／したい

自分で移動できる／したい

自分で移動できる／したい

YES

NO

YES

NO

**KMD-C20**  
低床タイプ

**KMD-C16**  
低床タイプ

**KMD-B20**  
低床タイプ

**KMD-B16**  
低床タイプ

YES

NO

YES

NO

**KMD-C22**  
中・高床タイプ

**KMD-C16**  
中床タイプ

**KMD-B22**  
中床タイプ

**KMD-B16**  
中床タイプ

## Modernシリーズ別 機能一覧

標準  
モジュール

Modern  
シリーズ

次世代型  
標準

軽量  
六輪

リクライ  
ニング

子供用  
簡易

シャワー用

オーダー  
システム

電動

歩行訓練  
歩行補助具

オプション&  
関連パーツ

	A-style 標準タイプ	B-style 多機能タイプ	C-style 多機能プラス タイプ	Rich-style テイルト& リクライニングタイプ
1. 伸縮式 駐车用ブレーキ	●	●	●	—
2. パチート 調節機能	●	●	●	●
3. 座クッション	●	●	●	●
4. 大きな 背ポケット	●	●	●	—
5. 適合調整 シート	—	●	●	●
6. 跳ね上げ式 アームサポート	—	●	●	—
7. 高さ調節式 アームサポート	—	—	●	●
8. スインゲイン・アウト式 フット・レッグサポート	—	●	●	—
9. エレベータリング式 フット・レッグサポート	—	●	●	●
10. 足踏みブレーキ	サユレン仕様あり	サユレン仕様あり	サユレン仕様あり	クリックブレーキ

<p><b>1.伸縮式駐车用ブレーキ</b></p> <p>駐车用ブレーキレバーを引っ張ると、長さが10cm延長され、軽い力で操作できます。</p>	<p><b>2.パチート 調節機能</b></p> <p>工具レスで簡単にフットプレート高さを変更できます。</p> <p>パチパチと音が鳴りしっかり止まる!</p>	<p><b>3.座クッション</b></p> <p>3cm厚のクッションが標準装備です。(Rich-styleは7cm厚)</p>	<p><b>4.大きな背ポケット</b></p> <p>背ポケットはA4のクリアファイルがすっぽり収まる大きさです。</p>	<p><b>5.適合調整シート</b></p> <p>背中形状に合わせて、横方向の張り調整ができます。背部への圧迫の軽減を図ります。</p>
<p><b>6.跳ね上げ式アームサポート</b></p> <p>後方に跳ね上げ、肘掛け部分をオープンにできます。ベッドサイドなどからの移乗がスムーズに行えます。</p>	<p><b>7.高さ調節式アームサポート</b></p> <p>肘掛けの段階的な調節ができます。</p>	<p><b>8.スインゲイン・アウト式フット・レッグサポート</b></p> <p>脚部の開・閉ができます。</p>	<p><b>9.エレベータリング式フット・レッグサポート</b></p> <p>脚部角度が調節できます。</p>	<p><b>10.足踏みブレーキ</b></p> <p>介助者が足で操作するブレーキ。</p> <p>※画像はクリックブレーキ</p>

リクライニング時の背ずれを抑制した新ティルト&リクライニング車いす



動画をチェック

補装具  
レディ  
メイド式

# Modern Rich-style

介助用 **12** 車輪 **6** キャスタ  
インチ×インチ



KMD-R12  
シート:No.82

リクライニング操作で発生する”背ずれ”を抑制




参考価格 **¥300,000** 非課税

**NEW** KMD-R12

**高床** (28kg)

TAIS:00160-000347

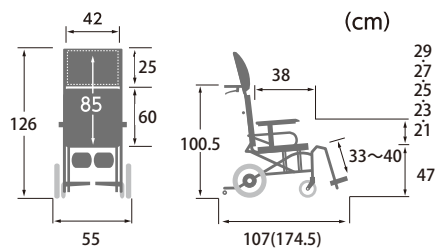

( )内、最長時寸法

\*手押しハンドル高さ、全長、全高、フットサポート・シート間距離は、バックサポートを最も起こした時の寸法です。

\*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

**1**  
color



No.82  
チャコールグレー  
(ポリエステル)




認識しやすい  
カラーレバー

操作部が認識しやすい様に、  
レバーをカラーリングしました。

パチート調節機能



折りたたみ可能

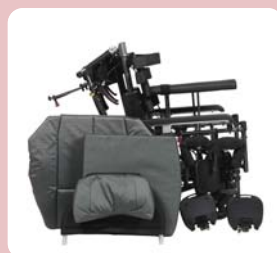



Modern  
series  
モダンシリーズ

手動車いす 100kg  
使用者最大体重(積載物含む)

標準  
モジュール

Modern  
シリーズ

次世代型  
標準

軽量  
六輪

リクライ  
ニング

子供用  
簡易

シャワー用

オーダー  
システム

電動

歩行訓練  
歩行補助具


オプション&  
関連パーツ

## KMD-R12の特長

### 新ティルト&リクライニング機構

## スラリク機構

バックサポートを“倒す・起こす”の動作を繰り返しても背中がズレにくく、安定した座位が保てます。

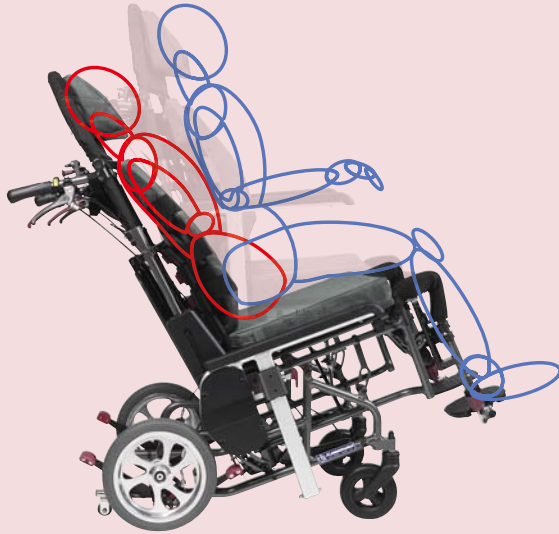

## リクライニング時も身体が安定

リクライニング動作に伴い、ランバー角度も可変 国内特許申請中



## 足ズレ抑制のエレベーター式 フット・レッグサポート



自然な脚の軌道を描く新しいエレベーター機構。しっかりと適切な状態で脚を支えることで、長時間座っていても疲れにくくなります。

## クリックブレーキ “踏んで”ブレーキ、“踏んで”解除。リクライニング状態や前方からの操作もラクラク。



## リムビーズ 背クッション裏のベルトに挟み込むだけの簡単装着。

国内特許申請中



ポケット状のベルトに装着するだけで中材のストロービーズが優しくホールド。装着する位置や方法で背クッションが立体的な形状に変化します。座ってる状態でも微調整が可能。また、通気性も良く、手洗い可能。



使いやすい標準タイプ。外出が多い方におすすめです。

補装具  
レディ  
メイド式

# Modern A-style

自走用

22 車輪 × 6 キャスタ  
インチ × インチ




KMD-A22-40S-M(H/SH)  
シート:No.82

参考価格 **¥108,000** 非課税

**KMD-A22-40(42)S-M(H/SH)** **中・高床** (13.5kg)

TAIS:00160-000286

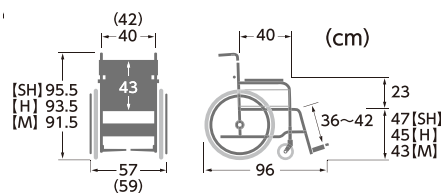

\*各寸法にはシート・クッション等の厚みは含まれておりません。

自走用  
(介助兼用)

22 車輪 × 6 キャスタ  
インチ × インチ




KMD-A22-40-M  
シート:A10

参考価格 **¥108,000** 非課税

**KMD-A22-40(42)-M(H/SH)** **中・高床** (13.8kg)

TAIS:00160-000286

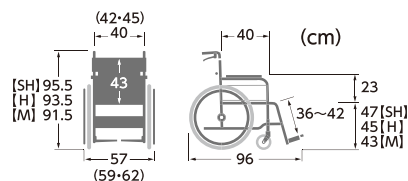

\*各寸法にはシート・クッション等の厚みは含まれておりません。



トリプルセット

参考価格 **¥132,000** 非課税

**KMD-A22-40(42)S-M(H/SH)-TS**



トリプルセット

参考価格 **¥132,000** 非課税

**KMD-A22-40(42・45)-M(H/SH)-TS**



トリプルセット (-TS)

ご依頼の多いオプションを予め取り付けたトリプルセットもご用意しています。

※ガードル棒はセット内容に含まれません。  
 ※酸素ボンベはセット内容に含まれません。  
 ※右側・左側をご指定ください。(指定がなければガードル止め金具は左側、酸素ボンベ架台は右側へ取り付けとなります。)

ガードル止め金具  
(後ろ止め用)



酸素ボンベ架台  
(2WAY用)



+

(φ100mm以下用/  
φ140mm以下用)



背座クッション (脱着式) 伸縮式 駐車用ブレーキ パチート 調節機構 座面高さ 調節

Modern series  
モダンシリーズ



国内特許取得済



手動車いす 100kg  
使用者最大体重 (積載物含む)

標準  
モジュール

介助用

16インチ×6インチ  
車輪 カスタム



背折れ式 車輪サイズ 組替可 ドラム式



KMD-A16-40-M  
シート:No.68


参考価格 **¥108,000** 非課税

**KMD-A16-40(42)-M(H/SH)** 中・高床 (13.0kg)

TAIS:00160-000287

**KMD-A16-45-M(H/SH)** 中・高床 (13.0kg)

TAIS:00160-000304

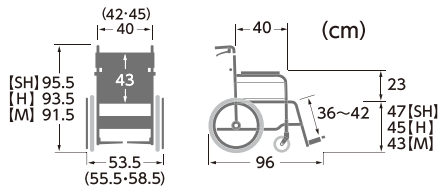

\*各寸法にはシート・クッション等の厚みは含まれておりません。



トリプルセット

参考価格 **¥132,000** 非課税

**KMD-A16-40(42・45)-M(H/SH)-TS**

※トリプルセットの内容については、P.025をご覧ください。

ご注文の際ご指定ください。



●シート幅 **40・42・45cm** よりお選びいただけます。

※KMD-Aの背固定タイプは、シート幅40・42cmよりお選びください。

※シート幅は、座った状態でのお尻の幅にプラス3~5cm、介助者の手が入る程度が目安です。

●座面高さ **43(M)・45(H)・47(SH)cm**

よりお選びいただけます。

9 color

●シートカラー **9色** よりお選びいただけます。

※シート幅45cm仕様は (No.19黒) のみとなります。

No.82

チャコールグレー  
(ポリエステル)

No.83

ライトブルー  
(ポリエステル)

No.85

若葉色  
(ポリエステル)

A9

緑チェック  
(ポリエステル)

A10

赤チェック  
(ポリエステル)

A11

紫チェック  
(ポリエステル)

No.88

エコブラック  
(ビニールレザー)

No.68

黒メッシュ  
(ポリエステル)

No.19

黒  
(ポリエステル)

おすすめ  
オプション

空気補充が不要のノーパンク車輪



ソフトタイヤ付車輪

取付価格 **¥9,200増/台** 非課税

Modern  
シリーズ

次世代型  
標準

軽量  
六輪

リクライ  
ニング

子供用  
簡易

シャワー用

オーダー  
システム

電動

歩行訓練  
歩行補助具

オプション&  
関連パーツ

脚部と肘部が可動し、乗り降りのスペースが確保しやすい多機能タイプ。

補装具  
レディ  
メイド式

# Modern B-style

自走用  
(介助兼用)

22 車輪 6 キャスタ  
インチ×インチ




KMD-B22-40-M  
シート:No.83

●スイングイン・アウト式フット・レッグサポート 参考価格 **¥124,000** 非課税

**KMD-B22-40(38・42・45)-M(H/SH)** 中・高床 (15.6kg)  
TAIS:00160-000288

●エレベータリング式フット・レッグサポート 参考価格 **¥151,000** 非課税

**KMD-B22-40(38・42・45)-EL-M(H/SH)** 中・高床 (17.9kg)  
TAIS:00160-000289

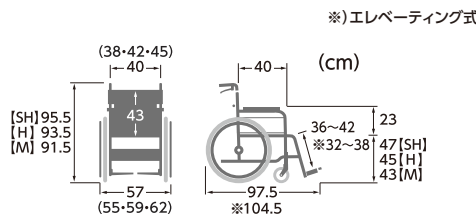

\*各寸法にはシート・クッション等の厚みは含まれておりません。

自走用  
(介助兼用)

20 車輪 6 キャスタ  
インチ×インチ




KMD-B20-40-LO  
シート:No.88

●スイングイン・アウト式フット・レッグサポート 参考価格 **¥124,000** 非課税

**KMD-B20-40(38・42・45)-LO(SL/SSL)** 低床 (15.4kg)  
TAIS:00160-000288

●エレベータリング式フット・レッグサポート 参考価格 **¥151,000** 非課税

**KMD-B20-40(38・42・45)-EL-LO(SL/SSL)** 低床 (17.7kg)  
TAIS:00160-000289

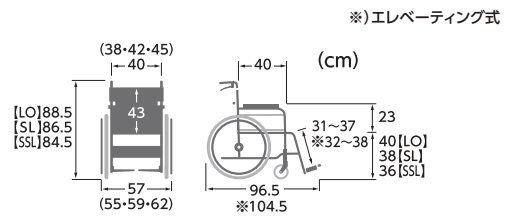

\*各寸法にはシート・クッション等の厚みは含まれておりません。

## ご注文の際ご指定ください。



●シート幅 **38・40・42・45cm** よりお選びいただけます。

※シート幅は、座った状態でお尻の幅にプラス3~5cm、  
介助者の手が入る程度が目安です。

●座面高さ **36(SSL)・38(SL)・40(LO)・43(M)・45(H)・47(SH)cm**

よりお選びいただけます。

9  
color

●シートカラー **9色** よりお選びいただけます。

※シート幅45cm仕様は(No.19黒)のみとなります。

No.82  
チャコールグレー  
(ポリエステル)

No.83  
ライトブルー  
(ポリエステル)

No.85  
若葉色  
(ポリエステル)

A9  
緑チェック  
(ポリエステル)

A10  
赤チェック  
(ポリエステル)

A11  
紫チェック  
(ポリエステル)

No.88  
エコブラック  
(ビニールレザー)

No.68  
黒メッシュ  
(ポリエステル)

No.19  
黒  
(ポリエステル)





Modern  
SERIES  
モダンシリーズ

標準  
モジュール

介助用

16インチ×6インチ  
車輪×キャスト



KMD-B16-40-M  
シート:A9



KMD-B16-40-LO  
シート:A11

Modern  
シリーズ

次世代型  
標準

軽量  
六輪

リクライ  
ニング

子供用  
簡易

シャワー用

オーダー  
システム

電動

歩行訓練  
歩行補助具

オプション&  
関連パーツ

●スイングイン・アウト式フット・レッグサポート 参考価格 **¥124,000** 非課税

**KMD-B16-40(38・42・45)-M(H/SH)** 中・高床 (14.4kg)  
TAIS:00160-000290

●スイングイン・アウト式フット・レッグサポート 参考価格 **¥124,000** 非課税

**KMD-B16-40(38・42・45)-LO(SL/SSL)** 低床 (14.4kg)  
TAIS:00160-000290


●エレベータリング式フット・レッグサポート 参考価格 **¥151,000** 非課税

**KMD-B16-40(38・42・45)-EL-M(H/SH)** 中・高床 (16.7kg)  
TAIS:00160-000291

●エレベータリング式フット・レッグサポート 参考価格 **¥151,000** 非課税


**KMD-B16-40(38・42・45)-EL-LO(SL/SSL)** 低床 (16.7kg)  
TAIS:00160-000291

※)エレベータリング式

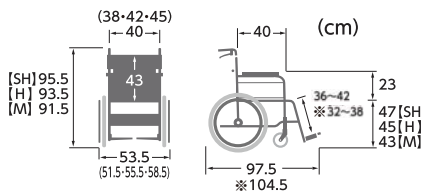

\*各寸法にはシート・クッション等の厚みは含まれておりません。

※)エレベータリング式

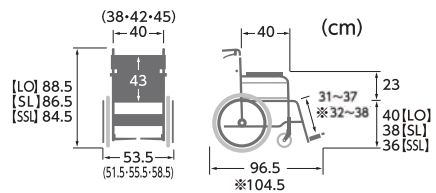


\*各寸法にはシート・クッション等の厚みは含まれておりません。

B-styleは脚部の仕様が選べます



スイングイン・アウト  
脚部の開・閉が  
できます。

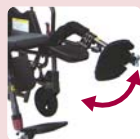

エレベータリング  
脚部角度が調節  
できます。

おすすめ  
オプション

空気補充が不要のノーパンク車輪



ソフトタイヤ付車輪  
取付価格 **¥9,200増/台** 非課税

脚部と肘部が可動し、乗り降りのスペースが確保しやすい多機能タイプ。  
さらにアームサポートの高さ調節ができます。

補装具  
レディ  
メイド式

# Modern C-style

自走用  
(介助兼用)

**22** 車輪 × **6** キャスタ  
インチ × インチ



KMD-C22-40-M  
シート:No.85

●スイングイン・アウト式フット・レッグサポート 参考価格 **¥146,000** 非課税

**KMD-C22-40(38・42・45)-M(H/SH)** 中・高床 (16.5kg)


TAIS:00160-000292

●エレベータリング式フット・レッグサポート 参考価格 **¥174,000** 非課税

**KMD-C22-40(38・42・45)-EL-M(H/SH)** 中・高床 (18.8kg)

TAIS:00160-000293

※)エレベータリング式

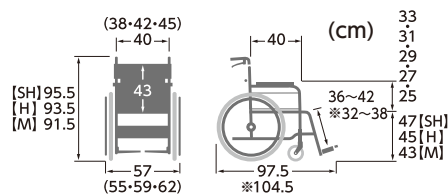

\*各寸法にはシート・クッション等の厚みは含まれておりません。

自走用  
(介助兼用)

**20** 車輪 × **6** キャスタ  
インチ × インチ



KMD-C20-40-LO  
シート:No.19

●スイングイン・アウト式フット・レッグサポート 参考価格 **¥146,000** 非課税

**KMD-C20-40(38・42・45)-LO(SL/SSL)** 低床 (16.3kg)


TAIS:00160-000292

●エレベータリング式フット・レッグサポート 参考価格 **¥174,000** 非課税

**KMD-C20-40(38・42・45)-EL-LO(SL/SSL)** 低床 (18.6kg)

TAIS:00160-000293

※)エレベータリング式

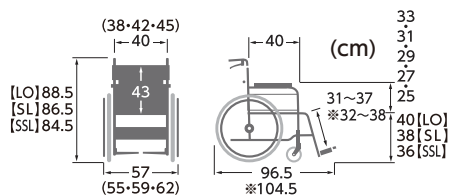

\*各寸法にはシート・クッション等の厚みは含まれておりません。

## ご注文の際ご指定ください。



●シート幅 **38・40・42・45cm** よりお選びいただけます。

※シート幅は、座った状態でお尻の幅にプラス3~5cm、  
介助者の手が入る程度が目安です。

●座面高さ **36(SSL)・38(SL)・40(LO)・43(M)・45(H)・47(SH)cm**

よりお選びいただけます。

**9**  
color

●シートカラー **9色** よりお選びいただけます。

※シート幅45cm仕様は (No.19黒) のみとなります。

No.82 チャコールグレー (ポリエステル)	No.83 ライトブルー (ポリエステル)	No.85 若葉色 (ポリエステル)	A9 緑チェック (ポリエステル)	A10 赤チェック (ポリエステル)
A11 紫チェック (ポリエステル)	No.88 エコブラック (ビニールレザー)	No.68 黒メッシュ (ポリエステル)	No.19 黒 (ポリエステル)	



パチート調整機構 車輪サイズ組替可 座面高さ調節 ドラム式 スイングイン・アウト式 エレベータリング式  
 ※ 手動車いす 100kg 使用者最大体重(積載物含む)

国内特許取得済

標準モジュール

Modern series  
 モダンシリーズ

標準モジュール

Modern シリーズ

次世代型標準

軽量六輪

リクライニング

子供用簡易

シャワー用

オーダーシステム

電動

歩行訓練歩行補助具

オプション&関連パーツ

介助用

16インチ×6インチ 車輪 カスタム



KMD-C16-40-M  
 シート:No.82

●スイングイン・アウト式フット・レッグサポート 参考価格 **¥146,000** 非課税

**KMD-C16-40(38・42・45)-M(H/SH)** 中・高床 (15.3kg)


TAIS:00160-000294

●エレベータリング式フット・レッグサポート 参考価格 **¥174,000** 非課税

**KMD-C16-40(38・42・45)-EL-M(H/SH)** 中・高床 (17.6kg)

TAIS:00160-000295

※)エレベータリング式

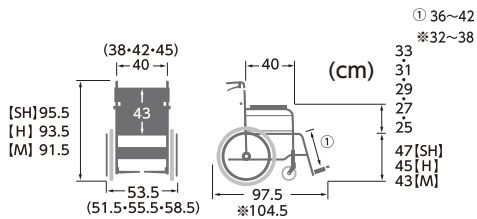

\*各寸法にはシート・クッション等の厚みは含まれておりません。



KMD-C16-40-LO  
 シート:A9

●スイングイン・アウト式フット・レッグサポート 参考価格 **¥146,000** 非課税

**KMD-C16-40(38・42・45)-LO(SL/SSL)** 低床 (15.3kg)


TAIS:00160-000294

●エレベータリング式フット・レッグサポート 参考価格 **¥174,000** 非課税

**KMD-C16-40(38・42・45)-EL-LO(SL/SSL)** 低床 (17.6kg)

TAIS:00160-000295

※)エレベータリング式

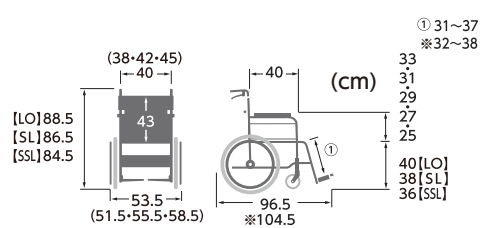

\*各寸法にはシート・クッション等の厚みは含まれておりません。

C-styleは脚部の仕様が選べます



スイングイン・アウト  
 脚部の開・閉が  
 できます。



エレベータリング  
 脚部角度が調節  
 できます。

おすすめ  
 オプション

空気補充が不要のノーパンク車輪



ソフトタイヤ付車輪

取付価格 ¥9,200増/台 非課税




動画をチェック

# サユレン -SAYUREN-

補装具  
レディ  
メイド式

## 足踏み付左右連動ブレーキ仕様

左右どちらかの駐車用ブレーキ  
もしくは足踏みブレーキをかけるだけで、  
両輪にブレーキがかかります。

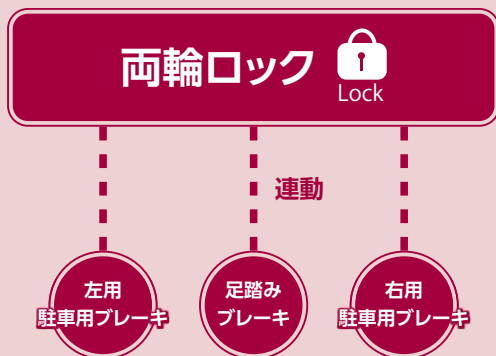

腰をかがめなくてもロック/解除ができるので介助負担を軽減します。



伸縮式駐車用ブレーキを延長することで軽い力で操作ができます。片側で両側の駐車用ブレーキを作動できるためスペースがないところでもご利用いただけます。



KMD-A22-40-M/SR  
シート:No.19

自走用 (介助兼用) **22** 車輪 **6** キャスタ  
インチ×インチ

参考価格 **¥136,000** 非課税

KMD-A22-40 (42・45)-M (H/SH) /SR **中・高床** (14.6kg)


TAIS:00160-000311

介助用 **16** 車輪 **6** キャスタ  
インチ×インチ

参考価格 **¥136,000** 非課税

KMD-A16-40 (42・45)-M (H/SH) /SR **中・高床** (13.9kg)

TAIS:00160-000312

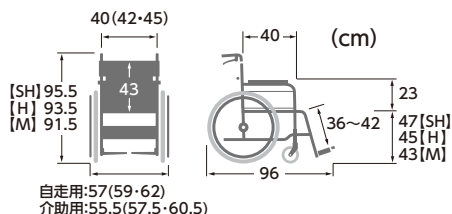

自走用:57(59-62)  
介助用:55.5(57.5-60.5)

\*各寸法には、シート・シートフッジョン等の厚みは含まれません。

### ご注文の際ご指定ください。



●A-styleはシート幅 **40・42・45cm**

よりお選びいただけます。

●B-style・C-styleはシート幅 **38・40・42・45cm**

よりお選びいただけます。

※シート幅は、座った状態でのお尻の幅にプラス3~5cm、介助者の手が入る程度が目安です。



●座面高さ **43(M)・45(H)・47(SH)cm**

よりお選びいただけます。

仕様の詳細はP.025~P.030をご参照ください。

**9**  
color

●シートカラー **9色** よりお選びいただけます。

※シート幅45cm仕様は (No.19黒) のみとなります。

No.82 チャコールグレー (ポリエステル)	No.83 ライトブルー (ポリエステル)	No.85 若葉色 (ポリエステル)	A9 緑チェック (ポリエステル)	A10 赤チェック (ポリエステル)
A11 紫チェック (ポリエステル)	No.88 エコブラック (ビニールレザー)	No.68 黒メッシュ (ポリエステル)	No.19 黒 (ポリエステル)	

※足踏みブレーキ部は右側取付が標準仕様となります。



KMD-B22-40-M/SR  
シート:A10

自走用  
(介助兼用) **22** 車輪 **6** キャスタ  
インチ×インチ

●スイングイン・アウト式フット・レッグサポート 参考価格 **¥156,000** 非課税

**KMD-B22-40(38・42・45)-M(H/SH)/SR** 中・高床 (16.4kg)

TAIS:00160-000313

●エレベータリング式フット・レッグサポート 参考価格 **¥181,000** 非課税

**KMD-B22-40(38・42・45)-EL-M(H/SH)/SR** 中・高床 (18.7kg)

TAIS:00160-000319

介助用 **16** 車輪 **6** キャスタ  
インチ×インチ

●スイングイン・アウト式フット・レッグサポート 参考価格 **¥156,000** 非課税


**KMD-B16-40(38・42・45)-M(H/SH)/SR** 中・高床 (15.3kg)

TAIS:00160-000314

●エレベータリング式フット・レッグサポート 参考価格 **¥181,000** 非課税

**KMD-B16-40(38・42・45)-EL-M(H/SH)/SR** 中・高床 (17.6kg)

TAIS:00160-000320

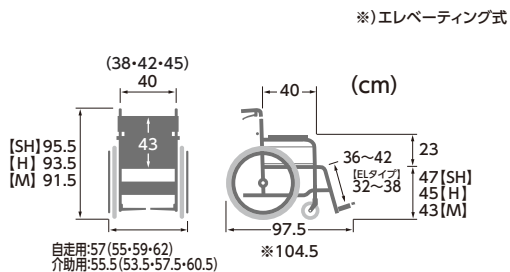

\*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。



KMD-C22-40-M/SR  
シート:No.82

自走用  
(介助兼用) **22** 車輪 **6** キャスタ  
インチ×インチ

●スイングイン・アウト式フット・レッグサポート 参考価格 **¥178,000** 非課税

**KMD-C22-40(38・42・45)-M(H/SH)/SR** 中・高床 (17.3kg)

TAIS:00160-000315

●エレベータリング式フット・レッグサポート 参考価格 **¥205,000** 非課税

**KMD-C22-40(38・42・45)-EL-M(H/SH)/SR** 中・高床 (19.6kg)

TAIS:00160-000321

介助用 **16** 車輪 **6** キャスタ  
インチ×インチ

●スイングイン・アウト式フット・レッグサポート 参考価格 **¥178,000** 非課税


**KMD-C16-40(38・42・45)-M(H/SH)/SR** 中・高床 (16.2kg)

TAIS:00160-000316

●エレベータリング式フット・レッグサポート 参考価格 **¥205,000** 非課税

**KMD-C16-40(38・42・45)-EL-M(H/SH)/SR** 中・高床 (18.5kg)

TAIS:00160-000322

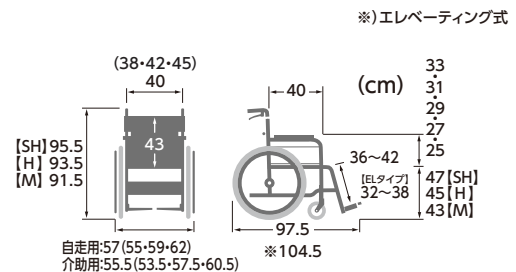

\*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

### B・C-styleは脚部の仕様が選べます



スイングイン・アウト  
脚部の開・閉が  
できます。



エレベータリング  
脚部角度が調節  
できます。

おすすめ  
オプション

空気補充が不要のノーパンク車輪



ソフトタイヤ付車輪

取付価格 ¥9,200増/台 非課税

標準  
モジュール

Modern  
シリーズ

次世代型  
標準

軽量  
六輪

リクライ  
ニング

子供用  
簡易

シャワー用

オーダー  
システム

電動

歩行訓練  
歩行補助具

オプション&  
関連パーツ

寸法表 (cm)

自走式 ※シート幅寸法は、バックサポートフレーム内寸法です。  
 介助式 ※各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。  
 ※シート色、取付部品により重量・寸法が多少変動いたします。ご了承ください。

シリーズ	品番	キヤスタ 車輪 (インチ)	シート 幅	前 座 高	後 座 高	シート 間隔	アーム サポート 高	シート 奥行 高	バック サポート 高	全 幅	全 高	全 長 (最長時)	折りた たみ時 全幅	折りた たみ時 全高	折りた たみ時 全長	重 量 (kg)	掲 載 ペ ー ジ
Rich-style	KMD-R12	6 12	42	47	—	33~40	21-23-25-27-29	38 85		55	126	107 (174.5)	35 ×	83	× 90	28	23 ・ 24
A-style	KMD-A22-40(42)S-M(H/SH)	6 22	40(42)	43(45/47)	40(42/44)	36~42	23	40 43		57(59)	91.5(93.5/95.5)	96	30 × 91.5(93.5/95.5) ×	94	13.5	25 ・ 26 ・ 31	
	KMD-A22-40(42-45)-M(H/SH)	6 22	40(42-45)	43(45/47)	40(42/44)	36~42	23	40 43		57(59-62)	91.5(93.5/95.5)	96	30 × 64(66/68) ×	94	13.8		
	KMD-A22-40(42-45)-M(H/SH)/SR	6 22	40(42-45)	43(45/47)	40(42/44)	36~42	23	40 43		57(59-62)	91.5(93.5/95.5)	96	30 × 64(66/68) ×	94	14.6		
	KMD-A16-40(42-45)-M(H/SH)	6 16	40(42-45)	43(45/47)	40(42/44)	36~42	23	40 43		53.5(55.5-58.5)	91.5(93.5/95.5)	96	27 × 64(66/68) ×	85	13		
	KMD-A16-40(42-45)-M(H/SH)/SR	6 16	40(42-45)	43(45/47)	40(42/44)	36~42	23	40 43		55.5(57.5-60.5)	91.5(93.5/95.5)	96	29 × 64(66/68) ×	85	13.9		
B-style	KMD-B22-40(38-42-45)-M(H/SH)	6 22	40(38-42-45)	43(45/47)	40(42/44)	36~42	23	40 43		57(55-59-62)	91.5(93.5/95.5)	97.5	30 × 66.5(68.5/70.5) ×	76.5	15.6	27 ・ 28 ・ 32	
	KMD-B22-40(38-42-45)-M(H/SH)/SR	6 22	40(38-42-45)	43(45/47)	40(42/44)	36~42	23	40 43		57(55-59-62)	91.5(93.5/95.5)	97.5	30 × 66.5(68.5/70.5) ×	76.5	16.4		
	KMD-B20-40(38-42-45)-LO(SL/SSL)	6 20	40(38-42-45)	40(38/36)	37(35/33)	31~37	23	40 43		57(55-59-62)	88.5(86.5/84.5)	96.5	30 × 64(62/60) ×	74	15.4		
	KMD-B16-40(38-42-45)-M(H/SH)	6 16	40(38-42-45)	43(45/47)	40(42/44)	36~42	23	40 43		53.5(51.5-55.5-58.5)	91.5(93.5/95.5)	97.5	27 × 66.5(68.5/70.5) ×	67.5	14.4		
	KMD-B16-40(38-42-45)-M(H/SH)/SR	6 16	40(38-42-45)	43(45/47)	40(42/44)	36~42	23	40 43		55.5(53.5-57.5-60.5)	91.5(93.5/95.5)	97.5	29 × 66.5(68.5/70.5) ×	67.5	15.3		
	KMD-B16-40(38-42-45)-LO(SL/SSL)	6 16	40(38-42-45)	40(38/36)	37(35/33)	31~37	23	40 43		53.5(51.5-55.5-58.5)	88.5(86.5/84.5)	96.5	27 × 63(61/59) ×	67.5	14.4		
	KMD-B22-40(38-42-45)-EL-M(H/SH)	6 22	40(38-42-45)	43(45/47)	40(42/44)	32~38	23	40 43		57(55-59-62)	91.5(93.5/95.5)	104.5	30 × 66.5(68.5/70.5) ×	76.5	17.9		
	KMD-B22-40(38-42-45)-EL-M(H/SH)/SR	6 22	40(38-42-45)	43(45/47)	40(42/44)	32~38	23	40 43		57(55-59-62)	91.5(93.5/95.5)	104.5	30 × 66.5(68.5/70.5) ×	76.5	18.7		
	KMD-B20-40(38-42-45)-EL-LO(SL/SSL)	6 20	40(38-42-45)	40(38/36)	37(35/33)	32~38	23	40 43		57(55-59-62)	88.5(86.5/84.5)	104.5	30 × 64(62/60) ×	74	17.7		
	KMD-B16-40(38-42-45)-EL-M(H/SH)	6 16	40(38-42-45)	43(45/47)	40(42/44)	32~38	23	40 43		53.5(51.5-55.5-58.5)	91.5(93.5/95.5)	104.5	27 × 66.5(68.5/70.5) ×	67.5	16.7		
	KMD-B16-40(38-42-45)-EL-M(H/SH)/SR	6 16	40(38-42-45)	43(45/47)	40(42/44)	32~38	23	40 43		55.5(53.5-57.5-60.5)	91.5(93.5/95.5)	104.5	29 × 66.5(68.5/70.5) ×	67.5	17.6		
KMD-B16-40(38-42-45)-EL-LO(SL/SSL)	6 16	40(38-42-45)	40(38/36)	37(35/33)	32~38	23	40 43		53.5(51.5-55.5-58.5)	88.5(86.5/84.5)	104.5	27 × 63(61/59) ×	67.5	16.7			
C-style	KMD-C22-40(38-42-45)-M(H/SH)	6 22	40(38-42-45)	43(45/47)	40(42/44)	36~42	25-27-29-31-33	40 43		57(55-59-62)	91.5(93.5/95.5)	97.5	30 × 66.5(68.5/70.5) ×	76.5	16.5	29 ・ 30 ・ 32	
	KMD-C22-40(38-42-45)-M(H/SH)/SR	6 22	40(38-42-45)	43(45/47)	40(42/44)	36~42	25-27-29-31-33	40 43		57(55-59-62)	91.5(93.5/95.5)	97.5	30 × 66.5(68.5/70.5) ×	76.5	17.3		
	KMD-C20-40(38-42-45)-LO(SL/SSL)	6 20	40(38-42-45)	40(38/36)	37(35/33)	31~37	25-27-29-31-33	40 43		57(55-59-62)	88.5(86.5/84.5)	96.5	30 × 64(62/60) ×	74	16.3		
	KMD-C16-40(38-42-45)-M(H/SH)	6 16	40(38-42-45)	43(45/47)	40(42/44)	36~42	25-27-29-31-33	40 43		53.5(51.5-55.5-58.5)	91.5(93.5/95.5)	97.5	27 × 66.5(68.5/70.5) ×	67.5	15.3		
	KMD-C16-40(38-42-45)-M(H/SH)/SR	6 16	40(38-42-45)	43(45/47)	40(42/44)	36~42	25-27-29-31-33	40 43		55.5(53.5-57.5-60.5)	91.5(93.5/95.5)	97.5	29 × 66.5(68.5/70.5) ×	67.5	16.2		
	KMD-C16-40(38-42-45)-LO(SL/SSL)	6 16	40(38-42-45)	40(38/36)	37(35/33)	31~37	25-27-29-31-33	40 43		53.5(51.5-55.5-58.5)	88.5(86.5/84.5)	96.5	27 × 63(61/59) ×	67.5	15.3		
	KMD-C22-40(38-42-45)-EL-M(H/SH)	6 22	40(38-42-45)	43(45/47)	40(42/44)	32~38	25-27-29-31-33	40 43		57(55-59-62)	91.5(93.5/95.5)	104.5	30 × 66.5(68.5/70.5) ×	76.5	18.8		
	KMD-C22-40(38-42-45)-EL-M(H/SH)/SR	6 22	40(38-42-45)	43(45/47)	40(42/44)	32~38	25-27-29-31-33	40 43		57(55-59-62)	91.5(93.5/95.5)	104.5	30 × 66.5(68.5/70.5) ×	76.5	19.6		
	KMD-C20-40(38-42-45)-EL-LO(SL/SSL)	6 20	40(38-42-45)	40(38/36)	37(35/33)	32~38	25-27-29-31-33	40 43		57(55-59-62)	88.5(86.5/84.5)	104.5	30 × 64(62/60) ×	74	18.6		
	KMD-C16-40(38-42-45)-EL-M(H/SH)	6 16	40(38-42-45)	43(45/47)	40(42/44)	32~38	25-27-29-31-33	40 43		53.5(51.5-55.5-58.5)	91.5(93.5/95.5)	104.5	27 × 66.5(68.5/70.5) ×	67.5	17.6		
	KMD-C16-40(38-42-45)-EL-M(H/SH)/SR	6 16	40(38-42-45)	43(45/47)	40(42/44)	32~38	25-27-29-31-33	40 43		55.5(53.5-57.5-60.5)	91.5(93.5/95.5)	104.5	29 × 66.5(68.5/70.5) ×	67.5	18.5		
	KMD-C16-40(38-42-45)-EL-LO(SL/SSL)	6 16	40(38-42-45)	40(38/36)	37(35/33)	32~38	25-27-29-31-33	40 43		53.5(51.5-55.5-58.5)	88.5(86.5/84.5)	104.5	27 × 63(61/59) ×	67.5	17.6		