

体型や環境に合わせた車いすが見つかる
バリエーション豊富なモダンシリーズ。

Modern シリーズ

“Modern series”

NEW Rich-style	021
A-style	023
B-style	025
C-style	027
サユレン	029



Modern シリーズチャート

軽量

Modern
シリーズ

WAVIT
シリーズ

標準

モジュール

六輪

リクライ
ニング

子供用

簡易

シャワー用


オーダー
システム

電動





歩行車

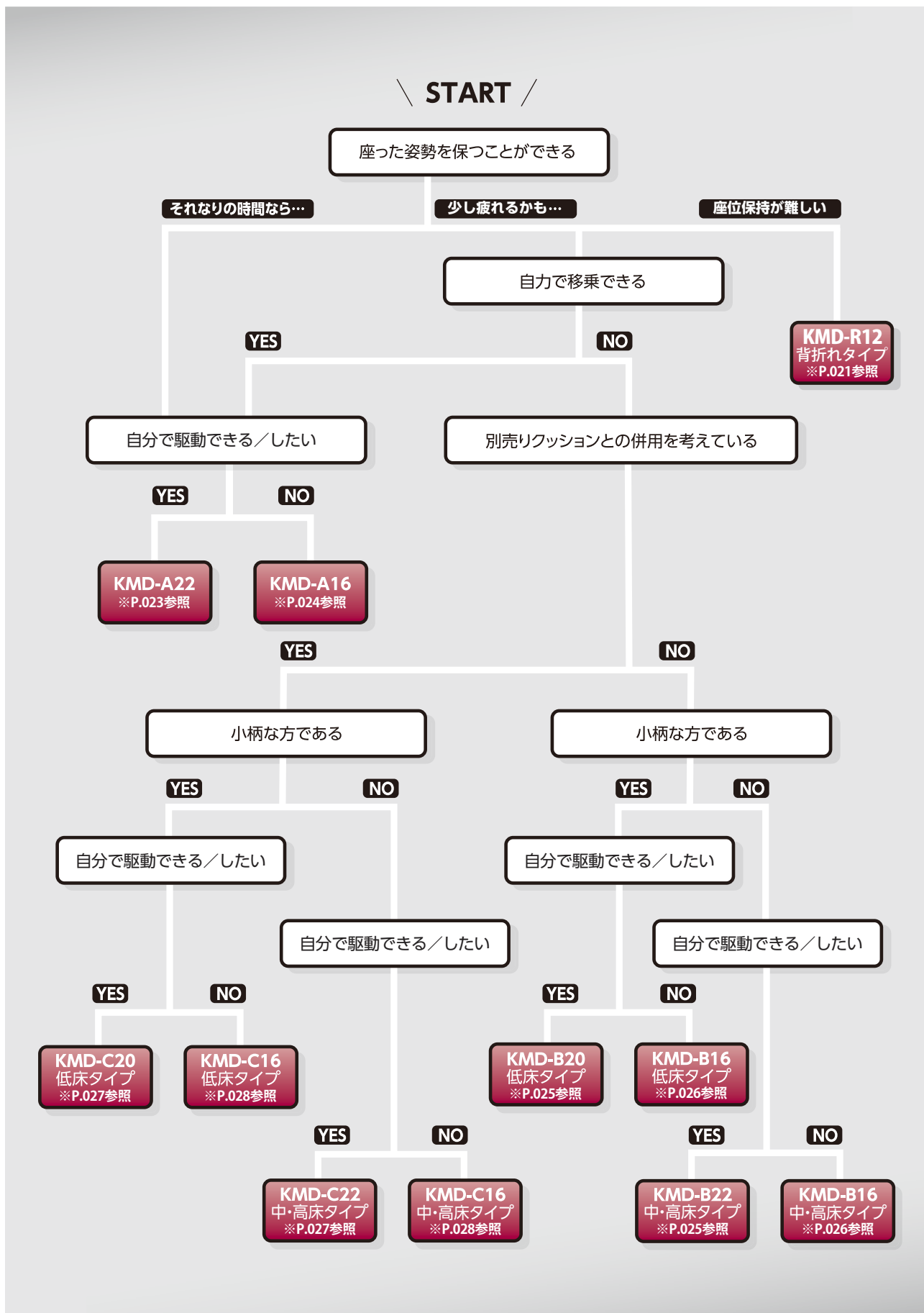歩行
補助具

オプション&
関連パーツ



Modernシリーズ別 機能一覧

	A-style 標準タイプ 	B-style 多機能タイプ 	C-style 多機能プラス タイプ 	Rich-style ティルト& リクライニングタイプ 
1. 伸縮式 駐車用ブレーキ	●	●	●	—
2. パチート 調節機能	●	●	●	●
3. 座クッション	●	●	●	●
4. 大きな 背ポケット	●	●	●	—
5. 適合調整 シート	—	●	●	●
6. 跳ね上げ式 アームサポート	—	●	●	—
7. 高さ調節式 アームサポート	—	—	●	●
8. スイングイン・ アウト式フット・ レッグサポート	—	●	●	—
9. エレベーター式 フット・レッグサポート	—	●	●	●
10. 足踏みブレーキ	サユレン仕様あり	サユレン仕様あり	サユレン仕様あり	クリックブレーキ

Modernシリーズ別 機能一覧

1.伸縮式駐車用ブレーキ

駐車用ブレーキレバーを引っ張ると、長さが10cm延長され、軽い力で操作できます。



2.パチート 調節機能

工具レスで簡単にフットプレート高さを変更できます。



パチパチと音が
鳴りしっかり止まる!

3.座クッション

3cm厚のクッションが標準装備です。
(Rich-styleは7cm厚)



4.大きな背ポケット

背ポケットはA4のクリアファイルがすっぽり収まる大きさです。



5.適合調整シート

背中形状に合わせて、横方向の張り調整ができます。背部への圧迫の軽減を図ります。



6.跳ね上げ式アームサポート

後方に跳ね上げ、アームサポートをオープンにできます。ベッドサイドなどからの移乗がスムーズに行えます。



7.高さ調節式アームサポート

アームサポートの段階的な調節ができます。



8.スイングイン・アウト式フット・レッグサポート

脚部の開閉ができます。



9.エレベーター式フット・レッグサポート

脚部角度が調節できます。角度調整フットサポートが標準装備です。



10.足踏みブレーキ

介助者が足で操作するブレーキ。



※画像はクリックブレーキ

軽量

Modern
シリーズ

WAVIT
シリーズ

標準

モジュール

六輪

リクライ
ニング

子供用

簡易

シャワー用

オーダー
システム

電動

歩行車

歩行
補助具

オプション&
関連パーツ

リクライニング時の背ずれを抑制した新ティルト&リクライニング車いす



動画をチェック

補装具
レディ
メイド式

Modern Rich-style

介助用



KMD-R12
シート:No.82

リクライニング操作で発生する”背ずれ”を抑制

ティルト時

シート調整角度: 5~20°


<無段階調整>



リクライニング時

バックサポート調整角度: 95~145°

<無段階調整>

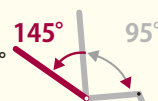


参考価格 **¥300,000** 非課税

NEW KMD-R12

高床 (28kg)

TAIS:00160-000347

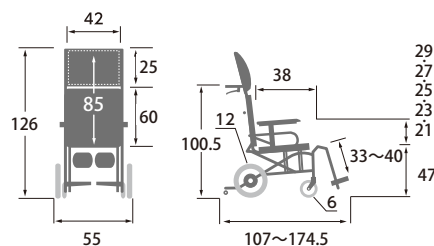

[折りたたみ:全幅35×全高83×全長90]
*単位はcmです。車輪・キャスタのみinch。
*手押しハンドル高さ、全長、全高、フットサポート・シート間距離は、バックサポートを最も起こした時の寸法です。
*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

1
color



No.82
チャコールグレー
(ポリエステル)


認識しやすい
カラーレバー

操作部が認識しやすい様に、
レバーをカラーリングしました。



パチート調節機能

折りたたみ可能

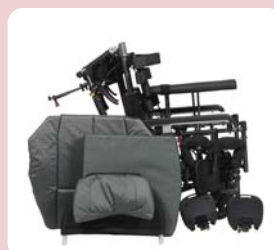



Modern series
モダンシリーズ

手動車いす 100kg
使用者最大体重(積載物含む)

国内特許申請中

軽量

Modern シリーズ

WAVIT シリーズ

標準

モジュール

六輪

リクライニング

子供用

簡易

シャワー用

オーダーシステム

電動

歩行車

歩行補助具

オプション&関連パーツ


KMD-R12の特長

新ティルト&リクライニング機構

スラリク機構



バックサポートを“倒す・起こす”の動作を繰り返しても背中がズレにくく、安定した座位が保てます。

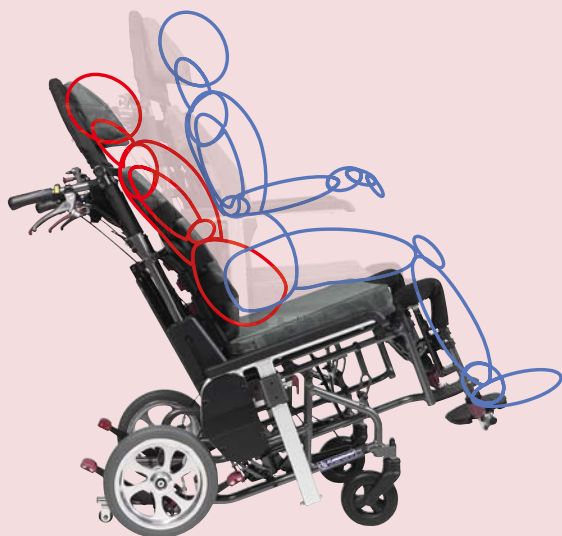

リクライニング時も身体が安定

リクライニング動作に伴い、ランバー角度も可変



足ズレ抑制のエレベーター式フット・レッグサポート



自然な足の軌道を描く新しいエレベーター機構。しっかりと適切な状態で脚を支えることで、長時間座っていても疲れにくくなります。

クリックブレーキ “踏んで”ブレーキ、“踏んで”解除。リクライニング状態や前方からの操作もラクラク。



リムビーズ 背クッション裏のベルトに挟み込むだけの簡単装着。



ポケット状のベルトに装着するだけで中材のストロービーズが優しくホールド。装着する位置や方法で背クッションが立体的な形状に変化します。座ってる状態でも微調整が可能。また、通気性も良く、手洗い可能。



開いた状態



折りたたんだ状態



使いやすい標準タイプ。外出が多い方におすすめです。

補装具
レディ
メイド式

Modern A-style

自走用



KMD-A22-40-M
シート:A10

参考価格 **¥120,000** 非課税

KMD-A22-40(42)-M(H/SH)


中・高床 (13.8kg)

TAIS:00160-000286

KMD-A22-45-M(H/SH)

中・高床 (13.8kg)

TAIS:00160-000303

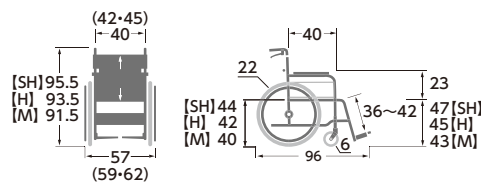

[折りたたみ:全幅30×全高[M]64[H]66[SH]68×全長94]
*各寸法にはシート・クッション等の厚みは含まれておりません。
*単位はcmです。車輪・キャストのみinch。



トリプルセット

参考価格 **¥144,000** 非課税

KMD-A22-40(42・45)-M(H/SH)-TS



トリプルセット
仕様(-TS)

ご依頼の多いオプションを
予め取り付けたセットです。

ガードル止め金具
(後ろ止め用)



酸素ボンベ架台
(2WAY用)

ガードル止め金具
(後ろ止め用)



酸素ボンベ架台
(2WAY用)



(φ100mm以下用/
φ140mm以下用)

※ガードル棒はセット内容に含まれません。
※酸素ボンベはセット内容に含まれません。
※右側・左側をご指定ください。(指定がなければガードル止め金具は左側、酸素ボンベ架台は右側へ取り付けとなります。)



Modern
series
モダンシリーズ

国内特許取得済
手動車いす 100kg
使用者最大体重(積載物含む)

軽量

Modern
シリーズ

WAVIT
シリーズ

標準

モジュール

六輪

リクライ
ニング

子供用

簡易

シャワー用

オーダー
システム

電動

歩行車

歩行
補助具

オプション&
関連パーツ

介助用



KMD-A16-40-M
シート:No.19


参考価格 **¥120,000** 非課税

KMD-A16-40(42)-M(H/SH) 中・高床 (13.0kg)

TAIS:00160-000287

KMD-A16-45-M(H/SH) 中・高床 (13.0kg)

TAIS:00160-000304

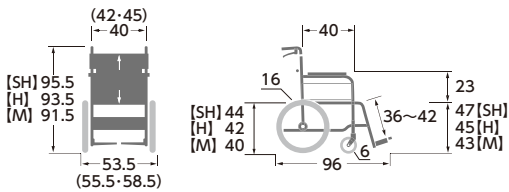

[折りたたみ:全幅27×全高[M]64[H]66[SH]68×全長85]
*各寸法にはシート・クッション等の厚みは含まれておりません。
*単位はcmです。車輪・キャスタのみinch。



トリプルセット

参考価格 **¥144,000** 非課税

KMD-A16-40(42・45)-M(H/SH)-TS

※トリプルセットの内容については、P.023をご覧ください。

ご注文の際ご指定ください。



●シート幅 **40・42・45cm** よりお選びいただけます。

※シート幅は、座った状態でのお尻の幅にプラス3~5cm、
介助者の手が入る程度が目安です。

●座面高さ **43(M)・45(H)・47(SH)cm**

よりお選びいただけます。

9
color

●シートカラー **(9色)** よりお選びいただけます。

※シート幅45cm仕様は (No.19黒) のみとなります。

No.82

チャコールグレー
(ポリエステル)

No.83

ライトブルー
(ポリエステル)

No.85

若葉色
(ポリエステル)

A9

緑チェック
(ポリエステル)

A10

赤チェック
(ポリエステル)

A11

紫チェック
(ポリエステル)

No.88

エコブラック
(ビニールレザー)

No.68

黒メッシュ
(ポリエステル)

No.19

黒
(ポリエステル)

おすすめ
オプション

空気補充が不要のノーパンク車輪



ソフトタイヤ付車輪

取付価格 **¥9,200増/台** 非課税

<22インチ>

TAIS : 00160-000299

<16インチ>

TAIS : 00160-000297

乗り降りのスペースが確保しやすい多機能タイプ。

補装具
レディ
メイド式

Modern B-style

自走用



KMD-B22-40-M
シート:No.83

●スイングイン・アウト式フット・レッグサポート 参考価格 **¥124,000** 非課税


KMD-B22-40(38・42・45)-M(H/SH) 中・高床 (15.6kg)

TAIS:00160-000288

●エレベータリング式フット・レッグサポート 参考価格 **¥151,000** 非課税

KMD-B22-40(38・42・45)-EL-M(H/SH) 中・高床 (17.9kg)

TAIS:00160-000289

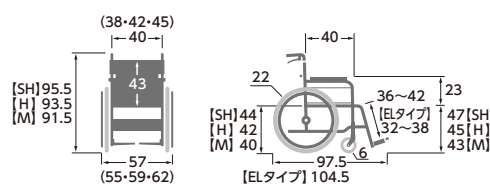

[折りたたみ:全幅30×全高[M]66.5[H]68.5[SH]70.5×全長76.5]
 ※各寸法にはシート・クッション等の厚みは含まれておりません。
 ※単位はcmです。車輪・キャスタのみinch。

自走用



KMD-B20-40-LO
シート:No.88

●スイングイン・アウト式フット・レッグサポート 参考価格 **¥124,000** 非課税


KMD-B20-40(38・42・45)-LO(SL/SSL) 低床 (15.4kg)

TAIS:00160-000288

●エレベータリング式フット・レッグサポート 参考価格 **¥151,000** 非課税

KMD-B20-40(38・42・45)-EL-LO(SL/SSL) 低床 (17.7kg)

TAIS:00160-000289

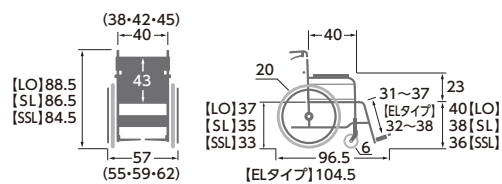

[折りたたみ:全幅30×全高[LO]64[SL]62[SSL]60×全長74]
 ※各寸法にはシート・クッション等の厚みは含まれておりません。
 ※単位はcmです。車輪・キャスタのみinch。

ご注文の際ご指定ください。



●シート幅 **38・40・42・45cm** よりお選びいただけます。

※シート幅は、座った状態でお尻の幅にプラス3~5cm、
 介助者の手が入る程度が目安です。

●座面高さ **36(SSL)・38(SL)・40(LO)・43(M)・45(H)・47(SH)cm**

よりお選びいただけます。

9 color

●シートカラー **9色** よりお選びいただけます。

※シート幅45cm仕様は (No.19黒) のみとなります。

No.82 チャコールグレー (ポリエステル)	No.83 ライトブルー (ポリエステル)	No.85 若葉色 (ポリエステル)	A9 緑チェック (ポリエステル)	A10 赤チェック (ポリエステル)
A11 紫チェック (ポリエステル)	No.88 エコブラック (ビニールレザー)	No.68 黒メッシュ (ポリエステル)	No.19 黒 (ポリエステル)	



パチート調節機構 車輪サイズ組替可 座面高さ調節 ドラム式 スイングイン・アウト式 エレベータリング式
 国内特許取得済 手動車いす 100kg 使用者最大体重 (積載物含む)

Modern
 SERIES
 モダンシリーズ

軽量

Modern
 シリーズ

WAVIT
 シリーズ

標準

モジュール

六輪

リクライ
 ニング

子供用

簡易

シャワー用

オーダ
 システム

電動

歩行車

歩行
 補助具

オプション&
 関連パーツ

介助用



KMD-B16-40-M
 シート:A11

●スイングイン・アウト式フット・レッグサポート 参考価格 **¥124,000** 非課税


KMD-B16-40(38・42・45)-M(H/SH) 中・高床 (14.4kg)

TAIS:00160-000290

●エレベータリング式フット・レッグサポート 参考価格 **¥151,000** 非課税

KMD-B16-40(38・42・45)-EL-M(H/SH) 中・高床 (16.7kg)

TAIS:00160-000291

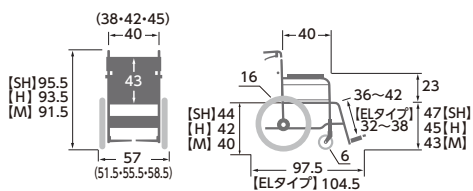

[折りたたみ:全幅27× 全高 [M]66.5 [H]68.5 [SH]70.5× 全長67.5]
 *各寸法にはシート・クッション等の厚みは含まれておりません。
 *単位はcmです。車輪・キャスタのみinch。



KMD-B16-40-LO
 シート:A9

●スイングイン・アウト式フット・レッグサポート 参考価格 **¥124,000** 非課税


KMD-B16-40(38・42・45)-LO(SL/SSL) 低床 (14.4kg)

TAIS:00160-000290

●エレベータリング式フット・レッグサポート 参考価格 **¥151,000** 非課税

KMD-B16-40(38・42・45)-EL-LO(SL/SSL) 低床 (16.7kg)

TAIS:00160-000291

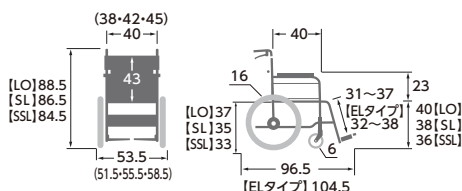

[折りたたみ:全幅27×全高 [LO]63 [SL]61 [SSL]59×全長67.5]
 *各寸法にはシート・クッション等の厚みは含まれておりません。
 *単位はcmです。車輪・キャスタのみinch。

B-styleは脚部の仕様が選べます



●スイングイン・アウト式フット・レッグサポート
 脚部の開・閉ができます。



●エレベータリング式フット・レッグサポート
 脚部角度が調節できます。

おすすめ
 オプション

空気補充が不要のノーパンク車輪



ソフトタイヤ付車輪

取付価格 ¥9,200増/台 非課税
 <22インチ>
 TAIS: 00160-000299
 <16インチ>
 TAIS: 00160-000297

乗り降りのスペースが確保しやすい多機能タイプ。
さらにアームサポートの高さ調節ができます。

補装具
レディ
メイド式

Modern C-style

自走用



KMD-C22-40-M
シート:No.85

●スイングイン・アウト式フット・レッグサポート 参考価格 **¥146,000** 非課税


KMD-C22-40(38・42・45)-M(H/SH) 中・高床 (16.5kg)

TAIS:00160-000292

●エレベータリング式フット・レッグサポート 参考価格 **¥174,000** 非課税

KMD-C22-40(38・42・45)-EL-M(H/SH) 中・高床 (18.8kg)

TAIS:00160-000293

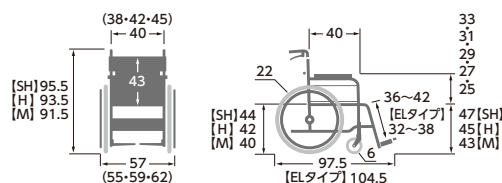

[折りたたみ:全幅30×全高[M]66.5[H]68.5[SH]70.5×全長76.5]
 *各寸法にはシート・クッション等の厚みは含まれておりません。
 *単位はcmです。車輪・キャスタのみinch。

自走用



KMD-C20-40-LO
シート:No.19

●スイングイン・アウト式フット・レッグサポート 参考価格 **¥146,000** 非課税


KMD-C20-40(38・42・45)-LO(SL/SSL) 低床 (16.3kg)

TAIS:00160-000292

●エレベータリング式フット・レッグサポート 参考価格 **¥174,000** 非課税

KMD-C20-40(38・42・45)-EL-LO(SL/SSL) 低床 (18.6kg)

TAIS:00160-000293

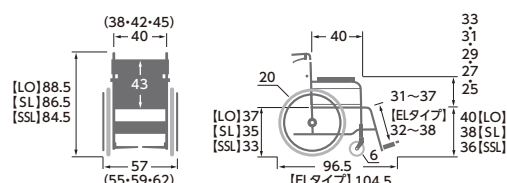

[折りたたみ:全幅30×全高[LO]64[SL]62[SSL]60×全長74]
 *各寸法にはシート・クッション等の厚みは含まれておりません。
 *単位はcmです。車輪・キャスタのみinch。

ご注文の際ご指定ください。



●シート幅 **38・40・42・45cm** よりお選びいただけます。

※シート幅は、座った状態でお尻の幅にプラス3~5cm、
介助者の手が入る程度が目安です。

●座面高さ **36(SSL)・38(SL)・40(LO)・43(M)・45(H)・47(SH)cm**

よりお選びいただけます。

9
color

●シートカラー **9色** よりお選びいただけます。

※シート幅45cm仕様は(No.19黒)のみとなります。

No.82 チャコールグレー (ポリエステル)	No.83 ライトブルー (ポリエステル)	No.85 若葉色 (ポリエステル)	A9 緑チェック (ポリエステル)	A10 赤チェック (ポリエステル)
A11 紫チェック (ポリエステル)	No.88 エコブラック (ビニールレザー)	No.68 黒メッシュ (ポリエステル)	No.19 黒 (ポリエステル)	

アイコンの解説は、P.005をご覧ください。

Modern series
モダンシリーズ

介助用

Modern シリーズ



KMD-C16-40-M
シート:No.82



KMD-C16-40-LO
シート:A9

WAVIT シリーズ

標準

モジュール

六輪

リクライニング

子供用

簡易

シャワー用

オーダーシステム

電動

歩行車

歩行補助具

オプション&関連パーツ

●スイングイン・アウト式フット・レッグサポート 参考価格 **¥146,000** 非課税

KMD-C16-40(38・42・45)-M(H/SH) 中・高床 (15.3kg)

TAIS:00160-000294

●スイングイン・アウト式フット・レッグサポート 参考価格 **¥146,000** 非課税

KMD-C16-40(38・42・45)-LO(SL/SSL) 低床 (15.3kg)

TAIS:00160-000294

●エレベーター式フット・レッグサポート 参考価格 **¥174,000** 非課税



KMD-C16-40(38・42・45)-EL-M(H/SH) 中・高床 (17.6kg)

TAIS:00160-000295

●エレベーター式フット・レッグサポート 参考価格 **¥174,000** 非課税

KMD-C16-40(38・42・45)-EL-LO(SL/SSL) 低床 (17.6kg)

TAIS:00160-000295

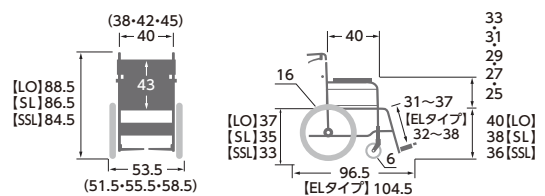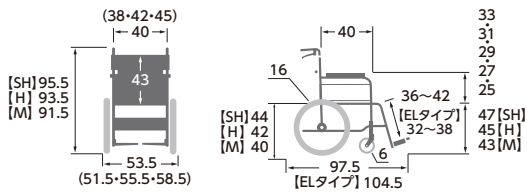


[折りたたみ:全幅27×全高[M]66.5[H]68.5[SH]70.5×全長67.5]
 *各寸法にはシート・クッション等の厚みは含まれておりません。
 *単位はcmです。車輪・キャスタのみinch。

[折りたたみ:全幅27×全高[LO]63[SL]61[SSL]59×全長67.5]
 *各寸法にはシート・クッション等の厚みは含まれておりません。
 *単位はcmです。車輪・キャスタのみinch。

C-styleは脚部の仕様が選べます



●スイングイン・アウト式フット・レッグサポート
脚部の開・閉ができます。

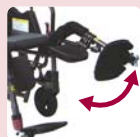

●エレベーター式フット・レッグサポート
脚部角度が調節できます。

おすすめのオプション

空気補充が不要のノーパンク車輪



ソフトタイヤ付車輪

取付価格 **¥9,200増/台** 非課税

<22インチ>
TAIS: 00160-000299
<16インチ>
TAIS: 00160-000297



動画をチェック

サユレン -SAYUREN-

補装具
レディ
メイド式

足踏み付左右連動ブレーキ仕様

左右どちらかの駐車用ブレーキ
もしくは足踏みブレーキをかけるだけで、
両輪にブレーキがかかります。



腰をかかめなくてもロック/解除ができるので介助負担を軽減します。



伸縮式駐車用ブレーキを延長することで軽い力で操作ができます。片側で両側の駐車用ブレーキを作動できるためスペースがないところでもご利用いただけます。



KMD-A22-40-M/SR
シート:No.19

自走用 車輪22インチ

参考価格 **¥148,000** 非課税

KMD-A22-40 (42・45)-M (H/SH) /SR **中・高床** (14.6kg)


TAIS:00160-000311

介助用 車輪16インチ

参考価格 **¥148,000** 非課税

KMD-A16-40 (42・45)-M (H/SH) /SR **中・高床** (13.9kg)

TAIS:00160-000312

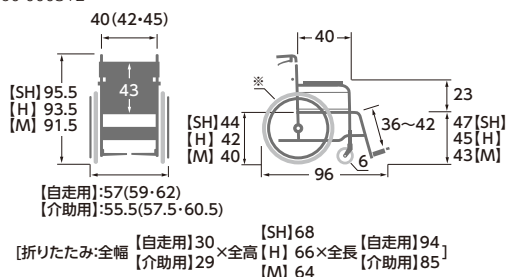

[折りたたみ]全幅 [自走用] 30 [介助用] 29 [SH] 68 [全高] [H] 66 [M] 64 [自走用] 94 [介助用] 85

※自走用:22inch、介助用:16inch
※各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。
※単位はcmです。車輪・キャストのみinch。

ご注文の際ご指定ください。



●A-styleはシート幅 **40・42・45cm**

よりお選びいただけます。

●B-style・C-styleはシート幅 **38・40・42・45cm**

よりお選びいただけます。

※シート幅は、座った状態でのお尻の幅にプラス3~5cm、介助者の手が入る程度が目安です。



●座面高さ **43(M)・45(H)・47(SH)cm**

よりお選びいただけます。

仕様の詳細はP.023~P.028をご参照ください。

9 color

●シートカラー **9色** よりお選びいただけます。

※シート幅45cm仕様は(No.19黒)のみとなります。

No.82 チャコールグレー (ポリエステル)	No.83 ライトブルー (ポリエステル)	No.85 若葉色 (ポリエステル)	A9 緑チェック (ポリエステル)	A10 赤チェック (ポリエステル)
A11 紫チェック (ポリエステル)	No.88 エコブラック (ビニールレザー)	No.68 黒メッシュ (ポリエステル)	No.19 黒 (ポリエステル)	

※足踏みブレーキ部は右側取付が標準仕様となります。



KMD-B22-40-M/SR
シート:A10



KMD-C22-40-M/SR
シート:No.82

軽量

Modern
シリーズ

WAVIT
シリーズ

標準

モジュール

六輪

リクライ
ニング

子供用

簡易

シャワー用

オーダー
システム

電動

歩行車

歩行
補助具

オプション&
関連パーツ

自走用 車輪22インチ

- スイングイン・アウト式フット・レッグサポート 参考価格 **¥156,000** 非課税

KMD-B22-40(38・42・45)-M(H/SH)/SR **中・高床** (16.4kg)

TAIS:00160-000313

- エレベータリング式フット・レッグサポート 参考価格 **¥181,000** 非課税

KMD-B22-40(38・42・45)-EL-M(H/SH)/SR **中・高床** (18.7kg)

TAIS:00160-000319

介助用 車輪16インチ

- スイングイン・アウト式フット・レッグサポート 参考価格 **¥156,000** 非課税


KMD-B16-40(38・42・45)-M(H/SH)/SR **中・高床** (15.3kg)

TAIS:00160-000314

- エレベータリング式フット・レッグサポート 参考価格 **¥181,000** 非課税

KMD-B16-40(38・42・45)-EL-M(H/SH)/SR **中・高床** (17.6kg)

TAIS:00160-000320

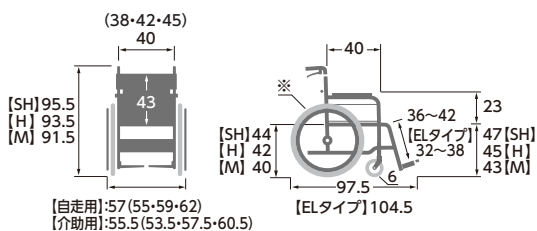

【自走用】:57(55・59・62)
【介助用】:55.5(53.5・57.5・60.5)

【折りたたみ:全幅】
【自走用】30
【介助用】29 × 全高【H】68.5 × 全長【自走用】76.5
【介助用】67.5
【M】66.5

※自走用:22inch、介助用:16inch
 ※各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。
 ※単位はcmです。車輪・キャスタのみinch。

自走用 車輪22インチ

- スイングイン・アウト式フット・レッグサポート 参考価格 **¥178,000** 非課税

KMD-C22-40(38・42・45)-M(H/SH)/SR **中・高床** (17.3kg)

TAIS:00160-000315

- エレベータリング式フット・レッグサポート 参考価格 **¥205,000** 非課税

KMD-C22-40(38・42・45)-EL-M(H/SH)/SR **中・高床** (19.6kg)

TAIS:00160-000321

介助用 車輪16インチ

- スイングイン・アウト式フット・レッグサポート 参考価格 **¥178,000** 非課税


KMD-C16-40(38・42・45)-M(H/SH)/SR **中・高床** (16.2kg)

TAIS:00160-000316

- エレベータリング式フット・レッグサポート 参考価格 **¥205,000** 非課税

KMD-C16-40(38・42・45)-EL-M(H/SH)/SR **中・高床** (18.5kg)

TAIS:00160-000322

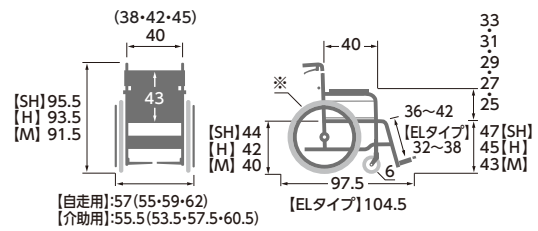

【自走用】:57(55・59・62)
【介助用】:55.5(53.5・57.5・60.5)


【折りたたみ:全幅】
【自走用】30
【介助用】29 × 全高【H】68.5 × 全長【自走用】76.5
【介助用】67.5
【M】66.5

※自走用:22inch、介助用:16inch
 ※各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。
 ※単位はcmです。車輪・キャスタのみinch。

B・C-styleは脚部の仕様が選べます



●スイングイン・アウト式フット・レッグサポート
脚部の開・閉ができます。

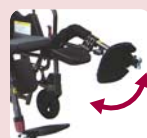

●エレベータリング式フット・レッグサポート
脚部角度が調節できます。

おすすめ
オプション

空気補充が不要のノーパンク車輪



ソフトタイヤ付車輪

取付価格 ¥9,200増/台 非課税