

低床の六輪タイプ。
足こぎしやすく、
狭い場所でもこまわりが効きます。

六 輪

"Six-Wheeled" Wheelchair

低床こまわりくん059

寸法表061





低床こまわりくんシリーズ

自走用 (介助兼用) **20** 車輪 × **4** 前後キャスタ
 インチ × インチ



KAK20-40B-LO
シート:A9

参考価格 **¥178,000** 非課税

KAK20-40B-LO 低床 (18.0kg)

TAIS:00160-000265

介助用 **16** 車輪 × **4** 前後キャスタ
 インチ × インチ



KAK16-40B-LO
シート:A11

参考価格 **¥178,000** 非課税

KAK16-40B-LO 低床 (16.8kg)


TAIS:00160-000267

自走用 (介助兼用) **18** 車輪 × **4** 前後キャスタ
 インチ × インチ

参考価格 **¥178,000** 非課税

KAK18-40B-LO 低床 (17.7kg)


TAIS:00160-000266

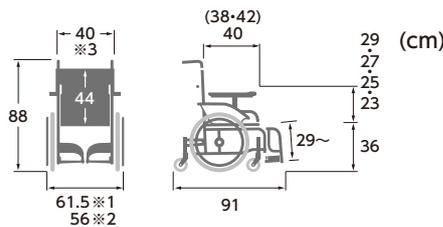

全幅
 ※1) 車輪20・18インチ
 ※2) 車輪16インチ
 シート幅
 ※3) アームパイプ内内の寸法です。
 *各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

ご注文の際ご指定ください。

3 color ●シートカラー (3色) よりお選びいただけます。

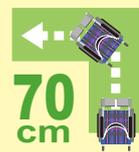

70cm幅の廊下を曲がれます。
 適合調整シート&座シート奥行調節機能等、コンパクトで機能も充実ノーパンク仕様。シート高さは低めの36cm、低床タイプ。

スイングアウト式 フット・レッグサポート


乗り降りや足こぎする際、足元を広く使えます。



シート奥行調節可能

シート奥行を2cmピッチ3段階で調節できます。

※シート奥行は、40cmの設定にて出荷いたします。

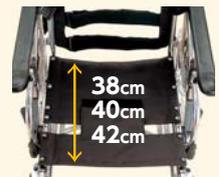

ヒールループ標準装備

かかとのずれ落ちを防ぎます。フットプレート跳ね上げ時、立ち座りしやすいよう足が引ける状態になります。



オートステップ (フットサポートT)



フットプレートから足を浮かすと

自動的に 跳ね上がります

※下ろす際は手や足でおしてください。

折りたためないなあと思ったら、フットプレートを
たたみ忘れていた・・・

靴底の触れている
部品を触った後は
手を洗わないと・・・

移乗の度にかがむのは大変・・・



オートステップ5つのメリット



衛生的

-hygienical-

手で触れる回数が減少するので衛生的です。



自立への第一歩に

-To the first step-

足を上げるだけでフットプレートが跳ね上がるため立ち上がろうという気持ちを手助けします。



介助をラクに

-Reduce the burden-

移乗介助の際、前かがみの動作が減ることで足腰への負担を抑えます。



裏側もカバー

-Also covers the back side-

フットプレート裏側をカバーして、安全性にも配慮。



ヒヤリはつとを軽減

-Reduce risk-

利用者がフットサポートを跳ね上げしようと前傾姿勢になったり、乗り込み時にフットプレートを誤って踏んで転倒するリスクを減らします。



オートステップ フットサポートT

TAIS:00160-000245

新車ご購入時の取付価格 **¥6,600増/台** 非課税

部品のみご購入価格 **¥4,719/個** 税込

新車ご購入時の取付価格には部品の代金を含んでおります。

取付可能車種:WAP シリーズ,KPF シリーズ,KX シリーズ※,KXL シリーズ※,AYK シリーズ※

※EL 脚部仕様除く

寸法表 (cm)

自走式 ※シート幅寸法は、バックサポートフレーム内寸法です。
介助式 ※各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。
 ※シート色、取付部品により重量・寸法が多少変動いたします。ご了承ください。

シリーズ	品番	前キヤスタ(インチ)	車輪(インチ)	後キヤスタ(インチ)	シート幅	前座高	後座高	シート・シートクッション間距離	アームサポート高	シート奥行	バックサポート高	全幅	全高	全長	折りたたみ時全幅	折りたたみ時全高	折りたたみ時全長	重量(kg)	掲載ページ
KAK-LO	KAK20-40B-LO	4	20	4	※40	36	33.5	29~	23・25・27・29	40(38・42)	44	61.5	88	91	35 × 66 × 71	18.0	59		
	KAK18-40B-LO	4	18	4	※40	36	33.5	29~	23・25・27・29	40(38・42)	44	61.5	88	91	35 × 66 × 71	17.7			
	KAK16-40B-LO	4	16	4	※40	36	33.5	29~	23・25・27・29	40(38・42)	44	56	88	91	31 × 66 × 71	16.8			

※アームパイプ内寸法
 座パイプ外寸法(380mm)