

省電力性能や回転半径の小ささ、前後スライド・左右回転シートなど
ニーズに合ったセレクトでお出かけが楽しくなります。

電動

Electric Motor Type

KE45	091
KE43	092
EMC-260	093
EMC-270	093



簡単操作でスピーディに移動できます。

KE45・43(ロマンス)シリーズ

13 駆動輪
インチ



KE45

省電力、高輝度LEDヘッドランプ
高位置ウインカー&ハイマウントランプ
大型タイヤ採用、走破・走行性が向上。

- バッテリー残量計
- 前進/後進切替スイッチ
- 速度調節つまみ
- 方向指示器
- ホーン



45・90
30 前後スライド・左右回転シート
中心より前後30mmのスライド、
左右45度、90度の2段階回転機能。



参考価格 **¥418,000** 非課税

KE45 <ロマンス プラチナネオ>


(111kg バッテリー含む)

TAIS:00160-000281



標準装備

- 左右バックミラー
- 前部カゴ(約20L)
~業界最大容量~

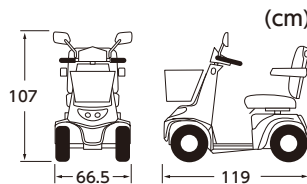

*電動車いす安全普及協会規格適合 *JIST9206電磁エミッション、電磁イミュニティ規格適合

仕様

- シート幅:43cm ■ 肘内寸法:39cm
- ステップ高さ:11.6cm フラット
- 前輪・駆動輪:直径32×幅9cm(4.00-5-4PR)・ノーパンクタイヤ/黒
- 実用登坂角度:10°
- 走行速度:前進(0~6km/h)・後進(0~2km/h)
- 連続走行距離:29km
(新品バッテリーで平らな道を体重75kgの人が、6km/hで走行した場合)
- モーター出力:24V 600W×1ヶ
- バッテリー(5時間率):12V 32Ah×2ヶ(密閉式)
- 充電:充電器内蔵(家庭用コンセント100Vより充電できます。)
- 使用者最大重量:100kg(積載物含む)

KE43/KE45
専用
オプション

ご購入の際合わせてご指定ください。

右側バックミラー



対応機種 ▶ KE43 (取付金具付)

取付価格 **¥1,600増** 非課税

部品価格 **¥1,760** 税込

*梱包上の都合により、一部部品は同梱対応とさせていただきます。

フロアマット



対応機種 ▶ KE45・KE43

取付価格 **¥2,500増** 非課税

部品価格 **¥2,750** 税込

KE45・43 共通機構

対応機種 KE45・KE43



オートハザード
ランプ機能
後進時、停止時には
自動的に点滅。



ウィンカーオート
キャンセル機能
カーブを曲がり終えれ
ば自動的にウィンカー
の点滅が消えます。



振り込み
非常停止機能
アクセルレバーを強く
握ると非常停止。



ノーパンク
タイヤ
トラブルに強い
タフなタイヤ。



オート
パワーオフ機能
15分以上操作がな
ければ自動的に電
源が切れます。



コーナリング
自動減速機能
カーブを曲がる際、
自動的に減速。



4輪
サスペンション
4輪サスペンション
により楽しい乗り心
地です。



(電動カート)
運転免許不要

10 駆動輪
インチ

KE43



コンパクト設計・軽量
バッテリー簡単交換

- バッテリー残量計
- 前進/後進切替スイッチ
- 速度調節つまみ
- 方向指示器
- ホーン
- アクセルガード



前後スライド・左右回転シート
中心より前後30mmのスライド、
左右90度の位置に回転。



参考価格 **¥323,000** 非課税

KE43 <ロマンス ゴールド>

(69kg バッテリー含む)


TAIS:00160-000336



<国家公安委員会認定>
<交 K10-15>

標準装備

- 左側バックミラー
- 前部カゴ

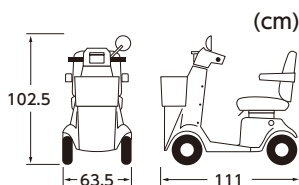

*電動車が安全普及協会規格適合 *JIS T9206電磁エミッション、電磁イミュニティ規格適合

仕様

- シート幅:40cm ■ 肘内寸法:39cm
- ステップ高さ:前19cm・後15cm
- 前輪・駆動輪:直径26×幅8.5cm (3.00-4-4PR)・ノーパンクタイヤ/黒
- 実用登坂角度:10°
- 走行速度:前進(0~6km/h)・後進(0~2km/h)
- 連続走行距離:25km
(新品バッテリーで平らな道を体重75kgの人が、6km/hで走行した場合)
- モーター出力:24V 600W×1ケ
- バッテリー(5時間率):12V 20Ah×2ケ(密閉式)
- 充電:充電器内蔵(家庭用コンセント100Vより充電できます。)
- 使用者最大重量:100kg(積載物含む)

ステッキスタンド



対応機種 KE45・KE43

取付価格 **¥8,000増** 非課税

部品価格 **¥8,800** 税込

※取付時は、左・右をご指定ください。

車体カバー



対応機種 KE45・KE43

部品価格

¥6,600 税込



<価格:参考価格>

電動カート
総合補償プラン

<詳しくは弊社、または担当代理店
にお問い合わせください>

傷害保険と賠償責任をセットした
幅広い補償内容の保険
「電動カート総合補償プラン」を
ご用意しております。

標準
モジュール

Modern
シリーズ

次世代型
標準

軽量
六輪

リクライ
ニング

子供用
簡易

シャワー用

オーダー
システム

電動

歩行訓練
歩行補助具

オプション&
関連パーツ

EMCシリーズ

13 駆動輪 インチ

シート:クレンズブラック
フレーム:クロームオレンジ
ホイールカバー:ホワイト



<ジョイスティック>
コントロールボックス

- バッテリー残量計
- 速度計(デジタル表示)
- 走行モード切替スイッチ

<最高速度:4.5km/h仕様>

参考価格 **¥497,100** 非課税

EMC-260

(83.5kg バッテリー含む)

TAIS:00075-000028

<最高速度:6.0km/h仕様>

参考価格 **¥514,400** 非課税

EMC-270

(83.5kg バッテリー含む)

TAIS:00075-000026

アームサポート高さ調整

7段階(1.5cm間隔)の高さ調整が可能。

スライドレール

座面下左右のレール上にフットサポート、アームサポート、バックサポートフレームをレール上の希望の位置に調整できます。


リヤサブホイール

転倒防止用リヤサブホイールを車いす後部に取り付けました。

EMC-260/270用

標準シート(4色)より選択 (抗菌・防汚シート)

- サイファーイエロー
- クレンズブラック
- ネイビーブルー
- ライトグレー

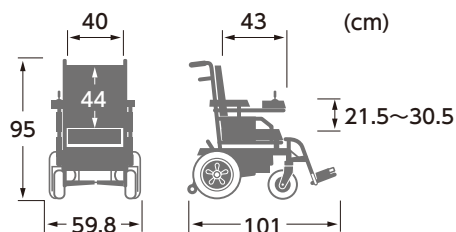

標準フレーム(4色)より選択

- ナイトブラック
- クロームオレンジ
- スカーレットレッド
- ディープブルー

標準ホイールカバー(2色)より選択

- ホワイト
- ブラック

タイヤカラー(2色)より選択

- グレー
- ブラック

対応機種 EMC-260・EMC-270

共通仕様

背シート張り調整



バッテリー後部着脱



充電・交換が簡単
※バッテリーは、当社指定のバッテリーをご使用ください。

走行モード

標準モード	スポーツモード
ソフトモード	トレーニングモード

※モードの設定については、ご相談ください。

仕様表

品番	EMC-260	EMC-270
駆動モーター	30分定格出力 DC24V 200W×2	
バッテリー	SER38-12 12V38Ah(20時間率)×2	
充電器(充電時間)	電子タイマー付自動充電方式(0~12時間)	
連続走行距離 ※使用状況により変わります。	算出条件:常温で乗車重量100kg、最高速度、平坦路 直進時のバッテリー新品満充電から100%放電まで 34km 36km	
実用登坂角度	8°	
使用者最大体重 ※積載物含む	100kg以下	
速度	前進時	後進時
	低速時(km/h)	2.5 1.0
	中速時(km/h)	3.5 1.3
速度	前進時	後進時
	高速時(km/h)	4.5 1.7

注意事項

- *改良のため予告なく諸元・性能を変更することがあります。
- *公道で使用する場合、改造に際し道路交通法で定められた電動車いすの定義により外れるものについては、最寄りの警察署長の承認が必要になります。
- *印刷物の写真の色と現物は、多少異なる場合があります。
- *お客様の使用環境や操作方法に応じて走行距離は異なります。