



トリプルセット (-TS)

ご依頼の多いオプションを
予め取り付けけたセットです。




ガードル止め金具
(後ろ止め用)




酸素ボンベ架台
(2WAY用)

ガードル止め金具 (後ろ止め用)

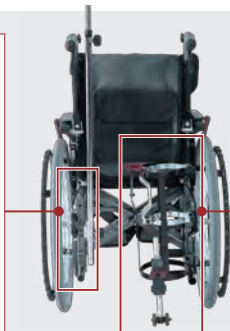

酸素ボンベ架台 (2WAY用)

2サイズ(φ100mm以下用/φ140mm以下用)の酸素ボンベに1台で対応できます。

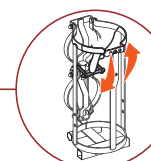

工具レスの簡単切り替え

※左側・右側をご指定下さい。(指定がなければ右側:酸素ボンベ架台<2WAY用>、左側:ガードル止め金具の取付になります。)※ガードル棒、酸素ボンベはセット内容に含まれません。



手動車いす 100kg

使用者最大体重(積載物含む)
※サユレン仕様を除く



00898-2004-AQ-KOB-IAB / 00899-2004-AE-KOB-IAB
本社:神戸工場 神戸第二工場 いのちの2工場 本館7階・8階センター

代理店

カワムラサイクル

- 本社 〒651-2411 兵庫県神戸市西区上新地 3丁目 9番 1
TEL: 078-969-2800 FAX: 078-969-2811
- 東京サービスセンター 〒110-0013 東京都台東区入谷 1丁目 8番 3
TEL: 03-3874-3511 FAX: 03-3874-3514
- 名古屋サービスセンター 〒487-0027 愛知県春日井市松本町 1丁目 3番 11
TEL: 0568-52-4800 FAX: 0568-52-4802
- 本店サービスセンター 〒651-2411 兵庫県神戸市西区上新地 3丁目 9番 1
TEL: 078-969-2800 FAX: 078-969-2822
- 福岡サービスセンター 〒819-0055 福岡県福岡市西区生の松原 1丁目 18番 3
TEL: 092-882-4722 FAX: 092-882-4723

カワムラサイクル

Modern
series

モダンシリーズ

— KOBE JAPAN —

機能一覧

伸縮式駐車用ブレーキ A B C

伸縮式
駐車用ブレーキ

駐車用ブレーキレバーを引っ張ると、長さが10cm延長され、軽い力で操作できます。

軽い力で
操作ラクラク。

パチート調節機能 A B C
(特許出願中)

パチート
調節機能

工具レスで簡単にフットプレート高さを変更できます。

パチパチと音が鳴り
しっかり止まる!

座クッション&大きな背ポケット A B C

背座クッション
(脱着式)

3cm厚のクッションが標準装備です。

A4クリアファイルが
すっぽり入るポケットサイズ。

適合調整シート B C

適合調整
(背のみ)

背中形状に合わせて、横方向の張り調整ができます。背部への圧迫の軽減を図ります。

跳ね上げ式アームサポート B C

跳ね上げ式

後方に跳ね上げ、肘掛け部分をオープンにできます。ベッドサイドなどからの移乗がスムーズに行えます。

Modern
series
モダンシリーズ

カワムラサイクルは1995年に
短納期で様々な方にフィット
その想いで生まれた車いす
およそ四半世紀の月日が
モダンシリーズは今の時代
今だからできるモダン〈現代

神戸で誕生しました。

した車いすをお届けしたい、
は今もたくさんの方々に寄り添い使われています。

流れ、車いすのニーズも多様化しています。

だからこそ考えられるやさしさ、使いやすさを当初の変わらぬ思いに重ね、
風)な車いすとしてデビューしました。

動画をチェック



選べる脚部仕様 B C

スイング
イン・アウト
脚部の開・閉が
できます。

エレベーター
ティング
脚部角度が調整
できます。

高さ調節式アームサポート C

高さ調節式

肘掛けの段階的な調節ができます。


サユレン
-SAYUREN-



KMD-A22-40-M/SR
サユレン仕様
シートNo.19

KMD-B22-40-M/SR
サユレン仕様
シートA10

KMD-C22-40-M/SR
サユレン仕様
シートNo.82

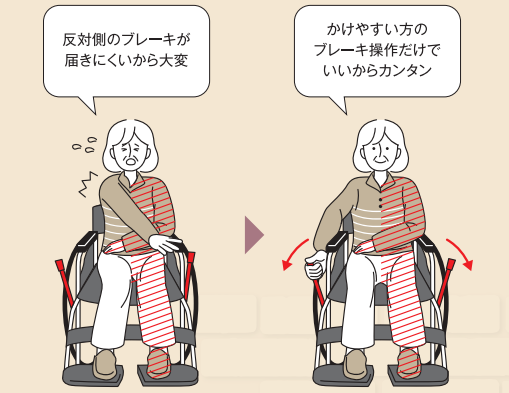

足踏みブレーキ

足踏みブレーキを踏むだけで
両輪ロック/解除が可能。

腰をかかめなくてもロック/
解除ができるので介助負担
を軽減します。

左用/右用 駐車用ブレーキ

操作力が変わらず
両輪をロック/解除が可能。

伸縮式駐車用ブレーキを
延長することで軽い力で
操作ができます。片側で
両側の駐車用ブレーキを
作動できるためスペース
がないところでもご利用
いただけます。


※足踏みブレーキ部は右側取付のみとなります。

カラーバリエーション

※座幅45cmは「No.19黒」のみ



シリーズチャート

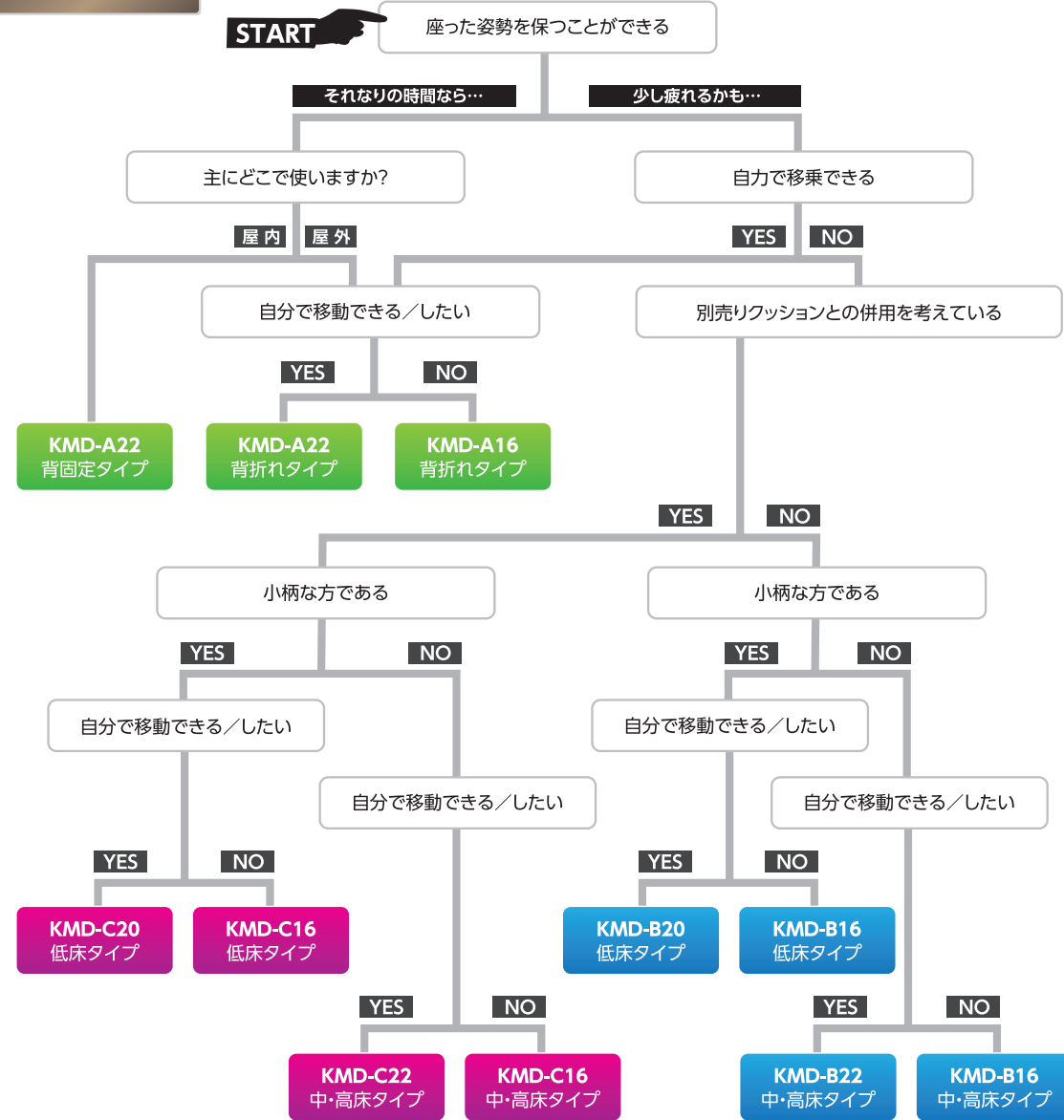

品番の見方

①スタイル ③シート幅

KMD-B 22-40-EL-M

②後輪サイズ ④脚部仕様 ⑤座面高さ

①スタイル

A・B・C-style

②後輪サイズ

22・20・16インチ

※車種により異なります。

③シート幅

38・40・42・45cm

※A-styleは40・42cmのみ。

④脚部仕様

記載なし：スイングイン・アウト脚部
EL：エレベータリング脚部

※A-styleは固定式脚部。

⑤座面高さ

36・38・40・43・45・47cm
[SSL] [SL] [LO] [M] [H] [SH]

低床 中床 高床

※A-styleは固定式脚部。




外出が多い方におすすめの標準タイプ。

車輪
22
インチ

キャスタ
6インチ

自走用
(介助兼用)

KMD-A22-40S-SH
シート：No.82

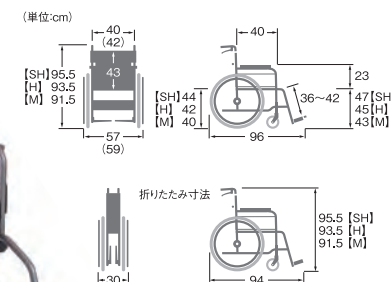

参考価格 98,000円 (非課税)

KMD-A22-40 (42) S-M (H/SH)

TAIS : 00160-000286

中・高床 13.5kg

トリプルセット

参考価格 135,000円 (非課税)


KMD-A22-40 (42) S-M (H/SH) -TS

車輪
22
インチ

キャスタ
6インチ

自走用
(介助兼用)

KMD-A22-40-M
シート：A10

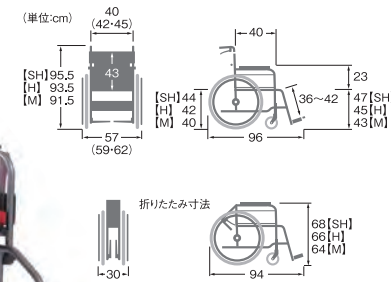

参考価格 98,000円 (非課税)

KMD-A22-40 (42) -M (H/SH)

TAIS : 00160-000286

中・高床 13.8kg

KMD-A22-45-M (H/SH)

TAIS : 00160-000303

中・高床 13.8kg

参考価格 131,000円 (非課税) ●サユレン仕様

KMD-A22-40 (42・45) -M (H/SH) /SR

TAIS : 00160-000311

中・高床 14.6kg

トリプルセット

参考価格 135,000円 (非課税)


KMD-A22-40 (42・45) -M (H/SH) -TS

車輪
16
インチ

キャスタ
6インチ

介助用

KMD-A16-40-M
シート：No.68

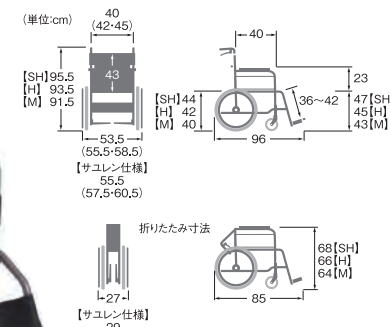

参考価格 98,000円 (非課税)

KMD-A16-40 (42) -M (H/SH)

TAIS : 00160-000287

中・高床 13.0kg

KMD-A16-45-M (H/SH)

TAIS : 00160-000304

中・高床 13.0kg

参考価格 131,000円 (非課税) ●サユレン仕様

KMD-A16-40 (42・45) -M (H/SH) /SR

TAIS : 00160-000312










中・高床 13.9kg

トリプルセット

参考価格 135,000円 (非課税)

KMD-A16-40 (42・45) -M (H/SH) -TS

※ 寸法図の各寸法にはシート・クッション等の厚みは含まれておりません。
※ トリプルセットの詳細は裏面をご参照ください。

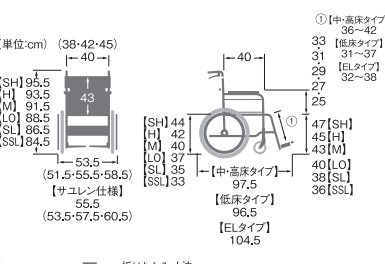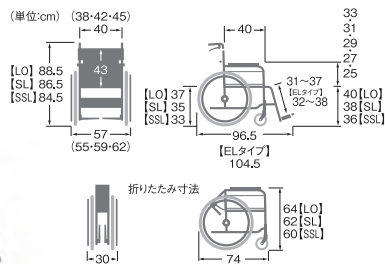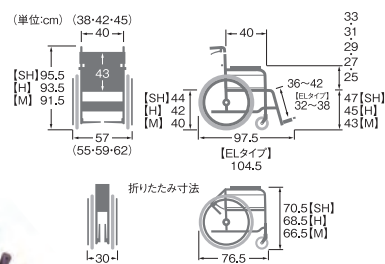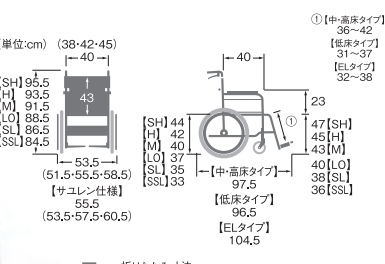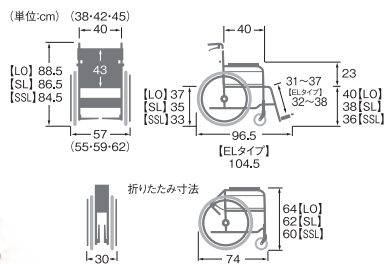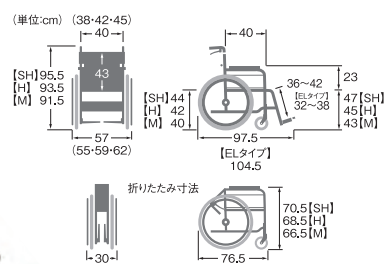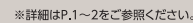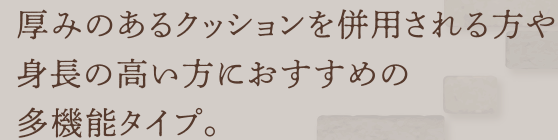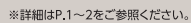

カワムラサイクル Modern Serie

カワムラサイクル Modern Series

6