

寸法比較 (cm)																			
シリーズ	品番	キヤスタ (インチ)	車輪 (インチ)	シート 幅	前 座 高	後 座 高	バック シート 間隔	アーム サポート 高	シート 奥行	バック サポート 高	全 幅	全 高	全 長	折り たた み時 全幅	折り たた み時 全高	折り たた み時 全長	重 量 (kg)	 SG マーク ※ SGマーク は、SG マーク の 使用 者 最大 体重 (kg)を 示す マーク です。	掲 載 ペ ー ジ
WAVITRoo	WAR22-40(42)-M(H/SH)	6	22	40(42)	43(45/47)	38(40/42)	36~42	24	40	45.5	57(59)	88.5(90.5/92.5)	99	35 × 66(68/70)	× 92	13.3	●	1・2・3・4・5・6	●
	WAR22-45-M(H/SH)	6	22	45	43(45/47)	38(40/42)	36~42	24	40	45.5	62	88.5(90.5/92.5)	99	35 × 66(68/70)	× 92	13.7	●		
	WAR16-40(42)-M(H/SH)	6	16	40(42)	43(45/47)	38(40/42)	36~42	24	40	45.5	53(55)	88.5(90.5/92.5)	99	31 × 66(68/70)	× 85.5	12.7	●		
	WAR16-45-M(H/SH)	6	16	45	43(45/47)	38(40/42)	36~42	24	40	45.5	58	88.5(90.5/92.5)	99	31 × 66(68/70)	× 85.5	13.1	●		
WAVITRoo+	WARP22-40(42)-M(H/SH)	6	22	40(42)	43(45/47)	38(40/42)	36~42	24	40	45.5	57(59)	88.5(90.5/92.5)	99	35 × 66(68/70)	× 75	14.8	●	●	7・8
	WARP22-45-M(H/SH)	6	22	45	43(45/47)	38(40/42)	36~42	24	40	45.5	62	88.5(90.5/92.5)	99	35 × 66(68/70)	× 75	15.2	●		
	WARP16-40(42)-M(H/SH)	6	16	40(42)	43(45/47)	38(40/42)	36~42	24	40	45.5	53(55)	88.5(90.5/92.5)	99	31 × 66(68/70)	× 68	14.2	●		
	WARP16-45-M(H/SH)	6	16	45	43(45/47)	38(40/42)	36~42	24	40	45.5	58	88.5(90.5/92.5)	99	31 × 66(68/70)	× 68	14.6	●		
WAVIT	WA22-40(42)S/A	6	22	40(42)	44.5	41	36-38-40	23	40	45.5	56(58)	89	99	33 × 67	× 95	12.2/11.8	●	●	9・10・11・12
	WA16-40(42)S/A	6	16	40(42)	44.5	41	36-38-40	23	40	45.5	52(54)	89	99	30 × 67	× 87	10.9/10.6	●		
WAVIT+	WAP22-40(42)S/A	6	22	40(42)	44.5	41	36~	23	40	45.5	58.5(60.5)	89	99	34 × 67.5	× 71	14.2/13.9	●	●	
	WAP16-40(42)S/A	6	16	40(42)	44.5	41	36~	23	40	45.5	53.5(55.5)	89	99	30 × 67.5	× 62.5	12.8/12.5	●		
Modern A-style	KMD-A22-40(42)S-M(H/SH)	6	22	40(42)	43(45/47)	40(42/44)	36~42	23	40	43	57(59)	91.5(93.5/95.5)	96	30 × 91.5(93.5/95.5)	× 94	13.5	●	●	
	KMD-A22-40(42・45)-M(H/SH)	6	22	40(42・45)	43(45/47)	40(42/44)	36~42	23	40	43	57(59・62)	91.5(93.5/95.5)	96	30 × 64(66/68)	× 94	13.8	●		
	KMD-A16-40(42・45)-M(H/SH)	6	16	40(42・45)	43(45/47)	40(42/44)	36~42	23	40	43	53.5(55.5・58.5)	91.5(93.5/95.5)	96	27 × 64(66/68)	× 85	13	●		
Modern B-style	KMD-B22-40(38・42)-M(H/SH)	6	22	40(38・42)	43(45/47)	40(42/44)	36~42	23	40	43	57(55・59)	91.5(93.5/95.5)	97.5	30 × 66.5(68.5/70.5)	× 76.5	15.6	●	●	
	KMD-B22-45-M(H/SH)	6	22	45	43(45/47)	40(42/44)	36~42	23	40	43	62	91.5(93.5/95.5)	97.5	30 × 66.5(68.5/70.5)	× 76.5	15.6	●		
	KMD-B20-40(38・42)-LO(SL/SSL)	6	20	40(38・42)	40(38/36)	37(35/33)	31~37	23	40	43	57(55・59)	88.5(86.5/84.5)	96.5	30 × 64(62/60)	× 74	15.4	●		
	KMD-B20-45-LO(SL/SSL)	6	20	45	40(38/36)	37(35/33)	31~37	23	40	43	62	88.5(86.5/84.5)	96.5	30 × 64(62/60)	× 74	15.4	●		
	KMD-B16-40(38・42)-M(H/SH)	6	16	40(38・42)	43(45/47)	40(42/44)	36~42	23	40	43	53.5(51.5・55.5)	91.5(93.5/95.5)	97.5	27 × 66.5(68.5/70.5)	× 67.5	14.4	●		
	KMD-B16-45-M(H/SH)	6	16	45	43(45/47)	40(42/44)	36~42	23	40	43	58.5	91.5(93.5/95.5)	97.5	27 × 66.5(68.5/70.5)	× 67.5	14.4	●		
	KMD-B16-40(38・42)-LO(SL/SSL)	6	16	40(38・42)	40(38/36)	37(35/33)	31~37	23	40	43	53.5(51.5・55.5)	88.5(86.5/84.5)	96.5	27 × 63(61/59)	× 67.5	14.4	●		
	KMD-B16-45-LO(SL/SSL)	6	16	45	40(38/36)	37(35/33)	31~37	23	40	43	58.5	88.5(86.5/84.5)	96.5	27 × 63(61/59)	× 67.5	14.4	●		
Modern C-style	KMD-C22-40(38・42)-M(H/SH)	6	22	40(38・42)	43(45/47)	40(42/44)	36~42	25・27・29・31・33	40	43	57(55・59)	91.5(93.5/95.5)	97.5	30 × 66.5(68.5/70.5)	× 76.5	16.5	●	●	
	KMD-C22-45-M(H/SH)	6	22	45	43(45/47)	40(42/44)	36~42	25・27・29・31・33	40	43	62	91.5(93.5/95.5)	97.5	30 × 66.5(68.5/70.5)	× 76.5	16.5	●		
	KMD-C20-40(38・42)-LO(SL/SSL)	6	20	40(38・42)	40(38/36)	37(35/33)	31~37	25・27・29・31・33	40	43	57(55・59)	88.5(86.5/84.5)	96.5	30 × 64(62/60)	× 74	16.3	●		
	KMD-C20-45-LO(SL/SSL)	6	20	45	40(38/36)	37(35/33)	31~37	25・27・29・31・33	40	43	62	88.5(86.5/84.5)	96.5	30 × 64(62/60)	× 74	16.3	●		
	KMD-C16-40(38・42)-M(H/SH)	6	16	40(38・42)	43(45/47)	40(42/44)	36~42	25・27・29・31・33	40	43	53.5(51.5・55.5)	91.5(93.5/95.5)	97.5	27 × 66.5(68.5/70.5)	× 67.5	15.3	●		
	KMD-C16-45-M(H/SH)	6	16	45	43(45/47)	40(42/44)	36~42	25・27・29・31・33	40	43	58.5	91.5(93.5/95.5)	97.5	27 × 66.5(68.5/70.5)	× 67.5	15.3	●		
	KMD-C16-40(38・42)-LO(SL/SSL)	6	16	40(38・42)	40(38/36)	37(35/33)	31~37	25・27・29・31・33	40	43	53.5(51.5・55.5)	88.5(86.5/84.5)	96.5	27 × 63(61/59)	× 67.5	15.3	●		
	KMD-C16-45-LO(SL/SSL)	6	16	45	40(38/36)	37(35/33)	31~37	25・27・29・31・33	40	43	58.5	88.5(86.5/84.5)	96.5	27 × 63(61/59)	× 67.5	15.3	●		
ふわりす	KF22-40(42)SB	6	22	40(42)	43	40.5	32・34・36	24	40	40	59.5(61.5)	89	95	33 × 66	× 93	9.6	●	●	13・14
	KF16-40(42)SB	6	16	40(42)	43	40.5	32・34・36	24	40	40	55(57)	89	94	28 × 66	× 84	8.9	●		
ふわりす+	KFP22-40(42)SB	6	22	40(42)	43	40.5	32・34・36	24	40	40	59.5(61.5)	89	95	33 × 66	× 71.5	10.9	●	●	
	KFP16-40(42)SB	6	16	40(42)	43	40.5	32・34・36	24	40	40	55(57)	89	94	28 × 66	× 62.5	9.9	●		



①マークのある寸法は、ご注文の際ご指定ください。 ※シート幅は、座った状態でのお尻の幅にプラス3〜5cm、介助者の手が入る程度が目安です。



カワムラサイクル

- 本社〒651-2411 兵庫県神戸市西区上新地3丁目9番1
TEL: 078-969-2800 FAX: 078-969-2811
- 東京サービスセンター〒110-0013 東京都台東区入谷1丁目8番3
TEL: 03-3874-3511 FAX: 03-3874-3514
- 名古屋サービスセンター〒487-0027 愛知県春日井市松本町1丁目3番11
TEL: 0568-52-4800 FAX: 0568-52-4802
- 本店サービスセンター〒651-2411 兵庫県神戸市西区上新地3丁目9番1
TEL: 078-969-2800 FAX: 078-969-2822
- 福岡サービスセンター〒819-0055 福岡県福岡市西区生の松原1丁目18番3
TEL: 092-882-4722 FAX: 092-882-4723

代理店

カワムラサイクル
おすすめラインナップ

Show Case

Vol.2

一日中乗っていたくなる

NEW WAVITRoo/WAVITRoo+ series

やっぱりデザインにもこだわりたい

WAVIT/WAVIT+ series

私はModern styleでいく

Modern series

ふわりと軽い車いす

ふわりす/ふわりす+ series



動画をチェック

なんだかよくわからないけど座るとフィットする
不思議な車いす、そんな車いすを目指しました。
はじめて使うのに、あれ？使い方がわかる？！と
驚く顔をして頂ければ、
カワムラサイクルはニヤニヤしてしまいます。



新しい座り心地
独自のシーティングシステム
LAVICサポート

腰上から
膝裏までのラインを
サポート



Lumbar support

ランバーサポート

Anchor support

アンカーサポート

Pelvic support

ペルビックサポート

LAVIC support
ラビックサポート


無理のないラクな姿勢で座位を保つことができます。



ランバーサポート

Lumbar support

背中のS字ラインが再現されやすくなり、
胸を張った姿勢へ誘導します。

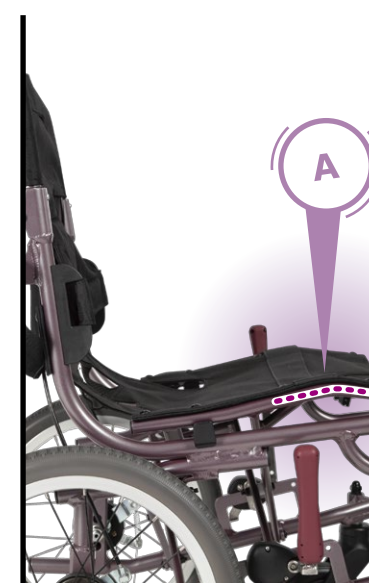

アンカーサポート

Anchor support

前ズレを抑制します。



ペルビックサポート

Pelvic support

骨盤を起こし、上体の荷重を効率的に
支えます。

座り心地を長持ちさせる#3つのポイント

#01
ブリッジ
Bridge
ルー
つつばRoo



フレーム背面に“ブリッジ”という名の連結材を取り付けました。車いすを拡げるだけで自動でブリッジが作動します。(特許出願中)




▼座ると…



シートがたわんで乗り心地や駆動性に影響がでることも…。




▼座ると…

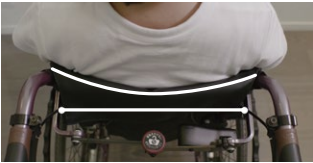

ブリッジがつつばってくれるので座り心地がキープされGood!



前荷重をかけにくい。

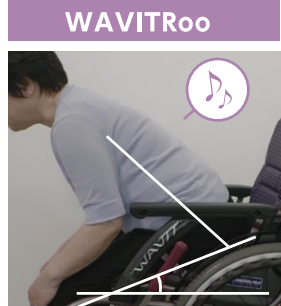

フレームの前端を下げているため荷重姿勢を取りやすい。



#02
スタンダップ
Stand up
ルー
立ち上げRoo

前方と後方で異なる座面角度により立ち上げに弾みがつきやすくなりました。

#03
トータルコンタクト
Total contact
ルー
トータルコンタクトすRoo

背ベースシートのトップと座ベースシートの前端に伸縮生地をレイアウトしました。



背 駆動時は肩甲骨への圧迫を弱める効果があり、リラックス姿勢の時はハイバックサポートとして機能します。

座 フットサポートに脚をのせた際にシートと膝裏が干渉する違和感を緩和します。


□ 部分は伸縮性生地を使用しています。



背・座の圧力を比較してみよう※自社調べ




バックサポート

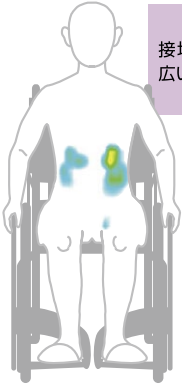

接地面積が広い。


シート

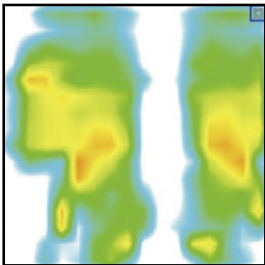

身体のラインに沿っているため体圧分散されている。




バックサポート

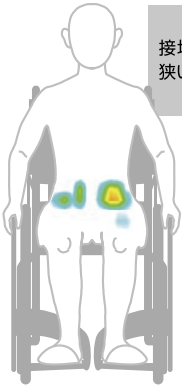

接地面積が狭い。

シート

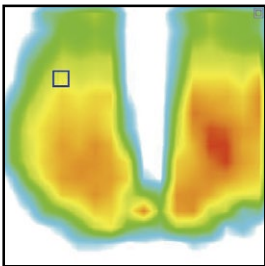

圧が集中してかかっている。



パチート調節機能 (特許出願中)

工具レスで簡単にフットプレート高さを変更できます。0.5cmピッチ×13段階




パチパチと音が鳴り
しっかり止まる！



伸縮式駐車用ブレーキ

駐車ブレーキレバーを引っ張ると、長さが10cm延長され、軽い力で操作できます。

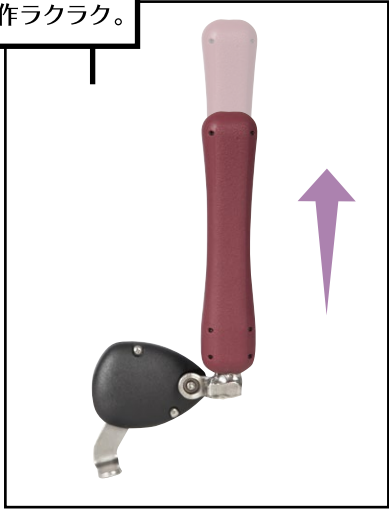

軽い力で操作ラクラク。

ウェイビットルー

WAVITRoo (WAR)

参考価格 145,000円(非課税)

剛性が高く、曲線美が印象的なフレームデザイン。
座り心地にもデザインにもこだわりたい方におすすめです。

ウェイビットループラス

WAVITRoo+ (WARP)

参考価格 168,000円(非課税)

介助者だけでなく、利用者ご自身でも操作しやすいように操作
レバーを大きくしました。移乗動作の多い方におすすめです。

車輪
22
インチ

キャスタ
6インチ

WAR22-40(42・45)-M(H/SH)

TAIS:00160-000307

固定式脚部仕様

Point



外の空気を
吸いに行こう。

リバーシブルのシートなので車
いすに乗る前に今日の服装と
コーディネートしてみるのもお
すすめです。スタイリッシュに
ダーク系?お天気がいいから
パープル系?お気に入りのシート
カラーにして、レッツゴー!

車輪
16
インチ

キャスタ
6インチ

WAR16-40(42・45)-M(H/SH)

TAIS:00160-000308

固定式脚部仕様



車輪
22
インチ

キャスタ
6インチ

WARP22-40(42・45)-M(H/SH)

TAIS:00160-000309

スイングイン・アウト式脚部仕様



車輪
16
インチ

キャスタ
6インチ

WARP16-40(42・45)-M(H/SH)

TAIS:00160-000310

スイングイン・アウト式脚部仕様

Point



胸中成竹
(きょうちゅうせいちく)

もし人に手伝ってもらわなくても
移乗ができれば、どこに移乗した
いですか?リラックスできるベッド?
みんなと食卓を囲うダイニング
チェア?それとお気に入りの
ソファ?もし出来たら...をイメージ
して“出来なかった”が“出来る”に
なればいつもの景色がまた違った
見え方になるかもしれません。

リバーシブルシート

2タイプよりお選びいただけます。ご注文の際、ご指定ください。



WAVITRoo+専用機能

跳ね上げ式 アームサポート

後方に跳ね上げ、肘掛け部分
をオープンにできます。
ベッドサイドなどからの移乗
がスムーズです。

握りやすい
レバー形状&
簡単操作。



スイングイン・アウト式 フットサポート

脚部を開くことができます。
着脱もでき、移乗時の足回り
スペースを確保しやすくなり
ます。

握りやすい
レバー形状&
簡単操作。



WAVIT (WA) / WAVIT+ (WAP) シリーズ

曲線フレームによる乗り心地。曲線フレームだからコンパクト。



動画をチェック

WAVITの特長

独自の曲線フレーム

3つの曲線フレームが身体のラインにフィット。長時間乗っていても疲れにくい設計です。



■前ズレを抑制するフレーム形状①②③

身体のカーブに沿ったフレーム形状により、クッションを敷いたり張り調整をしなくても乗り心地良好です。

WAVITフレーム



従来の標準車いすフレーム



コンパクトでワイド


従来のシート幅を確保しつつ車輪の張り出しを抑え、全幅をスリム化。操作性と旋回性の向上を図りました。

■駆動しやすい(自走のみ)

車輪の張り出しを抑えハンドリムを身体に近づけました。

■ワイドレッグフレーム

標準フレームより3cmレッグフレームを広げ、足回りのスペースを確保しました。(WAのみ)

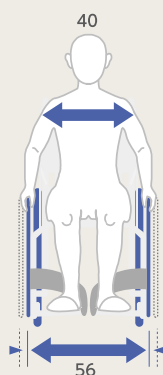

つまむから握るへ (WAPのみ)

従来の指で操作するレバーと違い、手全体を使った操作にすることで力の弱い方でも利用しやすいレバーになりました。



握りやすいレバー形状
操作部を認識しやすい様、レバーをカラーリングしました。また、指をかける箇所には凹凸をつけて握りやすい設計としました。

スイングイン・アウト式フット・レッグサポート (着脱可能)
移乗先に少しでも車いすを近づけるため、足回りのフレームを回転させたり取り外しが可能です。



スイングイン機構



スイングアウト機構

ご注文の際
ご指定ください。

2
color


●シートカラー 2色 より
お選びいただけます。

A13



濃紺チェック
(ポリエステル)

No.95

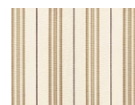

カフェモカ
(ポリエステル)

WAVITシリーズ

スリム&シンプルな標準モデル



（付属品）
空気入れ
エアタイヤ（軽量）
仕様のみ

車輪
22
インチ

キャスト
6インチ

シート：No.95

参考価格 135,000円 (非課税)

WA22-40(42)S

TAIS : 00160-000237

中床

ソフトタイヤ（軽量）仕様／固定式脚部仕様

WA22-40(42)A

TAIS : 00160-000237

中床

エアタイヤ（軽量）仕様／固定式脚部仕様



車輪
16
インチ

キャスト
6インチ

シート：A13

参考価格 135,000円 (非課税)

WA16-40(42)S

TAIS : 00160-000238

中床

ソフトタイヤ（軽量）仕様／固定式脚部仕様

WA16-40(42)A

TAIS : 00160-000238

中床

エアタイヤ（軽量）仕様／固定式脚部仕様



※1 車輪16
インチのみ。

※2 選択していただけます。

WAVIT+シリーズ

介助者も操作しやすい多機能モデル



（付属品）
空気入れ
エアタイヤ（軽量）
仕様のみ

車輪
22
インチ

キャスト
6インチ

シート：A13

参考価格 158,000円 (非課税)

WAP22-40(42)S

TAIS : 00160-000242

中床

ソフトタイヤ（軽量）仕様／スイングイン・アウト式脚部仕様

WAP22-40(42)A

TAIS : 00160-000242

中床

エアタイヤ（軽量）仕様／スイングイン・アウト式脚部仕様



車輪
16
インチ

キャスト
6インチ

シート：No.95

参考価格 158,000円 (非課税)

WAP16-40(42)S

TAIS : 00160-000243

中床

ソフトタイヤ（軽量）仕様／スイングイン・アウト式脚部仕様

WAP16-40(42)A

TAIS : 00160-000243

中床

エアタイヤ（軽量）仕様／スイングイン・アウト式脚部仕様



※1 車輪16
インチのみ。

※2 選択していただけます。

A-style
標準タイプ

B-style
多機能タイプ

C-style
多機能タイプ
プラス

START

座った姿勢を保つことができる

それなりの時間なら…

少し疲れるかも…

主にどこで使いますか?

屋内 屋外

自力で移乗できる

YES

NO

自分で移動できる/したい

YES

NO

KMD-A22
固定タイプ

KMD-A22
背折れタイプ

KMD-A16
背折れタイプ

別売りクッションとの併用を考えている

YES

NO

小柄な方である

YES

NO

自分で移動できる/したい

YES

NO

KMD-C20
低床タイプ

KMD-C16
低床タイプ

自分で移動できる/したい

YES

NO

KMD-C22
中床タイプ

KMD-C16
中床タイプ

小柄な方である

YES

NO

自分で移動できる/したい

YES

NO

KMD-B20
低床タイプ

KMD-B16
低床タイプ

自分で移動できる/したい

YES

NO

KMD-B22
中床タイプ

KMD-B16
中床タイプ

1.伸縮式駐車用ブレーキ

駐車ブレーキレバーを引く張ると、長さが10cm延長され、軽い力で操作できます。

軽い力で
操作ラクラク。

2.パチート調節機能 (特許出願中)

工具レスで簡単にフットプレート高さを変更できます。

パチパチと音が鳴り
しっかり止まる!

3.座クッション

3cm厚のクッションが標準装備です。

4.大きな背ポケット

A4クリアファイルがすっぽり入る大きさです。

5.適合調整シート

背中形状に合わせて、横方向の張り調整ができます。背部への圧迫の軽減を図ります。

6.跳ね上げ式アームサポート

後方に跳ね上げ、肘掛け部分をオープンにできます。ベッドサイドなどからの移乗がスムーズに行えます。

カラーバリエーション

- No.82 チャコールグレー (ポリエステル)
- No.83 ライトブルー (ポリエステル)
- No.85 若葉色 (ポリエステル)
- A9 緑チェック (ポリエステル)
- A10 赤チェック (ポリエステル)
- A11 紫チェック (ポリエステル)
- No.88 エコブラック (ビニールレザー)
- No.68 黒メッシュ (ポリエステル)
- No.19 黒 (ポリエステル)

※座幅45cmは「No.19黒」のみ

	A-style 標準タイプ	B-style 多機能タイプ	C-style 多機能タイプ プラス
1.伸縮式 駐車用ブレーキ	●	●	●
2.パチート 調節機能	●	●	●
3.座クッション	●	●	●
4.大きな 背ポケット	●	●	●
5.適合調整 シート	—	●	●
6.跳ね上げ式 アームサポート	—	●	●
7.選べる 脚部仕様	—	●	●
8.高さ調節式 アームサポート	—	—	●



8.高さ調節式アームサポート

肘掛けの段階的な調節ができます。



A-style
標準タイプ

外出が多い方におすすめの標準タイプ。



シート: No.82

中・高床 参考価格 98,000円(非課税)

KMD-A22-40(42)S-M(H/SH) TAIS : 00160-000286

固定式脚部仕様



シート: No.68

中・高床 参考価格 98,000円(非課税)

KMD-A22-40(42)-M(H/SH) TAIS : 00160-000286

KMD-A22-45-M(H/SH) TAIS : 00160-000303

固定式脚部仕様



シート: A10

中・高床 参考価格 98,000円(非課税)

KMD-A16-40(42)-M(H/SH) TAIS : 00160-000287

KMD-A16-45-M(H/SH) TAIS : 00160-000304

固定式脚部仕様

B-style
多機能タイプ

移乗回数の多い方におすすめの多機能タイプ。



シート: No.83

中・高床 参考価格 118,000円(非課税)

KMD-B22-40(38・42)-M(H/SH) TAIS : 00160-000288

KMD-B22-45-M(H/SH) TAIS : 00160-000288

スイングイン・アウト式脚部仕様



シート: No.88

低床 参考価格 118,000円(非課税)

KMD-B20-40(38・42)-LO(SL/SSL) TAIS : 00160-000288

KMD-B20-45-LO(SL/SSL) TAIS : 00160-000288

スイングイン・アウト式脚部仕様



シート: A11

中・高床 参考価格 118,000円(非課税)

KMD-B16-40(38・42)S-M(H/SH) TAIS : 00160-000290

KMD-B16-45-M(H/SH) TAIS : 00160-000290

スイングイン・アウト式脚部仕様

C-style
多機能タイプ
プラス

厚みのあるクッションを併用される方や身長の高い方におすすめの多機能タイプ。



シート: No.85

中・高床 参考価格 138,000円(非課税)

KMD-C22-40(38・42)-M(H/SH) TAIS : 00160-000292

KMD-C22-45-M(H/SH) TAIS : 00160-000292

スイングイン・アウト式脚部仕様



シート: No.19

低床 参考価格 138,000円(非課税)

KMD-C20-40(38・42)-LO(SL/SSL) TAIS : 00160-000292

KMD-C20-45-LO(SL/SSL) TAIS : 00160-000292

スイングイン・アウト式脚部仕様



シート: A9

中・高床 参考価格 138,000円(非課税)

KMD-C16-40(38・42)-M(H/SH) TAIS : 00160-000294

KMD-C16-45-M(H/SH) TAIS : 00160-000294

スイングイン・アウト式脚部仕様

Modern
series
モダンシリーズ



動画をチェック

A-style
標準タイプ



B-style
多機能タイプ



C-style
多機能タイプ
プラス



B-styleとC-styleにはスイングイン・アウト式脚部仕様、エレベータリング式脚部仕様のいずれかを選択できます。詳しくはお問い合わせください。



低床 参考価格 118,000円(非課税)

KMD-B16-40(38・42)-LO(SL/SSL) TAIS : 00160-000290

KMD-B16-45-LO(SL/SSL) TAIS : 00160-000290

スイングイン・アウト式脚部仕様



低床 参考価格 138,000円(非課税)

KMD-C16-40(38・42)-LO(SL/SSL) TAIS : 00160-000294

KMD-C16-45-LO(SL/SSL) TAIS : 00160-000294

スイングイン・アウト式脚部仕様

ふわりす (KF) / ふわりす+ (KFP) シリーズ

ふわりと軽い車いす



動画をチェック

ふわりすシリーズの特長

とにかく軽い

カワムラサイクル史上最軽量

軽いの持ち運びやすく、取り回しもラクラク

女性や力の弱い方に
おすすめです



操作部はここです (KFP)

操作部を認識しやすい様、レバーをカラーリングしました。

指をかけやすいようにサイドガードの形状にも工夫し、
利用者ご自身も介助者も使いやすいレバーにしました。

握りやすい



標準車感覚で使える

① 跳ね上げ式アームサポート

後方に跳ね上げ、肘掛け部分をオープンにできます。ベッドサイドなどからの移乗がスムーズに行えます。(KFPのみ)



② こぎやすいバックサポート角

シートが背中に沿いやすく、駆動の際も腕に干渉しにくい設計です。



③ 長めのアームサポート

プッシュアップしやすい位置までアームサポートの長さを確保しています。



④ スイングアウト式 フット・レッグサポート

脚部を開くことができます。着脱もできるので移乗などに便利です。(KFPのみ)



⑤ ヒールループ標準装備

かかとへのずれ落ちを防ぎます。



⑥ フットサポート・シート間 距離調節 (2cmピッチ)

3段階で調節できます。



Check

No.96	No.97	No.105	No.106
さんごピンク (ポリエステル)	すみれパープル (ポリエステル)	アイスグリーン (ポリエステル)	あんずイエロー (ポリエステル)

ご注文の際
ご指定
ください。

4 color ●シート幅 40cmのKFシリーズは、
シートカラー 4色 よりお選びいただけます。

2 color ●KFPシリーズ、シート幅 42cmのKFシリーズは、
No.96さんごピンク、No.97すみれパープルの 2色 のみとなります。

ふわりすシリーズ

こんなに軽いの! ? 標準モデル

軽量
9.6kg



シート: No.105



空気入れ

車輪
22
インチ

キャスト
6インチ

参考価格 120,000円 (非課税)

KF22-40(42)SB

TAIS : 00160-000241 中床

固定式脚部仕様

軽量
8.9kg



シート: No.106

車輪
16
インチ

キャスト
6インチ

参考価格 120,000円 (非課税)

KF16-40(42)SB

TAIS : 00160-000240 中床

固定式脚部仕様



※車輪16
インチのみ。

背折れ式

面ファスナー
式

エア
(軽量)

バンド式

ふわりす+シリーズ

これも軽いの! ? 多機能モデル

軽量
10.9kg



シート: No.97



空気入れ

車輪
22
インチ

キャスト
6インチ

参考価格 140,000円 (非課税)

KFP22-40(42)SB

TAIS : 00160-000249 中床

スイングアウト式脚部仕様

軽量
9.9kg



シート: No.96

車輪
16
インチ

キャスト
6インチ

参考価格 140,000円 (非課税)

KFP16-40(42)SB

TAIS : 00160-000248 中床

スイングアウト式脚部仕様



※車輪16
インチのみ。

背折れ式

面ファスナー
式

跳ね上げ式

スイング
アウト式

エア
(軽量)

バンド式