



酸素ボンベ架台 <2WAY用>

2サイズの酸素ボンベに
1台で対応できます。
(工具レスの簡単切り替え)

標準品

<中床用>(ティッピング高さ約13~19cm)

<低床用>(ティッピング高さ約7~12cm)

<参考価格> 取付価格 ¥23,100 増/個 **非課税**

部品価格 ¥24,200 /個 **税込**

その他専用品 ※左側仕様

- KA800シリーズ
- WAR16-H※
- RR42/RR43
- WARP22-H/SH※
- RR52/RR53,KPF
- WARP16-H※


<参考価格> 取付価格 ¥28,600 増/個 **非課税**

部品価格 ¥30,250 /個 **税込**

装着例

※ティッピング高さとは、
ティッピングバーの上面
から地面までの鉛直方向
の距離をさします。

ティッピング高さ ↑

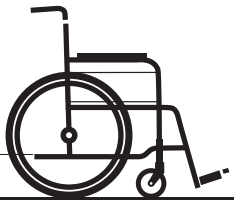

2サイズの酸素ボンベに1台で対応できます



工具レス

酸素ボンベ架台

φ100mm以下用
φ140mm以下用



φ100mm以下用に
簡単切り替え

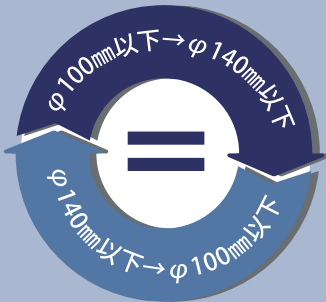
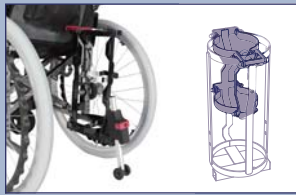


φ140mm以下用に
簡単切り替え




転倒防止付きだから安心

転倒防止付

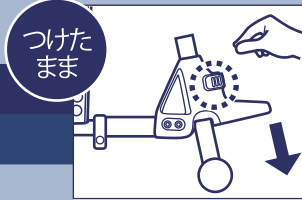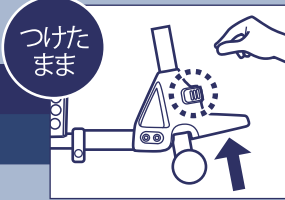

ご利用のシーンに合わせて
使用状態と解除状態を切り
替えることができます。

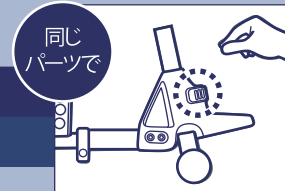

座面高さに合わせて転倒防止の高さを
調節する。※調節範囲内に限る

カワムラサイクル製品の多くに取付可能

■<中床用>

標準車いす

SY-SH
KA(J)シリーズ
BM-M
KM-M
KR801N・501
KMD-Aシリーズ
KVシリーズ



モジュール車いす

KA800-H・M(専用品)
KA822-LO(専用品)
KA820-LO(専用品)
KZ-LO
KZM-43・45
AYO-40・43・45・47・49・51
KMD-B/C-M・H・SH



リクライニング車いす

RR52/53シリーズ(専用品)



軽量車いす

KFシリーズ
KFPシリーズ
KA800L-M



■<低床用>

標準車いす

SY(SH以外)
BM-LO・SL
KM-LO・SL



モジュール車いす

AYO-36・38・41
KA800-SL(専用品)
KA816-LO(専用品)
KZ-SL・SSL
KZM-41
KMD-B/C-LO・SL・SSL



リクライニング車いす

RR42/RR43(専用品)
KPF(専用品)



次世代型車いす


WAR16-H(専用品)
WARP22-H/SH(専用品)
WARP16-H(専用品)




酸素ポンベの外径に合わせてΦ100mm以下用とΦ140mm以下用を切り替えることができます。

[φ100mm 以下用からφ140mm 以下用への切り替え]


[φ140mm 以下用からφ100mm 以下用への切り替え]

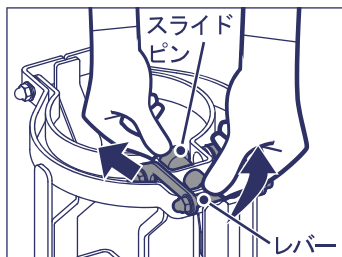


レバーを解除します。

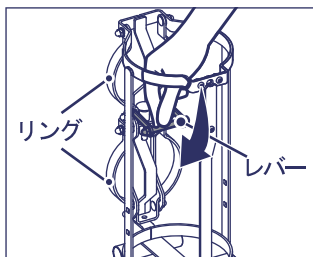

レバーを押し下げます。

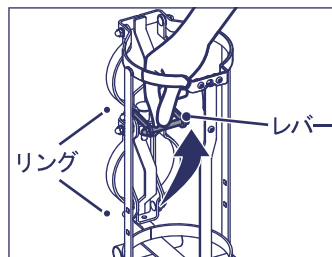

レバーを引き上げます。

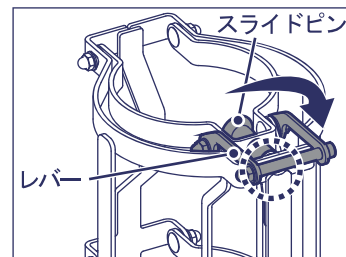

■商品写真は印刷物のため、実際の色と多少異なる場合があります。ご了承ください。

株式会社 カワムラサイクル

■本社 〒651-2411 兵庫県神戸市西区上新地3丁目9番1 TEL:078-969-2800 FAX:078-969-2811
 ■東京サービスセンター 〒110-0013 東京都台東区入谷1丁目8番3 TEL:03-3874-3511 FAX:03-3874-3514
 ■名古屋サービスセンター 〒487-0027 愛知県春日井市松本町1丁目3番11 TEL:0568-52-4800 FAX:0568-52-4802
 ■本店サービスセンター 〒651-2411 兵庫県神戸市西区上新地3丁目9番1 TEL:078-969-2800 FAX:078-969-2822
 ■福岡サービスセンター 〒819-0055 福岡県福岡市西区生の松原1丁目18番3 TEL:092-882-4722 FAX:092-882-4723
 ●車いすの修理、改造、オーダーメイド、2週間オーダー、部品、その他のご相談は上記へご連絡ください。