



カワムラサイクル

- 本社 〒651-2411 兵庫県神戸市西区上新地 3 丁目 9 番 1
TEL : 078-969-2800 FAX : 078-969-2811
- 東京サービスセンター 〒110-0013 東京都台東区入谷 1 丁目 8 番 3
TEL : 03-3874-3511 FAX : 03-3874-3514
- 名古屋サービスセンター 〒487-0027 愛知県春日井市松本町 1 丁目 3 番 11
TEL : 0568-52-4800 FAX : 0568-52-4802
- 本店サービスセンター 〒651-2411 兵庫県神戸市西区上新地 3 丁目 9 番 1
TEL : 078-969-2800 FAX : 078-969-2822
- 福岡サービスセンター 〒819-0055 福岡県福岡市西区生の松原 1 丁目 18 番 3
TEL : 092-882-4722 FAX : 092-882-4723



本誌の作成には、
1冊あたり280gの
CO₂が排出され、
その排出量はカー
ボンオフセット
(相殺)されました。

仕様および価格は、製品開発・改良のため予告なく変更されることがあります。ご了承ください。



代理店

カワムラサイクル

Modern
series
モダンシリーズ
— KOBE JAPAN —

機能一覧



動画をチェック ▶



1 伸縮式駐車用ブレーキ

駐車用ブレーキレバーを引っ張ると、長さが10cm延長され、軽い力で操作できます。



2 パチート調節機能

工具レスで簡単にフットプレート高さを変更できます。



3 座クッション

3cm厚のクッションが標準装備です。(Rich-styleは7cm厚)



4 大きな背ポケット

A4のクリアファイルがすっぽり収まる大きさです。



5 適合調整シート

背中形状に合わせて、横方向の張り調整ができます。背部への圧迫の軽減を図ります。



6 跳ね上げ式アームサポート

後方に跳ね上げ、肘掛け部分をオープンにできます。ベッドサイドなどからの移乗がスムーズに行えます。



7 高さ調節式アームサポート

肘掛けの段階的な調節ができます。



8 スイングイン・アウト式フット・レッグサポート

脚部の開・閉ができます。



9 エレベーター式フット・レッグサポート

脚部角度が調節できます。



10 足踏みブレーキ


介助者が足で操作するブレーキです。



※画像はクリックブレーキです。

	A-style 標準 タイプ	B-style 多機能 タイプ	C-style 多機能プラス タイプ	Rich-style ティルト& リクライニングタイプ
1 伸縮式 駐車用ブレーキ	●	●	●	—
2 パチート調節機能	●	●	●	●
3 座クッション	●	●	●	●
4 大きな背ポケット	●	●	●	—
5 適合調整シート	—	●	●	●
6 跳ね上げ式 アームサポート	—	●	●	—
7 高さ調節式 アームサポート	—	—	●	●
8 スイングイン・アウト式 フット・レッグサポート	—	●	●	—
9 エレベーター式 フット・レッグサポート	—	●	●	●
10 足踏みブレーキ	サユレン仕様あり	サユレン仕様あり	サユレン仕様あり	クリックブレーキ

Modern シリーズチャート

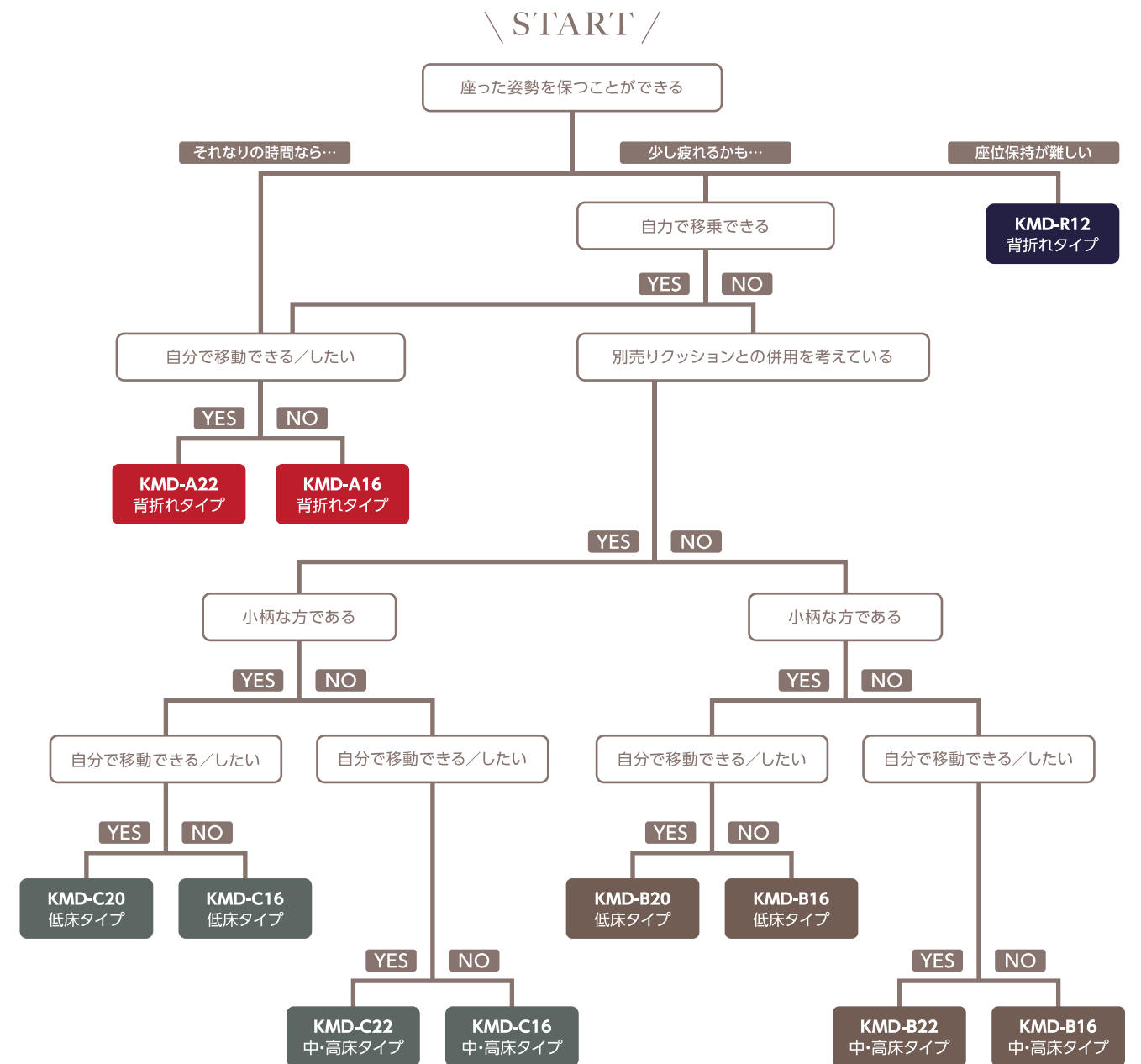

カラーバリエーション

※座幅45cmは「No.19黒」のみ ※KMD-R12は「No.82チャコールグレー」のみ



No.82
チャコールグレー
(ポリエステル)



A9
緑チェック
(ポリエステル)



No.88
エコブラック
(ビニールレザー)



No.83
ライトブルー
(ポリエステル)



A10
赤チェック
(ポリエステル)



No.68
黒メッシュ
(ポリエステル)



No.85
若葉色
(ポリエステル)



A11
紫チェック
(ポリエステル)



No.19
黒
(ポリエステル)

補装具
レディ
メイド式

Modern Rich-style

リクライニング時の背ずれを抑制した
新ティルト&リクライニング車いす。

手動車いす 100kg
使用者最大体重(積載物含む)



介助用
12^{車輪}インチ×6^{キャスタ}インチ/高床




KMD-R12
シート:No.82

参考価格 ¥300,000 非課税

NEW KMD-R12

TAIS:00160-000347

(28kg)

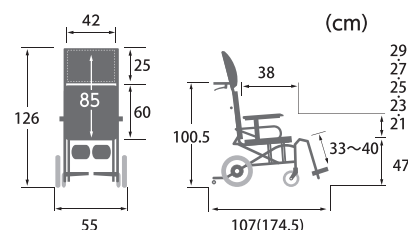

() 内、最長時寸法

*手押しハンドル高さ、全長、全高、フットサポート・シート間距離は、バックサポートを最も起こした時の寸法です。

*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

KMD-R12の特長

新ティルト&リクライニング機構

スラリク機構

バックサポートを“倒す・起こす”の動作を繰り返しても背中がズレにくく、安定した座位が保てます。



リクライニング時も身体が安定

リクライニング動作に伴い、ランバー角度も可変

国内特許申請中

足ズレ抑制のエレベーター式フット・レッグサポート

自然な足の軌道を描く新しいエレベーター式機構。しっかりと適切な状態で脚を支えることで、長時間座っていても疲れにくくなります。



リクライニング操作で発生する“背ずれ”を抑制


ティルト時

シート調整角度:5~20°
(無段階調整)



リクライニング時

バックサポート調整角度:95~145°
(無段階調整)

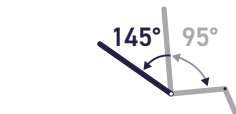

認識しやすいカラーレバー

操作部が認識しやすい様に、レバーをカラーリングしました。



パチート調節機能



折りたたみ可能



動画をチェック

クリックブレーキ

“踏んで”ブレーキ、“踏んで”解除。
リクライニング状態や前方からの操作もラクラク。



リムビーズ

背クッション裏のベルトに挟み込むだけの簡単装着。

ポケット状のベルトに装着するだけで中材のストロービーズが優しくホールド。装着する位置や方法で背クッションが立体的な形状に変化します。座っている状態でも微調整が可能。また、通気性も良く、手洗い可能。

国内特許申請中





補装具
レディ
メイド式


Modern A-style

使いやすい標準タイプ。
外出が多い方におすすめです。

国内特許取得済
手動車いす 100kg
使用者最大体重(積載物含む)



KMD-A22-40-M
シート:A10

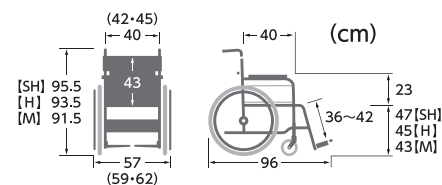

*各寸法にはシート・クッション等の厚みは含まれておりません。

自走用(介助兼用)

22^{車輪}インチ×6^{キャスト}インチ/中・高床

参考価格 ¥126,000 非課税

KMD-A22-40(42)-M(H/SH)

(13.8kg)

TAIS:00160-000286

KMD-A22-45-M(H/SH)

(13.8kg)

TAIS:00160-000303




* トリプルセット

参考価格 ¥144,000 非課税

KMD-A22-40(42・45)-M(H/SH)-TS



KMD-A16-40-M
シート:No.68

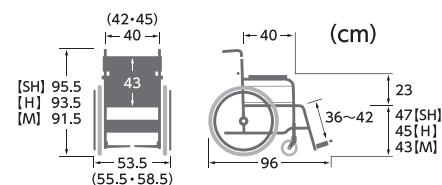

*各寸法にはシート・クッション等の厚みは含まれておりません。

介助用

16^{車輪}インチ×6^{キャスト}インチ/中・高床

参考価格 ¥126,000 非課税

KMD-A16-40(42)-M(H/SH)

(13.0kg)

TAIS:00160-000287

KMD-A16-45-M(H/SH)

(13.0kg)

TAIS:00160-000304



* トリプルセット

参考価格 ¥144,000 非課税

KMD-A16-40(42・45)-M(H/SH)-TS



* トリプルセット (-TS)

ご依頼の多いオプションを予め取り付けしたトリプルセットもご用意しています。



ガードル止め金具
(後ろ止め用)



酸素ボンベ架台
(2WAY用)



+

(φ100mm以下用/
φ140mm以下用)

※ガードル棒はセット内容に含まれません。
※酸素ボンベはセット内容に含まれません。
※右側・左側をご指定ください。(指定がなければガードル止め金具は左側、酸素ボンベ架台は右側へ取り付けとなります。)

補装具
レディ
メイド式

お客様の声

- ・シートが他の方とかぶらないように選んでいるので、“これが私の車いす”と愛着がわきます(北海道)
- ・身長の高い方が座ってもバックサポート上端までしっかり背中を支えているのがすごい(千葉)
- ・折りたたみ幅が他の車いすよりコンパクトなので介護用タクシーに積み込みやすい(埼玉)
- ・エレベーター式脚部対応の車いすは少ないので重宝しています(徳島)
- ・施設納品分でB-styleは選定されやすい。機能が豊富な割に低価格な点が他にないから(神奈川)
- ・前座高SSL(36cm)～SH(47cm)まで同シリーズで展開しているところに技術力を感じる(大阪)

国内特許取得済
手動車いす 100kg
使用者最大体重(積載物含む)



※お選びいただけます。


B-style

自走用(介助兼用)
22^{車輪}インチ×6^{キャスト}インチ/中・高床



●スイングイン・アウト式フット・レッグサポート 参考価格 **¥124,000** 非課税
KMD-B22-40(38・42・45)-M(H/SH) (15.6kg)
TAIS:00160-000288

●エレベーター式フット・レッグサポート 参考価格 **¥151,000** 非課税
KMD-B22-40(38・42・45)-EL-M(H/SH) (17.9kg)
TAIS:00160-000289

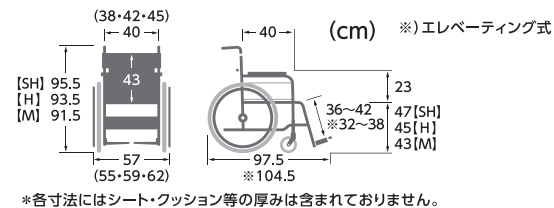


自走用(介助兼用)
22^{車輪}インチ×6^{キャスト}インチ/低床



●スイングイン・アウト式フット・レッグサポート 参考価格 **¥124,000** 非課税
KMD-B20-40(38・42・45)-LO(SL/SSL) (15.4kg)
TAIS:00160-000288

●エレベーター式フット・レッグサポート 参考価格 **¥151,000** 非課税
KMD-B20-40(38・42・45)-EL-LO(SL/SSL) (17.7kg)
TAIS:00160-000289

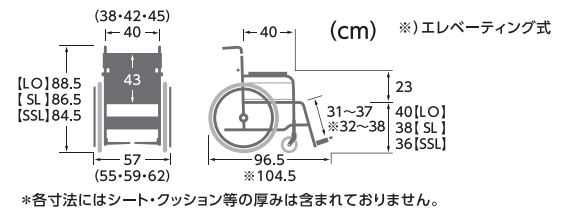


介助用
16^{車輪}インチ×6^{キャスト}インチ/中・高床



●スイングイン・アウト式フット・レッグサポート 参考価格 **¥124,000** 非課税
KMD-B16-40(38・42・45)-M(H/SH) (14.4kg)
TAIS:00160-000290

●エレベーター式フット・レッグサポート 参考価格 **¥151,000** 非課税
KMD-B16-40(38・42・45)-EL-M(H/SH) (16.7kg)
TAIS:00160-000291

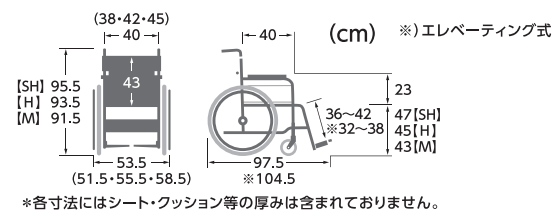


介助用
16^{車輪}インチ×6^{キャスト}インチ/低床



●スイングイン・アウト式フット・レッグサポート 参考価格 **¥124,000** 非課税
KMD-B16-40(38・42・45)-LO(SL/SSL) (14.4kg)
TAIS:00160-000290

●エレベーター式フット・レッグサポート 参考価格 **¥151,000** 非課税
KMD-B16-40(38・42・45)-EL-LO(SL/SSL) (16.7kg)
TAIS:00160-000291

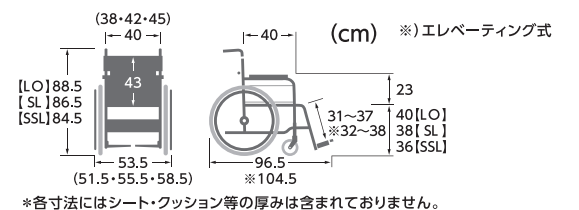



補装具
レディ
メイド式

お客様の声

- 厚み10cmもある高機能クッションがのせられるので、より座り心地が良くなる(京都)
- 座幅45cmで剛性が高いのは意外と世の中にない(千葉)
- バリエティ豊富なのでオーダー車感覚で利用者対応できます(神奈川)
- シリーズ内でスタンダードから高機能がカバーされている点が良い(群馬)
- 背張り調整が簡単なのにフィット性が高い(福岡)
- ずっと使っているけど、とにかく頑丈(兵庫)

国内特許取得済
手動車いす 100kg
使用者最大体重(積載物含む)



※お選びいただけます。

Modern style

自走用(介助兼用)
22^{車輪}インチ×6^{キャスト}インチ/中・高床



●スイングイン・アウト式フット・レッグサポート 参考価格 **¥146,000** 非課税


KMD-C22-40(38・42・45)-M(H/SH) (16.5kg)

TAIS:00160-000292

●エレベーター式フット・レッグサポート 参考価格 **¥174,000** 非課税

KMD-C22-40(38・42・45)-EL-M(H/SH) (18.8kg)

TAIS:00160-000293

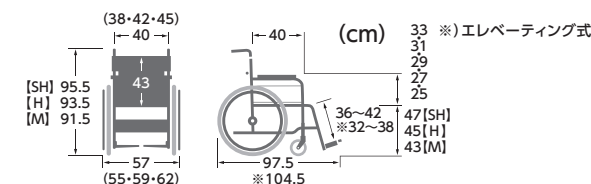

*各寸法にはシート・クッション等の厚みは含まれておりません。

自走用(介助兼用)
20^{車輪}インチ×6^{キャスト}インチ/低床



●スイングイン・アウト式フット・レッグサポート 参考価格 **¥146,000** 非課税


KMD-C20-40(38・42・45)-LO(SL/SSL) (16.3kg)

TAIS:00160-000292

●エレベーター式フット・レッグサポート 参考価格 **¥174,000** 非課税

KMD-C20-40(38・42・45)-EL-LO(SL/SSL) (18.6kg)

TAIS:00160-000293

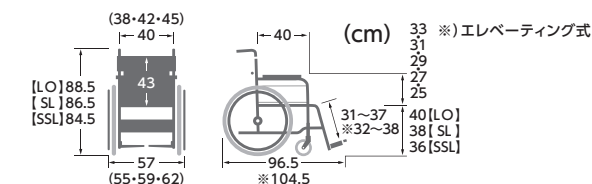

*各寸法にはシート・クッション等の厚みは含まれておりません。

介助用
16^{車輪}インチ×6^{キャスト}インチ/中・高床



●スイングイン・アウト式フット・レッグサポート 参考価格 **¥146,000** 非課税


KMD-C16-40(38・42・45)-M(H/SH) (15.3kg)

TAIS:00160-000294

●エレベーター式フット・レッグサポート 参考価格 **¥174,000** 非課税

KMD-C16-40(38・42・45)-EL-M(H/SH) (17.6kg)

TAIS:00160-000295

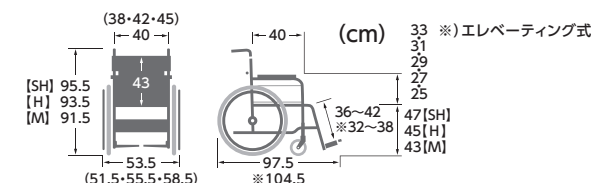

*各寸法にはシート・クッション等の厚みは含まれておりません。

介助用
16^{車輪}インチ×6^{キャスト}インチ/低床



●スイングイン・アウト式フット・レッグサポート 参考価格 **¥146,000** 非課税


KMD-C16-40(38・42・45)-LO(SL/SSL) (15.3kg)

TAIS:00160-000294

●エレベーター式フット・レッグサポート 参考価格 **¥174,000** 非課税

KMD-C16-40(38・42・45)-EL-LO(SL/SSL) (17.6kg)


TAIS:00160-000295

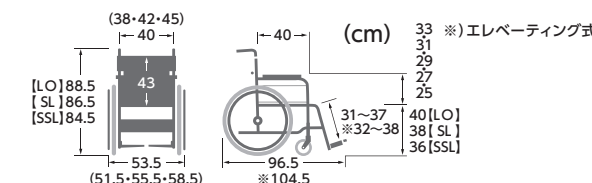

*各寸法にはシート・クッション等の厚みは含まれておりません。

足踏み付左右連動ブレーキ仕様

左右どちらかの駐車用ブレーキもしくは足踏みブレーキをかけるだけで、両輪にブレーキがかかります。

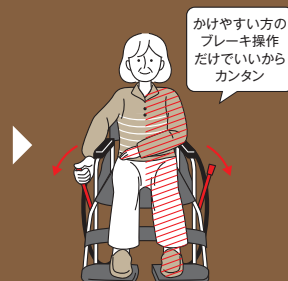

SAYURZEN

補装具
レディ
メイド式



足踏みブレーキ

腰をかがめなくてもロック/解除ができるので介助負担を軽減します。

足踏みブレーキを踏むだけで
両輪ロック/解除が可能。




左用/右用 駐車用ブレーキ

伸縮式駐車用ブレーキを延長することで軽い力で操作ができます。片側で両側の駐車用ブレーキを作動できるためスペースがないところでもご利用いただけます。

操作力が変わらず
両輪をロック/解除が可能。



KMD-A22-40-M/SR
シート:No.19

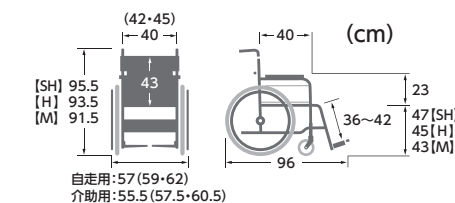

*各寸法にはシート・クッション等の厚みは含まれておりません。

自走用(介助兼用)

22^{車輪}インチ × 6^{キャスタ}インチ / 中・高床

参考価格 **¥148,000** 非課税

KMD-A22-40(42・45)-M(H/SH)/SR

(14.6kg)

TAIS:00160-000311

介助用

16^{車輪}インチ × 6^{キャスタ}インチ / 中・高床

参考価格 **¥148,000** 非課税


KMD-A16-40(42・45)M(H/SH)/SR

(13.9kg)

TAIS:00160-000312



KMD-B22-40-M/SR
シート:A10

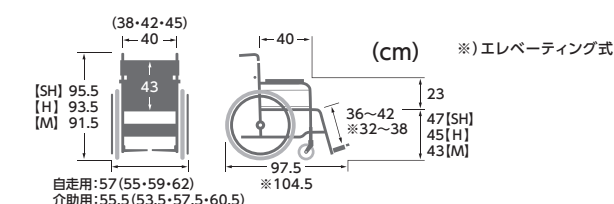

*各寸法にはシート・クッション等の厚みは含まれておりません。

自走用(介助兼用)

22^{車輪}インチ × 6^{キャスタ}インチ / 中・高床

●スイングイン・アウト式フット・レッグサポート 参考価格 **¥156,000** 非課税

KMD-B22-40(38・42・45)-M(H/SH)/SR

(16.4kg)

TAIS:00160-000313

●エレベータリング式フット・レッグサポート

参考価格 **¥181,000** 非課税

KMD-B22-40(38・42・45)-EL-M(H/SH)/SR

(18.7kg)

TAIS:00160-000319

介助用

16^{車輪}インチ × 6^{キャスタ}インチ / 中・高床

●スイングイン・アウト式フット・レッグサポート 参考価格 **¥156,000** 非課税

KMD-B16-40(38・42・45)-M(H/SH)/SR

(15.3kg)

TAIS:00160-000314

●エレベータリング式フット・レッグサポート

参考価格 **¥181,000** 非課税


KMD-B16-40(38・42・45)-EL-M(H/SH)/SR

(17.6kg)

TAIS:00160-000320



KMD-C22-40-M/SR
シート:No.82

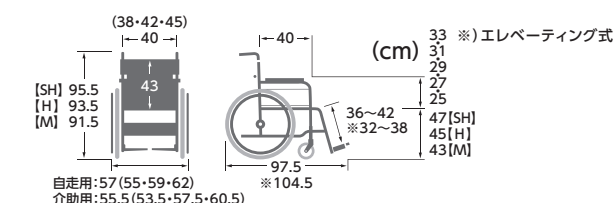

*各寸法にはシート・クッション等の厚みは含まれておりません。

自走用(介助兼用)

22^{車輪}インチ × 6^{キャスタ}インチ / 中・高床

●スイングイン・アウト式フット・レッグサポート 参考価格 **¥178,000** 非課税

KMD-C22-40(38・42・45)-M(H/SH)/SR

(17.3kg)

TAIS:00160-000315

●エレベータリング式フット・レッグサポート

参考価格 **¥205,000** 非課税

KMD-C22-40(38・42・45)-EL-M(H/SH)/SR

(19.6kg)

TAIS:00160-000321

介助用

16^{車輪}インチ × 6^{キャスタ}インチ / 中・高床

●スイングイン・アウト式フット・レッグサポート 参考価格 **¥178,000** 非課税

KMD-C16-40(38・42・45)-M(H/SH)/SR

(16.2kg)

TAIS:00160-000316

●エレベータリング式フット・レッグサポート

参考価格 **¥205,000** 非課税

KMD-C16-40(38・42・45)-EL-M(H/SH)/SR

(18.5kg)

TAIS:00160-000322

取付一覧表

	ガートル止め金具		酸素ボンベ架台 ^{※1}		転倒防止金具 ^{※1}			ネームプレート		ソフト タイヤ付 車輪
	〈前止め用〉	〈後ろ止め用〉 ^{※2}	〈標準車用〉	〈2WAY用〉	〈キャスト付〉	〈キャストなし〉	〈モジュール式〉	〈ネームプレート〉	〈ネームプレートS〉	
KMD-Astyle	○	○ KMD専用	○ KMD専用	○ 中床用	○ KMD専用	○ KMD専用	○ 中床用	○	○	○
KMD-Bstyle	×	○ KMD専用	○ KMD専用	○ (M,H,SH) 中床用 (L,O,SL,SSL) 低床用	○ KMD専用	○ KMD専用	○ (M,H,SH) 中床用 (L,O,SL,SSL) 低床用	○	○	○
KMD-Cstyle	×	○ KMD専用	○ KMD専用	○ (M,H,SH) 中床用 (L,O,SL,SSL) 低床用	○ KMD専用	○ KMD専用 (L,O,SL,SSL以外)	○ (M,H,SH) 中床用 (L,O,SL,SSL) 低床用	○	○	○
KMD-R12	○	×	×	×	標準装備	×	×	×	○	×
サユレン	×	×	○ ^{※3} KMD専用	○ ^{※3} 中床用	×	×	×	○	○	○

※1 酸素ボンベ架台と転倒防止金具の同時装着はできません。 ※2 酸素ボンベ架台と同時装着はできません。 ※3 足踏みブレーキレバーと反対側に取付

参考価格 について

取付価格:新車ご購入時の取付

※非課税の車いすに取り付ける場合の価格を表示しております。
※部品代と工賃を含みます。
※ご購入時は車種をご指定ください。取り付けできない、あるいは特注対応が必要な場合がございます。

部品価格:部品のみご購入価格

※取付工賃は含んでおりません。
車いすの仕様により、別途費用が必要となるもの、取り付けできないものもあります。

ソフトタイヤ付車輪



※空気補充が不要でメンテナンスフリー。
耐久性や地面とのグリップ力に優れています。

※22インチ仕様 +0.7kg
※20インチ仕様 +0.6kg
※16インチ仕様 +0.6kg

	<参考価格>	
	取付価格 非課税	部品価格 税込
22 インチ 20 インチ 16 インチ	¥9,200 増/台	¥12,650 /個

ガートル止め金具

〈前止め用〉



	<参考価格>	
	取付価格 非課税	部品価格 税込
前止め用 重量:0.2kg TAIS:00160-000167	¥4,400 増/個	¥3,993 /個

〈後ろ止め用〉



	<参考価格>	
	取付価格 非課税	部品価格 税込
後ろ止め用 (KMD専用)	¥4,400 増/個	¥3,993 /個

※取り付け位置をご指定ください。座って(右側・左側)など。 ※ガートル棒は別売りとなります。 ※ご利用の際は、後方への転倒にご注意ください。

酸素ボンベ架台

〈標準車用〉○使用頻度の多いボンベサイズに適合する、内径2タイプをご用意しました。

ボンベ外径 φ100mm以下用 →(外径φ100mm以下の酸素ボンベ) | φ130mm以下用 →(外径φ130mm以下の酸素ボンベ)

※取り付ける車いすの品番をご指定ください。
※ご利用の際は、後方への転倒にご注意ください。



装着例

	<参考価格>	
	取付価格 非課税	部品価格 税込
φ100mm以下用		
〈KMD専用〉	¥10,780 増/個	¥10,648 /個


	<参考価格>	
	取付価格 非課税	部品価格 税込
φ130mm以下用		
〈KMD専用〉	¥13,200 増/個	¥13,310 /個

※取り付け位置をご指定ください。座って(右側・左側)など。
※ボンベサイズにより跳ね上げ可動域が制限される場合があります。

〈2WAY用〉(転倒防止金具を取り付けた酸素ボンベ架台)○2サイズ(φ100mm以下用/φ140mm以下用)の酸素ボンベに1台で対応できます。(工具レスの簡単切り替え)



装着例

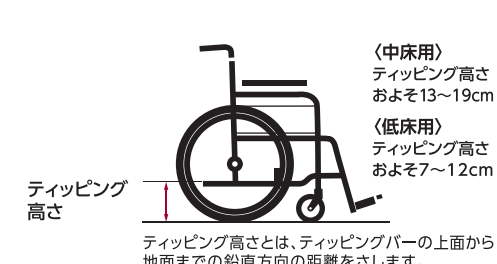

ティッピング
高さ

〈中床用〉
ティッピング高さ
およそ13~19cm
〈低床用〉
ティッピング高さ
およそ7~12cm

ティッピング高さは、ティッピングバーの上面から
地面までの鉛直方向の距離をさします。

	<参考価格>	
	取付価格 非課税	部品価格 税込
〈中床用〉重量:2.9kg TAIS:00160-000306	¥23,100 増/個	¥24,200 /個
〈低床用〉重量:2.9kg TAIS:00160-000306	¥23,100 増/個	¥24,200 /個

※中床用か低床用をご指定ください。
※取り付け位置をご指定ください。座って(右側・左側)など。

転倒防止金具

○介護する方も安心、後方転倒を防ぎます。

〈キャスト付〉



装着例

〈キャストなし〉



装着例


	<参考価格>	
	取付価格 非課税	部品価格 税込
キャスト付	¥8,470 増/台	¥9,317 /台
キャストなし	¥5,280 増/台	¥5,808 /台

※受注生産となります。

〈モジュール式〉○調節式なので、様々な座面高さの車いすに合わせることができます。



装着例

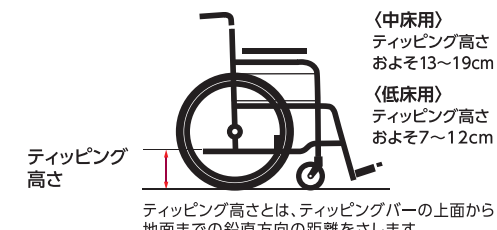

ティッピング
高さ

〈中床用〉
ティッピング高さ
およそ13~19cm
〈低床用〉
ティッピング高さ
およそ7~12cm

ティッピング高さは、ティッピングバーの上面から
地面までの鉛直方向の距離をさします。

	<参考価格>	
	取付価格 非課税	部品価格 税込
〈中床用φ20・φ22〉重量:1.2kg TAIS:00160-000305	¥13,200 増/台	¥14,520 /台
〈低床用φ20・φ22〉重量:1.2kg TAIS:00160-000305	¥13,200 増/台	¥14,520 /台

ネームプレート(30文字まで)

○社名やお名前などを刻印できます。

〈ネームプレート〉



装着例

〈ネームプレートS〉



装着例

	<参考価格>	
	取付価格 非課税	部品価格 税込
ネームプレート	¥2,420 増/個	¥2,662 /個
ネームプレートS	¥2,420 増/個	¥2,662 /個

材質:アルミ
サイズ:H6×W13cm

材質:アルミ
サイズ:H4.6×W12cm

※取り付け位置をご指定ください。座って(右側・左側、左右)など。 ※裏面が粘着面になっています。