

Pittari Fit series

ぴったりフィットシリーズ

KPFK-12

1200×565×980
770×350×720

Easy to operate

コンパクトで操作がしやすい

Tilt・Reclining

ティルト・リクライニング車いす



操作しやすい便利な機能

01 すきまレスピロー



ティルト・リクライニング角度

120° 90°

<無段階調整>

大粒ビーズが頭部の動きに追従し、しっかりと保持します。左右に取り付けられたアジャスタのヒモを引くだけで枕の厚さを簡単に変わります。(約9cm～17cm)



左右独立して厚さ調節ができるため、様々な姿勢に合わせることができます。

02 スキーンズベルト

背中の張り調整部に伸縮する部分を設けました。その上、リクライニングしてもベルトがある程度身体に追従しフィットします。



「スキマ」を見ながらベルトの張り調整が簡単にできます。



[車輪12インチハイポリマータイヤ]


KPFK-12 (21.5kg)

参考価格 ¥247,000 (非課税)

シート1色

No.102

(ピーコックブルー)

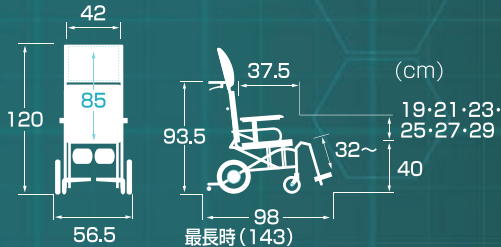

* 手押しハンドル高さ、全長、全高、フットサポート・シート間距離は、バックサポートを最も起こした時の寸法です。
* 各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

03 フットサポート


[エレベーター機構/角度可変式ステップ板]

着脱式エレベーター機構で無段階で調整可能です。ステップの角度を調整できるので足首の伸展にも対応できます。



04 コンパクト設計

全幅56.5cmなので一般的な住宅の廊下幅でも取り回し可能です。

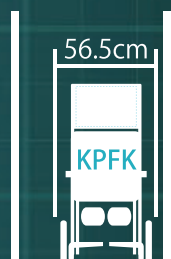

05 アームサポート[跳ね上げ+高さ調整]

移乗に便利な跳ね上げ機構を採用しました。高さ調節レバーを後方にもつてくることにより誤操作を防ぎます。操作部は認識しやすいカラーリングにしました。



代理店

カワムラサイクル

- 本社 〒651-2411 兵庫県神戸市西区上新地 3 丁目 9 番 1
TEL:078-969-2800 FAX:078-969-2811
- 東京サービスセンター 〒110-0013 東京都台東区入谷 1 丁目 8 番 3
TEL:03-3874-3511 FAX:03-3874-3514
- 名古屋サービスセンター 〒487-0027 愛知県春日井市松本町 1 丁目 3 番 11
TEL:0568-52-4800 FAX:0568-52-4802
- 本店サービスセンター 〒651-2411 兵庫県神戸市西区上新地 3 丁目 9 番 1
TEL:078-969-2820 FAX:078-969-2822
- 福岡サービスセンター 〒819-0055 福岡県福岡市西区生の松原 1 丁目 18 番 3
TEL:092-882-4722 FAX:092-882-4723